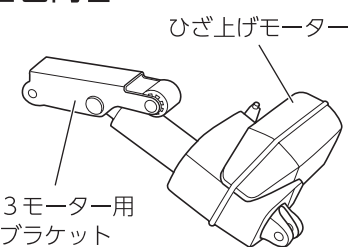
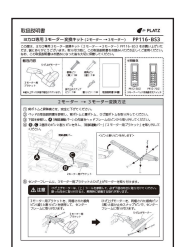
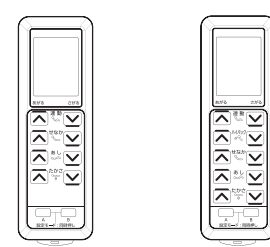


ヨカロ専用 3 モーター 変換キット (2 モーター → 3 モーター)



PP116-BS3

この度は、ヨカロ専用 3 モーター 変換キット (2 モーター → 3 モーター) PP116-BS3 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取り付け前に、この取扱説明書をお読みいただき正しくご使用ください。なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

梱包内容  ひざ上げモーター 3 モーター用 ブラケット ※組み上がった状態で梱包されています。	 根角ピン (黒): 1本 根角ピン (銀): 1本 抜け止めスナップ ピン: 1本 割りピン: 1本	 取扱説明書 (本書)	※別梱包  PR12-3DZ PR12-7DZ 3 モーターベッド用液晶手元スイッチ
---	---	--	---

2 モーター → 3 モーター 変換方法

- ① 背ボトムと昇降高さを、完全に下げてください。
- ② ベッドの取扱説明書を参照し、背ボトムと腰ボトム、ひざ脚ボトムを取り外してください。
- ③ 下図を参照し、**A**「背脚連動バー」の先端をヘッドフレームのピンから取り外してください。
- ④ **B**、**C** 2箇所のピンと割りピンを外し、「背脚連動バー」「2 モーター用ブラケット」を取り外してください。

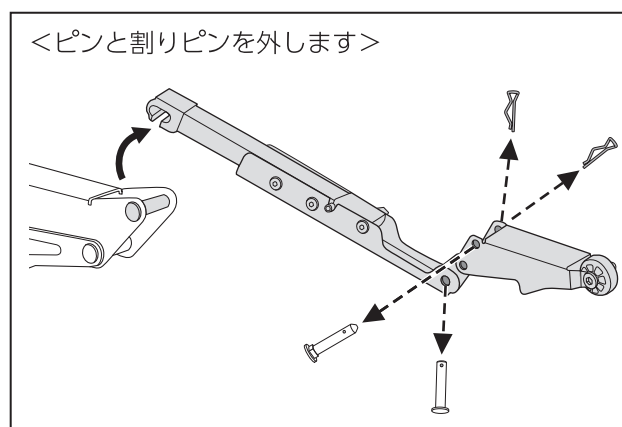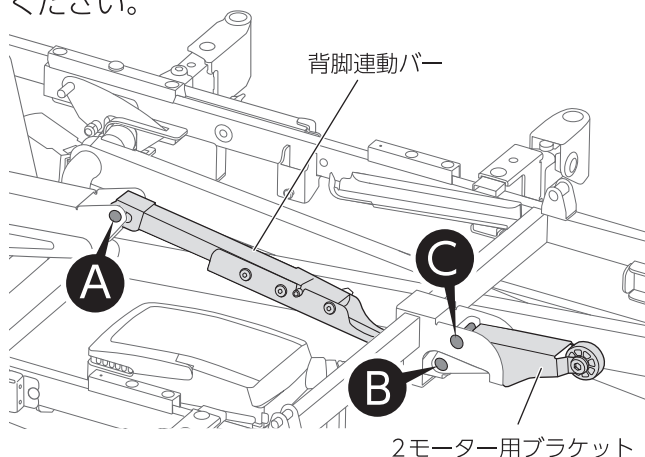


- ⑤ センターフレームに、3 モーター用ブラケットとひざ上げモーターを取り付けます。




注意

ひざ上げモーターは、「上」シールを参照して、必ず下図の向きに取り付けてください。誤った向きに取り付けると、昇降時に破損する恐れがあります。


3 モーター用ブラケットを、同梱された根角ピン(銀)と割りピンを使用して、センターフレームに取り付けます。

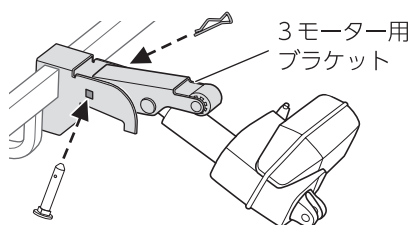


ひざ上げモーターを、同梱された根角ピン(黒)と抜け止めスナップピンで、センターフレームに取り付けます。

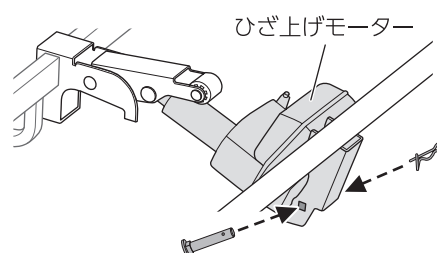


- ⑥ 電源部の「足」に挿し込まれているキャップを外し、ひざ上げモーターコードのプラグを挿し込んでください。※外したキャップは、電源部に収納してください。

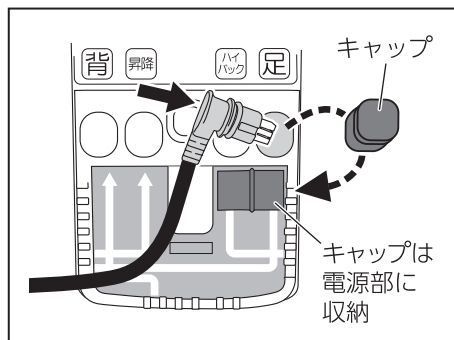


ひざ上げモーターコードは、センターフレームのコードクリップに取り付け、取り回してください。

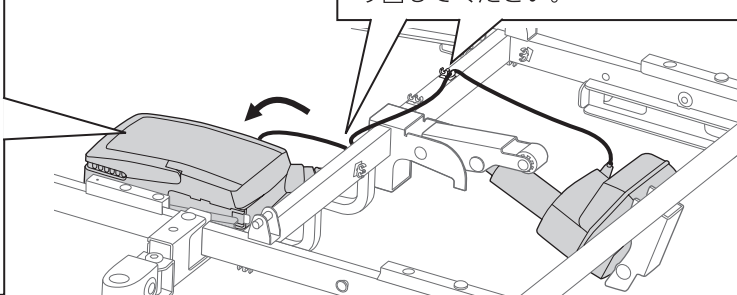

- ⑦ 必ず対応した液晶手元スイッチを取り付け、手元スイッチコードは下図のコードクリップに留めてください。反対方向に取り回す場合は、**— — —** の方向へコードを取り回してください。

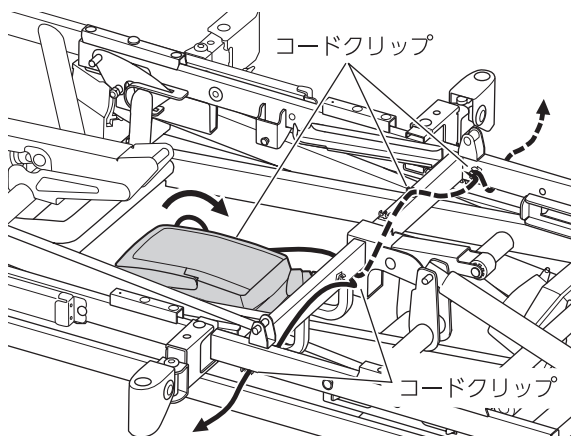


ベースフレームのX型昇降パイプの上を通してください。

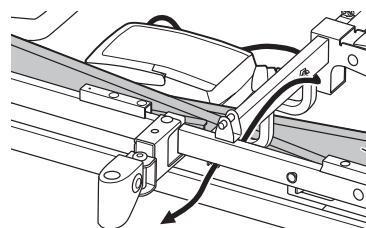


※X型昇降パイプの間を通すと、コードの破断や故障の原因となります。

- ⑧ 下図部分は、コードクリップにUの字にして留めてください。

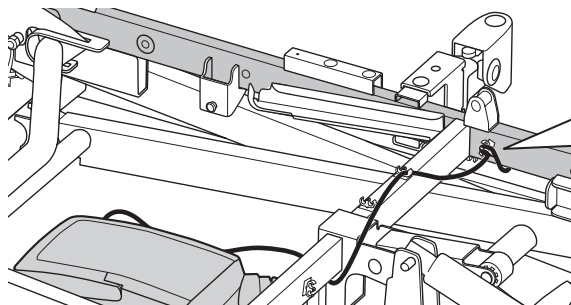

コードをクリップに、Uの字にして留めてください。

※反対方向に取り回す場合も、同じようにUの字にして留めてください。

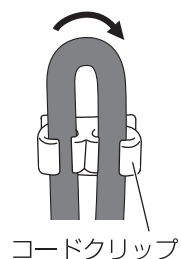

点検 / お手入れについて

- 取り付けが確実かどうか、必ず定期的に点検をおこなってください。
しっかり取り付けられていない状態で使用を続けると破損や事故、故障の原因になります。
- 乾いた柔らかい布で拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をご使用ください。
- 商品にベンジン・シンナー・オイル類・粉末洗剤など、使用しないでください。

⚠ 警告・注意

- 安全のため、作業は2人以上でおこなってください。
- 取り付けの際に、手や指をはさまないようにご注意ください。
- この商品はP116用です。他のベッドに取り付けしないでください。
- コードのはさみ込みがないように、取り付けてください。