



# 取扱説明書

## ロングタイプ対応スパーサー（グリップ用）

PS03-PG0203





この度は、ロングタイプ対応スパーサー（グリップ用）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書は、取り付け前・ご使用前に必ずお読みいただき、正しくご使用いただきますようお願いいたします。

- この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。
- 本商品を譲渡される場合は、この取扱説明書もお渡しください。
- 取り付け前に不足部品が無いか、梱包内容をお確かめください。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げいただいた店舗または、弊社までお問い合わせください。

### 使用方法・特徴

本商品は、当社介護用ベッドをロングタイプに切り替えた際に、ベッド用グリップ（※裏表紙の適合周辺機器を参照）に本商品を取り付けることで、より安全にご使用いただくことを目的としています。

### 梱包内容
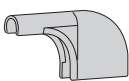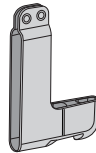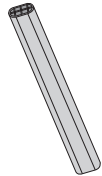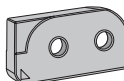
|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| スパーサーA：1個                                                                        | スパーサーB：1個                                                                         | オーバーパイプ：1本                                                                        | スパーサーゴム：1個                                                                        | 固定用ボルト：2本                                                                         | 固定用ナット：2個                                                                         | 取扱説明書兼保証書<br>(本書)：1枚                                                               |



### 警告

この表示の欄は、生命に関わる怪我または重傷を負う可能性が想定される内容を記載しています



禁止

- 本商品を取り付けたベッド用グリップの上に腰掛けたり、ぶら下がるなど、無理な力を加えるような使い方はしないでください。
- 破損や事故の原因になります。



禁止

- オーバーパイプを掴んで、力を加えないでください。
- 破損や事故の原因になります。



禁止

- 当社商品以外のベッド用グリップに取り付けての使用をしないでください。弊社が指定する適合商品以外とは組み合わせないでください。
- 破損や事故の原因になります。



禁止

- ストーブなどの火気類に本商品を近付け過ぎないでください。
- 火災や変色・変形の原因になります。



禁止

- 本商品の隙間から手足などを出さないでください。
- 怪我や事故の原因になります。



禁止

- 衣類が引っ掛からないようご注意ください。
- ベッドから降りる際にパジャマなど衣類が引っかかり、怪我や事故の原因になります。



**注意** この表示の欄は、傷害を負う可能性、または物理的損害の発生が想定される内容を記載しています



ベッド用グリップに本商品がしっかり取り付けられているか、定期的に点検してください。  
●破損や事故、怪我の原因になります。



ベッドの背上げ・ひざ上げ操作時は、本商品を取り付けたベッド用グリップに体の一部や手元スイッチコードをはさまないように注意してください。  
●破損や事故の原因になります。



経年劣化により変色などの変化が起こる場合があります。  
●保管する場合は、直射日光や高温、多湿、低温、乾燥、ホコリの多い場所を避けてください。



部品が破損した場合、破損したまま使用しないでください。  
●怪我や故障の原因になります。



本商品の耐荷重は30kgです。  
●耐荷重以上の力を加えると、怪我や故障の原因となります。




気温が低い場所や本商品が冷えている状態で本商品を取り付ける場合、取り付けがたかくなります。

## 本商品の取り付け方法


1

ベッド用グリップ本体上端のパイプにスパーサーAの下図○部をしっかりと押し込んで嵌めます。  
※本体上端のパイプにスパーサーAを嵌める際は、下図の①を先に押し込んでから②を押し込むと、嵌まりやすくなります。

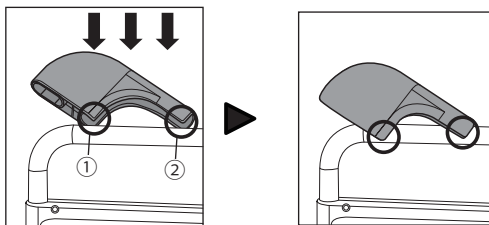


2

下図の○部を嵌め込んだ状態で、ベッド用グリップ本体上端のパイプに沿ってスパーサーAを下図のように滑らせます。  
※スパーサーAの下図○部がベッド用グリップ本体のパイプから外れないように強く押さえながら滑らせてください。

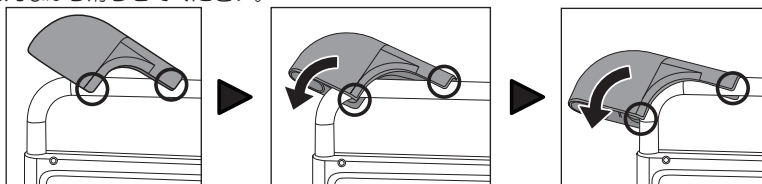


3

オーパルパイプをスパーサーAの楕円穴に挿し込みます。

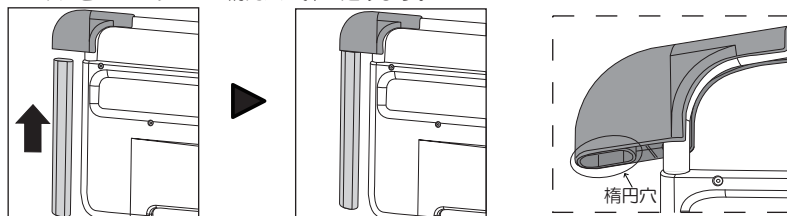


4

スペーサーBの楕円穴にオーラルパイプを挿し込みながら、スペーサーBを矢印方向からベッド用グリップ本体の樹脂カバーをはさむようにして取り付けてください。

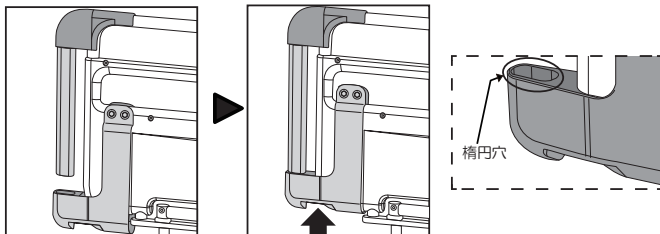

5


スペーサーBの上部隙間にスペーサーゴムをはさんでください。  
図のように三角マークを角に合わせてはさんでください。

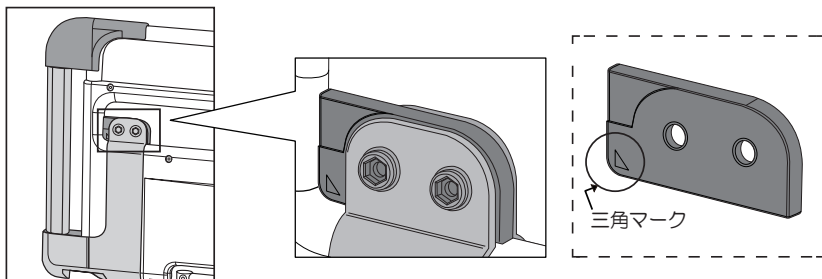

6

スペーサーBの六角穴に固定用ナットを入れ、丸穴から固定用ボルトを挿し込み、プラスドライバーでしっかりと固定してください。

※下図○部を押さえながら固定用ナット、固定用ボルトを挿入して固定してください。

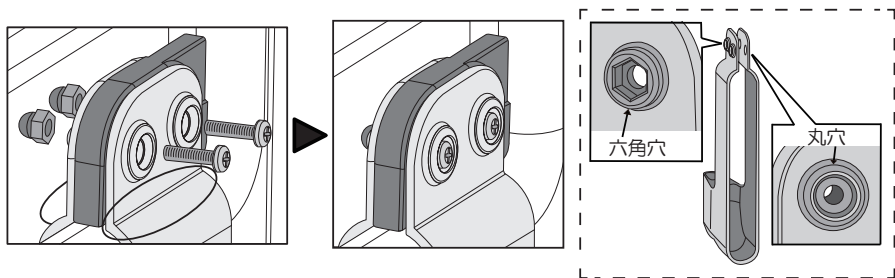

**注意**

ベッド用グリップに本商品がしっかり取り付けであるか、必ず確認してください。

●破損や事故、怪我の原因になります。

## 点検・お手入れ

### ○点検

- ・ベッド用グリップに本商品がしっかり取り付けであるか、必ず定期的に点検をしてください。

### ○お手入れ

- ・乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ・清拭する場合は柔らかい布を使用し、水で薄めた中性洗剤に浸してよく絞って拭き、その後水に浸した布をよく絞って残った洗剤分を拭き取ってください。最後に乾いた布で水気を取ってください。
- ・ベンジン、シンナー、オイル類、磨き粉等は使用しないでください。樹脂部品が破損する恐れがあります。
- ・シールが剥がれないようご注意ください。

| 商品の仕様                |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 型式                   | PS03-PG0203                  |
| 商品名                  | ロングタイプ対応スパーサー（グリップ用）         |
| 適合商品                 | PG02-116AT、PG03-116M、PG04-75 |
| 商品サイズ<br>幅 × 長さ × 高さ | 4.0cm × 17.5 cm × 44.0 cm    |
| 材質                   | PP（ポリプロピレン）、PVC（ポリ塩化ビニル）     |
| 原産国                  | ベトナム                         |

株式会社 **プラッツ**

〒816-0921  
福岡県大野城市仲畑2丁目3-17

商品についてのお問合せは下記フリーアクセスまでご連絡ください



フリーアクセス  
携帯・PHS・OK

**0120-77-3433**

《平日 午前9時～午後5時30分》  
（土日祝祭日・夏季休業日・年末年始休業除く）

21.04月 作成

NPO200-A