

新しい背上げ機能
ポジショニングベッド



プラッツはいつも「一生懸命」です。

介護が必要な多くの方々は、若い頃より大変なご苦労を経験されながら、弛まぬ努力で現代社会の発展に貢献されてこられた方々です。我々の使命は、ご利用者様には常に感謝の気持ちを持ち、介護ベッドを「安全」に、「快適」に利用していただく事と考えます。プラッツは常にお客様の声に耳を傾け、より「高品質」でより「高機能」、そして「低価格」の介護ベッドを「一生懸命」作り続けます。介護ベッドを通じて社会に貢献する。プラッツはいつも「一生懸命」です。

index

● 医療・施設用電動ベッド	2
● 介護施設用電動ベッド	
アルティレット・トゥーユー	14
アルティレット	22
● 周辺機器	29
ニーパロPII	30
フットライト	33
テーブル・カーペット	34
● マットレス	35
サンキューポイントマットレス	36
ニューポイントマットレス	37
スタンダードマットレス	37
ユービーポイントマットレス	38
ビカムポイントマットレス	38
● 離床センサー	39
● 施設用家具	45
会社概要	48

電動ベッド

快適で安心な毎日を。
看護・介護をサポートする電動ベッド

医療・施設用電動ベッド	2
介護施設用電動ベッド	
アルティレット・トゥーユー	14
アルティレット	22



医療・施設用 電動ベッド

背上げ時のズレカの緩和と
リラックスできる安楽な姿勢を追求



総合開発アドバイザー

共同開発 佐賀大学 医学部 地域医療科学教育研究センター 福祉健康科学部門
松尾 清美 准教授

近代車いすや福祉機器開発の第一人者。大学生時代に交通事故で車いす生活となるも、多くの福祉機器メーカーと研究開発を行い福祉機器の発展に寄与。車いすやベッド、移乗機器、移動用具などの特許は30を超える。また、1750軒を超える障がい者のための住環境設計を行うなど、30年に渡り障がい者や高齢者の自立(律)生活をサポート。日本リハビリテーション工学協会や福祉住環境コーディネーター協会、日本障がい者スポーツ学会などの理事を歴任。車いすテニスを日本に広めた先駆者でもある。

開発アドバイザー ポジショニングベッド命名者



共同開発 株式会社ふつうの暮らし研究所
代表取締役
吉川 和徳 先生

理学療法士、シーティング・コンサルタント。2004年NPO法人日本シーティング・コンサルタント協会設立、座位姿勢の重要性を広めるなどシーティング、ポジショニングに関して多方面で活躍中。著書:シーティング入門など。

開発アドバイザー ハイバックサポート命名者



共同開発 コネクトリハビリテーション
代表
山形 茂生 先生

作業療法士。福祉用具プランナーやリフトリーダー研修会、移乗・移動に関する研修会等数多くの研修会で福祉用具の活用に関して講師を務める。元別府リハビリテーションセンターリハ支援課 課長。NPO福祉用具ネット理事、日本リハビリテーション工学協会理事。

ラインナップ



木製タイプ
ナチュラルブラウン
「サンキューポイントマットレス」との組み合わせ

83cm幅



スチールタイプ
ナチュラルブラウン
「ユービーポイントマットレス」との組み合わせ

83cm幅



木製タイプ
ダークブラウン
「ニューポイントマットレス」との組み合わせ

83cm幅



スチールタイプ
ダークブラウン

83cm幅

モータータイプ

HB2 モーター
ハイバックサポート機能付
2モーターベッド







ハイバックサポート20° 背上げ60° 背膝連動60°/25° 高さ調節

HB3 モーター
ハイバックサポート機能付
3モーターベッド








ハイバックサポート20° 背上げ60° 背膝連動60°/30° 膝上げ30° 高さ調節




2 モーター
2モーターベッド






背上げ70° 背膝連動70°/25° 高さ調節


3 モーター
3モーターベッド




背上げ70° 背膝連動70°/30° 膝上げ30° 高さ調節

新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレカの軽減に ポジショニングベッド

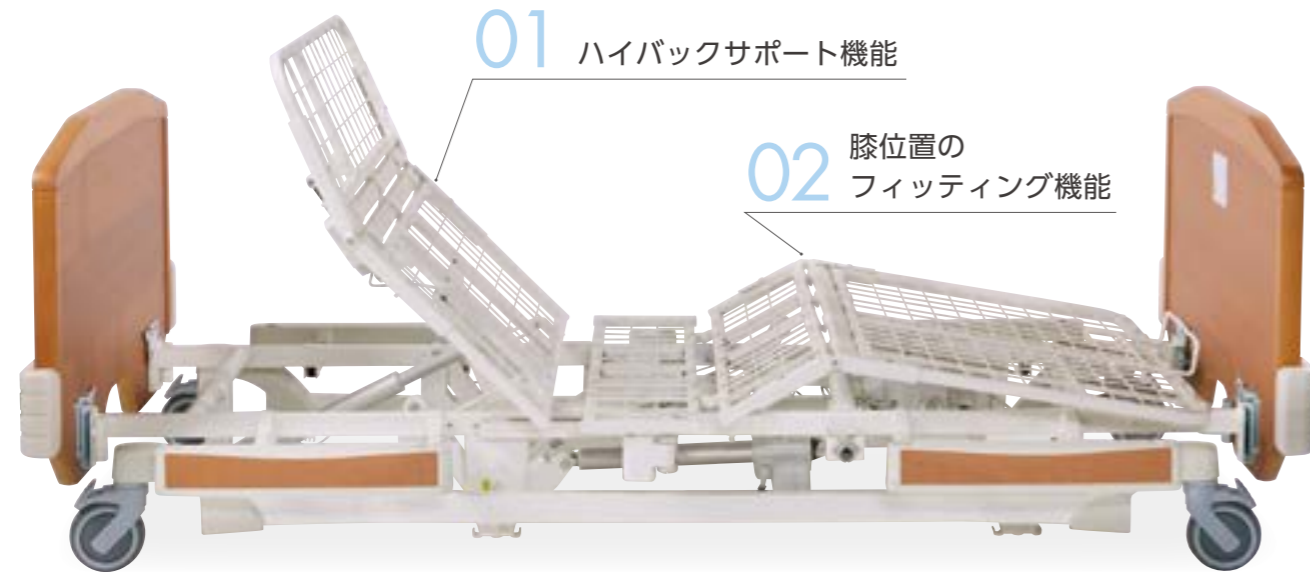


01 ハイバックサポート機能

背上げを「ハイバック:頭-背部」「ローバック:腰部」の2つに分け、それぞれの角度を電動で調節が可能です。

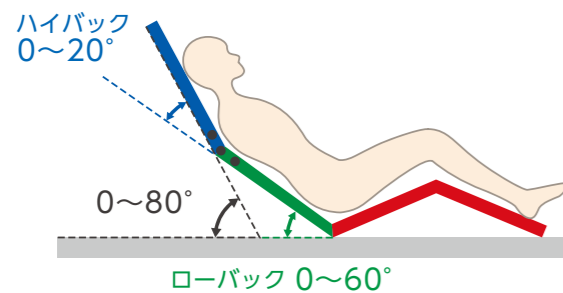


ハイバックサポートの屈曲位置は頸部から肩甲骨周辺の間で3段階に調節可能

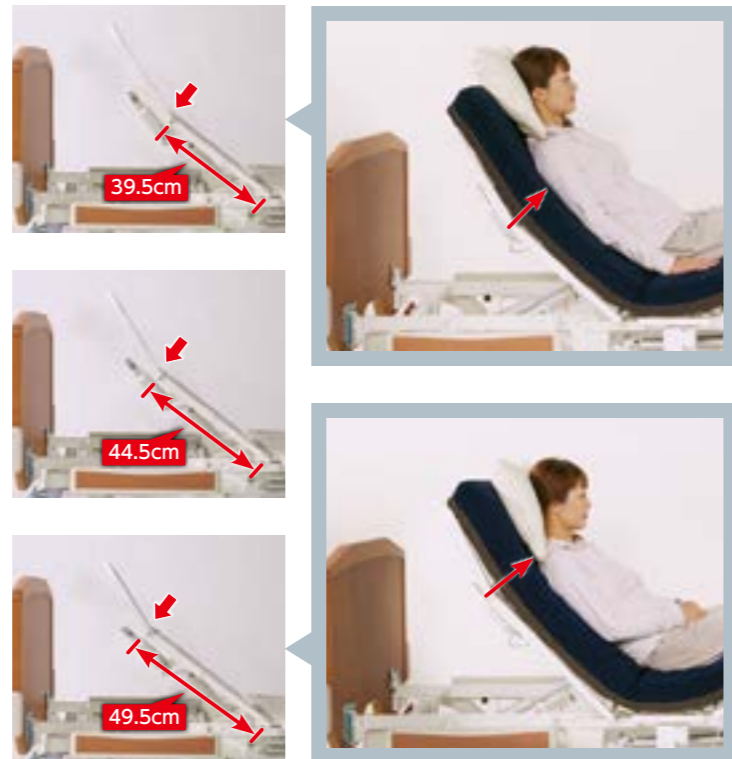

ポジショニングベッド


ポジショニングとは、「運動機能障害を有する者に、クッションなどを活用して身体各部の相対的な位置関係を設定し、目的に適合した姿勢(体位)を安全で快適に保持することをいう」と日本褥瘡学会で定義されています。
この考えのもと、ポジショニングベッドは「ハイバックサポート機能」と背と膝の「フィッティング機能」を搭載、背上げ時のズレカの軽減とリラックスできる快適な姿勢を実現しました。体位管理の再現性を高め、治療をサポートする新しい医療用ベッドです。

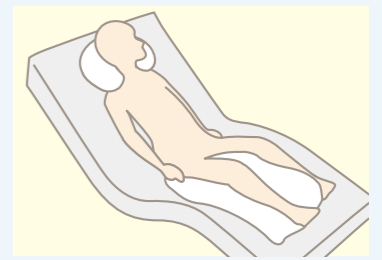

02 背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせて、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な姿勢をサポートします。

「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…

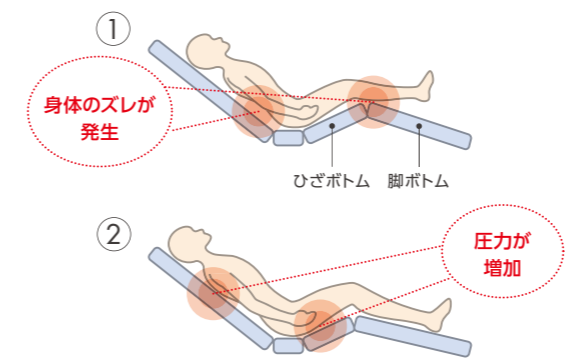

! 褥瘡(床ずれ)の原因になります




身長 135~160cm の方	
A位置に設定	
身長 160~175cm の方	
B位置に設定	



足先上げと足先下げの簡単切替え

足先の角度をワンタッチで切り替えできます。脚の浮腫(むくみ)軽減にも対応できます。

足先上げ

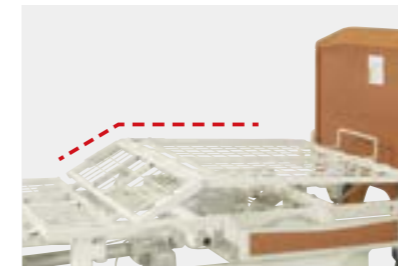


足先下げ

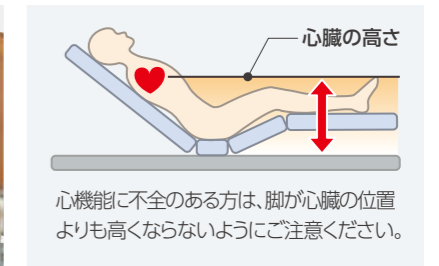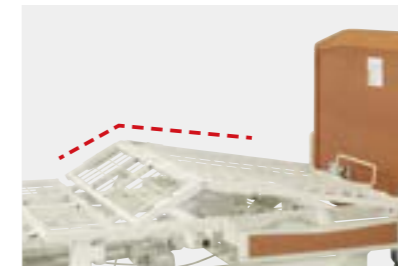

ポジショニングベッドに期待できる効果

誤嚥リスクの低減

背上げ時に頸部の角度を調節、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現が可能です。摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥リスクの低減が期待できます。

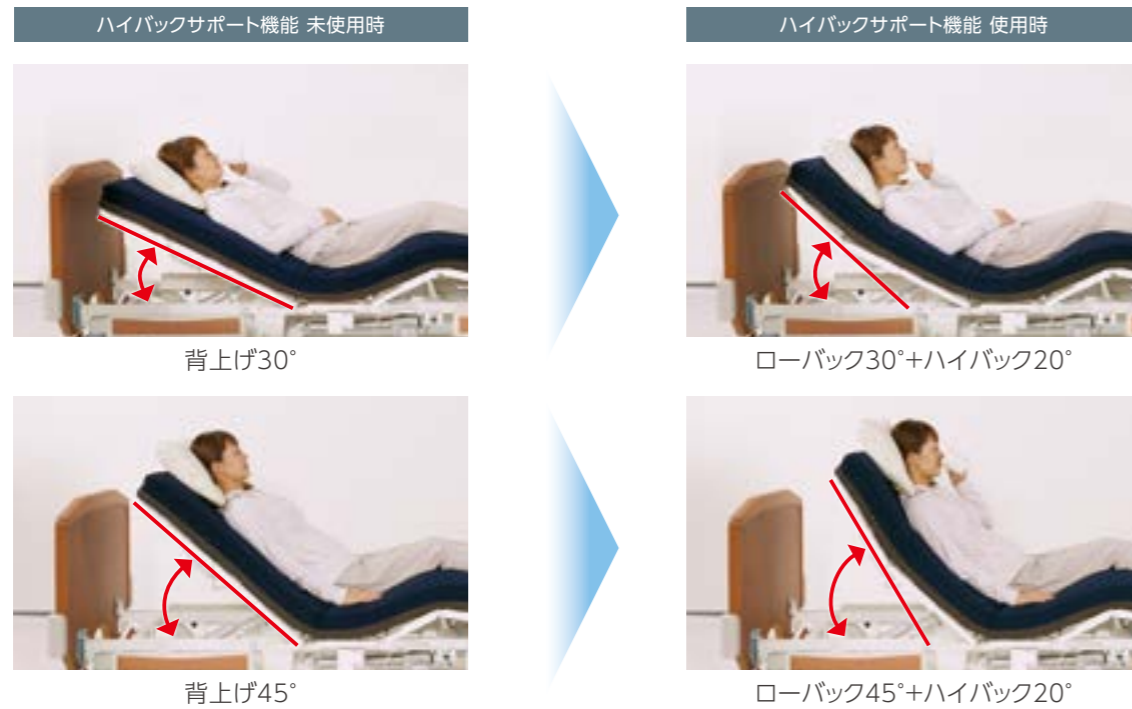

呼吸がしやすい姿勢に

背圧を軽減し横隔膜を広げ、呼吸がしやすい快適な姿勢をつくれます。また、体幹上部を屈曲することで、循環器への負荷を抑える効果が期待できます。





円背の方から妊娠中の方まで、幅広くポジショニングをサポートします

円背の方でも、脊柱の湾曲部にハイバックサポートの角度を合わせることで背上げ時の適切なポジショニングが可能です。

股関節の可動域が狭く背上げが困難な方や、腹圧がかけられない妊娠中の方にもズレカの少ない快適な背上げを提供します。

褥瘡(床ずれ)リスクの低減(ズレカ、圧力の軽減)

ハイバックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、ズレカと身体への圧力を軽減できます。背上げ後の静止状態でのズレカと圧力も軽減し、深部組織損傷(DTI)のリスクを低減。褥瘡(床ずれ)対策のポジショニングをサポートします。

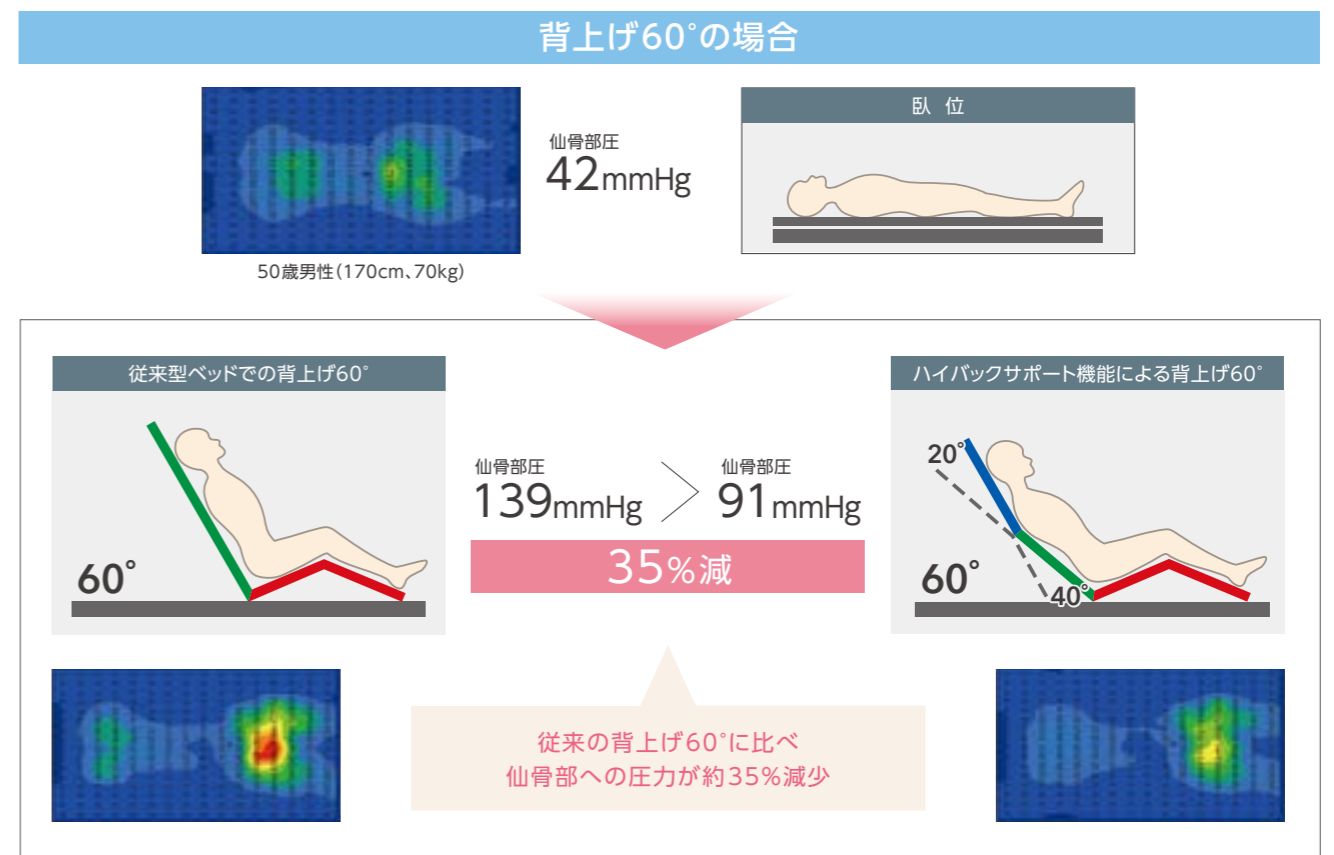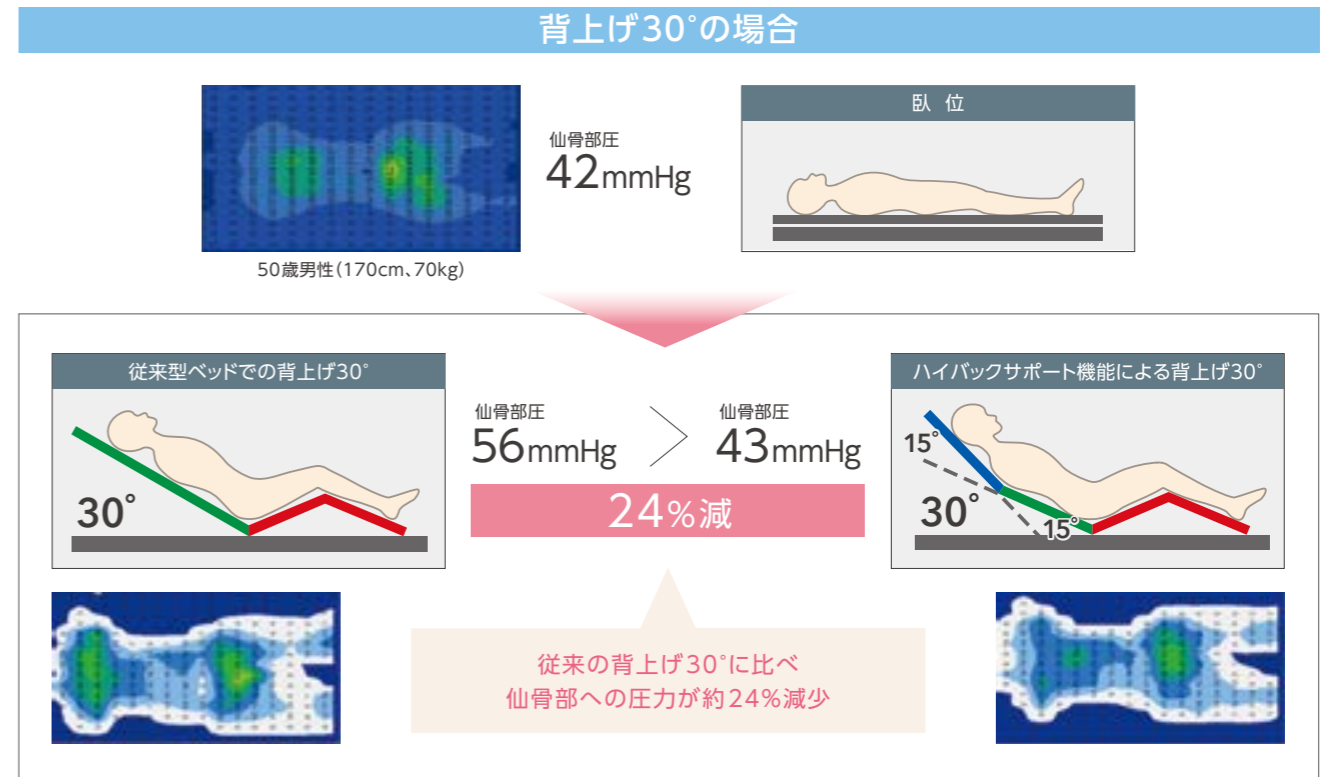

便利な機能


サイドレールの中央差しが可能

■ サイドレールの中央差し

収納式のサイドレールホルダーをベッドの中央に標準装備。ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落防止が可能です。

■ 収納式サイドレールホルダー

中央のサイドレールホルダーは収納できるため、移乗の妨げになりません。

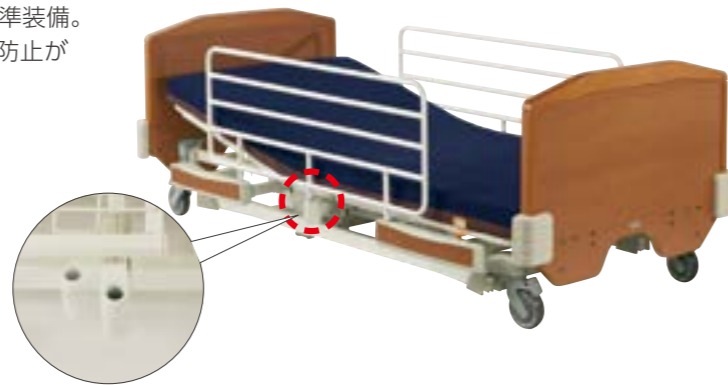

テンテローレン社製キャスター

高い耐久性と走行性に定評があるドイツ・テンテローレン社製のキャスターを採用。直径12.5cmの大型キャスターで、スムーズな走行を実現しました。



操作ロック機能


手元スイッチのロックボタンを付属のロックキーで回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をロックすることができます。



左右どちらにも接続できる手元スイッチ


手元スイッチはベッドの左右どちら側からでも接続でき、また左右同時にも接続できます。ひとつは患者用、もうひとつは看護スタッフ用と使い分けできます。

※標準装備の手元スイッチは1つです。

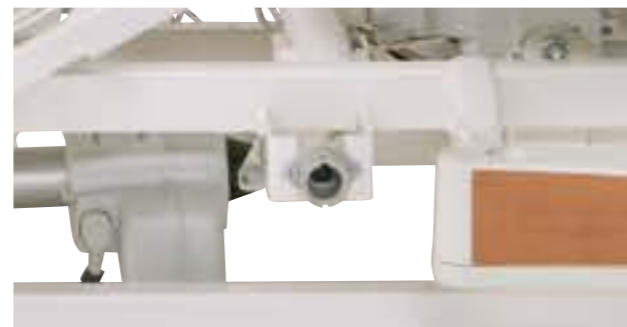

角度計

ボトムへ取付可能な角度計。適切な角度を確認しながら、背上げ動作を行うことができます。

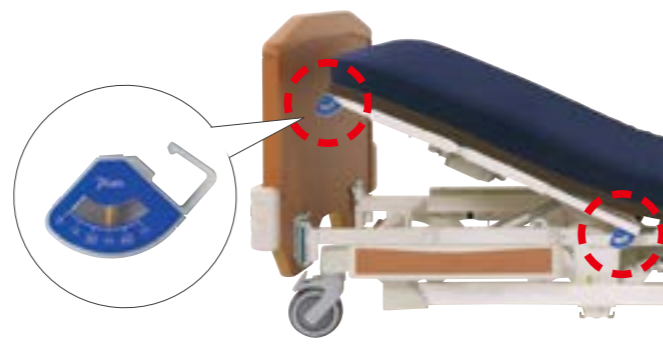

ハルンバッグ用フック、
ナースコールホルダー

サイドレールに取付可能なハルンバッグ用フック、ナースコールホルダー付きです。



充電式バッテリー

停電の時や電源の無い場所でも使用できるように、バッテリーユニットをオプションでご用意しました(バッテリーは充電が必要です)。




仕様

■ ハイバックサポート機能付

2モーター/3モーター


(単位:cm)

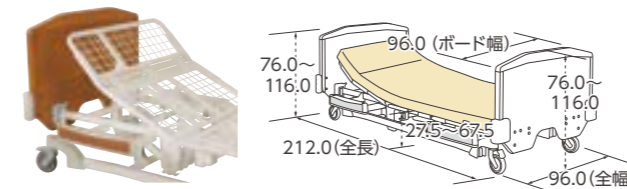

■ ハイバックサポート機能なし

2モーター/3モーター

(単位:cm)

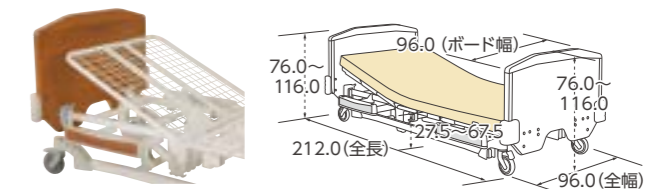

※昇降時はスイングしながら昇降する為、脚側は10cm以上、頭側は1cm以上のスペースが必要です。
※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。

ナチュラルブラウン

木製 4輪キャスター仕様

2モーターベッド

P300-61AA

■メーカー希望小売価格

480,000円(税別)

■JANコード/4539940004442

3モーターベッド

P300-71AA

■メーカー希望小売価格

510,000円(税別)

■JANコード/4539940004602

スチール 4輪キャスター仕様

2モーターベッド

P300-61BA

■メーカー希望小売価格

480,000円(税別)

■JANコード/4539940004480

3モーターベッド

P300-71BA

■メーカー希望小売価格

510,000円(税別)

■JANコード/4539940004626

ナチュラルブラウン

木製 4輪キャスター仕様

2モーターベッド

P300-21AA

■メーカー希望小売価格

430,000円(税別)

■JANコード/4539940004435

3モーターベッド

P300-31AA

■メーカー希望小売価格

460,000円(税別)

■JANコード/4539940004596

スチール 4輪キャスター仕様

2モーターベッド

P300-21BA

■メーカー希望小売価格

430,000円(税別)

■JANコード/4539940004459

3モーターベッド

P300-31BA

■メーカー希望小売価格

460,000円(税別)

■JANコード/4539940004619

ダークブラウン

木製 4輪キャスター仕様

2モーターベッド

P300-61CA

■メーカー希望小売価格

480,000円(税別)

■JANコード/4539940004480

3モーターベッド

P300-71CA

■メーカー希望小売価格

510,000円(税別)

■JANコード/4539940004640

スチール 4輪キャスター仕様

2モーターベッド

P300-61DA

■メーカー希望小売価格

480,000円(税別)

■JANコード/4539940004503

3モーターベッド

P300-71DA

■メーカー希望小売価格

510,000円(税別)

■JANコード/4539940004664

ダークブラウン

木製 4輪キャスター仕様

2モーターベッド

P300-21CA

■メーカー希望小売価格

430,000円(税別)

■JANコード/4539940004473

3モーターベッド

P300-31CA

■メーカー希望小売価格

460,000円(税別)

■JANコード/4539940004633

スチール 4輪キャスター仕様

2モーターベッド

P300-21DA

■メーカー希望小売価格

430,000円(税別)

■JANコード/4539940004497

3モーターベッド

P300-31DA

■メーカー希望小売価格

460,000円(税別)

■JANコード/4539940004657

仕様

		ハイバックサポート機能付 2モーター	ハイバックサポート機能付 3モーター	2モーター	3モーター
マットレス適合寸法		全長190.0cm~192.0cm、幅83.0cm			
質量	木製タイプ	101.5kg	103.5kg	98.0kg	99.5kg
	スチールタイプ	100.0kg	102.0kg	96.5kg	98.0kg
梱包		4梱包			
材質		本体部:スチール、ABS ヘッド・フットボード:(木製タイプ)プリント紙化粧板、天然木ウレタン樹脂塗装 (スチールタイプ)スチール、プリント紙化粧繊維板			
電動機能	ハイバック角度 0~20度			-	
	背上げ角度 0~60度			背上げ角度 0~70度	
	膝上げ角度 0~25度	膝上げ角度 0~30度	膝上げ角度 0~25度	膝上げ角度 0~30度	
床面高		27.5~67.5cm			
定格電圧		100V			
定格消費電力		90W			
モーター部		LINAK社製			
最大使用者体重		138kg/安全使用荷重:174kg(1700N)			
原産国		ベトナム			

専用オプション

※その他オプションはP13、P30~P34をご覧ください。

P300シリーズ用延長フレーム



ベッドの長さを延長することができます。

PP300-LF
■メーカー希望小売価格
30,000円(税別)

■JANコード/4539940082662
■寸法/幅94.5×長さ35.5×高さ55.5cm
■質量/6.9kg
■材質/スチール、ABS

延長マットレス(ポリエステルタイプ) 83cm幅



延長フレームをご使用の際にマットレスの長さを延長します。

PM08-83A
■メーカー希望小売価格
10,000円(税別)

■JANコード/4539940061018
■寸法/幅83.0×長さ14.0×高さ8.0cm
■質量/0.5kg
■材質/外カバー:中材:ポリエステル

酸素ポンペホルダー



ヘッドボード・フットボードに取付けて、酸素ポンペを設置できます。

PE02-S1
■メーカー希望小売価格
オープン価格

■JANコード/4539940082778
■寸法/幅18.0×奥行20.0×高さ46.0cm
■質量/2.2kg
■材質/スチール

P300シリーズ用バッテリー



停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。※充電式です。

PE01-BA18
■メーカー希望小売価格
24,000円(税別)

■JANコード/4539940082761
■寸法/幅13.5×長さ10.6×高さ6.8cm
■質量/1.5kg

延長マットレス(ウレタンタイプ) 83cm幅



延長フレームをご使用の際にマットレスの長さを延長します。

PM08-83B
■メーカー希望小売価格
10,000円(税別)

■JANコード/4539940061025
■寸法/幅83.0×長さ14.0×高さ8.0cm ■質量/0.4kg
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム

点滴棒




高さ調節が可能で、ベッドの頭側、足側に取付けできます。

PE03-T1
■メーカー希望小売価格
オープン価格

■JANコード/4539940082785
■寸法/高さ102.5~185.5cm
■質量/1.0kg
■材質/ステンレス


サイドレール(医療・施設用電動ベッド用)

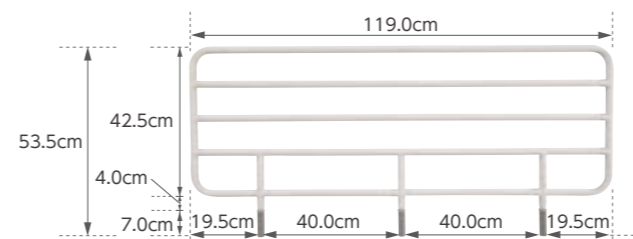

ロングサイドレール(1本入)

PS01-119 ■メーカー希望小売価格 **10,300円(税別)**


■JANコード/4539940082693
■質量/4.0kg(1本) ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
■原産国/ベトナム

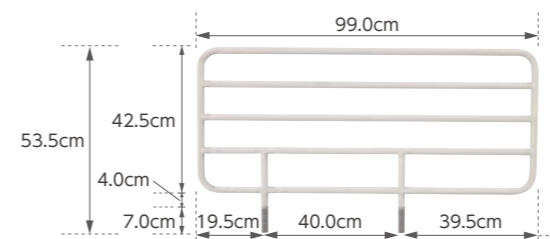

ロングサイドレール(2本組)

PS01-99 ■メーカー希望小売価格 **16,100円(税別)**

■JANコード/4539940082686
■質量/6.8kg(2本) ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
■原産国/ベトナム

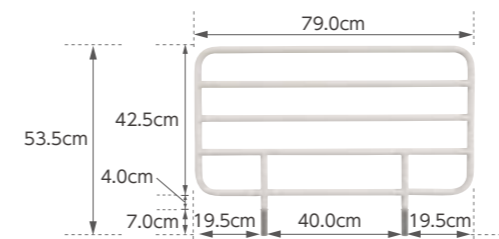

レギュラーサイドレール(2本組)

PS01-79 ■メーカー希望小売価格 **11,500円(税別)**

■JANコード/4539940082679
■質量/5.5kg(2本) ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
■原産国/ベトナム



PS01-99の取付け例

■安全カバー



安全カバー付 ロングサイドレール(1本入)

PS01-119S ■メーカー希望小売価格 **17,800円(税別)**

■JANコード/4539940082723 ■寸法/幅119.5×高さ54.0cm
■質量/4.3kg ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:ポリ
エステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国/本体:ベトナム カバー:日本

※安全カバーのみ PASN-TU119(1枚入) ¥7,400(税別)

安全カバー付 ロングサイドレール(2本組)

PS01-99S ■メーカー希望小売価格 **31,000円(税別)**

■JANコード/4539940082716 ■寸法/幅99.0×高さ54.0cm
■質量/7.4kg ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:ポリ
エステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国/本体:ベトナム カバー:日本

※安全カバーのみ PS01S-99(1枚入) ¥7,400(税別)

安全カバー付 レギュラーサイドレール(2本組)

PS01-79S ■メーカー希望小売価格 **26,400円(税別)**

■JANコード/4539940082709 ■寸法/幅79.5×高さ54.0cm
■質量/6.0kg ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:ポリ
エステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国/本体:ベトナム カバー:日本

※安全カバーのみ PASN-TU79(1枚入) ¥7,400(税別)

安全カバー付サイドレールにすることで、
手足の挟み込みによる事故を防ぎます。



※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは2セットまで非課税となります。
※ロングサイドレールPS01-119(1本入)は、ベッド1台に対し最大2本までご使用
できます。



適合するマットレス幅: 90cm幅

- 特許第5089785号(ランバー機構)
- 特許第5089786号(手元スイッチ形状)

センターロックシステムを搭載した
施設用低床電動ベッドの高機能モデル



ボルドー
「サンキューポイントマットレス」との組み合わせ

90cm幅



アンバー
「ニューポイントマットレス」との組み合わせ

90cm幅

モータータイプ

2モーター



3モーター



ボード

3色から選べる高級感のある木デザイン

ボルドー・アンバー・アプリコットの3色からお選びいただけます。




ボルドー

アンバー

アプリコット

EBコーティング

擦り傷、汚れ、日光に強いEBコーティングを施しています。

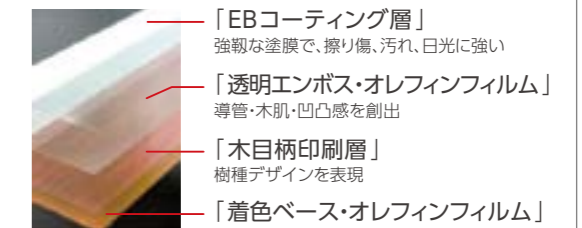

アプリコット
「ピカムポイントマットレス」との組み合わせ

90cm幅

背上げ時に発生する「背圧・腹圧・身体のズレ」に配慮した 5モーション機構

03 ランバー機構

05 2cmのバックオフS機構



足上げ先行の
ライジングモーション機構
(2モーターのみ)


04 ヒップダウン機構

01 膝位置のフィッティング機能

01 背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能


膝位置のフィッティング機能は利用者的大腿部の長さに合わせて、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレが少なく姿勢を崩しにくくなります。

「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…

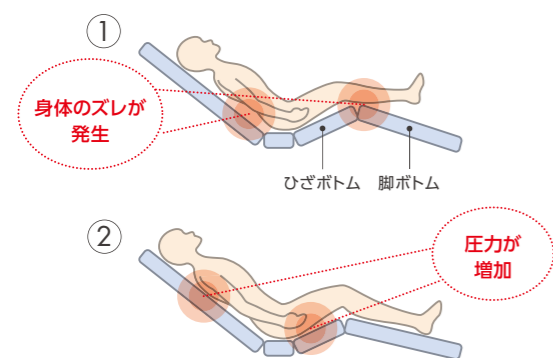

⚠ 褥瘡 (床ずれ) の原因になります

ピンを外して
左右にずらすだけの
簡単調整!

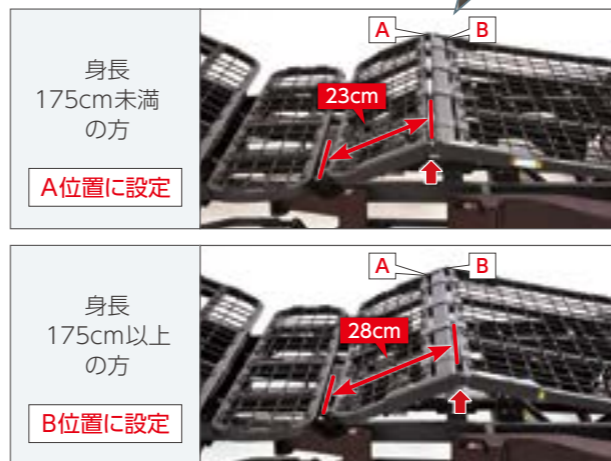


02 背上げ時のズレを抑える1ボタン操作の ライジングモーション機構

▶ 対応機種

背上げボタンを押すと、自動的に膝から上がり、その後に背が上がりだす「ライジングモーション」。これにより、足方向へのズレを抑制します。 ※背上げ単独動作への切り替えもワンタッチで可能です。

端座位をとりやすい膝0度

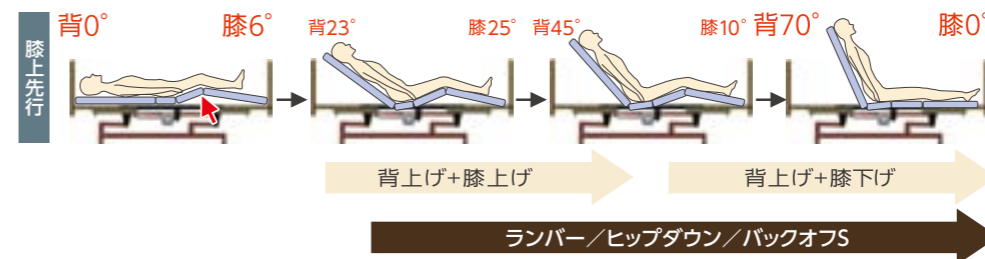

03 背上げ時の背圧・腹圧を軽減し、 呼吸を楽にするランバー機構

背上げ時は「背抜き動作」、背下げ時は「牽引感(背が引っ張られる感覚)軽減」をランバー機構の動きで実現。背上げ時の背圧・腹圧を軽減します。

※ON/OFF切替可能



04 骨盤を起こし姿勢を 崩しにくくするヒップダウン機構


背上げと同時に、自動的に臀部のボトムが傾斜します。この動作により骨盤を起こし、ズレを抑制します。



05 背圧・腹圧を軽減する バックオフS機構

背ボトムを後方に2cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、背中や腹部の圧迫感を軽減します。また、背圧は肩付近にかかるように設計されており、肩の後ろに手を差し込むだけでも大幅に除圧できます。

背ボトムが2cmスライド

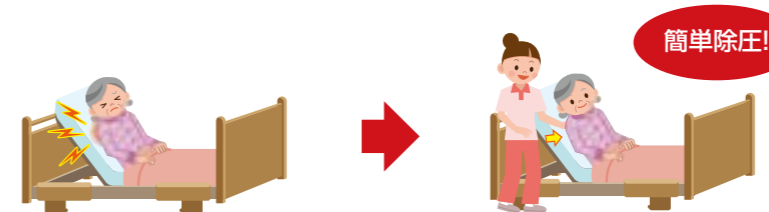

※背圧については、自分で体を動かす事ができない人は特にご注意ください。背上げ中に発生する背圧を放置すると呼吸困難になる恐れもあります。



機能

頭側、脚側、左右どこからでもロック操作ができるセンターペダル、サイドペダル搭載

センターはもちろん、左右からもロック操作がしやすい構造。
設置方向を問わずロック操作が簡単なので、スタッフの負担軽減に繋がります。



車椅子との移乗もすき間がなく安心な収納式サイドレールホルダー



サイドレールホルダーが収納できると、車椅子をベッドに密着させることが可能になり、移乗を楽に行うことができます。

サイドレールの中央差しが可能

収納式サイドレールホルダー

収納式のサイドレールホルダーをベッドの中央に標準装備。
ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落防止が可能です。

中央のサイドレールホルダーは収納できるため、移乗の妨げになりません。




足先上げと足先下げの簡単切替え

足先の角度をワンタッチで切り替えられます。脚の浮腫(むくみ)軽減にも対応できます。

足先上げ




足先下げ

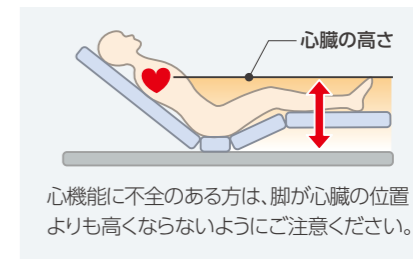

床面高さが25~63cmまで昇降することで、介助者の腰痛を予防できます

足方向へ8cmスイングしながら昇降しますが、25cmの最低床面高さとして63cmの最高床面高さでヘッドボードは同じ位置になります。ヘッドボード側は壁に近づけて設置が可能です。

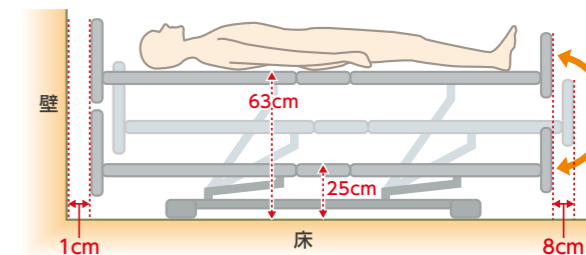

細かな部分にもこだわった機能面



サイドレール収納ホルダー




点滴棒取り付け穴



ハルンバッグ用フック

ひとくちメモ

寝た状態になると内臓が横に広がり、肺を圧迫し容積が小さくなります。結果、息苦しさを感ずることがあります。背上げ機能を使うことで、内臓が下がり肺の圧迫が無くなります。

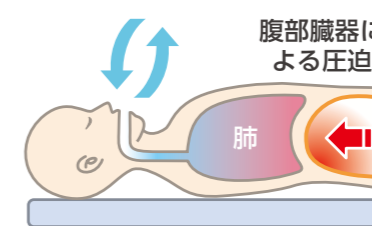

持ちやすく使いやすいユニバーサルデザインの手元スイッチ



麻痺・リウマチ・握力の弱い方でも保持しやすいダブル・ホールドマウント

サイドレールやボードからの落下を考慮し、掛けやすい形状を追求

指の間ではさめるので、麻痺側の手でも落ちにくく、使いやすくなりました。

引っ掛かりの少ないスムーズなスライド



静音性・防水性にも優れたデンマーク LINAK社製モーターを搭載

静音性・防水性(IP×4)に優れたデンマークのLINAK社製モーターを搭載。さらにお手入れがしやすくなりました。また、深夜でも気兼ねなくベッド操作が可能です。


※IP×4とは、全方向からの水の飛沫に対応した防水規格です。



仕様

2モーター／3モーター

(単位:cm)

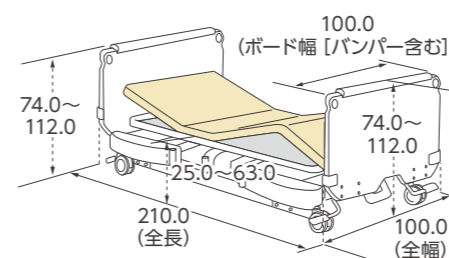

※中央のサイドレールホルダー使用時は全幅100.0cmとなります。
※昇降時はスイングしながら昇降する為、脚側は8cm以上、頭側は1cm以上のスペースが必要です。
※床からベースフレームの間は6.0cmです。

ボルドー

2モーターベッド

P101-21AA1

■メーカー希望小売価格 **460,000円(税別)**
■JANコード/4539940074575

3モーターベッド

P101-31AA1

■メーカー希望小売価格 **490,000円(税別)**
■JANコード/4539940074605

アンバー

2モーターベッド

P101-21AA2

■メーカー希望小売価格 **460,000円(税別)**
■JANコード/4539940074582

3モーターベッド

P101-31AA2

■メーカー希望小売価格 **490,000円(税別)**
■JANコード/4539940074612

アプリコット

2モーターベッド

P101-21AA3

■メーカー希望小売価格 **460,000円(税別)**
■JANコード/4539940074599

3モーターベッド

P101-31AA3

■メーカー希望小売価格 **490,000円(税別)**
■JANコード/4539940074629

	2モーター	3モーター
マットレス適合寸法	全長190.0~195.0cm、幅88.0~91.0cm	
質量	116.5kg	120.0kg
梱包	4梱包	
材質	本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:MDFオレフィン化粧板、天然木	
電動機能	背上げ角度 0~70度 膝上げ角度 0~25度	
床面高	25.0~63.0cm	
定格電圧	100V	
定格消費電力	100W	
モーター部	LINAK社製	
最大使用者体重	138kg/安全使用荷重:174kg(1700N)	
原産国	ベトナム	

専用オプション

※その他オプションはP28、P30~P34をご覧ください。



手元スイッチホルダー

PE501-D40

■メーカー希望小売価格 **1,100円(税別)**

■JANコード/4539940081801
■寸法/長さ21.7×幅7.6×高さ5.3cm
■質量/60g
■材質/PP樹脂
■原産国/ベトナム



エアマット用ハンガー

PE500-A4050

■メーカー希望小売価格 **1,700円(税別)**

■JANコード/4539940081795
■寸法/長さ33.5×幅10.5×高さ12.5cm
■質量/420g
■材質/バー部:POM樹脂 フック部:ABS樹脂
■耐荷重/10kg
■原産国/ベトナム



腰ボトムスペーサー(2個組)

PE502-A1

■メーカー希望小売価格 **1,200円(税別)**

■JANコード/4539940081887
■寸法/奥行2.6×幅5.0×高さ5.0cm
■質量/21g(1個当たり)
■材質/PP樹脂
■耐荷重/120kg(2個使用時)
■原産国/ベトナム

Ultilet アルティレット

適合するマットレス幅: 90cm幅

●特許第5089786号(手元スイッチ形状)

コストパフォーマンスに優れた
施設用低床電動ベッドのスタンダードモデル



宮付タイプ ライトブラウン



宮付タイプ
ダークブラウン
「ピカムポイントマットレス」との組み合わせ

90cm幅



フラットタイプ
ライトブラウン
「ユービーポイントマットレス」との組み合わせ

90cm幅

モータータイプ

2モーター 2モーターベッド



背上げ70° 背送運動70°/22° 高さ調節



3モーター 3モーターベッド




背上げ70° 背送運動70°/17° 膝上げ17° 高さ調節



ボード

2色から選べる高級感のある木デザイン

ダークブラウン・ライトブラウンの2色からお選びいただけます。

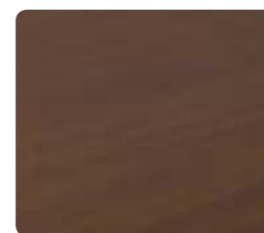

ダークブラウン



ライトブラウン

EBコーティング

擦り傷、汚れ、日光に強いEBコーティングを施しています。



- 「EBコーティング層」
強靱な塗膜で、擦り傷、汚れ、日光に強い
- 「透明エンボス・オレフィンフィルム」
導管・木肌・凹凸感を創出
- 「木目柄印刷層」
樹種デザインを表現
- 「着色ベース・オレフィンフィルム」



フラットタイプ
ダークブラウン

固定脚仕様


90cm幅

機能

背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

膝位置のフィッティング機能は利用者的大腿部の長さに合わせて、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を3段階に調節できるので、ズレが少なく姿勢を崩しにくくなります。

「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…

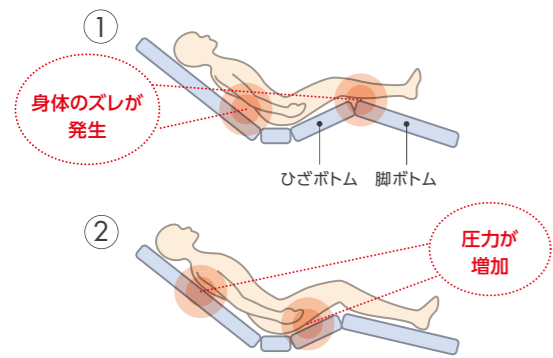

⚠️ 褥瘡 (床ずれ) の原因になります




身長 135~160cm の方	
A位置に設定	
身長 160~175cm の方	
B位置に設定	
身長 175cm以上 の方	
C位置に設定	

1ボタン操作のライジングモーション機構


▶ 対応機種

背上げボタンを押すと、自動的に膝から上がり、その後に背が上がりだす「ライジングモーション」。これにより、足方向へのズレを抑制します。膝角度の動きは下図のように2種類に設定できます。

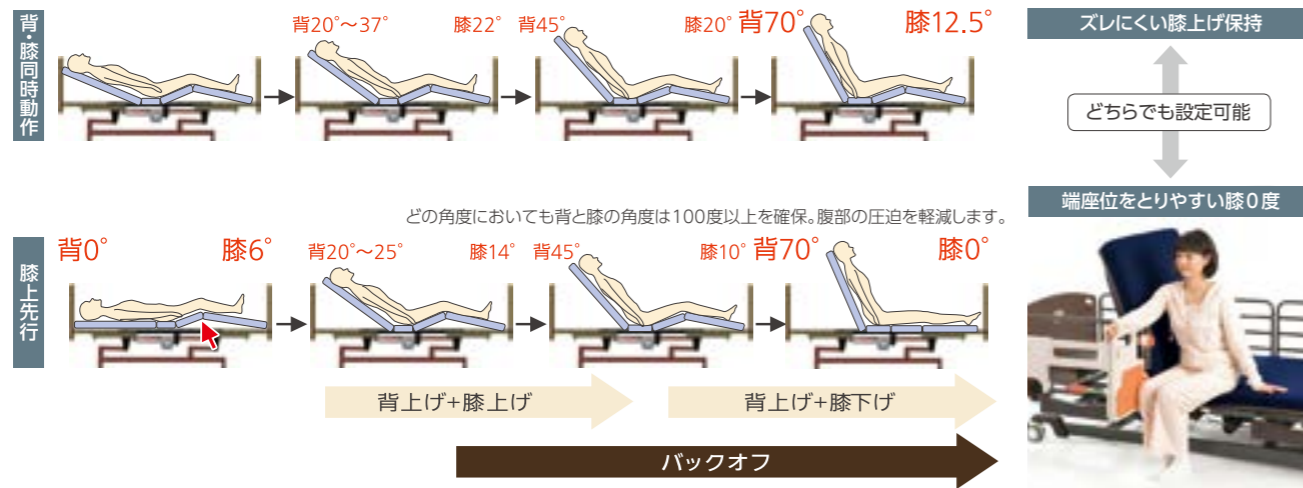

背圧・腹圧を軽減するバックオフ機構

背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、腹部や背中への圧迫感を軽減します。また、背圧は肩付近にかかるように設計されており、肩の後ろに手を差し込むだけでも大幅に除圧できます。

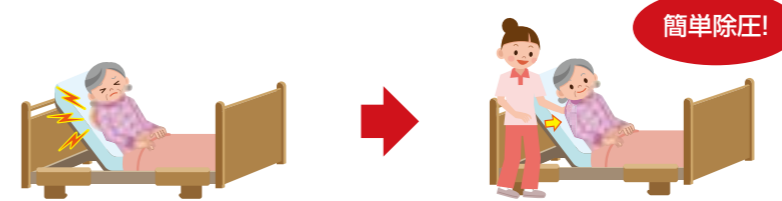

※背圧については、自分で体を動かす事ができない人は特にご注意ください。背上げ中に発生する背圧を放置すると呼吸困難になる恐れもあります。


サイドレールの中央差しが可能

収納式サイドレールホルダー

収納式のサイドレールホルダーをベッドの中央に標準装備。ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落防止が可能です。




中央のサイドレールホルダーは収納できるため、移乗の妨げになりません。

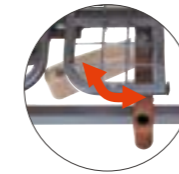

床面高さが25~63cmまで昇降することで、介助者の腰痛を予防できます

身長の低い方でも立ち上がりやすい高さに設定できます。また、床面高さは63cmまで上げることができ、介助者の腰への負担を軽減できます。

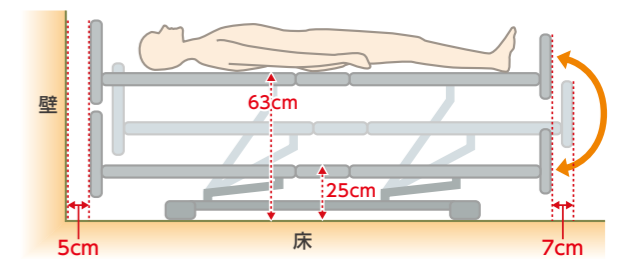

静音性・防水性にも優れたデンマーク LINAK社製モーターを搭載

静音性・防水性 (IP×4) に優れたデンマークのLINAK社製モーターを搭載。さらにお手入れがしやすくなりました。
※IP×4とは、全方向からの水の飛沫に対応した防水規格です。



持ちやすく使いやすいユニバーサルデザインの手元スイッチ



水漏れによる故障を防ぐ防水加工 (IP×4)

麻痺・リウマチ・握力の弱い方でも保持しやすい
ダブル・ホールドマウント

指の間ではさめるので、麻痺側の手でも落ちにくく、使いやすくなりました。



サイドレールやボードからの落下を考慮し、
掛けやすい形状を追求


引っ掛かりの少ないスムーズなスライド




仕様

2モーター／3モーター

■ フラットタイプ

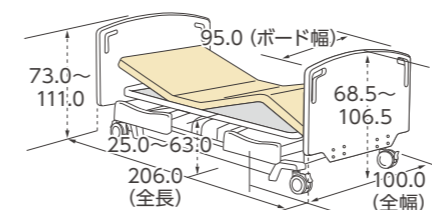

■ 宮付タイプ

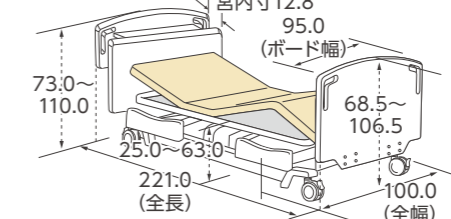

(単位:cm)

※中央のサイドレールホルダー使用時は全幅103.5cmとなります。
※昇降時はスイングしながら昇降する為、脚側は7cm以上、頭側は5cm以上のスペースが必要です。
※床からベースフレームの間は5.7cmです。

■ ダークブラウン

フラットタイプ キャスター仕様

2モーターベッド
P109-22AA1
■メーカー希望小売価格 **360,000円(税別)**
■JANコード/4539940001977

3モーターベッド
P109-32AA1
■メーカー希望小売価格 **390,000円(税別)**
■JANコード/4539940002028

フラットタイプ 固定脚仕様

2モーターベッド
P109-21AA1
■メーカー希望小売価格 **340,000円(非課税)**
■JANコード/4539940001960

3モーターベッド
P109-31AA1
■メーカー希望小売価格 **370,000円(非課税)**
■JANコード/4539940002011

宮付タイプ キャスター仕様

2モーターベッド
P109-22AC1
■メーカー希望小売価格 **390,000円(税別)**
■JANコード/4539940001571

3モーターベッド
P109-32AC1
■メーカー希望小売価格 **420,000円(税別)**
■JANコード/4539940001618

宮付タイプ 固定脚仕様

2モーターベッド
P109-21AC1
■メーカー希望小売価格 **370,000円(非課税)**
■JANコード/4539940001564

3モーターベッド
P109-31AC1
■メーカー希望小売価格 **400,000円(非課税)**
■JANコード/4539940001601

■ ライトブラウン

フラットタイプ キャスター仕様

2モーターベッド
P109-24AB1
■メーカー希望小売価格 **360,000円(税別)**
■JANコード/4539940001991

3モーターベッド
P109-34AB1
■メーカー希望小売価格 **390,000円(税別)**
■JANコード/4539940002042

フラットタイプ 固定脚仕様

2モーターベッド
P109-23AB1
■メーカー希望小売価格 **340,000円(非課税)**
■JANコード/4539940001984

3モーターベッド
P109-33AB1
■メーカー希望小売価格 **370,000円(非課税)**
■JANコード/4539940002035

宮付タイプ キャスター仕様

2モーターベッド
P109-24AD1
■メーカー希望小売価格 **390,000円(税別)**
■JANコード/4539940001595

3モーターベッド
P109-34AD1
■メーカー希望小売価格 **420,000円(税別)**
■JANコード/4539940001632

宮付タイプ 固定脚仕様

2モーターベッド
P109-23AD1
■メーカー希望小売価格 **370,000円(非課税)**
■JANコード/4539940001588

3モーターベッド
P109-33AD1
■メーカー希望小売価格 **400,000円(非課税)**
■JANコード/4539940001625

マットレス適合寸法	2モーター		3モーター	
	フラット	宮付	フラット	宮付
質量 (固定脚仕様の場合)	95.5kg(95.0kg)	106.5kg(106.0kg)	98.5kg(98.0kg)	109.5kg(109.0kg)
梱包	4梱包(キャスター仕様は5梱包)			
材質	本体部: スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード: プリント紙化粧板、PU塗装			
電動機能	背上げ角度 0~70度			
床面高	25.0~63.0cm			
定格電圧	100V			
定格消費電力	90W			
モーター部	LINAK社製			
最大使用者体重	138kg/安全使用荷重: 174kg(1700N)			
原産国	本体: ベトナム 木部: 中国、ベトナム			

専用オプション

※その他オプションはP28、P30~P34をご覧ください。

アルティレット専用 延長脚




写真は7cm延長脚です

PDP-140G 高さ調節用14cm延長脚(4個組)
■メーカー希望小売価格 **3,700円(税別)**
■JANコード/4539940081368
■材質/スチール、ABS樹脂
■装着時床面高/+14.0cm
■原産国/ベトナム

PDP-70G 高さ調節用7cm延長脚(4個組)
■メーカー希望小売価格 **3,700円(税別)**
■JANコード/4539940081375
■材質/スチール、ABS樹脂
■装着時床面高/+7.0cm
■原産国/ベトナム

PDP-35G 高さ調節用3.5cm延長脚(4個組)
■メーカー希望小売価格 **3,700円(税別)**
■JANコード/4539940081382
■材質/スチール、ABS樹脂
■装着時床面高/+3.5cm
■原産国/ベトナム

サイドレール(介護施設用電動ベッド用)

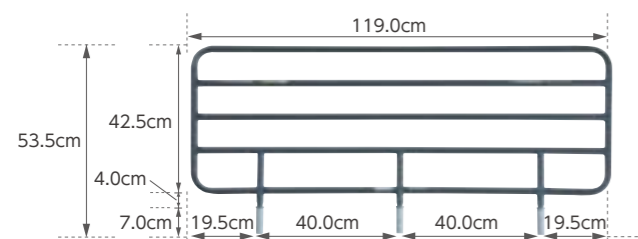

ロングサイドレール(1本入)

PA501-TU119 ■メーカー希望小売価格 **10,300円(税別)**


■JANコード/4539940081825
■質量/4.0kg ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
■原産国/ベトナム



安全カバー付 ロングサイドレール(1本入)

PA501-TU119SN ■メーカー希望小売価格 **17,800円(税別)**

■JANコード/4539940081856
■寸法/幅119.5×高さ54.0cm ■質量/4.3kg ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム
■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ PASN-TU119(1枚入) ■メーカー希望小売価格 7,400円(税別)

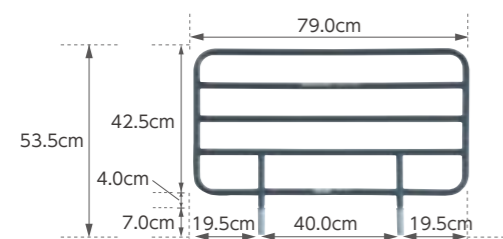

レギュラーサイドレール(2本組)

PA501-TU79 ■メーカー希望小売価格 **11,500円(税別)**


■JANコード/4539940081832
■質量/5.5kg ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
■原産国/ベトナム



安全カバー付 レギュラーサイドレール(2本組)

PA501-TU79SN ■メーカー希望小売価格 **26,400円(税別)**

■JANコード/4539940081863
■寸法/幅79.5×高さ54.0cm ■質量/6.0kg ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム
■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ PASN-TU79(1枚入) ■メーカー希望小売価格 7,400円(税別)

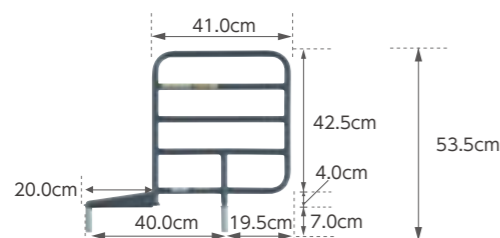

ショートサイドレール(2本組)

PA501-TU41 ■メーカー希望小売価格 **11,500円(税別)**

■JANコード/4539940081849
■質量/4.5kg ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂、PP樹脂
■原産国/ベトナム



安全カバー付 ショートサイドレール(2本組)

PA501-TU41SN ■メーカー希望小売価格 **26,400円(税別)**

■JANコード/4539940081870
■寸法/幅61.5×高さ54.0cm ■質量/4.8kg ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂、PP樹脂 カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム
■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ PASN-TU41(1枚入) ■メーカー希望小売価格 7,400円(税別)

安全カバー付
サイドレールにすることで、
手足の挟み込みによる
事故を防ぎます。



圧迫感の少ない
メッシュ構造



※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは2セット(4本)まで非課税となります。
※ロングサイドレールPA501-TU119(1本入)は、ベッド1台に対し最大2本までご使用できます。

周辺機器

より良い看護・介護環境のための
豊富なオプション類

周辺機器	
ニーパロII	30
フットライト	33
テーブル・カーペット	34

ニーパロPⅡ

ノーリフトとは?

ノーリフトとは、人の力だけで患者や利用者を抱え上げずに、福祉用具を活用することにより腰の負担を軽減させる、安全な看護・介護行為のことです。介護者の腰痛予防に大きな効果が期待できます。



ノーリフト環境を実現させる、
唯一の自動ロック式ベッド用
グリップ



01 ロック忘れによる事故を予防する 自動ロック方式(業界初)

立ち上がる時にグリップ部が固定されていないと手を挟んだり、転倒事故の原因になります。このような事故を防止するため、「ニーパロⅡ」には45度毎に自動的にロックする機構を搭載しています。

(特許第4921535号)




02 握力の弱った方でも簡単にロックできる ユニバーサルデザインの解除ハンドル



指や手のひらで楽に解除できるユニバーサルデザインです。



03 回転レバーと下からも固定できる 安心のダブルロック方式

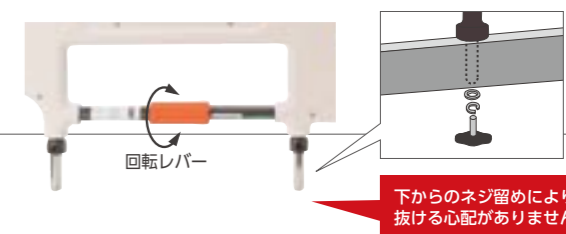

下からのネジ留めにより
抜ける心配がありません

04 握りやすさを追求し、手首への負担を軽減する 「ニーパロボール」と「波型グリップ」



握りやすい「波型グリップ」

ニーパロボール

従来のベッド用グリップでは・・・

写真のように膝が前方向にズレ落ちると首を打ったり、転倒するなど危険な状態になることもありました。(ひざ折れ状態)



安心ひざパッドがあると・・・



■ ずり落ちを予防します

膝の位置にパッドがあり、「ひざ折れ」を防止できます。



■ 楽な立ちあがり

膝をパッドにあて腕を引くことで腰が浮きやすくなり、より少ない力で立ち上がることができます。



■ 立位を安定させます

腕・ひざ・足の3点で身体を支えるため、立位状態が安定しやすくなります。



■ 端座位時のずり落ちを予防

グリップ角度45度で使用すると、膝位置が固定できマットからのずり落ちを予防できます。



■ 移乗用具を安全に使用できます

トランスファーボードなど滑りやすい移乗用具を使用する際も「ひざ折れ」の心配がなく、安心して使用できます。

■ 後方介助を実現します

介助者の腰への負担が大きい「前方介助」から、腰への負担が少ない「後方介助」を安心して行うことが可能です。【P32/使い方(A)参照】

ニーパロPⅡの使い方

後方介助移乗

●【使い方(A)】ベッドから車いすへの介助移乗(トランスファーボードを使った場合)

ノーリフトを実現しました



1 ベッドの背を上げ、ベッドの高さを車いすよりもやや高く設定し、グリップ部を45度にセットします。車いすのブレーキをかけ、車いす側の足を前に出します。前に出す足を逆にすると足を痛める原因になるためご注意ください。

2 グリップ部を握り、後ろに倒れないように注意しながら、ボードを左臀部の下に敷き、ボードの端を車いすの中心位置に置きます。

3 車いすの手すりを握り、引くように促します。介助者の右足はベッドの上に乗せます。



4 左腰部を支え、左腕側へ寄りかかるように体を傾かせ、右臀部を軽く押し、車いすへ移乗させます。移乗中に車いすが動かないように左足で固定します。

5 右臀部に体重が乗るように右に体を傾け、車いすの奥まで移乗させます。

6 ボードを抜きやすいように身体を左に傾けてボードを上げ、前後に動かしながら引き抜きます。

自立移乗

●【使い方(B)】ベッドから車いすへの自立移乗(90度の場合)



1 グリップ部を90度を開き、膝をパッドにあてます。ベッドの高さは車いすよりもやや高くなります。車いすを寄せ、ブレーキをかけます。

2 車いす側の足を前に出します。前に出す足を逆にすると足を痛める原因になるためご注意ください。(45度の場合も同じ)

3 膝をパッドにあてながら立ち上がり、あるいは腰を浮かして…

4 車いすへ移ります。

「トランスファーボード」や「スライディングシート」は、表面が滑りやすく加工されており、用途に合わせ様々な形状があります。詳しくは福祉用具販売会社にお尋ねください。

ポイント

移乗する時の基本動作は「ベッドの高さを調整する」ことです。ベッドから車いすへ移る場合は、ベッドの高さを車いすの座面よりやや高くなります。逆に、車いすからベッドに移る場合は、ベッドの高さを下げ、車いすよりもやや低く設定します。



ニーパロPⅡ



パッド付自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロPⅡ」
PF500-116P ■メーカー希望小売価格 60,000円(税別)

■TAISコード/00631-000235 ■JANコード/4539940082112
■寸法/幅116.5×高さ52.0cm ■質量/9.2kg
■材質/スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂
■原産国/ベトナム



安心ひざパッド・安全カバー付ベッド用グリップ「ニーパロPSⅡ」
PF500-116PS ■メーカー希望小売価格 68,600円(税別)

■TAISコード/00631-000246 ■JANコード/4539940082136
■寸法/幅116.5×高さ52.0cm ■質量/9.5kg
■材質/本体:スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂
カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム
■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ PF500S-116 ■メーカー希望小売価格 8,600円(税別)

人感センサー付フットライト



ベッドにおける起居動作や、介護の際の動線の把握など、夜間の居室における事故を予防します。

- 即時点灯性が高く、寿命が長いLEDライトを採用。
- 電源 ON-OFF 切り替えスイッチ付き。
- 点灯時間は1分/3分/5分/10分の4段階。ご希望の時間に合わせて点灯します。
- 明るさの調整は3段階に切り替え可能です。
- 電源はベッドの電力を使用するため、電池や別のコンセントは必要ありません。

3段階の明るさ

人感センサーが感知する範囲は、フットライト本体中央にあるセンサー部より90度、およそ3mの範囲で感知します。



● 明るい ← → ● 暗い



アルティレット・トゥーユー用
PL01-5VS ■メーカー希望小売価格 オープン価格

■JANコード/4539940082495

アルティレット用
PL01-5VL ■メーカー希望小売価格 オープン価格

■JANコード/4539940082501

仕様

寸法	幅9.0×高さ6.0×奥行5.0cm
材質	PC樹脂
原産国	中国

テーブル・カーペット

サイドレールに乗せて使う
ラウンドタイプのオーバーテーブル



●胸元の部分をカットした、使いやすいラウンドタイプ

オーバーテーブル

PGT-400LM

■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000121
11,500円(税別) ■JANコード/4539940081245

オーバーテーブル83cm幅

PGT-400LM83

■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000248
11,500円(税別) ■JANコード/4539940082174

寸法	90cm幅	幅100.3×奥行35.8×厚さ4.1cm
	83cm幅	幅93.3×奥行35.8×厚さ4.1cm
質量	90cm幅	約3.2kg
	83cm幅	約3.0kg
材質	甲板：プリント紙化粧繊維板 取っ手：ABS樹脂	
最大使用荷重	15kg	
原産国	台湾	

使い勝手にこだわった
介護ベッド用昇降ベッドテーブル



- ガススプリングによるスムーズかつ、安定したテーブルの昇降が可能です。
- 移動に便利なキャスター付(うちストッパー付キャスター2個)

ガス圧式昇降ベッドテーブル

PZT-840

■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000178
43,700円(税別) ■JANコード/4539940081627

寸法	幅84.0×奥行47.0×高さ60.0~84.0cm (天板)幅84.0×奥行40.0×厚さ1.7cm
質量	15.5kg
材質	ベースフレーム部：スチール 木部：合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) キャスターカバー：PP樹脂
最大使用荷重	10kg
原産国	ベトナム

※[P300シリーズ]、[アルティレット・トゥーユー]にはご使用できません。
※[アルティレット]と組み合わせる場合は別売の「3.5cm延長脚」が必要です。

裏面に滑り止め加工を施した
ベッド用カーペット



床キズ防止カーペット(4枚組)

PSC-1216SC

■メーカー希望小売価格 ■寸法/16.5×12.5cm×厚さ5mm
3,400円(税別) ■材質/ナイロン
■JANコード/4539940081283 ■原産国/日本

マットレス

ベッドを使う方の環境を考えて
開発されたマットレス

マットレス

サンキューポイントマットレス	36
ニューポイントマットレス	37
スタンダードマットレス	37
ユービーポイントマットレス	38
ピカムポイントマットレス	38

サンキューポイントマットレス

裏面
難燃 抗菌 防臭 防ダニ 表面
撥水
[撥水タイプ]

ソフト
4
当社比


上層2層、下層1層の3層構造で、寝心地を追求したマットレス

素材に「プレスエア」を採用し、寝心地、背圧軽減、耐久性、消毒性に優れたマットレスです。
佐賀大学医学部 松尾准教授との共同開発商品です。




Mattress series
ThankUpoint
PLATZ

背圧を軽減するファスナー付カバー

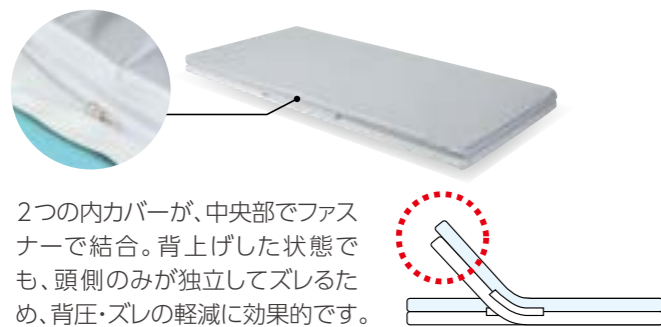

2つの内カバーが、中央部でファスナーで結合。背上げた状態でも、頭側のみが独立してズれるため、背圧・ズレの軽減に効果的です。
(特許第5138081号)

マットレス構造図

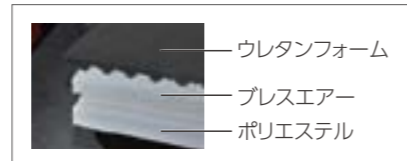

撥水タイプ

■メーカー希望小売価格 **66,000円(税別)**

90cm幅 レギュラータイプ PD500-TU8909

■TAISコード/00631-000203 ■JANコード/4539940060769
■寸法/幅90.0×厚さ9.0×長さ192.0cm ■質量/8.5kg
■材質/外カバー・内カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム、ポリエステル
■原産国/日本

83cm幅 レギュラータイプ PD505-A8309

■TAISコード/00631-000251 ■JANコード/4539940060912
■寸法/幅83.0×厚さ9.0×長さ192.0cm ■質量/7.9kg
■材質/外カバー・内カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム、ポリエステル
■原産国/日本

外カバー・内カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

透湿防水タイプ

■メーカー希望小売価格 **78,000円(税別)**

90cm幅 レギュラータイプ PD501-TU8909

■TAISコード/00631-000222 ■JANコード/4539940060806
■寸法/幅90.0×厚さ9.0×長さ192.0cm ■質量/8.5kg
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 内カバー:ポリエステル
中材:ウレタンフォーム、ポリエステル ■原産国/日本

内カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

プレスエア

通気性、クッション性能、透水性、耐久性、環境・安全、制菌性に優れた素材です。また、プレスエアは簡単に洗うことができ、病院や介護の分野でも広く採用されています。




表面撥水(※撥水タイプのみ)

撥水タイプは、外カバー(表面のみ)を撥水加工しているため、少量の水などをこぼしても、すぐに拭き取れば内部へのしみ込みを防ぐことができます。



体圧分散データ [計測機器]FSA:タカノ(株)製

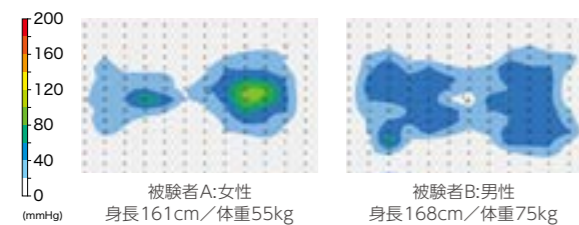

ニューポイントマットレス


難燃 抗菌 防臭 防ダニ

通気性を考慮したリバーシブルタイプの介護用マットレス

芯地のポリエステルにも抗菌剤が練り込まれています。



硬さが選べて背圧を軽減する2層構造

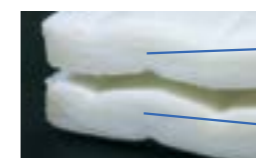

背上げの際に発生する「背圧」は、背ボトムとマット、マットと身体との摩擦により発生しますが、背上げ時に2層のマットがずれることで背圧を軽減します。

■メーカー希望小売価格 **50,000円(税別)**

90cm幅 レギュラータイプ PKM-9080

■TAISコード/00631-000161 ■JANコード/4539940060684
■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm ■質量/7.5kg
■材質/ポリエステル ■原産国/韓国

83cm幅 レギュラータイプ PD504-A8308

■TAISコード/00631-000249 ■JANコード/4539940060899
■寸法/幅83.0×厚さ8.0×長さ192.0cm ■質量/7.2kg
■材質/ポリエステル ■原産国/韓国

外カバー・内カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

スタンダードマットレス

難燃 抗菌 防臭 防ダニ

背圧の軽減を考えた介護用マットレス



背圧を軽減する2層構造



■メーカー希望小売価格 **36,000円(税別)**

90cm幅 レギュラータイプ PKM-E80BR

■TAISコード/00631-000163 ■JANコード/4539940060721
■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm ■質量/6.2kg
■材質/ポリエステル ■原産国/韓国

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

ユービーポイントマットレス

防水

リバーシブルタイプのウレタンフォームマットレス



■メーカー希望小売価格 **36,000円(税別)**

90cm幅 レギュラータイプ PD503-A9008

■TAISコード/00631-000247 ■JANコード/4539940060851
■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm ■質量/6.1kg ■材質/外カバー:
ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム ■原産国/ベトナム


83cm幅 レギュラータイプ PD503-A8308

■TAISコード/00631-000254 ■JANコード/4539940060875
■寸法/幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm ■質量/5.7kg ■材質/外カバー:
ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム ■原産国/ベトナム


外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

硬さが選べるリバーシブルタイプ

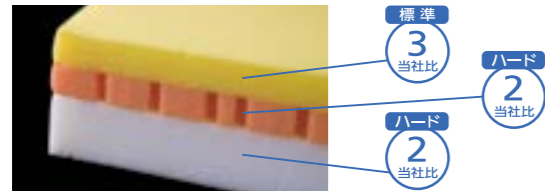

体圧分散データ [計測機器]FSA:タカノ(株)製

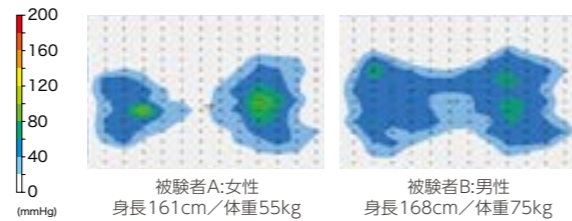

ビカムポイントマットレス

難燃 抗菌 防臭 防ダニ **ソフト 5 当社比**

体圧分散ブロック構造と、ムレにくい透湿防水カバーを採用した床ずれ防止マットレス



■メーカー希望小売価格 **109,000円(税別)**

90cm幅 レギュラータイプ PD502-BP8914

■TAISコード/00631-000215 ■JANコード/4539940060790
■寸法/幅90.0×厚さ14.0×長さ192.0cm ■質量/10.5kg
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 内カバー:ポリエステル
中材:ウレタンフォーム ■原産国/日本

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。


※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

3次元カットニング工法

体圧を効果的に分散しながら、熱のこもりを防ぎます。

端座位がとりやすい

側面から10cmに高密度ウレタンを採用し、端座位をとりやすくしています。

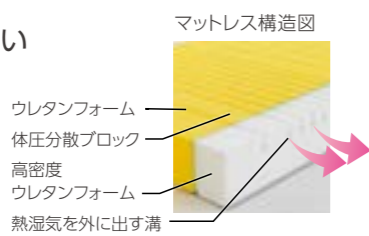

透湿防水カバー


ムレにくい清拭タイプの透湿防水カバーを採用。

独自のファスナー取り付け位置

ファスナーは裏面、さらにマットレスの端から内側に取り付けることにより、失禁や水こぼし等での浸み込みを防ぎます。



体圧分散データ [計測機器]FSA:タカノ(株)製

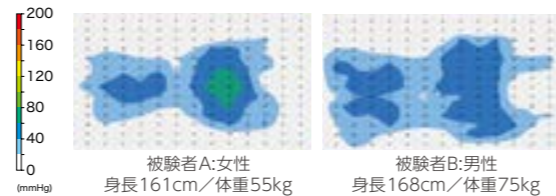

離床センサー

安心、安全、そして確実。
よりストレスの少ない看護・介護環境を
目指した新しい離床センサー

離床センサー



01 ストレスの少ない非接触タイプ

マットレスの下に設置するため、ベッド利用時に違和感がなく、見守られているというストレスも感じさせません。また、利用者の肌に直接触れることがなく衛生的です。



02 体動、心拍、呼吸で感知するため、誤報が少ない

体動、心拍、呼吸などの生体信号を、マットレスを伝わるわずかな振動で感知します。端座位やうつ伏せ、横向きなど、どんな姿勢でも感知でき誤報が極めて少ないシステムです。



03 センサーマットの内部は空気のため、安全で故障が少ない

センサーマットの内部は空気とウレタンのみで構成、折り曲げや変形にも強く、へたりや内部の破損などのリスクが極めて少ない構造です。



ベッドの電力を使用でき、コンセントがいらぬ「DC電源タイプ」

DC電源タイプはベッドの電力を使用するため、別のコンセントや電池が必要ありません。乱雑になりがちなベッドまわりの配線を少なくすることで、転倒のリスクを低減できます。

電源タイプ


- DC電源タイプ…ベッドの電力を使用
- AC電源タイプ…通常のコンセントを使用

※DC電源タイプをご使用の際には、別売の「変換アダプター付電源コード(PL01-S、PL01-L)」が必要となります。



Wセンサーで、素早く確実な離床予測

オプションの人感センサーは赤外線により人の動きを感知します。生体信号を感知するセンサーマットとあわせて2つのセンサーで感知することで、より素早く確実に離床をお知らせします。

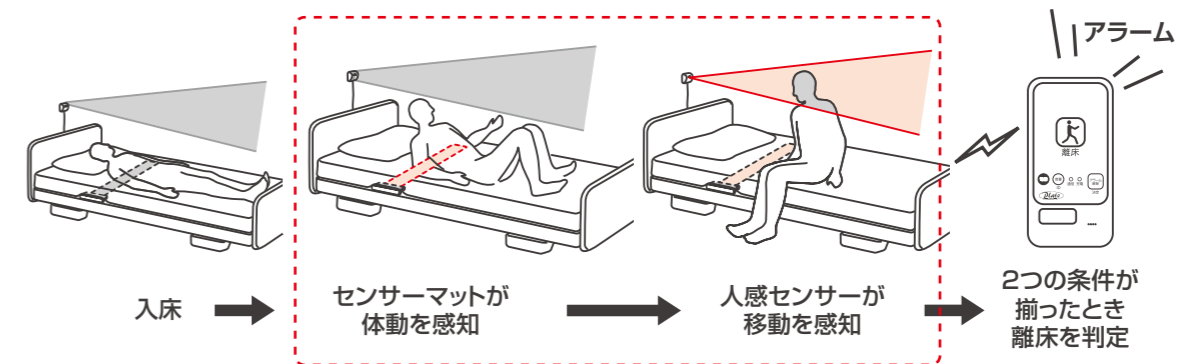

ナースコールとの連動

ナースコール連動タイプは、既存のナースコールシステムに離床をお知らせします。適合するナースコールはP44をご覧ください。

呼び出し機能

オプションの「呼出しボタン」は、受信機に離床のアラームとは違う音で呼び出しをお知らせします。


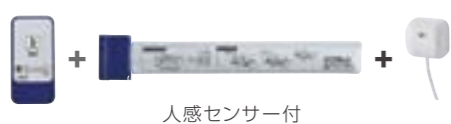
ラインナップ

1×1 (One by One) … 1人で1名を見守るタイプ

TAISコードを取得しており、介護保険レンタルが可能です。




徘徊感知機器(1×1タイプ)

セット内容	DC電源タイプ	AC電源タイプ
	PW02-11-DC メーカー希望小売価格 112,000円(税別) ■TAISコード/00631-000311 ■JANコード/4539940082518 ■原産国/日本 DC電源ケーブル:中国	PW02-11-AC メーカー希望小売価格 112,000円(税別) ■TAISコード/00631-000311 ■JANコード/4539940082532 ■原産国/日本 AC電源ケーブル:中国
	PW02-11MS-DC メーカー希望小売価格 128,000円(税別) ■TAISコード/00631-000312 ■JANコード/4539940082525 ■原産国/日本 DC電源ケーブル:中国	PW02-11MS-AC メーカー希望小売価格 128,000円(税別) ■TAISコード/00631-000312 ■JANコード/4539940082549 ■原産国/日本 AC電源ケーブル:中国



※DC電源タイプをご使用の際には、「変換アダプター付電源コード(PL01-S、PL01-L)」が必要となります。

1×9 (One by Nine) … 1人で複数名(最大9名)を見守るタイプ

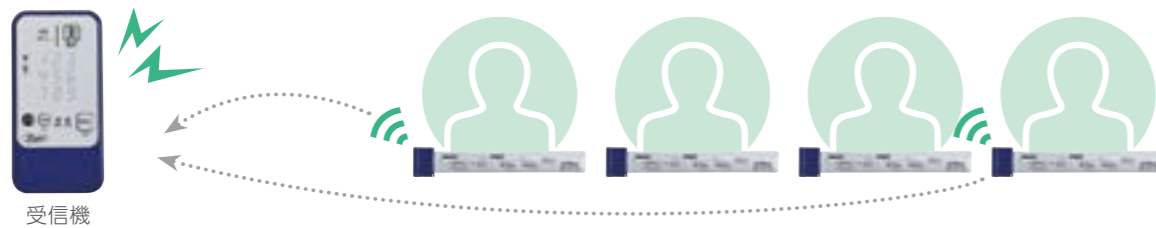主に病院や高齢者施設でご使用いただけます。ユニットケアを実施されている施設様に最適です。
TAISコードを取得しており、介護保険レンタルが可能です。




離床センサー(1×9タイプ)

セット内容	DC電源タイプ	AC電源タイプ
	PW02-1N-DC メーカー希望小売価格 112,000円(税別) ■TAISコード/00631-000313 ■JANコード/4539940082556 ■原産国/日本 DC電源ケーブル:中国	PW02-1N-AC メーカー希望小売価格 112,000円(税別) ■TAISコード/00631-000313 ■JANコード/4539940082563 ■原産国/日本 AC電源ケーブル:中国
	PW02-1NMS-DC メーカー希望小売価格 128,000円(税別) ■TAISコード/00631-000314 ■JANコード/4539940082747 ■原産国/日本 DC電源ケーブル:中国	PW02-1NMS-AC メーカー希望小売価格 128,000円(税別) ■TAISコード/00631-000314 ■JANコード/4539940082754 ■原産国/日本 AC電源ケーブル:中国



※DC電源タイプをご使用の際には、「変換アダプター付電源コード(PL01-S、PL01-L)」が必要となります。

ナースコール連動タイプ

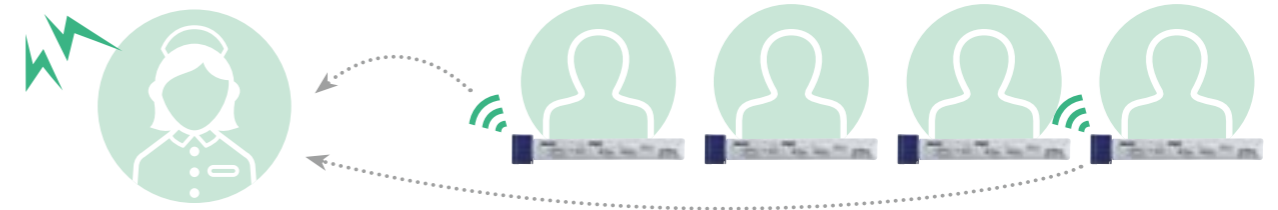センサーをナースコールに接続することで、既存のナースコールシステムに離床をお知らせします。



離床センサー(ナースコール連動タイプ)

セット内容	DC電源タイプ	AC電源タイプ
	PW02-NC-DC メーカー希望小売価格 82,000円(税別) ■JANコード/4539940082570 ■原産国/日本 DC電源ケーブル:中国	PW02-NC-AC メーカー希望小売価格 82,000円(税別) ■JANコード/4539940082587 ■原産国/日本 AC電源ケーブル:中国
	PW02-NRX-DC メーカー希望小売価格 112,000円(税別) ■JANコード/4539940082594 ■原産国/日本 DC電源ケーブル:中国	PW02-NRX-AC メーカー希望小売価格 112,000円(税別) ■JANコード/4539940082600 ■原産国/日本 AC電源ケーブル:中国

※DC電源タイプをご使用の際には、「変換アダプター付電源コード(PL01-S、PL01-L)」が必要となります。

オプション



人感センサー

PW02-MS
 ■メーカー希望小売価格 **24,000円(税別)**
 ■JANコード/4539940082617
 ■検出範囲/垂直方向:約10度 水平方向:約40度
 ■原産国/日本



離床センサー用呼出しボタン

PW02-NC
 ■メーカー希望小売価格 **9,800円(税別)**
 ■JANコード/4539940082624
 ■コード長さ/1.4m
 ■材質/ABS樹脂
 ■原産国/日本



追加センサーマット(1×9タイプ用)

PW02-SM1N-DC (DC電源タイプ用)
PW02-SM1N-AC (AC電源タイプ用)
 ■メーカー希望小売価格 **82,000円(税別)**
 ■JANコード/4539940082648 (PW02-SM1N-DC)、
 4539940082655 (PW02-SM1N-AC)
 ■寸法/長さ80.0×幅14.0×高さ3.0cm
 ■質量/345g ■無線到達距離/見通し100m(参考)
 ■原産国/日本



変換アダプター付電源コード(短)

PL01-S (アルティレットトゥーユー用)
 ■メーカー希望小売価格 **オープン価格**
 ■JANコード/4539940082792
 ■コード長さ/3.2m
 ■材質/PC樹脂、PA樹脂
 ■原産国/中国



変換アダプター付電源コード(長)


PL01-L (アルティレットシリーズ用)
 ■メーカー希望小売価格 **オープン価格**
 ■JANコード/4539940082808
 ■コード長さ/4.1m
 ■材質/PC樹脂、PA樹脂
 ■原産国/中国



中継器

PW02-RP
 ■メーカー希望小売価格 **50,000円(税別)**
 ■JANコード/4539940082631
 ■寸法/長さ11.6×幅5.8×高さ1.7cm
 ■質量/58g ■無線到達距離/見通し100m(参考)
 ■原産国/日本

仕様

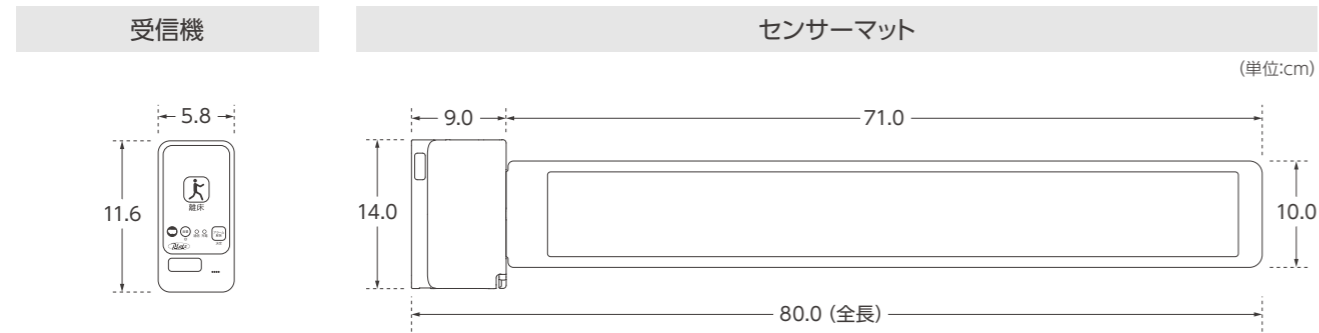


材質	受信機: ABS樹脂 センサーマット: ABS樹脂、PVC樹脂
寸法	樹脂ケース部:長さ9.0×幅14.0×高さ3.0cm マット部:長さ71.0×幅10.0×高さ1.0cm
質量	受信機:76g センサーマット:345g
定格電圧	5V
消費電流	1A以下
無線到達距離	見通し100m(参考)


適合ナースコール参考図

ナースコール連動タイプは付属の「分岐ボックス」を用いることで、各社のナースコールに接続することが可能です。
 ※ご使用中のナースコールの「メーカー名」「プラグのピン形状と本数」をご確認ください。ご不明な場合はプラッツまでお問い合わせください。


アイホン社製仕様

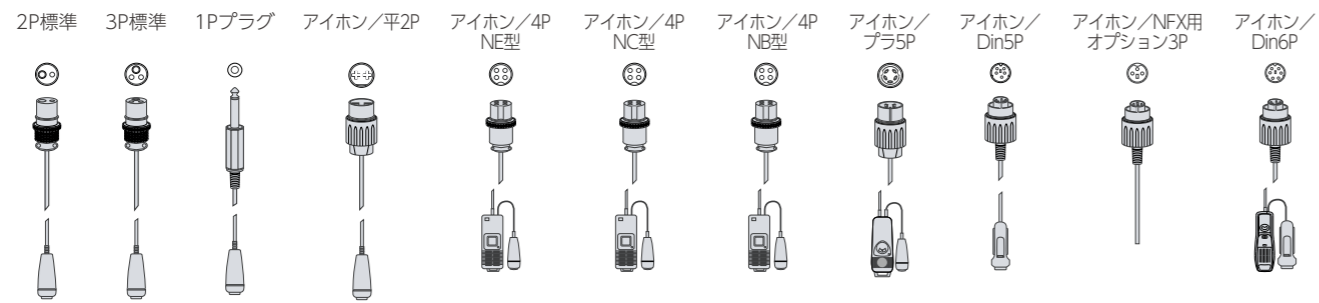

ケアコム社製仕様

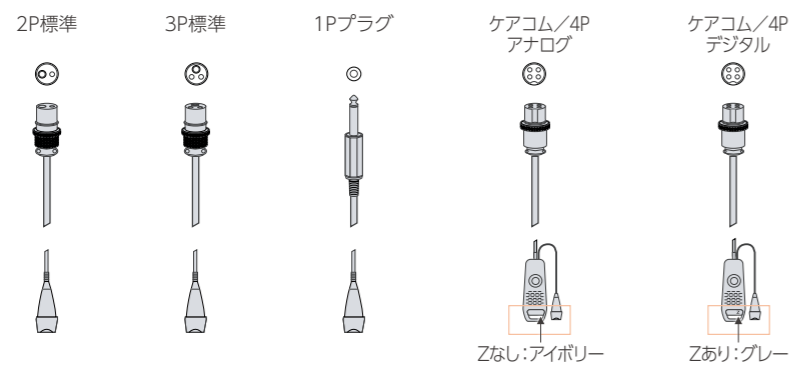


パナソニック社製仕様

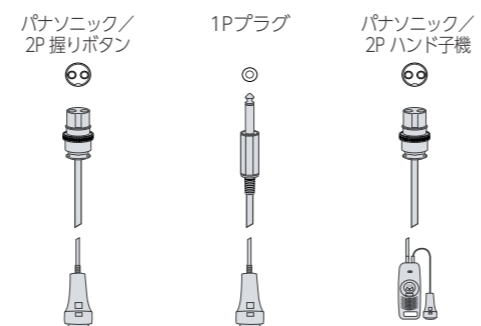

施設用家具

居住空間に合わせた
木製施設用家具

施設用家具

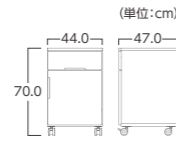


床頭台ロータイプ

- | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| ダークブラウン
PK01-DB | ミディアムブラウン
PK01-MB | ライトブラウン
PK01-LB |
|--------------------|----------------------|--------------------|

■メーカー希望小売価格 **オープン価格**

■JANコード/4539940082211(ダークブラウン)、4539940082228(ミディアムブラウン)、4539940082235(ライトブラウン) ■寸法/幅44.0×奥行47.0×高さ70.0cm
■質量/18.0kg ■材質/天然木化粧繊維板 ■表面加工/天板:ポリエステル塗装
引き出し前板:ウレタン樹脂塗装 ■原産国/日本

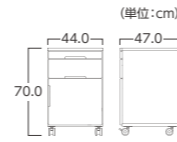


床頭台ロータイプ(スライド天板付)

- | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| ダークブラウン
PK02-DB | ミディアムブラウン
PK02-MB | ライトブラウン
PK02-LB |
|--------------------|----------------------|--------------------|

■メーカー希望小売価格 **オープン価格**

■JANコード/4539940082242(ダークブラウン)、4539940082259(ミディアムブラウン)、4539940082266(ライトブラウン) ■寸法/幅44.0×奥行47.0×高さ70.0cm
■質量/20.0kg ■材質/天然木化粧繊維板 ■表面加工/天板:ポリエステル塗装
引き出し前板:ウレタン樹脂塗装 ■原産国/日本

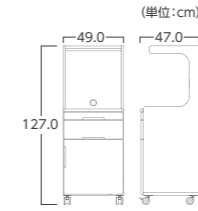

床頭台ミドルタイプ(スライド天板付)

- | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| ダークブラウン
PK03-DB | ミディアムブラウン
PK03-MB | ライトブラウン
PK03-LB |
|--------------------|----------------------|--------------------|

■メーカー希望小売価格 **オープン価格**

■JANコード/4539940082273(ダークブラウン)、4539940082280(ミディアムブラウン)、4539940082297(ライトブラウン) ■寸法/幅49.0×奥行47.0×高さ127.0cm
■質量/28.0kg ■材質/天然木化粧繊維板 ■表面加工/天板:ポリエステル塗装
引き出し前板:ウレタン樹脂塗装 ■原産国/日本

居住空間に合わせた木製施設用家具をご用意します。



木の色は3色からお選びいただけます。



ダークブラウン ミディアムブラウン ライトブラウン


F☆☆☆☆

フォスター基準とは、ホルムアルデヒドの発散量を抑えた安全の最高基準(JIS規格・JAS規格共通)です。使う方の安全と健康に配慮した仕様です。

プラッツの施設用家具は日本製
施設用家具は国産にこだわり仕上げました。

オーダーメイドにも対応します。
施設様のご要望にお応えして、色やサイズなど、ニーズに合った家具をご提供します。

居室のレイアウトもご提案いたします。

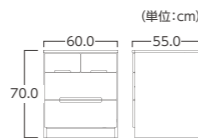


チェスト60-3段

- | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| ダークブラウン
PK04-DB | ミディアムブラウン
PK04-MB | ライトブラウン
PK04-LB |
|--------------------|----------------------|--------------------|

■メーカー希望小売価格 **オープン価格**

■JANコード/4539940082303(ダークブラウン)、4539940082310(ミディアムブラウン)、4539940082327(ライトブラウン) ■寸法/幅60.0×奥行55.0×高さ70.0cm
■質量/32.0kg ■材質/天然木化粧繊維板 ■表面加工/天板:ポリエステル塗装
引き出し前板:ウレタン樹脂塗装 ■原産国/日本

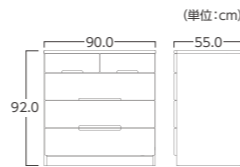


チェスト90-4段

- | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| ダークブラウン
PK05-DB | ミディアムブラウン
PK05-MB | ライトブラウン
PK05-LB |
|--------------------|----------------------|--------------------|

■メーカー希望小売価格 **オープン価格**

■JANコード/4539940082334(ダークブラウン)、4539940082341(ミディアムブラウン)、4539940082358(ライトブラウン) ■寸法/幅90.0×奥行55.0×高さ92.0cm
■質量/54.0kg ■材質/天然木化粧繊維板 ■表面加工/天板:ポリエステル塗装
引き出し前板:ウレタン樹脂塗装 ■原産国/日本

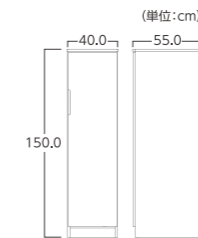

ワードローブ

- | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| ダークブラウン
PK06-DB | ミディアムブラウン
PK06-MB | ライトブラウン
PK06-LB |
|--------------------|----------------------|--------------------|

■メーカー希望小売価格 **オープン価格**

■JANコード/4539940082365(ダークブラウン)、4539940082372(ミディアムブラウン)、4539940082389(ライトブラウン) ■寸法/幅40.0×奥行55.0×高さ150.0cm
■質量/30.0kg ■材質/天然木化粧繊維板 ■表面加工/天板:ポリエステル塗装
扉:ウレタン樹脂塗装 ■原産国/日本

オプション



タオルハンガー(2個)

■メーカー希望小売価格 **1,200円(税別)**



ダンパー(2個)

■メーカー希望小売価格 **1,500円(税別)**



2口コンセント

■メーカー希望小売価格 **5,000円(税別)**



セーフティーキー

■メーカー希望小売価格 **5,000円(税別)**



回転フック(2個)

■メーカー希望小売価格 **750円(税別)**



ステッキホルダー(2個)

■メーカー希望小売価格 **1,200円(税別)**

※施設用家具の納期は1.5か月程度いただく場合がございます。

会社概要

(2016年6月30日現在)


名称	株式会社プラッツ 英文名(PLATZ Co.,Ltd.)
設立	1992年7月3日
社員数	83名(単独)、220名(連結)
資本金	5億8,205万円 (東証マザーズ、福証Q-Board上場 証券コード:7813)
営業品目	介護用ベッド、マットレス等 ベッド周辺機器の製造販売
主販売先	医療機器・施設設備販売会社、家具販売店
参加団体	<ul style="list-style-type: none"> ● 日本福祉用具・生活支援用具協会(JASPA) ● 医療・介護ベッド安全普及協議会 ● (社)関西シルバーサービス協会 ● (社)日本福祉用具供給協会 ● ふくおか医療福祉関連機器開発・実証ネットワーク

物流拠点	<ul style="list-style-type: none"> ● 北海道(札幌市) ● 宮城県(仙台市) ● 千葉県(野田市) ● 愛知県(海部郡) ● 大阪府(大東市) ● 福岡県(福岡市)
関連会社	<ul style="list-style-type: none"> ● 富若慈(上海)貿易有限公司 ● PLATZ VIETNAM CO.,LTD.

outline

拠点マップ

本社/九州支店/ショールーム

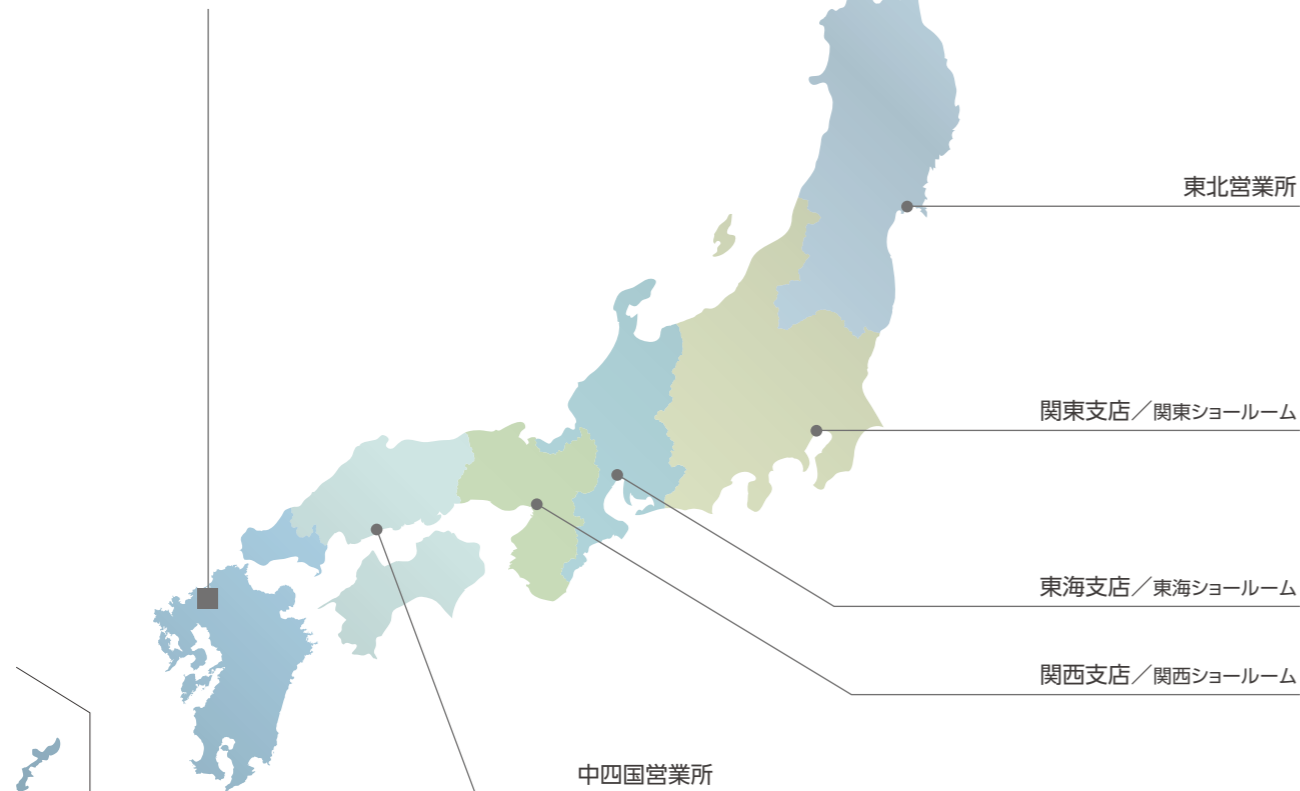

プラッツの企業理念

医療介護・健康福祉・ベッド業界に対し、「高品質」「高機能」「低価格」をテーマにした製品作りに徹し、お客様に満足と喜びを感じてもらうことを最大の目標に、恒久的に社会に貢献するものである。

一. プラッツ経営の基本姿勢

常に「公正」であるか。
常に「創造」しているか。
常に「改革」しているか。

一. プラッツ社員の行動規範

プラッツ社員は常に謙虚であり、個性に秀で常に新しいものを創造する人間の集団であれ。

プラッツを支える4つの柱

プラッツはお客様・ご利用者様・工場・製品の4つの柱によって成り立っています。すべての柱を円滑につなげ、お客様に満足と喜びを届ける事を最大限の目標にまいります。




品質への取組

品質管理体制強化のため、2012年8月にプラッツベトナム工場を設立し、レベルの高い製造工程を実現しています。

ISO 9001:2008 の規格に基づき、実直に品質の向上に努めています。


私たちは、製品に対する全行程に責任を持っています。

◎2007年5月11日取得
◎2013年5月11日更新

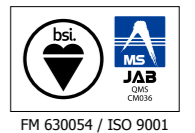

- ①設計・開発
- ②調達部品検査指導
- ③生産工程指導
- ④工程/製品の検査や要員教育まで責任を持ち、品質管理を行っています。

品質概略図

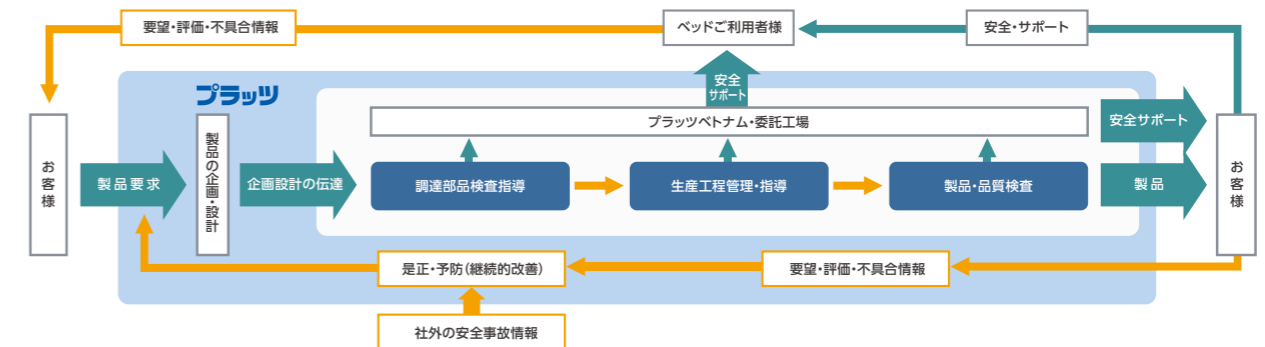



安全についてのご注意

機器を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

PLATZ(プラッツ)製品カタログのご注意事項

- 製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
- 発売予定時期は開発・製造の都合上、予告なく変更する場合がございます。
- カタログの写真と実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
- カタログ本文の寸法・角度等の数値には、多少の誤差が含まれます。当カタログでは、表示を見やすくするため、「約」、「およそ」といった文言を省略しています。
- ベッドの写真内のマットレス・テーブル等は、特記事項のあるもの以外は別価格となっております。
- 製品の価格に **非課税** の表示がある製品には消費税がかかりません。
- 製品の価格には配送料・納品(組立設置料)・不要品の引き取り等の費用は含まれておりません。
- 製品の安全性・品質には、万全の注意を払っておりますが、下記の原因による事故に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
 - ①製品の目的以外のご使用や誤ったご使用を原因とした事故
 - ②当社未承認での製品の改造等を原因とする事故
 - ③「当社が指定する当社製品の組み合わせ」以外の組み合わせを原因とする事故(例:当社ベッドと他社製のサイドレールやベッド用グリップとの組み合わせ)
 - ④その他当社の責任とはいえない事故

※最新の製品情報・安全に関する情報はホームページに記載しております。

製造元

株式会社 **プラッツ**

25th
PLATZ 25TH ANNIVERSARY
since 1992



挑戦します!
お客様の笑顔のために。

■本社/ショールーム

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL:092-584-3434/FAX:092-584-3436

●北海道営業所

〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条
1-2-22-102

TEL.011-807-4750 FAX.011-807-4751

●東北営業所

〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字東通29
ホワイトアーバンシティ102

TEL.022-781-7072 FAX.022-781-7062

■関東支店・関東ショールーム

〒105-0014 東京都港区芝2-16-9 芝YSビル1F
TEL.03-5427-8033 FAX.03-5427-8031

■東海支店・東海ショールーム

〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社3-108
オフィス・クロンドビル1F

TEL.052-704-2700 FAX.052-704-2701

■関西支店・関西ショールーム

〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4
メディアパードビルディング2F

TEL.06-6233-2105 FAX.06-6233-2107

●中四国営業所

〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6

TEL.084-946-6000 FAX.084-946-6040

■九州支店(本社内)

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17

TEL.092-584-3433 FAX.092-502-3810

<http://www.platz-ltd.co.jp/>

Facebookプラッツオフィシャルページ

<http://www.facebook.com/PlatzJapan>

■ご意見・ご質問等は

iken@platz-ltd.co.jp

製品のお求め、お問い合わせは