

TOTAL CATALOGUE

2011 VOL.3



プラッツはいつも 「一生懸命」です。

「一生懸命」を掲げて20周年。

私たちは、皆さまの快適さを高めるお手伝いを目指してきました。

プラッツは、ありがとうございます、まっしぐら。



代表取締役社長

福山 明利

現在多くの要介護状態の方々は、
戦後の復興期において大変なご苦労を経験されながら、
弛まぬ努力で現代の日本の発展に
貢献されてこられた方々です。
我々の使命は、このようなご利用者様に対し
常に感謝の気持ちを忘れず、
介護ベッドを「安全」に、「快適」に
ご利用いただく事であると考えております。
プラッツはこれからも常にお客様の声に耳を傾け、
お客様との共存共栄の理念の元、
より「高品質」でより「高機能」、
そして「低価格」の介護ベッドを「一生懸命」造り続けます。

「介護ベッドを通して社会に貢献する。
プラッツはいつも一生懸命です」。

会社概要

(2011年10月1日現在)

■ 創業	株式会社プラッツ 英文名(PLATZ co.,ltd.)
■ 設立	1992年7月3日
■ 社員数	70名(海外社員含む)
■ 資本金	2億8,575万円
■ 営業品目	介護用ベッド、マットレス等 ベッド周辺機器の製造販売
■ 売上高	21億円(17期)、25億円(18期)、 32億円(19期)
■ 主販売先	医療機器・福祉用具販売会社、 家具販売店
■ 所属団体	・日本福祉用具・ 生活支援用具協会(JASPA) ・医療・介護ベッド安全普及協議会 ・(社)関西シルバーサービス協会

■ 営業拠点
◆ 本社／ショールーム
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-39 TEL:092-584-3434/FAX:092-584-3436
◆ 関東支店
〒105-0014 東京都港区芝2-16-9 芝YSビル1F TEL:03-5427-8033/FAX:03-5427-8031
● 東北営業所
〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字東通29 ホワイトアーバンシティ102 TEL:022-781-7072/FAX:022-781-7062
■ 工場拠点
◆ 福岡工場(品質検査工場)
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-24 TEL:092-915-3003/FAX:092-915-3002
■ 主力製造工場
ベトナム・マレーシア・韓国・日本の各協力工場

◆ 東海支店／東海ショールーム
〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社3-108 オフィス・クロンドビル1F TEL:052-704-2700/FAX:052-704-2701
◆ 関西支店／関西ショールーム
〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4 メディアパードビルディング2F TEL:06-6233-2105/FAX:06-6233-2107
◆ 九州支店
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-39 TEL:092-584-3433/FAX:092-502-3810
■ 物流拠点
◆ 福岡県(大野城市)
◆ 三重県(川越町)
◆ 神奈川県(大和市)

プラッツの企業理念

医療介護・健康福祉・ベッド業界に対し、「高品質」「高機能」「低価格」をテーマにした製品作りに徹し、お客様に満足と喜びを感じてもらうことを最大の目標に、恒久的に社会に貢献するものである。

一. プラッツ経営の基本姿勢

常に「公正」であるか。
常に「創造」しているか。
常に「改革」しているか。

一. プラッツ社員の行動規範

プラッツ社員は常に謙虚であり、個性に秀で常に新しいものを創造する人間の集団であれ。



プラッツを支える4つの柱

プラッツはお客様・利用者・工場・製品の4つの柱によって成り立っています。すべての柱を円滑につなげ、お客様に満足と喜びを届ける事を最大限の目標にまいります。

品質への取組

■ 製造委託向上を厳選し、委託工場との協力・信頼関係を築き、レベルの高い製造工程を実現しています。

■ 私たちは、製品に対する全行程に責任を持っています。

- ①企画・設計
- ②調達部品検査指導
- ③生産工程指導
- ④工程／製品の検査や工員教育まで責任を持ち、品質管理を行っています。


■ ISO 9001:2008の規格に基づき、愚直に品質の向上に努めています。

◎2007年5月11日取得 ◎2010年5月11日更新

■ 在宅介護用電動ベッドのJIS規格 JIS T 9254:2009 を在宅介護ベッドを下記製品で取得しています。

- ・ミオレット
- ・プリモレット
- ・ミオレット・フォーユー

品質概略図

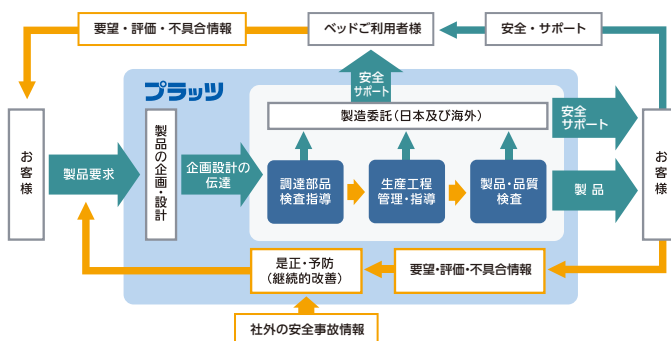

※取得には、国が定めた認証機関による「工場の品質体制」と「製品試験」の審査が必要です。

※UKASとは、United Kingdom Association Serviceの略称

目 次



会社概要 1

自立支援電動ベッド 3


- ケアレット…………… 4
- ケアレット・ネオ…………… 6
- ケアレット・プライム…………… 8
- ケアレット専用マットレス…………… 10

※ベッド用グリップの装着はできません。



医療介護ベッド 13

- プリモレット…………… 14
- ミオレット…………… 16
- ミオレット・フォーユー…………… 20
- アルティレット…………… 32

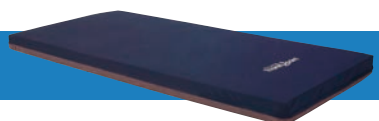

医療介護ベッド用マットレス 36

- 医療介護ベッド用マットレス…………… 36
- 体圧分散マットレス／床ずれ防止…………… 38



ベッド周辺機器 40

- 医療介護ベッド専用周辺機器
- ベッド用グリップ…………… 40
 - サイドレール…………… 42
 - テーブル・その他…………… 44
- 全ベッド共通周辺機器
- テーブル…………… 44

■モーターの数と対象者の基本相関図

体の状態		元気	足腰に 痛み	支援1	支援2	介護1	介護2	介護3	介護4	介護5
モーター数										
3 モーター 3モーター								「ミオレット」「ミオレット・フォーユー」 「アルティレット」の3M		
2 モーター 2モーター						「ミオレット」「ミオレット・フォーユー」 「アルティレット」の2M				
昇1 モーター 昇降1モーター		「ミオレット」の昇降1M								
1+1 モーター 1+1モーター		「ケアレット」 「ケアレット・ネオ」 「ケアレット・プライム」								
背1 モーター 背上げ1モーター		「プリモレット」「ミオレット」「ミオレット・フォーユー」 「アルティレット」の背上げ1M								

元気

お元気な方～介護5
の方用のページ順
になっております。

介護
5

自立支援電動ベッド

元気な方から低介護度の方へ

ケアレット
CareLet

ケアレット ネオ
CareLetneo
for your elder life

ケアレット・プライム
CareLetPRIME



CareLet

ケアレット

銘木の木目を活かした美しいデザインと
安全性を両立したベッドです

ベッド+サイドレール+マットレスの3点セットです。

※組み合わせはP12を参照ください。

16
種類の
組合せ



Careletとは?

英語でお世話をする「Care」とイタリア語で
ベッドを意味する「Letto」を組み合わせた
造語です。



宮付タイプ

PSB-FS1MAWS

「エルダーサポートワイドマットレス」とのセット例

機能

●背上げ1モーター



背上げ70° 背膝連動70°/22°



※1モーター仕様はワイヤーの脱着により、背上げ単独か背膝連動リクライニングに切り替えられます。膝単独でのリクライニングはできません。

●1+1モーター



背上げ70° 背膝連動70°/22° 膝上げ22°



デザイン

●宮付タイプ

手元スイッチ掛けフック
バー付き(宮付タイプ)



●フラットタイプ



特徴

伝統技法(矢貼り)で貼り合わせた天然木の突き板を採用。
一台一台、木の表情が違い、見る角度によって色の濃淡が変わります。

- マットレスは専用の「エクレージュシリーズ」(P10、11)の3タイプから選べます。
- 背が高い人を対象にしたロングタイプを用意
※対応するマットはエルダーサポートタイプのみ
- レール周りは「隙間適合」基準に準拠した安心設計
- 背を下げるときは、モーターの力で直接引かない安心のフリーホイール構造
(P7写真参照)
- 床面高さは、24/30.5/37cmの3段階に調整可能
(マットを含めた高さはP10、11参照)
- 標準装備の2本のサイドレールは、片側3ヶ所に取り付け可能
- 表面は天然木の突き板「矢貼り」仕上げ




矢貼りとは?

希少な銘木の美しい木目を活かし、突き板を斜めに貼り合わせることによって、矢のように見える伝統的な技法です。



仕様

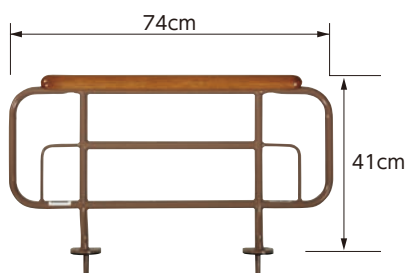

ケアレット専用サイドレール(2本組)

PSG-740AW-T

■メーカー希望小売価格


オープン価格

■JANコード/4539940081290


※ベッド用グリップの装着不可

オプションで
追加購入可能

宮付タイプ

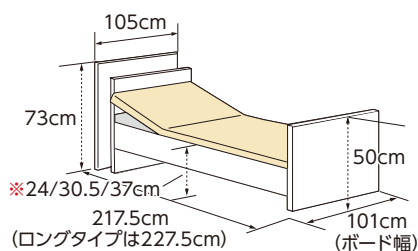

フラットタイプ

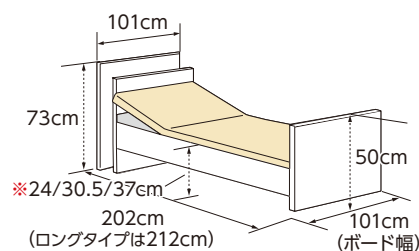

※マットレスを含まないデータです。

		背上げ1モーター	1+1モーター
材質		スチール、MDF、天然木突き板、PU塗装	
床面高		24/30.5/37cmの3段階	
定格消費電力		45W	100W
電源		100V(50/60Hz)	
原産国		ベトナム	マレーシア
質量 (サイドレール2本含む)	〈宮付タイプ〉	86.7kg (ロングタイプ: 89.0kg)	78.8kg (ロングタイプ: 81.1kg)
	〈フラットタイプ〉	73.5kg (ロングタイプ: 75.8kg)	65.6kg (ロングタイプ: 67.9kg)
梱包		4梱包(マットレス含む)	
最大使用者体重		90kg	

※ベッド用グリップの装着不可

CareLetneo

ケアレット・ネオ
for your elder life

12
種類の
組合せ



多機能と低価格を両立した安心の自立サポートベッド 洋室にも調和するデザイン

ベッド+サイドレール+マットレスの3点セットです。

※組み合わせはP12を参照ください。



宮付タイプ

PSB-KS1MA-CS

「硬質ウレタンマットレス」とのセット例

機能

●背上げ1モーター



背上げ70° 背膝連動70°/22°



手元
スイッチ

※1モーター仕様はワイヤーの脱着により、背上げ単独か背膝連動リクライニングに切り替えられます。膝単独でのリクライニングはできません。

●1+1モーター



背上げ70° 背膝連動70°/22° 膝上げ22°



手元
スイッチ

デザイン

●宮付タイプ



小物入れの棚付



●フラットタイプ




特徴

- マットレスは専用の「エクレーヴシリーズ」(P10、11)の3タイプから選べます。
- レール周りは「隙間適合」基準に準拠した安心設計
- 背を下げるときは、モーターの力で直接引かない安心のフリーホイール構造
- 床面高さは、24/30.5/37cmの3段階に調整可能(マットを含めた高さはP10、11参照)
- 表面は天然木の突き板仕上げ
- 標準装備の2本のサイドレールは、片側3ヶ所に取り付け可能




フリーホイール構造とは？

背上げアームの回転により、背ボトムの「上がる」「下がる」をすることができます。下がる時に、背ボトムに何か挟まっても、アームで直接引っ張らない構造になっています。モーターは数百キロの物を持ち上げる力があり、直結していると挟まった物を破壊する事がありますが、フリーホイール構造により、これを回避できます。

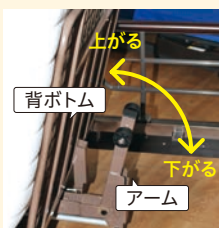

「硬質ウレタンマットレスPSB-FW14(4/4)」と「ガス圧式昇降ベッドテーブルPZT-840」とのセット例

仕様

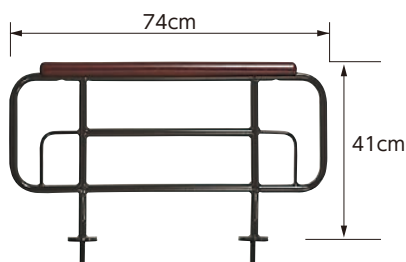

ケアレット・ネオ専用サイドレール(2本組)
PSG-740DW-T

■メーカー希望小売価格


オープン価格

■JANコード/4539940081504


※ベッド用グリップの装着不可

オプションで
追加購入可能

宮付タイプ

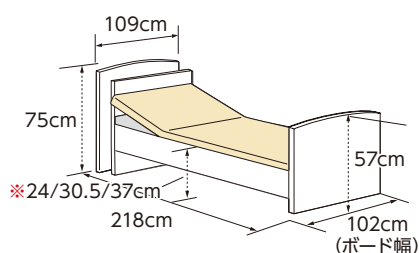

フラットタイプ

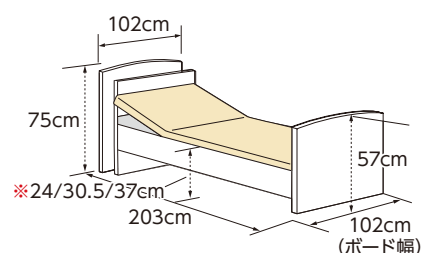

※マットレスを含まないデータです。

		背上げ1モーター	1+1モーター
材質		スチール、MDF、天然木突き板、PU塗装	
床面高		24/30.5/37cmの3段階	
定格消費電力		45W	100W
電源		100V(50/60Hz)	
原産国		ベトナム	マレーシア
質量 (サイドレール2本含む)	〈宮付タイプ〉	92.8kg	84.9kg
	〈フラットタイプ〉	76.1kg	68.2kg
梱包		4梱包(マットレス含む)	
最大使用者体重		90kg	

※ベッド用グリップの装着不可

ケアレット・プライム CareLet PRIME

12
種類の
組合せ



新商品

医療・介護ベッドのノウハウを生かした
安心の自立サポートベッド

ベッド+サイドレール+マットレスの3点セットです。

※組み合わせはP12を参照ください。



宮付タイプ

P102-11AB1CS

「硬質ウレタンマットレス」とのセット例

機能

●背上げ1モーター



背膝連動70°/17°

※背・膝単独でのリクライニングはできません。



手元
スイッチ

●1+1モーター



背上げ70° 背膝連動70°/22° 膝上げ22°

※2つのモーターで背上げと膝上げを連動でも、単独でも調整できます。



手元
スイッチ

デザイン

●宮付タイプ



●フラットタイプ



※宮付タイプのみ、小物入れの棚とコンセント付。


特徴

- マットレスは専用の「エクレーヴシリーズ」(P10、11)の3タイプから選べます。
- レール周りは「隙間適合」基準に準拠した安心設計
- 床面高さは、24/30.5/37cmの3段階に調節可能(マットを含めた高さはP10、11参照)

- 表面は天然木の突き板仕上げ
- 標準装備の2本のサイドレールは、片側3カ所に取り付け可能
- 背を下げるときは、モーターの力で直接引かない安心のフリーホイール構造(P7写真参照)

Point! 利用者の膝の位置に合わせ 曲がる位置を調節できるフィッティング機構

膝の位置とベッドの曲がる位置とが合っていないと背上げ時にお尻がずれてしまいます。ケアレット・プライムは、利用者的大腿部の長さに合わせて、パーツの変更なしで脚ボトムの屈曲位置を調節できます。

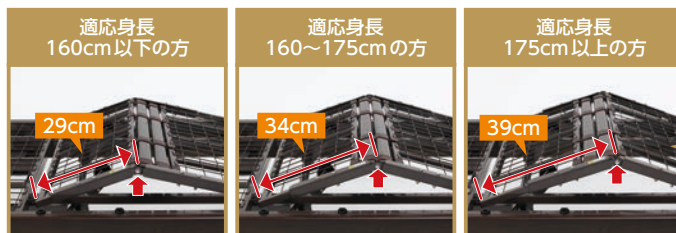


対応機種

背1
1+1

ピンを外して
左右に
ずらすだけの
簡単調整!

Point! 1ボタン操作のライジングモーション機構

背上げボタンを押し続けるだけの簡単操作で図のように、膝上げから始まる理想の背上げ動作を実現しました。どの角度においても背と膝の角度は100度以上を確保する設計により、腹部圧迫の心配がありません! バックオフ機能と合わせ、背上げ時の足方向へのズレが抑制され、家族の方の引き上げ介助の負担を軽減します。

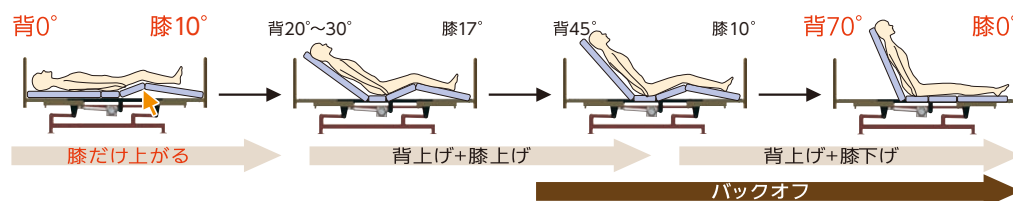

端座位を取り易い膝0度



Point! 背圧を軽減するバックオフ機構

背ボトムを後方に3.5cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、腹部や背中への圧迫感を軽減します。また、特殊な背上げ機能により、通常、腰付近にかかる背圧は、肩付近にかかるように設計され、肩の後ろに手を差し込むだけで除圧できます。

※背圧は自分で体を動かす事ができない人のみ発生します。


対応機種

背1
1+1

背ボトムが3.5cmスライド



仕様

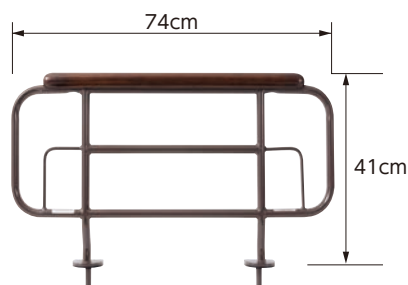


ケアレット・プライム専用
サイドレール(2本組)
PA502-PR741 (2本組)
■メーカー希望小売価格
オープン価格

■JANコード/4539940081702


※ベッド用グリップの装着不可

オプションで
追加購入可能

宮付タイプ

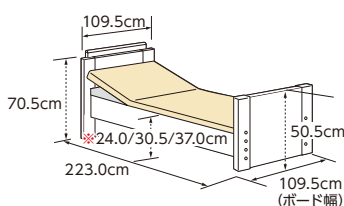

フラットタイプ

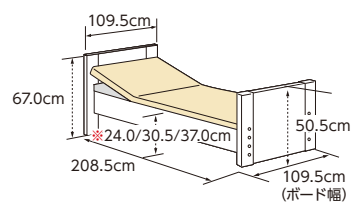

※マットレスを含まないデータです。

		背上げ1モーター	1+1モーター
材質		ベースフレーム部：スチール 木部：MDF、天然木突き板、PU塗装	
床面形状		背上げ角度(0°~70°) 膝上げ角度(0°~17°)	背上げ角度(0°~70°) 膝上げ角度(0°~22°)
電動機能		無段階自在式 背上げ、背膝連動、膝上げ	
床面高		24/30.5/37cmの3段階	
定格消費電力		60W	110W
電源		100V(50/60Hz)	
原産国		本体部：マレーシア、木部：ベトナム	
質量 (サイドレール2本含む)	〈宮付タイプ〉	92.0kg	88.0kg
	〈フラットタイプ〉	75.5kg	71.5kg
梱包		4梱包(マットレス含む)	
最大使用者体重		120kg	

※ベッド用グリップの装着不可

心地良い毎日のために選ぶマットレス ケアレット専用“エクレーブ”シリーズ

2層構造により適度の硬さと低反発のウレタンによる
ソフトな寝心地を追求、体圧分散効果にも優れたマットレスです。

エルダーサポートワイドマットレス

- 普通のウレタンと低反発ウレタンによる、
やや柔らかめのマットレスです。
- 軽量タイプで取り扱いも簡単です。

※外カバーは取り外しできません。

標準タイプ用

PSB-FS(4/4)

■メーカー希望小売価格
オープン価格

■JANコード／4539940060646

■材質／外カバー:ポリエステル 芯地:低反発ウレタン、ウレタン

■寸法／幅97×厚さ13×長さ196cm(ロングは206cm)

■質量／7.8kg(ロングは8.8kg)

※ベッドの床面高さは、37／43.5／50cmとなります。

※「ケアレットシリーズ」のベッド本体と同時購入の際のみ、非課税となります。


ロングタイプ用

PSB-FSL(4/4)

■メーカー希望小売価格
オープン価格

■JANコード／4539940060653

ソフト
4
当社比

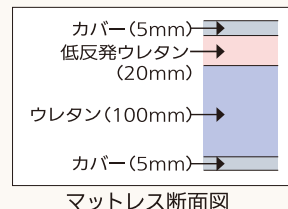

硬質のチップウレタンと2種類のウレタンを使い
「硬さと寝心地」を追求したマットレスです。

硬質ウレタンマットレス

- 普通のウレタンと硬質のチップウレタンの
良さを生かしたやや硬めのマットレスです。
- 外カバーは2つに分かれることで洗濯も
しやすくしました。

標準タイプ用

PSB-FW14(4/4)

■メーカー希望小売価格
オープン価格

■JANコード／4539940060677


■材質／外カバー:ポリエステル 芯地:チップウレタン、ウレタン

■寸法／幅96×厚さ14×長さ196cm

■質量／15.3kg

※ベッドの床面高さは、38／44.5／51cmとなります

※「ケアレットシリーズ」のベッド本体と同時購入の際のみ、非課税となります。

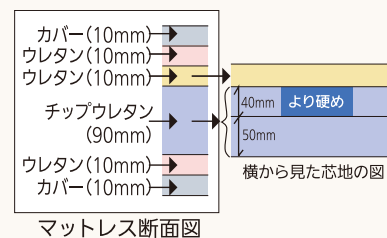

ハード
2
当社比

防臭

防ダニ


抗菌

FOR COMFORTABLE LIFE エクレーブ Mattress series

ポケットコイル、ウレタン、綿という違った素材の特長を生かし、肌触りの良さと幅広い体重に適応した高級タイプのマットレスです。

ポケットコイルマットレス

- ポケットコイルとウレタンの良さを生かし体重30～90kgまで幅広い体重で体圧分散と適度の硬さを維持します。
- 外カバーは2つに分かれることで洗濯もしやすくしました。

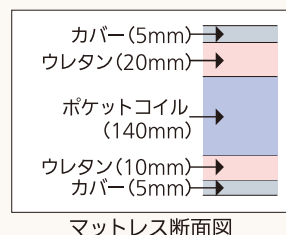

標準タイプ用

PSB-FT18(4/4)

■メーカー希望小売価格
オープン価格

■JANコード/4539940060660

- 材質/外カバー:ポリエステル
芯地:ポケットコイル、ウレタンフォーム、フェルト
- ポケットコイル数/480個、線径:2.00mm
- 寸法/幅96×厚さ18×長さ196cm
- 質量/18kg
- ※ベッドの床面高さは、42/48.5/55cmとなります。

※「ケアレットシリーズ」のベッド本体と同時購入の際のみ、非課税となります。



防臭

防ダニ

抗菌



銀糸入りボックスカバーと通気性の良いベッドパッド

ケアレット専用 銀糸ボックスカバー

- 5mm間隔で銀糸を使用しています。
- 急速速乾作用によりカバーに付着した水分を素早く乾かします。
- ご自宅で洗濯できます。
- 全周ゴム入りで、ズレにくく取り外しも楽です。

※標準マット、ロングマット兼用です。

PCC-96

■メーカー希望小売価格
8,500円(税込)



■材質/ポリエステル、銀糸
■JANコード/4539940081313

銀糸入りラッセルベッドパッド

- 表面カバーには5mm間隔で銀糸を使用。
- ラッセルにより、マットとの間に空気層ができ、夏はムレを防ぎ、冬も暖かい状態になります。
- 吸汗、速乾の生地を採用。
- ご自宅で洗濯できます。

PKM-BP96

■メーカー希望小売価格
14,700円(税込)



■材質/ポリエステル、銀糸
■寸法/幅96×長さ196cm
■JANコード/4539940081467

セット型式組み合わせ表

3点セット:ベッド、サイドレール、マットレス

※価格は全セットオープン価格で、非課税商品です。

非課税

ベッド本体					マットレス		
モデル	モーター	木部	サイズ		エルダーサポート PSB-FS/FSL(4/4)	硬質ウレタン PSB-FW14(4/4)	ポケットコイル PSB-FT18(4/4)
ケアレット	1M	フラット	標準	型式	① PSB-FS1FAWS	② PSB-FS1FA-CS	③ PSB-FS1FA-PS
				JAN	4539940072717	4539940073134	4539940073097
			ロング	型式	④ PSB-FS1FAWLS	—	—
				JAN	4539940072724	—	—
		宮付	標準	型式	⑤ PSB-FS1MAWS	⑥ PSB-FS1MA-CS	⑦ PSB-FS1MA-PS
				JAN	4539940072694	4539940073141	4539940073103
			ロング	型式	⑧ PSB-FS1MAWLS	—	—
				JAN	4539940072700	—	—
	1 + 1M	フラット	標準	型式	⑨ PSB-FS2FAWS	⑩ PSB-FS2FA-CS	⑪ PSB-FS2FA-PS
				JAN	4539940072755	4539940073158	4539940073110
			ロング	型式	⑫ PSB-FS2FAWLS	—	—
				JAN	4539940072762	—	—
		宮付	標準	型式	⑬ PSB-FS2MAWS	⑭ PSB- FS2MA-CS	⑮ PSB-FS2MA-PS
				JAN	4539940072731	4539940073165	4539940073127
			ロング	型式	⑯ PSB-FS2MAWLS	—	—
				JAN	4539940072748	—	—
ケアレット・ネオ	1M	フラット	標準	型式	⑰ PSB-KS1FA-ES	⑱ PSB-KS1FA-CS	⑲ PSB-KS1FA-PS
				JAN	4539940073172	4539940073257	4539940073219
		宮付		型式	⑳ PSB-KS1MA-ES	㉑ PSB-KS1MA-CS	㉒ PSB-KS1MA-PS
				JAN	4539940073189	4539940073264	4539940073226
	1 + 1M	フラット		型式	㉓ PSB-KS2FA-ES	㉔ PSB-KS2FA-CS	㉕ PSB-KS2FA-PS
				JAN	4539940073196	4539940073271	4539940073233
		宮付		型式	㉖ PSB-KS2MA-ES	㉗ PSB-KS2MA-CS	㉘ PSB-KS2MA-PS
				JAN	4539940073202	4539940073288	4539940073240
ケアレット・プライム	1M	フラット	標準	型式	㉙ P102-11AA1ES	㉚ P102-11AA1CS	㉛ P102-11AA1PS
				JAN	4539940073554	4539940073561	4539940073578
		宮付		型式	㉜ P102-11AB1ES	㉝ P102-11AB1CS	㉞ P102-11AB1PS
				JAN	4539940073585	4539940073592	4539940073608
	1 + 1M	フラット		型式	㉟ P102-51AA1ES	㉞ P102-51AA1CS	㉟ P102-51AA1PS
				JAN	4539940073615	4539940073622	4539940073639
		宮付		型式	㊱ P102-51AB1ES	㊱ P102-51AB1CS	㊱ P102-51AB1PS
				JAN	4539940073646	4539940073653	4539940073660

医療介護ベッド





自費レンタルベッドとしても使えるよう 2分割構造にした介護ベッド

〈ベッド用グリップを装着できるベーシックモデル〉



「ニューポイントマットレス」と
「サイドレール BG-75」との組み合わせ例

機能

●背上げ1モーター



自立支援介護用 1モーターベッド

PZB-ES1JFA


■メーカー希望小売価格

120,000円 非課税

■TAISコード/00631-000183

■JANコード/4539940073547

仕様

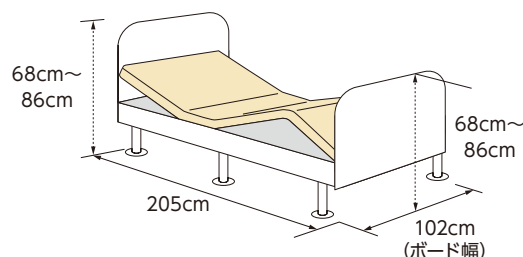

材質	本体部：スチール ヘッド・フットボード部：プリント紙化粧繊維板、PU塗装 サイドパネル：天然木、PU塗装
マットレス適合寸法	幅 88~90cm
定格消費電力	50W
電源	100V(50/60Hz)
原産国	本体：ベトナム／モーター部：ドイツLimoss社中国工場
質量	62.5kg
梱包	3梱包
最大使用者体重	120kg

延長脚の組み合わせ、キャスターと延長脚の組み合わせと床面高さ

(単位：cm)

	標準付属		別売オプション追加時			キャスターと延長脚の組み合わせ					
延長脚	14	14+7	3.5+7	14+3.5	14+14	7	14	14+7	3.5+7	14+3.5	14+14
床面高	24	31	20.5	27.5	38	21	28	35	24.5	31.5	42

※安全のため、プリモレットに装着できる延長脚は2本までとなっております。

特徴

- 背を下げるときは、モーターの力で直接引かない安心のフリーホイール構造 (P7写真参照)
- 床面高さは、20.5～38cmの5段階に調整可能
- ベッド用グリップなど介護用オプションを使用可能
- ワイヤーの装着で背膝連動も可能
- 本体は2分割でき搬入性を考慮
- 通気性に優れたワイヤーメッシュの床面構造



立ち上がりや移乗をサポートする
ベッド用グリップも取付できます。



ベッド用グリップ「ニーパロ」等の装着例

在宅介護用ベッドの
JIS規格
(JIS T 9254:2009)
の認証取得品です



《対象製品》

- | | |
|--------------|--------------|
| ◆ 介護用電動ベッド | 「プリモレット」 |
| ◆ ロングサイドレール | 「BG-96J」 |
| ◆ 標準サイドレール | 「BG-75J」 |
| ◆ ショートサイドレール | 「BG-53J」 |
| | 「PA500-FU44」 |
| ◆ ベッド用グリップ | 「PZR-AT116J」 |

専用オプション



高さ調節用14cm延長脚 (6個組)

PDP-140G (6pcs) ■メーカー希望小売価格
■JANコード/4539940081559 **5,040円(税込)**



高さ調節用7cm延長脚 (6個組)

PDP-70G (6pcs) ■メーカー希望小売価格
■JANコード/4539940081566 **5,040円(税込)**



高さ調節用3.5cm延長脚 (6個組)

PDP-35G (6pcs) ■メーカー希望小売価格
■JANコード/4539940081573 **5,040円(税込)**

ベッド移動の方におすすめの 専用キャスター



ロックタイプ×2個
フリータイプ×4個

プリモレット専用キャスター (6個組)

PPL-8CK6S (6pcs)

■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000160
25,200円(税込) ■JANコード/4539940081474

※ベッドと同時購入の場合、全て課税となります。

▶ その他オプションはP40～P44をご覧ください。

※このベッドに装着できるオーバーテーブルはご用意しておりません。

MioLet

ミオレット

12
種類の
組合せ



フィッティングで好評の「ミオレット」
3モーター、2モーター、背上げ1モーター
昇降1モーター仕様の4タイプをラインナップ

Mioletとは？

イタリア語で「私のベッド=Mio letto」という言葉を短縮した造語です。



フラットタイプ

「ニューポイントマットレス」との組み合わせ例

機能

背上げ1モーターベッド



レギュラータイプ

PZB-M1RJB

ショートタイプ

PZB-M1SJB

宮付タイプ

PZB-M1RJB/M



昇降1モーターベッド



レギュラータイプ

PZB-M1RJH

ショートタイプ

PZB-M1SJH

宮付タイプ

PZB-M1RJH/M



2モーターベッド



レギュラータイプ

PZB-M2RJ

ショートタイプ

PZB-M2SJ

宮付タイプ

PZB-M2RJ/M



3モーターベッド



レギュラータイプ

PZB-M3RJ

ショートタイプ

PZB-M3SJ

宮付タイプ

PZB-M3RJ/M



デザイン

●フラットタイプ



伝い歩きを考慮したボード形状。住環境により、頭側・脚側のヘッド・フットボードを逆に取り付けることもできます。


●宮付タイプ



「メガネやティッシュケースなどの小物を置きたい!」というお客様の声を実現! 枕元にお薬やメガネなどを置くと、背上げした際に転げ落ちることがあり、これを防ぐことができます。

特徴

- 低介護者を対象にした背上げ1モーターベッド「PZB-M1RJB」や昇降1モーターベッド「PZB-M1RJH」は、介護度に合わせ、2モーター、3モータータイプにアップグレードが可能です。
- ショートタイプも背上げ1モーターから3モーターまで対応しています。全長は195cmで狭い部屋にも対応。

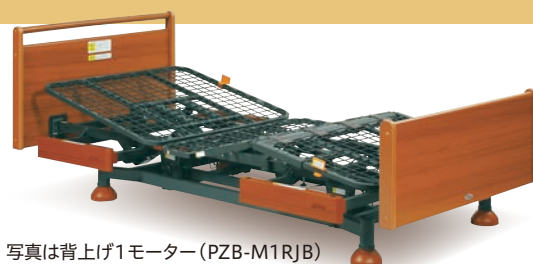

写真は背上げ1モーター (PZB-M1RJB)

- 在宅介護用ベッドのJIS規格 (JIS T 9254:2009) の認証取得品。

《対象製品》

- ◆介護用電動ベッド 「ミオレット」
- ◆ロングサイドレール 「BG-96J」
- ◆標準サイドレール 「BG-75J」
- ◆ショートサイドレール 「BG-53J」
- ◆PA500-FU44
- ◆ベッド用グリップ 「PZR-116J」
- ◆PZR-AT116J



組み合わせ例



専用オプション



装着拡大写真

Miolet専用 キャスター (4個組)

M2RJ-8CKS

- メーカー希望小売価格
17,850円(税込)
- TAISコード/00631-000154
- JANコード/4539940081436
- 材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂
- 装着時床面高/29~63cm
(ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個の4個組)



装着拡大写真

Miolet専用 ハイトスペーサー (4個組)

M2RJ-H35-A

- メーカー希望小売価格
6,300円(税込)
- TAISコード/00631-000157
- JANコード/4539940081443
- 材質/ポリプロピレン
- 装着時床面高/28.5~62.5cm
- ※Mioletシリーズにベッドテーブルをご使用の際は当該商品が必要となります。



ストッパー付 ストッパー無し

Miolet背上げ1モーター専用 キャスター (4個組)

M1RJB-8CKS

- メーカー希望小売価格
16,800円(税込)
- TAISコード/00631-000158
- JANコード/4539940081450
- 材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール
- 寸法/直径7.5cm
- 仕様/対角ストッパー、ダブルロック
- 装着時床面高/33.0/36.5/40.0/43.5cm
(ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個の4個組)



写真は7cm
延長脚です

Miolet背上げ1モーター専用 延長脚

- メーカー希望小売価格
(全サイズ)**3,465円(税込)**

高さ調節用14cm延長脚 (4個組)

PDP-140G

- JANコード/4539940081368

高さ調節用7cm延長脚 (4個組)

PDP-70G

- JANコード/4539940081375

高さ調節用3.5cm延長脚 (4個組)

PDP-35G



- JANコード/4539940081382

▶ その他オプションはP40~P44をご覧ください。

Point! 利用者の膝の位置に合わせ 曲がる位置を調節できるフィッティング機構

対応機種 背1 モデル 2 モデル 3 モデル


膝の位置とベッドの曲がる位置とが合っていないと背上げ時にお尻がずれてしまいます。ミオレットは利用者的大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしで脚ボトムの屈曲位置を調節できます。

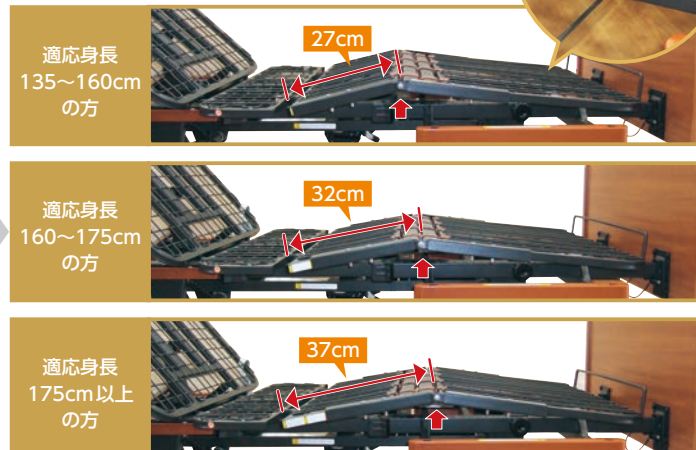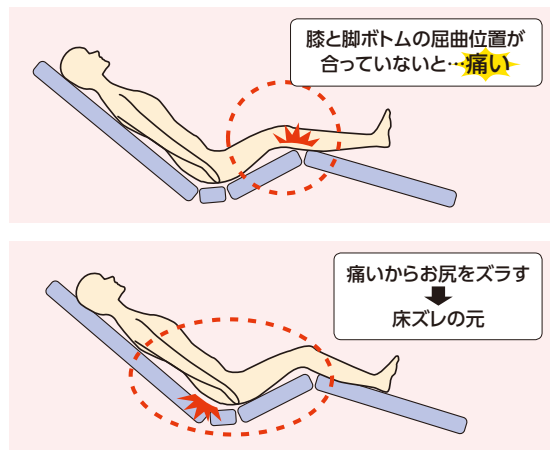

Point! 1ボタン操作のライジングモーション機構

対応機種 背1 モデル 2 モデル

背上げボタンを押し続けるだけの簡単操作で図のように、膝上げから始まる理想の背上げ動作を実現しました。どの角度においても背と膝の角度は100度以上を確保する設計により、腹部圧迫の心配がありません! バックオフ機構と合わせ、背上げ時の足方向へのズレが抑制され、家族の方の引き上げ介助の負担を軽減します。

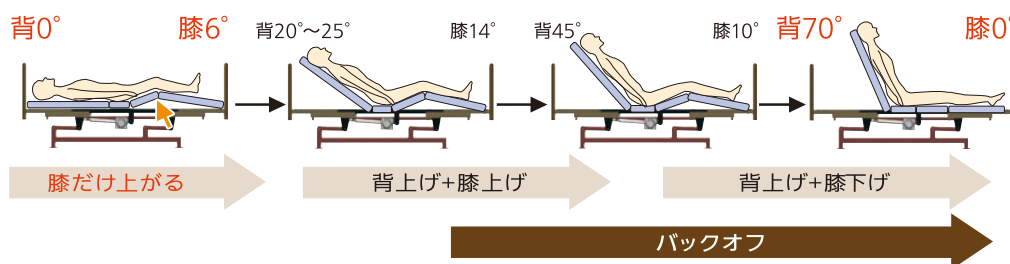


端座位を取り易い膝0度



Point! 背圧を軽減するバックオフ機構


対応機種 背1 モデル 2 モデル 3 モデル

背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、腹部や背中の圧迫感を軽減します。また、特殊な背上げ機能により、通常、腰付近にもかかる背圧は、肩付近にかかるように設計され、肩の後ろに手を差し込むだけで除圧できます。

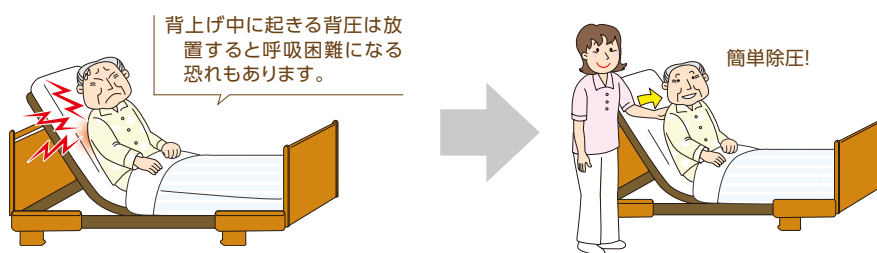

※背圧は自分で体を動かす事ができない人のみ発生します。


背ボトムが4cmスライド

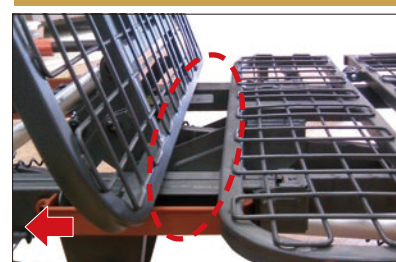


仕様

背上げ1モーター

- レギュラータイプ
- ショートタイプ

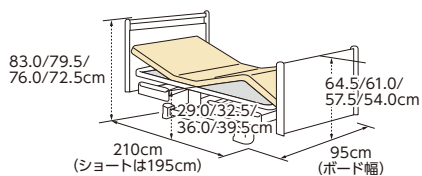

- 宮付タイプ

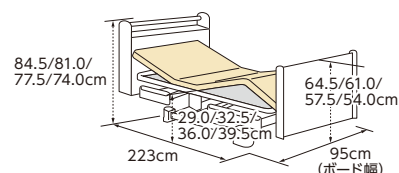

※昇降時はスイングしながら昇降する為、全長プラス10cmのスペースが必要です。(P25参照)

材質	本体部：スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード：プリント紙化粧板、天然木、PU塗装			
床面高	29/32.5/36.0/39.5cmの4段階に設定可能(組立時) 標準で3.5/7cmの高さ延長脚が付属 専用キャスター(M1RJ-8CK)装着時：+4cm			

標準付属延長脚の組み合わせと床面高さ (単位：cm)

延長脚	無し	3.5	7	3.5+7
床面高さ	29	32.5	36	39.5


オプション延長脚との組み合わせと床面高さ (単位：cm)

延長脚	14	3.5+14	7+14	14+14
床面高さ	43	46.5	50	57


マットレス適合寸法	幅88～91cm		
定格消費電力	70W	電源	100V
原産国	ベトナム／モーター部：ドイツLimoss社中国工場		
質量	(フラットタイプ)84.5kg/ (フラットショートタイプ)83.5kg/(宮付タイプ)90.0kg		
梱包	5梱包	最大使用者体重	120kg

昇降1モーター／2モーター／3モーター

- レギュラータイプ
- ショートタイプ

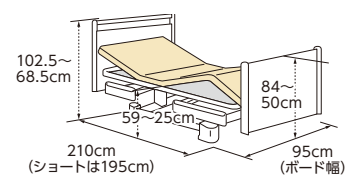

- 宮付タイプ

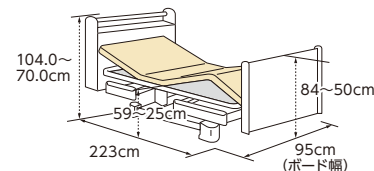

※昇降1モーターは、イラストの様な背・膝のリクライニングはできません。

材質	本体部：スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード：プリント紙化粧板、天然木、PU塗装		
床面高	25〜59cm／専用キャスター(M2RJ-8CK)装着時：+4cm		
マットレス適合寸法	幅88〜91cm		
定格消費電力	120W	電源	100V
原産国	ベトナム／モーター部：ドイツLimoss社中国工場		
質量	(昇降1モーター：フラットタイプ)86.0kg (昇降1モーター：宮付タイプ)91.5kg (2モーター：フラットタイプ)89.5kg (2モーター：宮付タイプ)95.5kg (3モーター：フラットタイプ)91.5kg (3モーター：宮付タイプ)97.0kg ※ショートタイプは上記質量から1.0kg軽くなります。		
梱包	5梱包	最大使用者体重	120kg

背上げ1モーターベッド

背1
モーター

- レギュラータイプ

PZB-M1RJB

■TAISコード／00631-000138

- メーカー希望小売価格

オープン価格 (非課税)

■JANコード／4539940072953

- ショートタイプ

PZB-M1SJB

■TAISコード／00631-000174

- メーカー希望小売価格

オープン価格 (非課税)

■JANコード／4539940073332

- 宮付タイプ

PZB-M1RJB/M

■TAISコード／00631-000139

- メーカー希望小売価格

オープン価格 (非課税)

■JANコード／4539940072960

昇降1モーターベッド

昇1
モーター

- レギュラータイプ

PZB-M1RJH

■TAISコード／00631-000136

- メーカー希望小売価格

オープン価格

■JANコード／4539940072939

- ショートタイプ

PZB-M1SJH

■TAISコード／00631-000173

- メーカー希望小売価格

オープン価格

■JANコード／4539940073325

- 宮付タイプ

PZB-M1RJH/M

■TAISコード／00631-000137

- メーカー希望小売価格

オープン価格

■JANコード／4539940072946

2モーターベッド

2
モーター

- レギュラータイプ

PZB-M2RJ

■TAISコード／00631-000140

- メーカー希望小売価格

オープン価格 (非課税)

■JANコード／4539940072977

- ショートタイプ

PZB-M2SJ

■TAISコード／00631-000175

- メーカー希望小売価格

オープン価格 (非課税)

■JANコード／4539940073349

- 宮付タイプ

PZB-M2RJ/M

■TAISコード／00631-000141

- メーカー希望小売価格

オープン価格 (非課税)

■JANコード／4539940072984

3モーターベッド

3
モーター

- レギュラータイプ

PZB-M3RJ

■TAISコード／00631-000142

- メーカー希望小売価格

オープン価格 (非課税)

■JANコード／4539940072991

- ショートタイプ

PZB-M3SJ

■TAISコード／00631-000176

- メーカー希望小売価格

オープン価格 (非課税)

■JANコード／4539940073356

- 宮付タイプ

PZB-M3RJ/M

■TAISコード／00631-000143

- メーカー希望小売価格

オープン価格 (非課税)

■JANコード／4539940073004



18
種類の
組合せ



新商品

ForUとは？

- ・User = 利用者 / 介助者 / 顧客 / 組立サービス
 - ・Universal = ユニバーサルデザイン
 - ・Ultimate = 究極の
 - ・Usability = 操作性・使いやすさ
- という4つのUを合わせた造語です。

次世代のスタンダードを目指した 新しい介護ベッドの誕生、ミオレット・フォーユー 〈特許出願済〉



樹脂ボードタイプ

P100-21BD2

「サンキューポイントマットレス」とのセット例

機能面 医学面



佐賀大学
医学部准教授
地域医療科学教育研究センター
福祉健康科学部門
松尾 清美

産学連携によって 研究開発された ユニバーサルを 極めた介護ベッド

宮崎大学工学部卒。
大学在学中に交通事故により車いす生活となる。
多くの福祉機器メーカーとの研究開発をおこなう
と共に、身体に障害をお持ちの方々の住環境設計
と生活行動支援を1600件以上実施。

福祉住環境コーディネーター協会理事、日本障
害者スポーツ学会理事、日本リハビリテーション
工学協会車いすSIG代表

デザイン面



九州産業大学
芸術学部デザイン学科
教授 / 博士(芸術工学)
青木 幹太

九州芸術工科大学卒
研究テーマ: ユニバーサルデザイン
ユーザビリティデザインの観点から、国内の電気
メーカーやリハビリ機器メーカー、博多織のバツ
クデザインなど多くのジャンルの製品デザインを
手がける。

特徴

●医学的配慮

5つの機構により、背上げ時に発生する「背圧・腹圧・ズレ」の低減・緩和を目指しました。

●安全性への配慮

JIS規格は勿論、様々な事故事例、ヒヤリハットを参考に0から設計を見直しました。

●操作性への配慮

片麻痺の方など障害をお持ちの方に配慮した手元スイッチ、伝い歩きを考慮したボード形状を目指しました。

●組立設置アフターサービスへの配慮

レンタルベッドとして求められる、組立設置、アフターサービスのしやすさを追及しました。



木製フラットボードタイプ

P100-21AA1

「サンキューポイントマットレス」とのセット例




木製宮付ボードタイプ

P100-21AB1

「サンキューポイントマットレス」とのセット例


背上げ時に発生する「背圧・腹圧・ズレ」に配慮した 5モーション機構

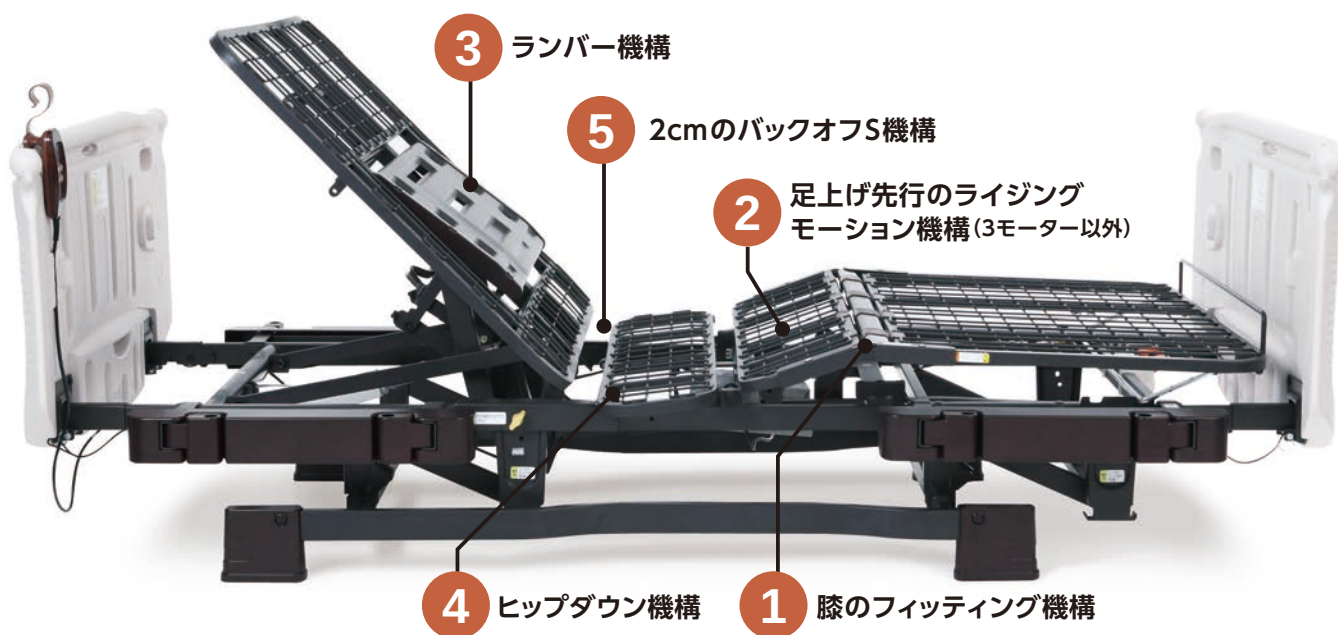

1 利用者の膝の位置に合わせ、曲がる位置を調節できる 2段階フィッティング機構

対応機種
時1 2 3
モーター モーター モーター

膝の位置とベッドの曲がる位置とが合っていないと背上げ時にお尻がずれてしまいます。ミオレット・フォーユーは利用者的大腿部の長さに合わせて、パーツの変更なしで脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できます。

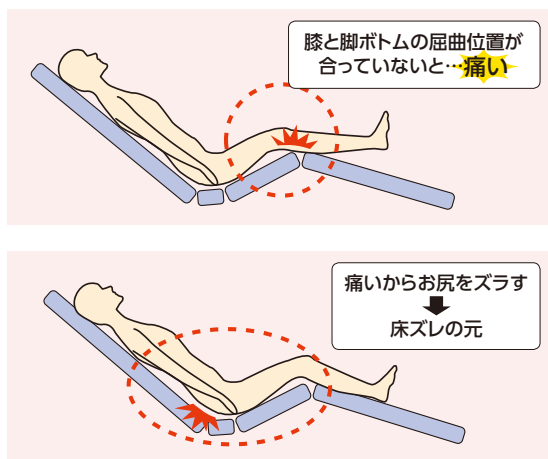


※膝上げ単独の切り替えもワンタッチで可能です。

対応
機種背1
機能2
機能

2 1ボタン操作のライジングモーション機構

背上げボタンを押すと、自動的に膝から上がり、その後、背が上がりだす「ライジングモーション」。これにより、足方向へのズレを抑制します。端座位をとりやすくなります。

※ON/OFF切替可能

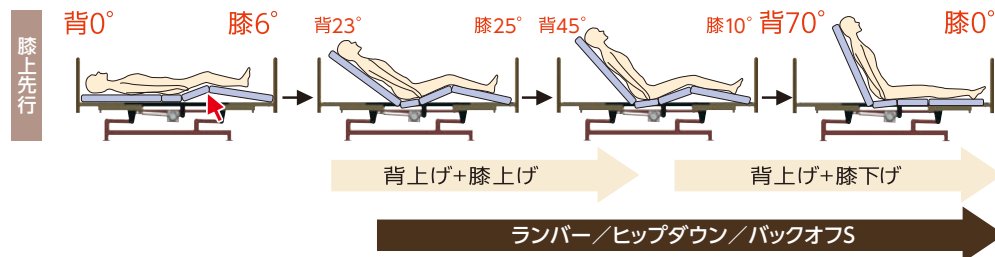

端座位を取りやすい膝0度




3 背上げ時に腰部を押して呼吸を楽にしてくれるランバー機構

対応
機種背1
機能2
機能3
機能

背圧軽減に向け、背上げ時は「背抜き機構」、背下げ時は「牽引感(背が引っ張られる感覚)軽減」をランバーの動きで実現。ランバー機構を使うと、背上げて起きた時に感じる痛みや圧迫が少ないため、より楽に過ごせます。

※ON/OFF切替可能

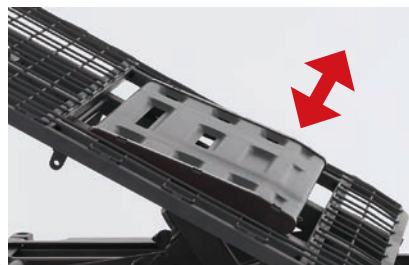

4 ヒップダウン機構

対応
機種背1
機能2
機能3
機能


背上げと同時に、自動的に臀部のボトムが傾斜します。これにより、骨盤を起こす効果とズレを抑制します。



5 バックオフS機構

対応
機種背1
機能2
機能3
機能

背ボトムを後方に2cmスライドしながら、ボトムが上がる機構で、腹部や背中中の圧迫感を軽減します。また、通常、腰付近にもかかる背圧は、肩付近に軽くなるように設計され、肩の後ろに手を差し込むだけで除圧できます。

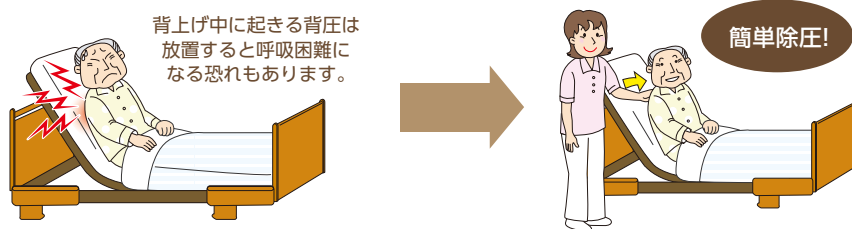

※背圧は自分で体を動かす事ができない人のみ発生します。

背ボトムが2cmスライド



Point!

足のむくみを軽減させる足先上げか、
足先下げを簡単に選ぶことができます。


対応
機種

背1
モーター



2
モーター

3
モーター

足先上げ

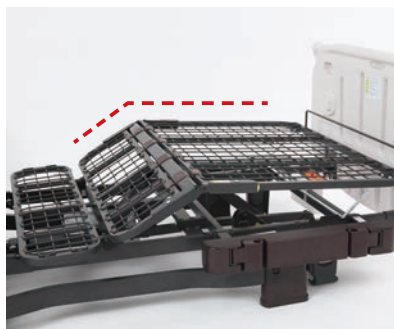


足先下げ

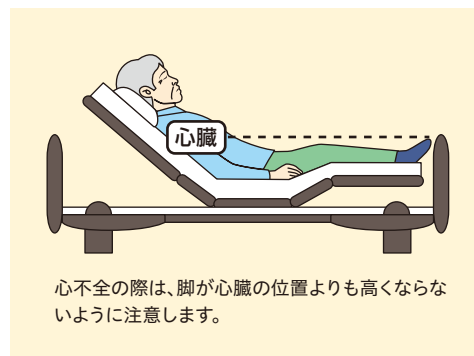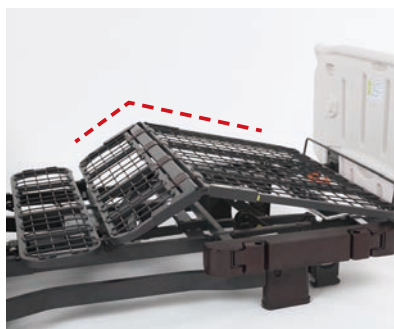


ひとくちメモ

一般的に、立った状態から寝た状態になると内臓が横に広がり、横隔膜を押し、肺の容積が小さくなります。結果、呼吸器に病気のある方は息苦しくなることがあります。背上げ機能を使うことで、内臓が下に下がりこの症状を緩和します。

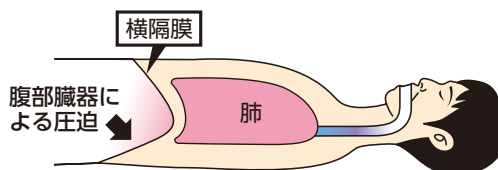

Point!**25～63cmまで昇降する
介助者にもやさしい昇降機構**

足方向へ8cmスイングしながら昇降しますが、25cmの最低床面高さで63cmの最高床面高さでヘッドボードは同じ位置になります。よってヘッドボード側は壁に近づけての設置が可能となります。

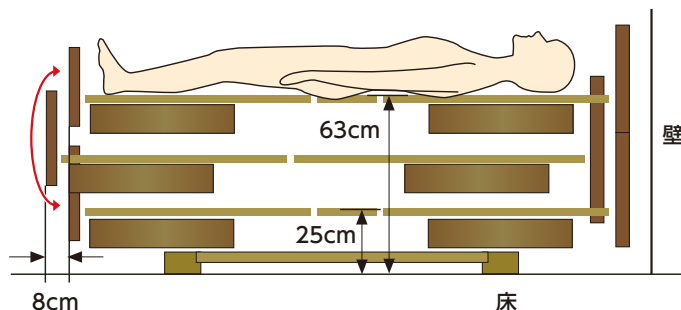

対応機種

2

3

新搭載の手動昇降システム(背上げ1モーター専用)

ハンドルを回す事で、床面高さを25～40cmの間で調整可能です。



対応機種

背1


Point!**使用される方の身長やお部屋の大きさに合わせ、
レギュラーサイズとショートサイズをご用意しました。**

背ボトム・脚ボトムのための購入で、全長サイズをレギュラーサイズからショートサイズへ切替が可能。

ボードの違いによる本体サイズ

(単位:cm)

ボードタイプ	レギュラーサイズ	ショートサイズ
樹脂フラットタイプ	212.0	197.0
木製フラットタイプ	209.0	194.0
木製宮付タイプ	224.5	209.5

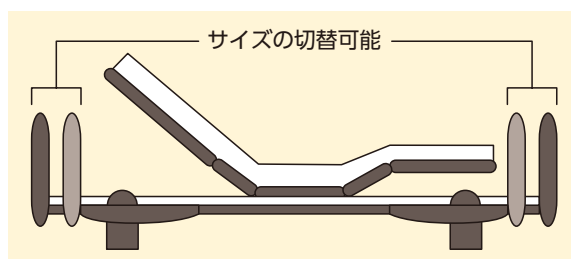

対応機種

背1

2

3

**Point! 車椅子との移乗もすき間がなく
安心な収納式レールホルダー**

対応機種

背1

2

3



レールホルダーが収納できると、車椅子をベッドに密着させることが可能になり、移乗が非常に楽に行えます。

利用者・介助者にやさしいユニバーサルデザインの ボードをご用意しました。

樹脂ボード



サイドレールとボードの高さが同じで
伝い歩きする時も安全です。

Point!

- 終端がわかりやすい
球状デザイン



- 背の角度の目安となる
便利なマーク表示



- ボード中央部を認識できる
凸凹加工



- コードを
ぴったり収納
不用意に手元スイッチが
落ちるのを防ぎます。




ユニバーサルデザインとは？

高齢であることや障害の有無などにかかわらず、すべての人が快適に利用できるように製品や建造物、生活空間などをデザインすること。

木製ボード**Point!****フラットタイプ****宮付タイプ****シックハウス対策済みのEBコーティング**

擦り傷、汚れ、日光に強く、シックハウス対策済みのEBコーティングを施しています。

※「建材からのVOC放散速度基準(2008/4/1 制定)」に適合

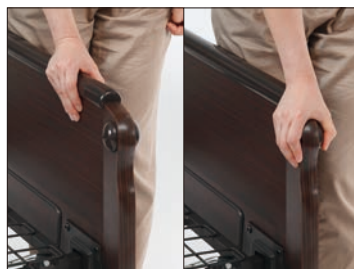伝い歩きの際に握りやすく終端がわかりやすい球状デザイン**宮付タイプはティッシュやメガネなど小物を置くのに便利**

持ちやすく使いやすいユニバーサルデザインに基づく ニューデザインの手元スイッチ



暗い所でも明るい
PLATZマーク
(蓄光塗料入り)

誤作動を防ぐ
防水加工 (IP×4)



動作時にLEDが点灯し
夜でも操作しやすい

動作別に色分けした
カラーラインですっきり
見やすい操作盤

夜間や視力の弱い方でも
わかりやすい感触でわかる凹凸ボタン



ボタン部分

Point!



握力が少ない場合もしっかり操作できる ダブル・ホールドマウント

片手で持つことが可能で、片手操作、両手操作と様々な
使い方に対応できます。



Point!

サイドレールやボードからの落下を考慮し、 掛けやすい形状を追求しました。

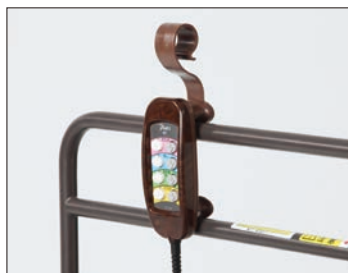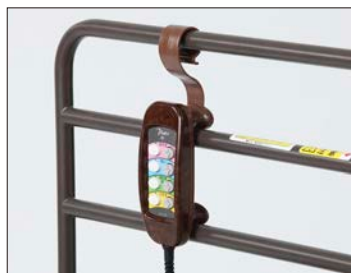

樹脂ボードにも
ちょい掛け可能!



引っ掛かりのないスムーズな
スライド(フックの取り外し可能)

機能

背上げ1モーターベッド

レギュラータイプ

●樹脂タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-11BD2 オープン価格 (非課税)
 ■JANコード/4539940073691 ■TAISコード/00631-000186

●木製フラットタイプ ■メーカー希望小売価格
P100-11AA1 オープン価格 (非課税)
 ■JANコード/4539940073677 ■TAISコード/00631-000184

●木製宮付タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-11AB1 オープン価格 (非課税)
 ■JANコード/4539940073684 ■TAISコード/00631-000185

ショートタイプ

●樹脂タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-12BD2 オープン価格 (非課税)
 ■JANコード/4539940073721 ■TAISコード/00631-000189

●木製フラットタイプ ■メーカー希望小売価格
P100-12AA1 オープン価格 (非課税)
 ■JANコード/4539940073707 ■TAISコード/00631-000187

●木製宮付タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-12AB1 オープン価格 (非課税)
 ■JANコード/4539940073714 ■TAISコード/00631-000188



背上げ70° 背誂運動70°/25° 高さ調節(手動)



※手動によるベッドの昇降が可能です。

2モーターベッド

レギュラータイプ

●樹脂タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-21BD2 オープン価格 (非課税)
 ■JANコード/4539940073752 ■TAISコード/00631-000192

●木製フラットタイプ ■メーカー希望小売価格
P100-21AA1 オープン価格 (非課税)
 ■JANコード/4539940073738 ■TAISコード/00631-000190

●木製宮付タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-21AB1 オープン価格 (非課税)
 ■JANコード/4539940073745 ■TAISコード/00631-000191

ショートタイプ

●樹脂タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-22BD2 オープン価格 (非課税)
 ■JANコード/4539940073783 ■TAISコード/00631-000195

●木製フラットタイプ ■メーカー希望小売価格
P100-22AA1 オープン価格 (非課税)
 ■JANコード/4539940073769 ■TAISコード/00631-000193

●木製宮付タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-22AB1 オープン価格 (非課税)
 ■JANコード/4539940073776 ■TAISコード/00631-000194



背上げ70° 背誂運動70°/25° 高さ調節



3モーターベッド

レギュラータイプ

●樹脂タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-31BD2 オープン価格 (非課税)
 ■JANコード/4539940073813 ■TAISコード/00631-000198

●木製フラットタイプ ■メーカー希望小売価格
P100-31AA1 オープン価格 (非課税)
 ■JANコード/4539940073790 ■TAISコード/00631-000196

●木製宮付タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-31AB1 オープン価格 (非課税)
 ■JANコード/4539940073806 ■TAISコード/00631-000197

ショートタイプ

●樹脂タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-32BD2 オープン価格 (非課税)
 ■JANコード/4539940073844 ■TAISコード/00631-000201

●木製フラットタイプ ■メーカー希望小売価格
P100-32AA1 オープン価格 (非課税)
 ■JANコード/4539940073820 ■TAISコード/00631-000199

●木製宮付タイプ ■メーカー希望小売価格
P100-32AB1 オープン価格 (非課税)
 ■JANコード/4539940073837 ■TAISコード/00631-000200



背上げ70° 背誂運動70°/18° 膝上げ18° 高さ調節



静音性・防水性にも優れた デンマーク LINAK 社製モーターを搭載

静音製・防水性(IP×4)に優れたデンマークのLINAK社製モーターを搭載。さらにお手入れがしやすくなりました。また、深夜でも気兼ねなくベッド操作が可能です。


※IP×4とは、全方向からの噴霧に対応した防水規格です。




仕様

背上げ1モーター

●樹脂タイプ

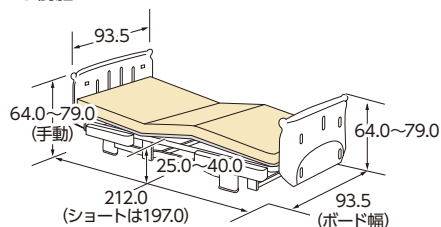


●木製フラットタイプ

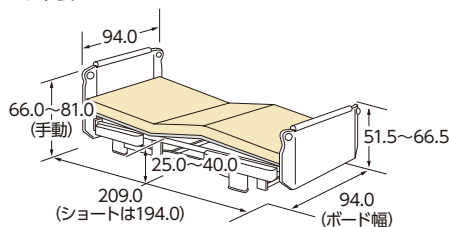


●木製宮付タイプ

(単位:cm)

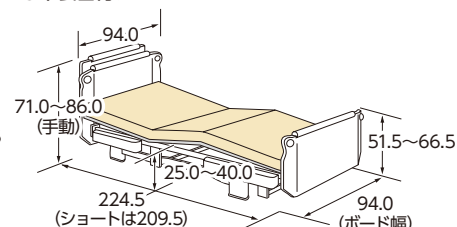


2モーター／3モーター

●樹脂タイプ

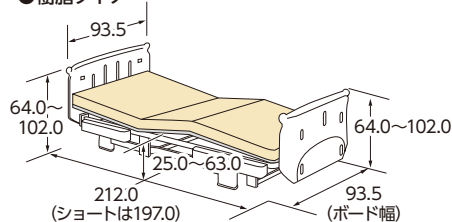


●木製フラットタイプ

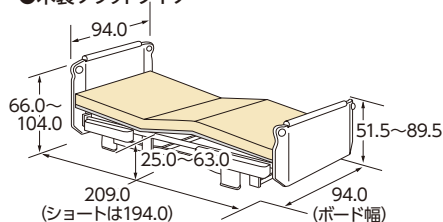

●木製宮付タイプ

(単位:cm)

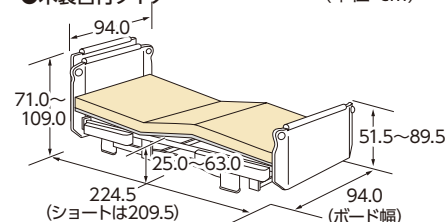

			背上げ1モーター	2モーター	3モーター
材質			本体ユニット：スチール、ABS樹脂／樹脂ボード：PE／木ボード：MDFオレフィン化粧合板、天然木		
床面高			25.0～40.0cm(手動)	25.0～63.0cm	
定格消費電力			50W	100W	100W
電源			100V(50/60Hz)		
原産国			ベトナム		
質量	樹脂タイプ	レギュラーサイズ	92.0kg	93.5kg	97.0kg
		ショートサイズ	90.5kg	92.0kg	95.5kg
	フラット木タイプ	レギュラーサイズ	97.5kg	99.0kg	102.5kg
		ショートサイズ	96.0kg	97.5kg	101.0kg
	宮付木タイプ	レギュラーサイズ	104.0kg	105.5kg	109.0kg
		ショートサイズ	102.5kg	104.0kg	107.5kg
梱包			6梱包		
最大使用者体重			120kg／最大使用荷重：1700N		

専用オプション



装着イメージ

ミオレット・フォーユー専用
45mmハイトスペーサー

PC501-FU45

■メーカー希望小売価格

6,300円(税込)

■TAISコード／00631-000205

※固定脚仕様でベッドテーブルをご使用の際は、当該商品が必要となります。



装着イメージ

ミオレット・フォーユー専用
キャスター

PC500-FU8CKS

■メーカー希望小売価格

17,850円(税込)

■TAISコード／00631-000206

※キャスター仕様ではベッドテーブルは使用しないでください。

※床面高さは変更ありません。



▶ その他オプションはP40～P44をご覧ください。


レール周りの隙間と事故事例

在宅介護用ベッドの JIS規格での隙間の基準 (抜粋)

事故が多いレール周りの隙間について、JIS規格 (JIS T 9254) では下記に規定された。

- ① レール周りのAにおいて直径6cmの円柱形の物を50N (約5.1kg) で押さえても図2の様にレールの下に行かないこと。もしくは23.5cm以上の隙間があること。
- ② レール周りのBにおいて図3の様な円錐形の物を50N (約5.1kg) で押しても通過しないこと。
- ③ レール周りのCにおいて図3の様な円錐形の物を力を加えずに差し込み通過しないこと。

JISマーク表示製品であっても、利用者の方の使用方法・身体状況の変化など、様々な要因で事故が起こる可能性があります。ご使用の際は、取扱説明書などの記載事項を守り、十分に注意を払う必要があります。

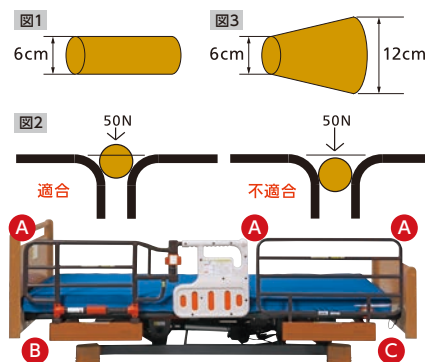

ミオレットレギュラーサイズとベッド用グリップ、サイドレールの組み合わせ時の隙間

(頭側)	PZR-AT116J	BG-75J	(脚側)
プリモレット	2.5cm	3.5cm	2.0cm
ミオレット	2.0cm	3.5cm	2.0cm
ミオレットフォーユー	3.0cm	3.5cm	3.0cm

※ミオレットショートタイプの場合、レール類とボードの隙間は約5mmです。
※ミオレットショートタイプはBG-53Jを使用できません。
※ミオレット・フォーユーはBG-53Jを使用できません。
※PA500-FU44との組み合わせの値です。

(頭側)	PZR-AT116J	BG-53J/PA500-FU44	(脚側)
プリモレット	2.5cm	25.5cm	1.5cm
ミオレット	2.0cm	25.5cm	2.0cm
ミオレットフォーユー	3.0cm	34.5cm	*3.0cm

(頭側)	PZR-AT116J	BG-53J/PA500-FU44	(脚側)
プリモレット	2.5cm	3.5cm	23.5cm
ミオレット	2.0cm	3.5cm	24.0cm
ミオレットフォーユー	3.0cm	3.5cm	*32.5cm

ロングサイドレールBG-96Jと他のサイドレールを組み合わせる際の隙間

(頭側)	BG-96J	BG-53J/PA500-FU44	(脚側)
プリモレット	2.0cm	46.0cm	1.5cm
ミオレット	2.0cm	46.0cm	2.0cm
ミオレットフォーユー	3.0cm	55.0cm	*3.0cm

(頭側)	BG-96J	BG-53J/PA500-FU44	(脚側)
プリモレット	1.5cm	24.0cm	23.5cm
ミオレット	2.0cm	24.0cm	24.0cm
ミオレットフォーユー	3.0cm	24.0cm	*32.5cm

(頭側)	BG-96J	BG-96J	(脚側)
プリモレット	1.5cm	2.5cm	1.5cm
ミオレット	2.0cm	3.0cm	2.0cm
ミオレットフォーユー	3.0cm	3.0cm	3.0cm

(頭側)	BG-96J	BG-75J	(脚側)
プリモレット	2.0cm	24.0cm	2.0cm
ミオレット	2.0cm	24.0cm	2.0cm
ミオレットフォーユー	3.0cm	24.0cm	3.0cm

標準サイドレールBG-75Jと他のサイドレールを組み合わせる際の隙間

(頭側)	BG-75J	BG-75J	(脚側)
プリモレット	2.0cm	45.0cm	2.0cm
ミオレット	2.0cm	45.0cm	2.0cm
ミオレットフォーユー	3.0cm	45.0cm	3.0cm

(頭側)	BG-75J	BG-53J/PA500-FU44	(脚側)
プリモレット	2.0cm	67.0cm	1.5cm
ミオレット	2.0cm	67.0cm	2.0cm
ミオレットフォーユー	3.0cm	76.0cm	*3.0cm


(頭側)	BG-75J	BG-53J/PA500-FU44	(脚側)
プリモレット	2.0cm	45.0cm	23.5cm
ミオレット	2.0cm	45.0cm	24.0cm
ミオレットフォーユー	3.0cm	45.0cm	*32.5cm

事故事例

レールとレールの間に
首が挟まれた事故



レールとレールに体が
挟まれた事故

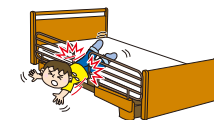

ベッド用グリップの
ロック忘れによる転倒



背上げ時にレールと
マットの間に挟まれた事故



ベッド用グリップやレールと
マットの間に挟まれた事故



ベッド用グリップやレールの
突起に衣服が絡みついた事故



取扱説明書をよく読み、有効性と危険性を認識し、正しく使うことが危険を回避する一番の近道です!

Ultilet

アルティレット

12
種類の
組合せ

在宅介護ベッド「ミオレット」や介護予防機器
「レスリハシリーズ」での経験を生かした
低床型電動ベッドです。

Ultiletとは？

「Ultimate(アルティメット=英語で究極)」
と「Letto(レット=イタリア語でベッド)」と
いう言葉を組み合わせた造語です。



写真は3モーター用



ダークブラウン

Point! 利用者の膝の位置に合わせ 曲がる位置を調節できるフィッティング機構

対応機種 背1 モーター 2 モーター 3 モーター

膝の位置とベッドの曲がる位置とが合っていないとお尻がズれてしまいます。アルティレットは利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしで脚ボトムの屈曲位置を調節できます。

ピンを外して
左右にずらすだけの
簡単調整!

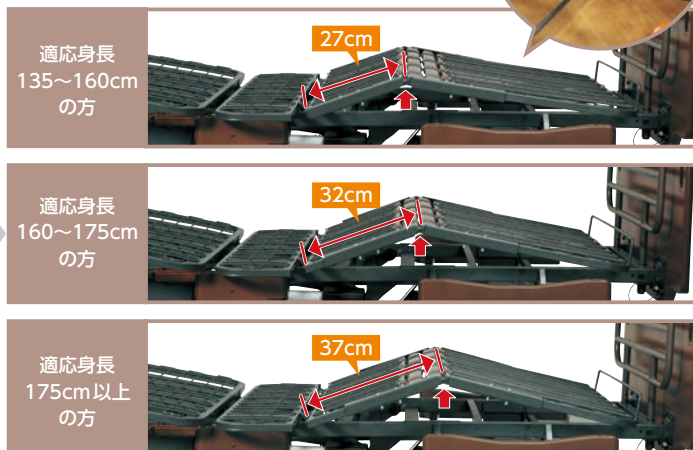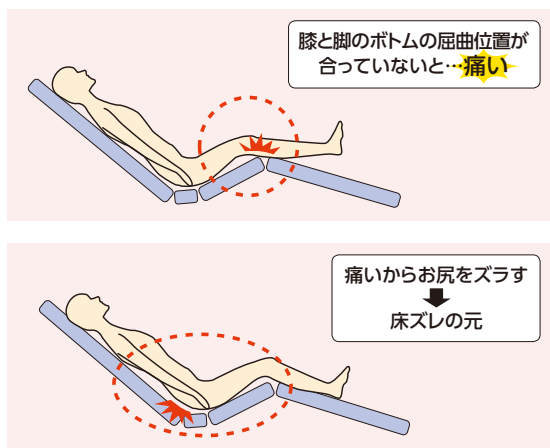

特徴



固定脚仕様



ライトブラウン


周辺機器との組み合わせ例

Point! 1ボタン操作のライジングモーション機構

背上げボタンを押し続けるだけの簡単操作で図のように動作し、
膝角度の動きは下図のように2種類に設定できます。

対応
機種背1
モード背2
モード

背・膝同時動作

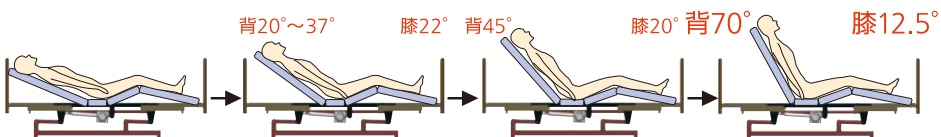

どの角度においても背と膝の角度は100度以上を確保。腹部圧迫を軽減します。

膝上先行



背上げ+膝上げ

背上げ+膝下げ

バックオフ

ズレ難い膝上げ保持

どちらでも設定可能

端座位を取り易い膝0度




アルティレットは 「介護を受けられる方・される方」の 究極のご満足を目指したベッドです。

Point! 背圧を軽減するバックオフ機構

背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、腹部や背中中の圧迫感を軽減します。

また、特殊な背上げ機能により、通常、腰付近にもかかる背圧は、肩付近にかかるように設計され、肩の後ろに手を差し込むだけで除圧できます。

※背圧は自分で体を動かす事ができない人のみ発生します。

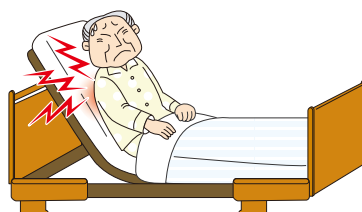


対応機種

背1
モーター

2
モーター


3
モーター

背ボトムが4cmスライド

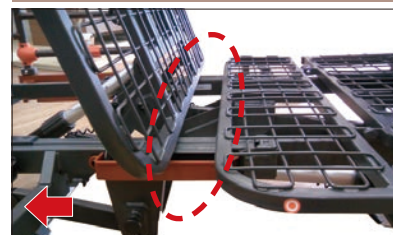

Point! 隙間事故に配慮した安全の隙間設計

事故が起きにくい安心の隙間設計です。

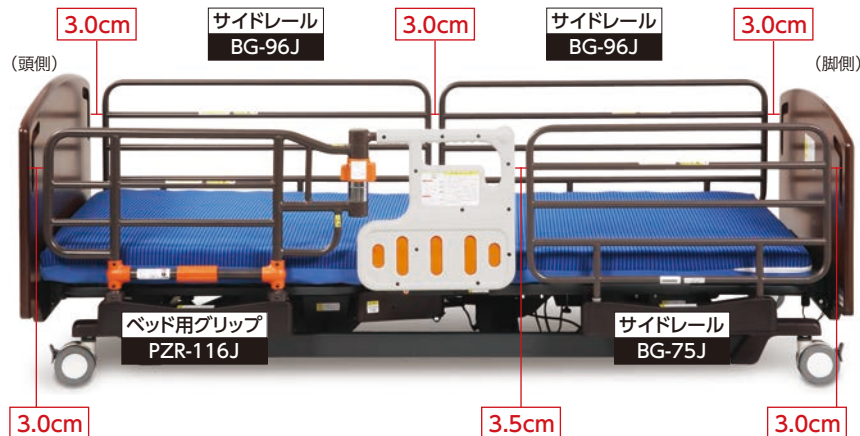


対応機種

背1
モーター

2
モーター

3
モーター

スイング式レールホルダー

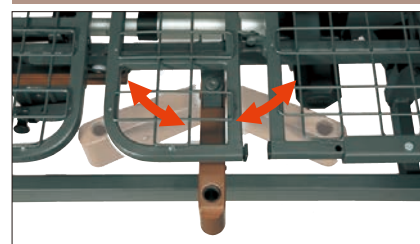

収納を忘れた場合でも左右に動くため、足をぶつけてもケガをしにくい設計です。

4輪ロック付きキャスター



ロックしやすい様にボード形状をカット。足先のケガへの配慮です。


Point! 低床25cmから63cmの床面高さ

- 身長の低い方から立ち上がり易い高さに設定できます。
- 63cmまで上げることができ、介助者の腰への負担を軽減できます。

対応機種


2
モーター

3
モーター

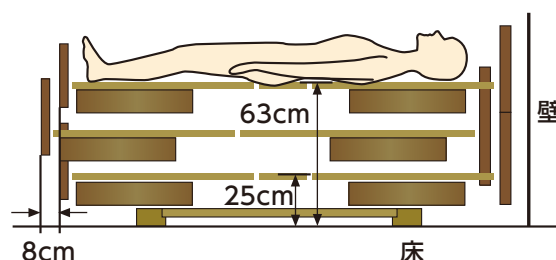


仕様

背上げ1モーター

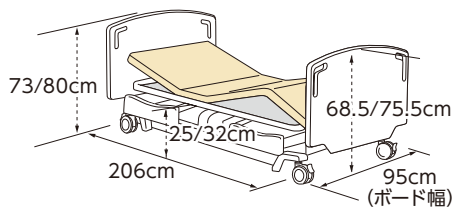

キャスター仕様と固定脚仕様の寸法は同じです。

2モーター／3モーター

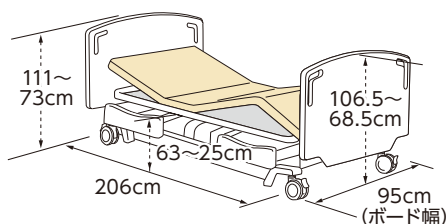

	背上げ 1モーター	2モーター	3モーター
材質	本体部：スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード：プリント紙化粧板、PU塗装		
背角度	0～70度		
膝角度	0～22度	0～22度	0～17度
床面高	25/32cmの 2段階（組立時） オプションで 46cmまで設定 可能	25～63cm	25～63cm
マットレス適合寸法	幅88～91cm		
定格消費電力	70W	120W	
電源	100V		
原産国	本体：ベトナム 木部：中国 モーター部：ドイツLimoss社中国工場		
質量 （キャスター仕様の場合）	91.5kg （各+1.6kg）	93.0kg （各+1.6kg）	94.0kg （各+1.6kg）
梱包	5梱包（固定脚仕様は4梱包）		
最大使用者体重	120kg		

●ダークブラウン

施設用背上げ1モーターベッド

背1
モーター

●キャスター仕様
PKB-AS1FAC
■メーカー希望小売価格
315,000円(税込)

●固定脚仕様
PKB-AS1FA
■メーカー希望小売価格
280,000円 **非課税**

施設用2モーターベッド

2
モーター

●キャスター仕様
PKB-AS2FAC
■メーカー希望小売価格
378,000円(税込)

●固定脚仕様
PKB-AS2FA
■メーカー希望小売価格
340,000円 **非課税**

施設用3モーターベッド

3
モーター

●キャスター仕様
PKB-AS3FAC
■メーカー希望小売価格
409,500円(税込)

●固定脚仕様
PKB-AS3FA
■メーカー希望小売価格
370,000円 **非課税**

●ライトブラウン

施設用背上げ1モーターベッド

背1
モーター

●キャスター仕様
PKB-AS1FBC
■メーカー希望小売価格
315,000円(税込)

●固定脚仕様
PKB-AS1FB
■メーカー希望小売価格
280,000円 **非課税**

施設用2モーターベッド

2
モーター

●キャスター仕様
PKB-AS2FBC
■メーカー希望小売価格
378,000円(税込)

●固定脚仕様
PKB-AS2FB
■メーカー希望小売価格
340,000円 **非課税**

施設用3モーターベッド

3
モーター

●キャスター仕様
PKB-AS3FBC
■メーカー希望小売価格
409,500円(税込)

●固定脚仕様
PKB-AS3FB
■メーカー希望小売価格
370,000円 **非課税**

専用オプション



写真は7cm延長脚です

Ultilet背上げ1モーター専用 延長脚

高さ調節用14cm延長脚(4個組)

PDP-140G
■メーカー希望小売価格
3,465円(税込)

■JANコード/4539940081368

高さ調節用7cm延長脚(4個組)

PDP-70G
■メーカー希望小売価格
3,465円(税込)

■JANコード/4539940081375

高さ調節用3.5cm延長脚(4個組)

PDP-35G
■メーカー希望小売価格
3,465円(税込)

■JANコード/4539940081382

▶ その他オプションはP40~P44をご覧ください。

通気性に考慮したポリエステル製の介護用マットレス

ニューポイントマットレス

芯地のポリエステルにも抗菌剤が練り込まれています。

難燃

抗菌

防臭

防ダニ



ニューポイントマットレス

レギュラータイプ

PKM-9080

■TAISコード/00631-000161
■JANコード/4539940060684

■メーカー希望小売価格

44,000円(税抜)、46,200円(税込)

■材質/芯地・外カバー・内カバー:ポリエステル

PKM-9080 ■寸法/幅90×厚さ8×長さ191cm ■質量/7.5kg

PKM-9080S ■寸法/幅90×厚さ8×長さ182cm ■質量/7.0kg

※PKM-9080Sはミオレット・フォーユーのショートタイプにはご使用できません。

※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは2組まで、
マットレスも非課税となります。

外カバー内カバーは取り外して洗濯可能です。


ショートタイプ

PKM-9080S

■TAISコード/00631-000177
■JANコード/4539940060738

●硬さが選べ背圧を軽減する2層構造

2層構造により、好みの硬さを選べます。
片側4cm厚のリバーシブルタイプ!

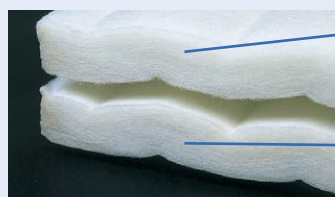

ハード
1
当社比

ハード
2
当社比

背上げの際に発生する「背圧」は、背ボトムとマット、マットと人の間の摩擦により発生しますが、背上げ時に、2層のマットがずれる事でこれを軽減します。

背圧の軽減を考えた介護用マットレス

スタンダードマットレス

難燃

抗菌

防臭

防ダニ



スタンダードマットレス

PKM-E80BR

■メーカー希望小売価格

32,000円(税抜)、33,600円(税込)

■TAISコード/00631-000163 ■JANコード/4539940060691

■材質/芯地・外カバー:ポリエステル

■寸法/幅90×厚さ8×長さ191cm ■質量/6.2kg

外カバー内カバーは取り外して洗濯可能です。

●背圧を軽減する2層構造



※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは2組まで、マットレスも非課税となります。

医療・介護の現場から生まれた次世代型マットレス

ダブルポイントマットレス

医療の現場で求められる耐久性、クッション性、そして制菌性、どれも無視することのできない重要な課題です。
プラッツのダブルポイントマットレスは、これらの要素に「人へのやさしさ」をプラスしてお応えします。

難燃

防臭

防ダニ


制菌

MRSA
抗菌加工ハード
1
当社比ハード
2
当社比

中綿をポリエステル100%のメッシュ生地で包み込み保護していますので、取り扱いがラクです。

耐久性

伸縮性に優れたエラストック・ポリマーで、交錯点をアメーバ状に固定しています。そのため、外からの圧力に対して交錯点が劣化しにくく、弾力性を長く保つことができます。

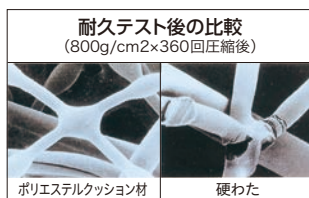

耐久テスト後の比較
(800g/cm²×360回圧縮後)

通気性

立体的な構造であることが特徴なため、空気や水蒸気の通る隙間を持っています。しかも、適度な硬さで、荷重に対する抵抗力を保つので、圧力がかかっても立体構造の隙間を維持します。

	ダブルポイントマット	硬わた	一般ウレタン	備考
密度kg/m ³	34	34	40	JIS K-6401
硬さkgf	30	32	30	JIS K-6401
通気性 cc/cm ² ・sec	130	115	3	JIS L-1079

弾力性

ポリエステル短繊維が立体的に交錯し、安定した形で固着されているため、従来の不織布や硬わたに比べ、繊維の結びつき方が強く、しなやかで、外からの圧力にも柔軟に対応します。

	ダブルポイントマット	硬わた	一般ウレタン	備考
密度kg/m ³	34	34	40	JIS K-6401
硬さkgf	30	32	30	JIS K-6401
弾力性	圧縮回復率%	63	46	75%圧縮時の仕事回復力
	圧縮応力比	4.0	3.4	65%応力／25%応力

ダブルポイントマットレス

PFM-8980PN

■メーカー希望小売価格

45,000円(税抜)、47,250円(税込)

■TAISコード/00631-000027 ■JANコード/4539940060325

■材質/芯地・外カバー・内カバー:ポリエステル

■寸法/幅90×厚さ8×長さ191cm ■質量/7.5kg

※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは2組まで、マットレスも非課税となります。

外カバー内カバーは取り外して洗濯可能です。

●自然の力の防ダニ加工

青森ひばのコーティングにより感染やアレルギーの元になるダニが寄り付きません。


■防ダニ性(忌避率テスト)(中身:ポリエステルクッション材)
検査No.CK-6534-4

$$\text{忌避率(\%)} = \frac{\text{未加工試料の生存ダニ数} - \text{加工試料の生存ダニ数}}{\text{未加工試料の生存ダニ数}} \times 100 = 95\%$$

◎供試ダニ:ヤケヒョウヒダニ・Dermatophagoides pteronyssinus(東京女子医大系)


●2層構造と体圧分散効果

2層構造により、お好みの硬さを選べます。
片側4cmのリバーシブル!

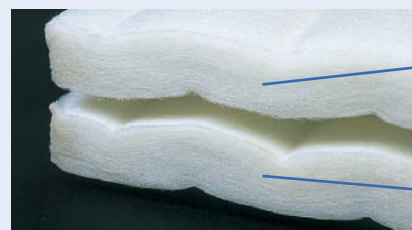ハード
1
当社比ハード
2
当社比

●体圧分散データ

柔らかい面では適度な体圧分散性能もあります。
床ずれ予防にお役立てください。

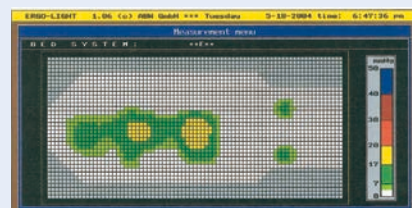

柔らかい面、体重49kg(体重50kg以上になると体圧分散効果は低下します。)

上層2層、下層1層の3層構造で、寝心地を追求したマットレス

サンキューポイントマットレス

寝心地、背圧軽減、耐久性、消毒性を追求したマットレス。

佐賀大学医学部松尾准教授との共同開発により、これらを実現しました。

〈特許出願済〉

表面
撥水

裏面
難燃

抗菌

防臭

防ダニ


新商品

ソフト
4
当社比




Mattress series
ThankU point
PLATZ

背圧を軽減するファスナー付カバー

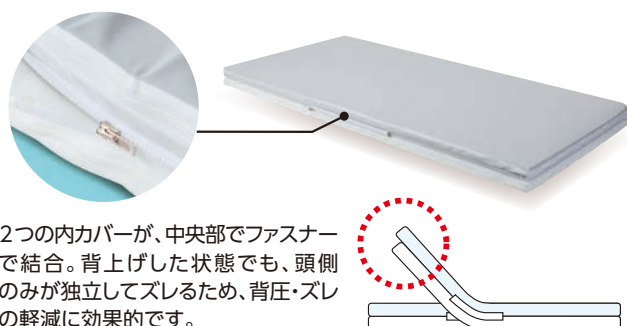

2つの内カバーが、中央部でファスナーで結合。背上げた状態でも、頭側のみが独立してズレるため、背圧・ズレの軽減に効果的です。

マットレス構造図

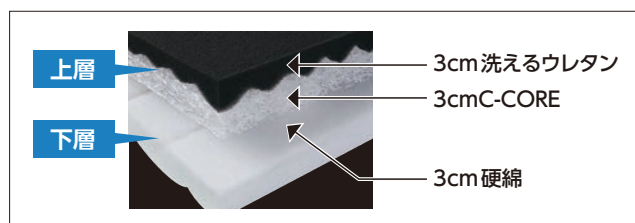

サンキューポイントマットレス

レギュラータイプ

PD500-TU8909

■メーカー希望小売価格

**58,000円(税抜)、
60,900円(税込)**

■TAISコード/00631-000203

■JANコード/4539940060769

ショートタイプ

PD500-TU8909S

■メーカー希望小売価格

**58,000円(税抜)、
60,900円(税込)**

■TAISコード/00631-000204

■JANコード/4539940060776

■材質/外カバー・内カバー:ポリエステル、芯地:ウレタン、ポリエチレン、ポリエステル

■寸法/幅90×厚さ9×長さ192cm(ショート178cm)

■質量/9.0kg(ショート8.4g)


外カバー内カバーは取り外して洗濯可能です。

●C-CORE(シーコアマットレス)

3次元構造で、体圧分散性を高め、理想的な寝心地を実現。

10万個を超える小さなバネユニットが3次元構造となっており、適度な反発力を生み、やさしく体を包み込みます。

内部で空気が循環するので、通気性に優れ、冬は暖かく、夏は涼しい構造です。また、湿気がこもらず、カビ・ダニにも効果的です。水洗いも可能です。

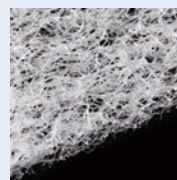


端座位加工

左右7cm部分のバネユニットの密度を高め、端座位を取りやすくしています。


3本スリット

ベッド(ミオレット・フォーユー、ミオレット)の屈曲と同じ位置に3本のスリットを配置し、ギャップ時の屈曲性を高めています。

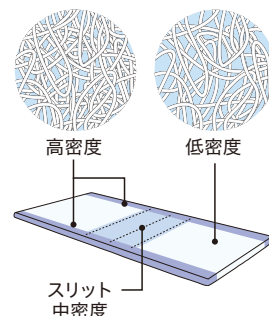

●体圧分散データ


[計測機器]FSA:タカノ(株)社製

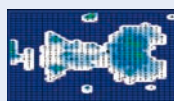

被験者A:女性
身長156cm
体重47kg



被験者B:男性
身長168cm
体重58kg

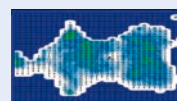

被験者C:男性
身長168cm
体重75kg

ムレにくい防水カバーを採用した床ずれ防止マットレス

ビカム・ドライⅡ

異なる素材の3層構造により、広範囲の体圧分散と適度の弾力性を確保した新世代の床ずれ予防マットレス。

難燃

防臭

防ダニ


制菌

MRSA
抗菌加工

ソフト

4


当社比

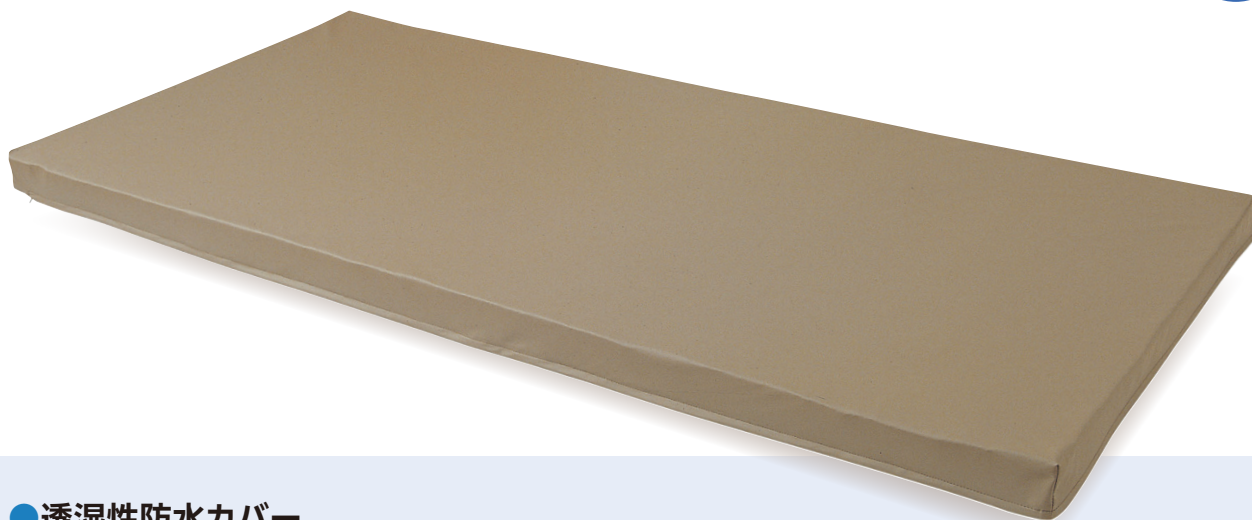

●透湿性防水カバー

ムレにくい清拭タイプの全面透湿性防水カバーを採用。

●耐アルコール性により薬液で拭くだけの雑菌処理

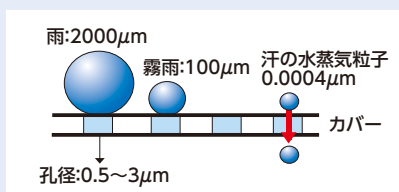

●雑菌繁殖を抑制


透湿性でもマット内部の雑菌繁殖を抑えます。

●ビカム・ドライⅡには紫外線を当てなくても触媒作用がある「特殊酸化チタンZ-TiO₂」を配合しています。これによりマット内部に侵入した雑菌の繁殖を抑え、臭いを分解します。(実用新案出願中)

●体圧分散性能


3層構造による優れた体圧分散性能と高反発素材ラテックスによる「寝返り」のしやすさを実現。

- 適応体重範囲:30~85kg
- 高反発素材ラテックスにより体圧分散に優れています。(注1)
- ラテックスとポリエステルにより端座位の体位を安定させます。

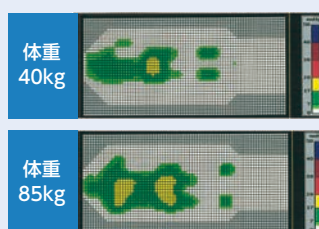

注1:体圧分散だけを求めれば単一の軟材が良いですが、体の沈み込みがあると体位変換がしづらく、ADLを下げの一因にもなります。(ADL=日常生活動作)

マットレス構造図

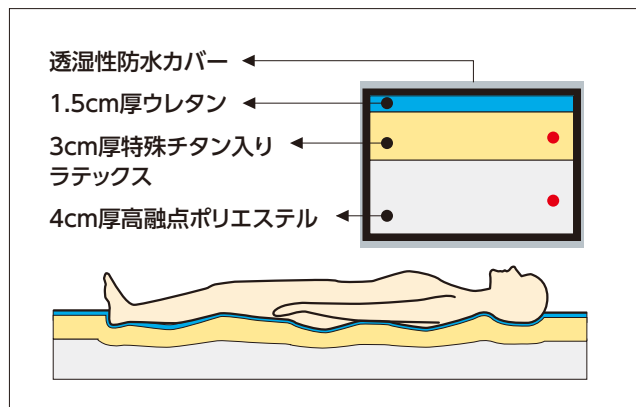

ビカム・ドライⅡ マットレス

PFM-LD90Ⅱ

■メーカー希望小売価格

76,650円(税込)

■TAISコード/00631-000103 ■JANコード/4539940060622

■材質/外カバー:ウレタン・ポリエステル、

芯地:ラテックス・ウレタン・ポリエステル


■寸法/幅90×厚さ8.5×長さ191cm ■質量/8.5kg

※「床ずれ防止マットレス」は非課税ベッドと同時購入の場合でも課税となります。

自動ロック式ベッド用グリップ

ニーパロ (JIS認証品)

立ち上がるときにグリップ部が固定されていないと手を挟んだり、転倒事故の原因になります。この様な事故を防止する為、「ニーパロ」には45度毎にグリップ部を自動的に固定する自動ロック機構を搭載しました。(特許出願中)

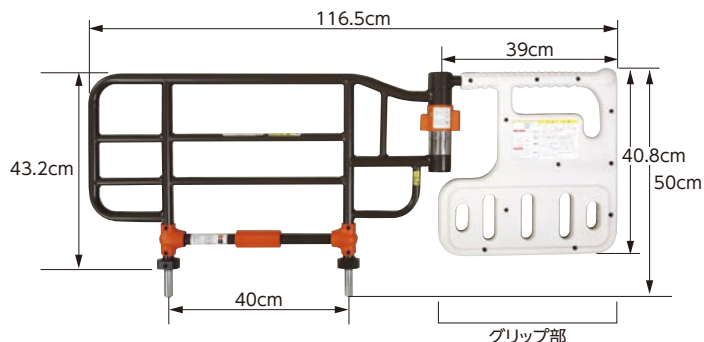

自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロ」



PZR-AT116J

■メーカー希望小売価格
51,450円(税込)

■TAISコード/00631-000179
■JANコード/4539940081634
■材質/スチール・亜鉛ダイカスト・ABS樹脂
■質量/9.7kg

1 ロック忘れによる事故を予防する自動ロック方式

「ロック解除ハンドル」で固定状態を解除し、グリップ部を動かすと45度毎に自動的にロックする機構を搭載しています。

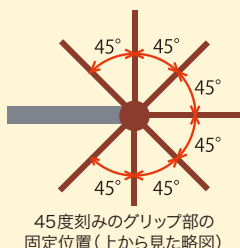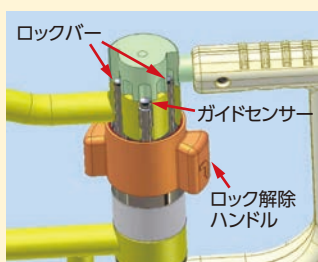

※「ロック解除ハンドル」を下げた解除状態のままにすると、45度でロックされず、任意の位置に廻ることが可能です。

2 使いやすさは安全への第一歩

【親指や手のひらによる解除方法例】




ユニバーサルデザインを追求した「グリップ部」



ニーパロボール
終端がわかりやすく、方向転換の際の手首への負担を軽減します。

3 事故が多い縦の隙間は全機種3.5cm以下、もしくは24cm以上に設計された安心の隙間寸法

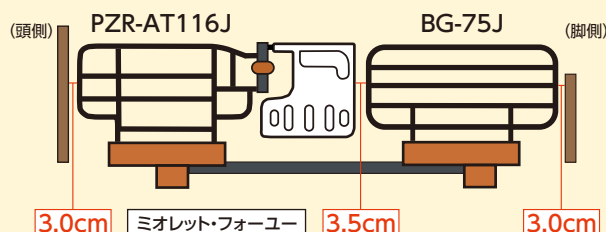

4 回転レバーと下からも固定できるダブルロック方式。

下からのネジ留めにより抜ける心配がありません。



どこからでも握りやすいように先端に球形デザイン(ニーパロボール)、取っ手に波型デザインを採用。



ニーパロ専用オプション

移乗してわかる

安心ひざパッド「ニーパロ・パッド」

「安心ひざパッド」は佐賀大医学部 松尾准教授との共同で開発した商品で、ベッドから車いす、ポータブルトイレへの移乗をより「安全・安心」「スムーズ」に行うことができる「ニーパロ」専用オプションです。(特許出願中)

安心ひざパッド装着時



従来のベッド用グリップを使った移乗では、写真①のように膝が前方向にズレ落ちると写真②のように危険な状態になることもありました。(ひざ折れ状態)



ニーパロ専用安心ひざパッド「ニーパロ・パッド」

PZRHP-AT116J

■メーカー希望小売価格

3,780円(税込)

■材質/EVA

■寸法/350×130×33(厚み)mm

パッド付自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロP」

PZR-AT116JHP

■メーカー希望小売価格

55,230円(税込)

■TAISコード/00631-000181

■JANコード/4539940081658

これに対し、「安心ひざパッド ニーパロ・パッド」を使うと

- 膝の位置にパッドがあり、「ひざ折れ」を防止できます。
- 立ち上がるときは、写真のように膝をパッドにあて、腕を引くことで、腰が浮きやすくなり、より少ない力で臀部を持ち上げることが可能となります。
- 移乗の途中でズボンを脱ぐなど、立位状態を保持したい時も、腕・膝・足の3点で身体を支える為、腕への負担が減り立位状態が安定しやすくなります。



- 移乗用具(スライディングシート/トランスファーボード)を使用する際も、「ひざ折れ」の心配がなく、安心して使用できます。
- 介助者の腰への負担が大きい「前方介助」から、腰への負担が少ない「後方介助」を安心して実施することが可能です。


スライディングシート使用例



トランスファーボードを使った後方介助



安全カバー付ベッド用グリップ

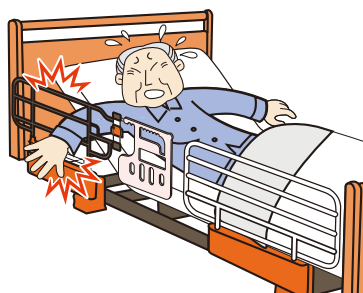

麻痺している腕は感覚も鈍くなっています。挟んでいる事に気づかず背上げすると骨折することがあります。安全カバーで予防してください。

※カバーだけのお求めは、
ベッドグリップ用安全カバー
PZRSN-AT116J 7,875円(税込)



PZR-AT116JSN


■メーカー希望小売価格 59,325円(税込)

■TAISコード/00631-000180

■JANコード/4539940081641

※ケアレットシリーズには、これらのサイドレールはご使用できません。


サイドレール

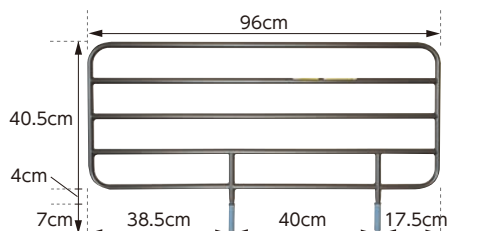

ロングサイドレール(2本組)

BG-96J ■メーカー希望小売価格 **14,000円(税抜)**、**14,700円(税込)**


■TAISコード/00631-000150 ■JANコード/4539940081399
■材質/スチール(粉体焼付塗装) ■寸法/幅96×高さ51.5cm

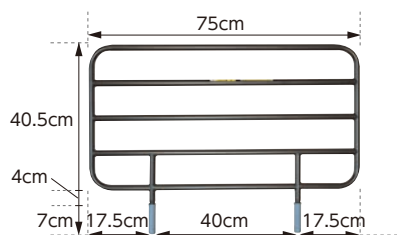

サイドレール(2本組)

BG-75J ■メーカー希望小売価格 **10,000円(税抜)**、**10,500円(税込)**

■TAISコード/00631-000151 ■JANコード/4539940081405
■材質/スチール(粉体焼付塗装) ■寸法/幅75×高さ51.5cm

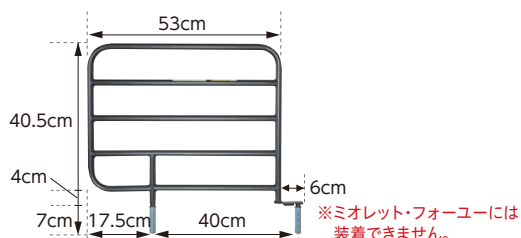

ショートサイドレール(2本組)

BG-53J ■メーカー希望小売価格 **10,000円(税抜)**、**10,500円(税込)**

■TAISコード/00631-000152 ■JANコード/4539940081412
■材質/スチール(粉体焼付塗装) ■寸法/幅59×高さ51.5cm

安全カバー付 ショートサイドレール(2本組)

BG-53JSN ■メーカー希望小売価格 **23,000円(税抜)**、**24,150円(税込)**

■TAISコード/00631-000166 ■JANコード/4539940081542
■材質/スチール、ポリエステル、合成ゴム、ポリウレタン ■寸法/幅59.5×高さ52cm

※安全カバーのみ BGSN-53J(2枚組) ¥13,650(税込)
BGSN-53J1(1枚組) ¥6,825(税込)



閉塞感が少ない
メッシュ素材採用

安全カバー付 ロングサイドレール(2本組)

BG-96JSN ■メーカー希望小売価格 **27,000円(税抜)**、**28,350円(税込)**

■TAISコード/00631-000168 ■JANコード/4539940081528
■材質/スチール、ポリエステル、合成ゴム、ポリウレタン ■寸法/幅97×高さ52cm

※安全カバーのみ BGSN-96J(2枚組) ¥13,650(税込)
BGSN-96J1(1枚組) ¥6,825(税込)



閉塞感が少ない
メッシュ素材採用


安全カバー付 サイドレール(2本組)

BG-75JSN ■メーカー希望小売価格 **23,000円(税抜)**、**24,150円(税込)**

■TAISコード/00631-000167 ■JANコード/4539940081535
■材質/スチール、ポリエステル、合成ゴム、ポリウレタン ■寸法/幅76×高さ52cm

※安全カバーのみ BGSN-75J(2枚組) ¥13,650(税込)
BGSN-75J1(1枚組) ¥6,825(税込)

新商品

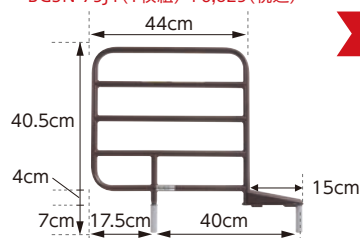

ショートサイドレール(2本組)

PA500-FU44 ■メーカー希望小売価格 **10,000円(税抜)**、**10,500円(税込)**

■TAISコード/00631-000202 ■JANコード/4539940081719
■材質/スチール(粉体焼付塗装) ■寸法/幅59×高さ51.5cm

安全カバー付 ショートサイドレール(2本組)


PA500-FU44SN ■メーカー希望小売価格 **23,000円(税抜)**、**24,150円(税込)**

■TAISコード/00631-000207 ■JANコード/4539940081740
■材質/スチール、ポリエステル、合成ゴム、ポリウレタン ■寸法/幅59.5×高さ52cm

※安全カバーのみ BGSN-FU44(2枚組) ¥13,650(税込)
BGSN-FU441(1枚組) ¥6,825(税込)

安全カバー付サイドレール
にすることで、
図のような事故を防ぎます。

危険!!

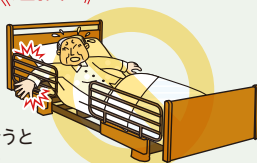

レールに腕を入れて背上げを行うと
腕を骨折する可能性があります。



メッシュ構造により
視野の妨げを軽減

※旧タイプのPZR-116J、PZR-K900TAG、BG-500VN、BG-500VS、BG-1000用もご用意しています。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは2組まで非課税となります。

お部屋のレイアウトや、身体の状態に合わせて、
アレンジ自在のサイドレール。
布団のずれ落ちも防ぎます。

組み合わせ例













(ベッドはミオレット・フォーユー)

自立支援電動ベッド

医療介護ベッド

介護ベッド用マットレス

ベッド周辺機器

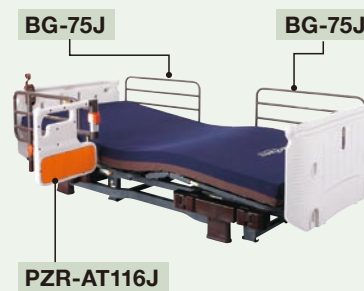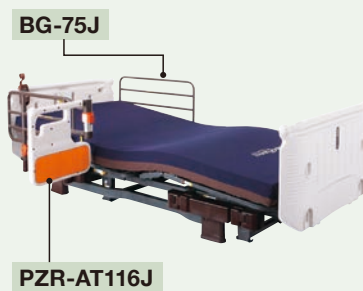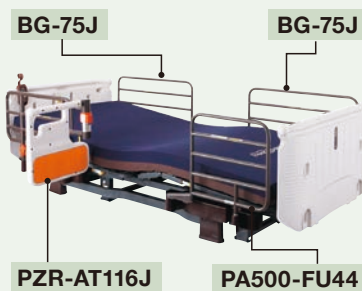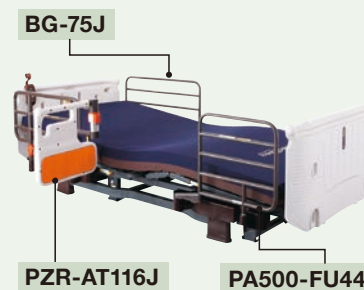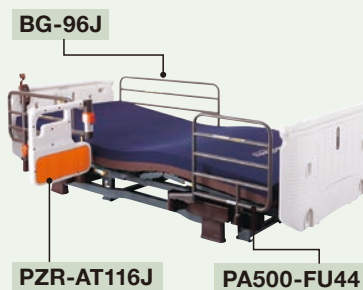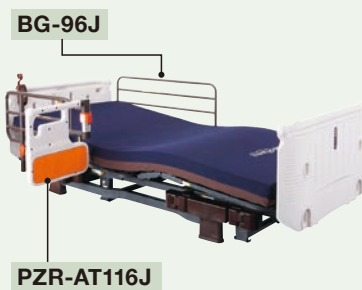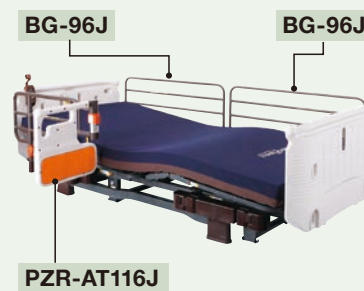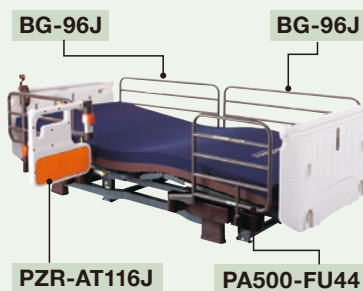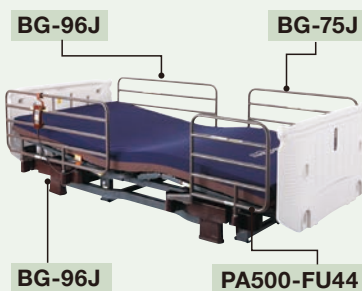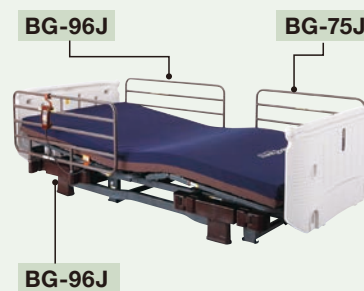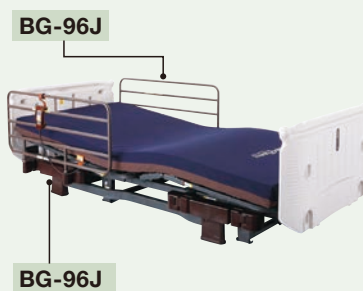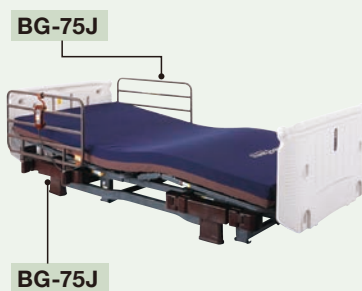

医療介護ベッド専用周辺機器

サイドレールに乗せて使う
ラウンドタイプの
オーバーテーブル

Miolet/Miolet ForU/Ultilet専用
オーバーテーブル



※ 胸元分をカットした使いやすいラウンドタイプ

PGT-400LM

■メーカー希望小売価格
10,500円(税込)

■TAISコード/00631-000121
■JANコード/4539940081245

■材質/プリント紙化粧繊維板、ABS樹脂
■寸法/幅100.3×奥行35.8cm、
厚み:取っ手部分4.1cm・テーブル部2cm

※適合機種:ミオレットシリーズ、ミオレット・フォーユーシリーズ、アルティレットシリーズ

防災、防汚に優れ、
裏面滑り止め加工を施した
ベッド用カーペット

床キズ防止カーペット(4枚組)

PSC-1216SC

■メーカー希望小売価格
3,150円(税込)

■JANコード/4539940081283
■材質/ナイロン100%
■寸法/16.5×12.5cm(厚さ5mm)



使用例

全ベッド共通ベッドテーブル

使い勝手にこだわった
介護ベッド用昇降ベッドテーブル

- ガススプリングによるスムーズかつ、安定したテーブルの昇降が可能です。
- 移動が楽なキャスター付
- ストッパー付キャスター(2個)

ガス圧式昇降ベッドテーブル

PZT-840

■メーカー希望小売価格
39,900円(税込)

■TAISコード/00631-000178
■JANコード/4539940081627

材質	フレーム部:スチール製+ 合成樹脂(ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS) 木部:合成樹脂(メラミン)化粧繊維板(MDF)
寸法	幅84×奥行47×高さ60~84cm (天板)幅84×奥行40×厚み1.8cm
質量	15.5kg
天板の耐荷重	10kg
原産国	ベトナム/ガススプリング:日本製



キャスターは片側が
小さいのでベッド下の
隙間が5cmあれば
入れ込めます。

ストッパー付き
キャスター

※「ミオレット」と組み合わせる場合は、ハイトスペーサーが必要です。(キャスター装着時は不要)
※「アルティレット」と組み合わせる場合は3.5cmの延長脚が必要です。
※「ミオレット・フォーユー」と組み合わせる場合、固定脚仕様の場合はハイトスペーサーが必要です。(キャスター装着時は、ご使用できません)

組み合わせ例



ケアレット・プライム
Carelet PRIME



Miolet ForU
ミオレット・フォーユー

ピクトの説明



■隙間適合マークの基準

隙間適合マークは、以下条件であることを証明するプラッツ独自の安全マークです。

- ①レール間、レールとボード間の隙間が4～23.5cmでないこと。
(レールとは「サイドレール」、「ベッド用グリップ」の意味)
- ②プラッツが指定するプラッツ製品の組み合わせであること。

■隙間適合マークの目的

- ①利用者の安全性を少しでも向上させる為、危険な組み合わせのベッドを無くす事が最大の目的である。
- ②このマークを表示することで安全な組み合わせのベッドの普及をはかる。

但し、隙間適合マーク表示製品であっても、ご利用者の方の使用方法・身体状況の変化など、様々な要因で事故が起こる可能性があります。ご利用の際は、取扱説明書などの記載事項を守り、十分な注意を払う必要があります。

非課税


■ベッドに関する「非課税」の扱いについては以下の通りに定められています。

【消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件(最新改正:平成23年3月31日)】より

●特殊寝台

身体に障害を有する者が家庭において使用する寝台であって、身体に障害を有する者の頭部及び脚部の傾斜角度が調整できる機能を有するもので、次に掲げる条件のすべてを満たすものに限る。

- イ 本体の側板の外縁と側板の外縁との幅が100センチメートル以下のもの
- ロ サイドレールが取り付けられているもの又は取り付け可能なもの
- ハ キャスターを装置していないもの

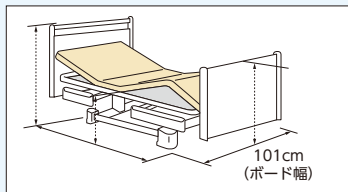

図では101cmと記載していますが、これはヘッド・フットボードの幅を表しています。「非課税」マークのある商品の本体幅は全て100cm以下です。

- ※非課税対象のベッド本体と同時にキャスターを購入される場合は、ベッド本体も課税となります。
- ※非課税のベッド1台と同時にサイドレール及びマットレスを購入される場合は、サイドレールは2セットまで、マットレスは1枚まで非課税となります。
- ※体圧分散マットレスなど特殊な物は非課税になりません。



背上げ70°

■角度表示について

カタログ中の角度は、JIS規格の傾斜角度表示に則り、角度表示は許容差±(プラスマイナス)表示ではなく、最低限確保できる角度表示にしています。(例:背上げ70°とは、73°±3°の意味)



■マットレスの硬さ表示について

1から4までの4段階表示。1が最も硬い事を表しています。(当社基準)

プラッツバードが
伝えたいあなたの
「ありがとう」を
運びます!



ありがとうございます
まっしぐら!

プラッツはこれまで皆様のたくさんのありがとうの言葉に支えられ、おかげさまで、20周年を迎えることができました。

「ありがとう」というさり気ない言葉…。あなたもきっとどこかで誰かのありがとうに支えられているはず…。普段はなかなか伝えられない、感謝の気持ち。さあ、「ありがとう」の言葉で、笑顔の輪を広げましょう。



プレゼント中!!



▲プラッツバード



▲プレミアムハンドタオル
(サイズ:200×200mm)

20周年記念特設サイト

<http://www.platz-ltd.sakura.ne.jp/20th/>

安全についてのご注意

機器を正しく安全にお使い頂くため、ご使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。



PLATZ (プラッツ) 総合カタログのご注意事項

- 製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 発売予定時期は、開発・製造の都合上、発売時期を予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- カタログの写真と実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
- カタログ本文の寸法・角度等の数値には、多少の誤差が含まれます。当カタログでは、表示を見やすくするため、「約」、「およそ」といった文言を省略しています。
- ベッドの写真内のマットレス・テーブル等は、特記事項のあるもの以外は別価格になっております。
- 製品の価格に「**非課税**」の表示がある製品には消費税がかかりません。
- 製品の価格には配送料・納品(組立設置料)・不要品の引き取り等の費用は含まれておりません。
- 製品の安全性・品質には、万全の注意を払っておりますが、下記の原因による事故に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
 - ①製品の目的以外のご使用や誤ったご使用を原因とした事故
 - ②当社未承認での製品の改造等を原因とする事故
 - ③「当社が指定する当社製品の組み合わせ」以外の組み合わせを原因とする事故
(例:当社ベッドと他社製のサイドレールやベッド用グリップとの組み合わせ)
 - ④その他当社の責任とはいえない事故

※最新の製品情報・安全に関する情報はホームページに記載しております。

製造元

株式会社 **プラッツ**

■本社/ショールーム

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-39
TEL:092-584-3434/FAX:092-584-3436

■関東支店

〒105-0014 東京都港区芝2-16-9 芝YSビル1F
TEL.03-5427-8033 FAX.03-5427-8031

●東北営業所

〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字東通29
ホワイトアーバンシティ102
TEL.022-781-7072 FAX.022-781-7062

■東海支店・東海ショールーム

〒465-0093 愛知県名古屋市中東区一社3-108
オフィス・クロンドビル1F
TEL.052-704-2700 FAX.052-704-2701

■関西支店・関西ショールーム

〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4
メディアパードビルディング2F
TEL.06-6233-2105 FAX.06-6233-2107

■九州支店(本社内)

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-39
TEL.092-584-3433 FAX.092-502-3810



ありがとうございます
まっしぐら!

<http://www.platz-ltd.co.jp/>

Facebookプラッツオフィシャルページ

<http://www.facebook.com/PlatzJapan>

■ご意見・ご質問等は

iken@platz-ltd.co.jp

製品のお求め、お問い合わせは