

TOTAL CATALOGUE 2015 Vol.1

挑戦します！お客様の笑顔のために。

プラッツはいつも「一生懸命」です。



代表取締役
福山 明利


挑戦します！お客様の笑顔のために

弊社は2015年3月東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。

これも偏にお客様のご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

これを機にさらに皆様から信頼していただける企業を目指し「挑戦します！お客様の笑顔のために」をテーマに掲げ、真摯に「高品質」「高機能」「低価格」の製品作りに邁進していく所存です。

今後とも変わらぬご指導ご鞭撻の程お願い申し上げます。

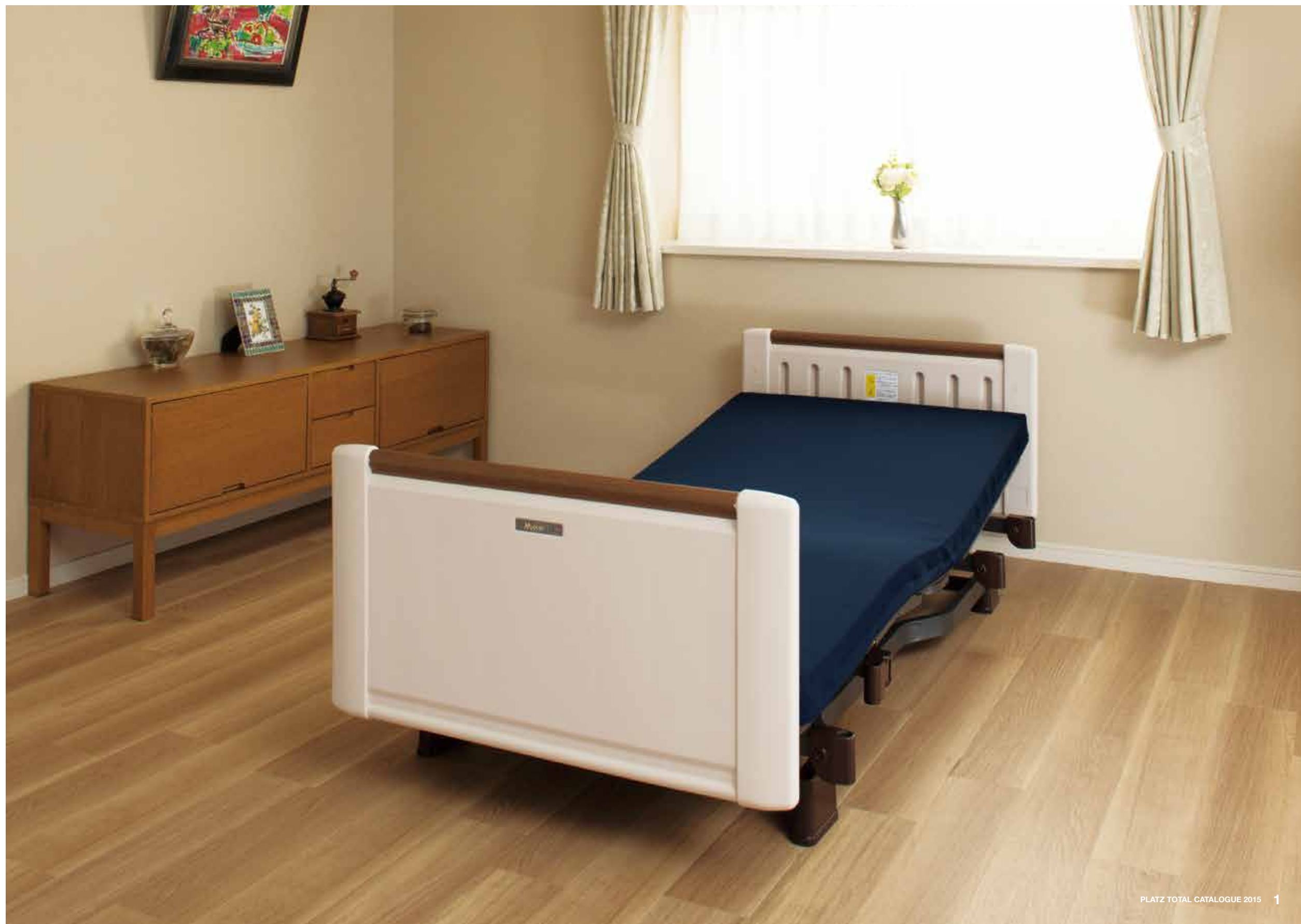

目次

医療介護ベッド 3

- ミオレット・フォーユー 4
- ミオレットII 14
- プリモレット 22

施設用ベッド 25

- アルティレット・トゥーユー 26
- アルティレット 34

ベッド周辺機器 39

- ベッド用グリップ 40
- サイドレール 44
- テーブル・その他 48

医療介護ベッド用マットレス 49

- サンキューポイントマットレス 50
- ニューポイントマットレス 51
- スタンダードマットレス 51
- ユービーポイントマットレス 52
- ピカムポイントマットレス 52

自立支援電動ベッド 53

- ※ベッド用グリップの装着はできません。
- ケアレットフォルテII 54
- ケアレットネオ アルファII 56
- ケアレットニコII 58
- ケアレット専用マットレス 62

会社概要 65

プラッツの歩み 66

ベッドオプション適合表 68

ピクトの説明

■ 隙間適合マークの基準

隙間適合マークは、以下の条件であることを証明するプラッツ独自の安全マークです。
①レール間、レールとボード間の隙間が4~23.5cmでないこと。(レールとは「サイドレール」、「ベッド用グリップ」の意味)
②プラッツが指定するプラッツ製品の組み合わせであること。



■ 隙間適合マークの目的

①利用者の安全性を少しでも向上させる為、危険な組み合わせのベッドを無くす事が最大の目的です。
②このマークを表示することで安全な組み合わせのベッドの普及をはかります。但し、隙間適合マーク表示製品であっても、ご利用者の方の使用方法・身体状況の変化など、様々な要因で事故が起こる可能性があります。ご利用の際は、取扱説明書などの記載事項を守り、十分な注意を払う必要があります。

■ ベッドに関する **非課税** の扱いについては以下の通りに定められています。




【消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障がい者用物品及びその修理】(平成24年改正)より

● 特殊寝台

身体に障がい有する者が家庭において使用する寝台であって、身体に障がい有する者の頭部及び脚部の傾斜角度が調整できる機能を有するもので、次に掲げる条件のすべてを満たすものに限る。

- イ 本体の側板の外縁と側板の外縁との幅が100センチメートル以下のもの
- ロ サイドレールが取り付けられているもの又は取り付け可能なもの
- ハ キャスターを装置していないもの

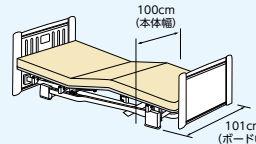

図では101cmと記載していますが、これはヘッド・フットボードの幅を表しています。

非課税 マークのある商品の本体幅は全て100cm以下です。

※**非課税**対象のベッド本体と同時にキャスターを購入される場合は、ベッド本体も課税となります。
※**非課税**のベッド1台と同時にサイドレール及びマットレスを購入される場合は、サイドレールは2セットまで、マットレスは1枚まで**非課税**となります。



■ 角度表示について

カタログ中の角度は、JIS規格の傾斜角度表示に則り、角度表示は許容差±(プラスマイナス)表示ではなく、最低限確保できる角度表示にしています。(例:背上げ70°とは、73°±3°の意味)



■ マットレスの硬さ表示について

1から5までの5段階表示。1が最も硬い事を表しています。(当社基準)

■ モーターの数と対象者の基本相関図

モーター数	体の状態	元気	足腰に痛み	支援1	支援2	介護1	介護2	介護3	介護4	介護5
3モーター										「ミオレット・フォーユー」「ミオレットII」 「アルティレット・トゥーユー」「アルティレット」
2モーター										「ミオレット・フォーユー」「ミオレットII」 「アルティレット・トゥーユー」「アルティレット」
昇降1モーター										「ミオレットII」
1+1モーター										「ケアレットフォルテII」 「ケアレットネオ アルファII」 「ケアレットニコII」
背上げ1モーター										「ミオレット・フォーユー」「ミオレットII」
背上げ1モーター										「プリモレット」

医療介護ベッド





18
種類の
組合せ



GOOD PACKAGING

- 特許第5089785号(ランバー機構)
- 特許第5089786号(手元スイッチ形状)
- 特許第5089793号(樹脂ボード形状)

Miolet ForUの梱包仕様において「日本パッケージングコンテスト2012包装技術賞(アクセシブルデザイン包装賞)」
「介護ベッド(重量物)の新包装形態」を受賞しました。



使いやすさの究極を目指し 介護ベッドは新たなステージへ ミオレット・フォーユー

ForUとは?

- ・User = 利用者 / 介助者 / 顧客 / 組立サービス
 - ・Universal = ユニバーサルデザイン
 - ・Ultimate = 究極の
 - ・Usability = 操作性・使いやすさ
- という4つのUを合わせた造語です。



樹脂ボードタイプ

P100-21BD2

「サンキューポイントマットレス」とのセット例

特徴

- 医学的配慮**
5モーション機構により、背上げ時に発生する「背圧・腹圧・身体のズレ」の低減・緩和を目指しました。
- 安全性への配慮**
JIS規格は勿論、様々な事故事例、ヒヤリハットを参考に0から設計を見直しました。
- 操作性への配慮**
片麻痺の方など障がいをお持ちの方に配慮した手元スイッチ、伝い歩きを考慮したボード形状を目指しました。
- 組立設置・アフターサービスへの配慮**
レンタルベッドとして求められる、組立設置、アフターサービスのしやすさを追求しました。



木製フラットボードタイプ

P100-21AA1

「サンキューポイントマットレス」とのセット例



木製宮付ボードタイプ

P100-21AB1

「サンキューポイントマットレス」とのセット例

産学連携によって
研究開発された、
ユニバーサルを極めた
介護ベッド。


●共同開発者



佐賀大学
医学部
地域医療科学教育研究センター福祉健康科学部門
松尾 清美 准教授

宮崎大学工学部卒。大学在学中に交通事故により車いす生活となる。多くの福祉機器メーカーとの研究開発をおこなうと共に、身体に障がいをお持ちの方々の住環境設計を1700件以上、福祉機器での生活行動支援を7500件以上実施。福祉住環境コーディネーター協会理事、日本障がい者スポーツ学会理事、日本リハビリテーション工学協会車いすSIG代表


背上げ時に発生する「背圧・腹圧・身体のズレ」に配慮した 5モーション機構

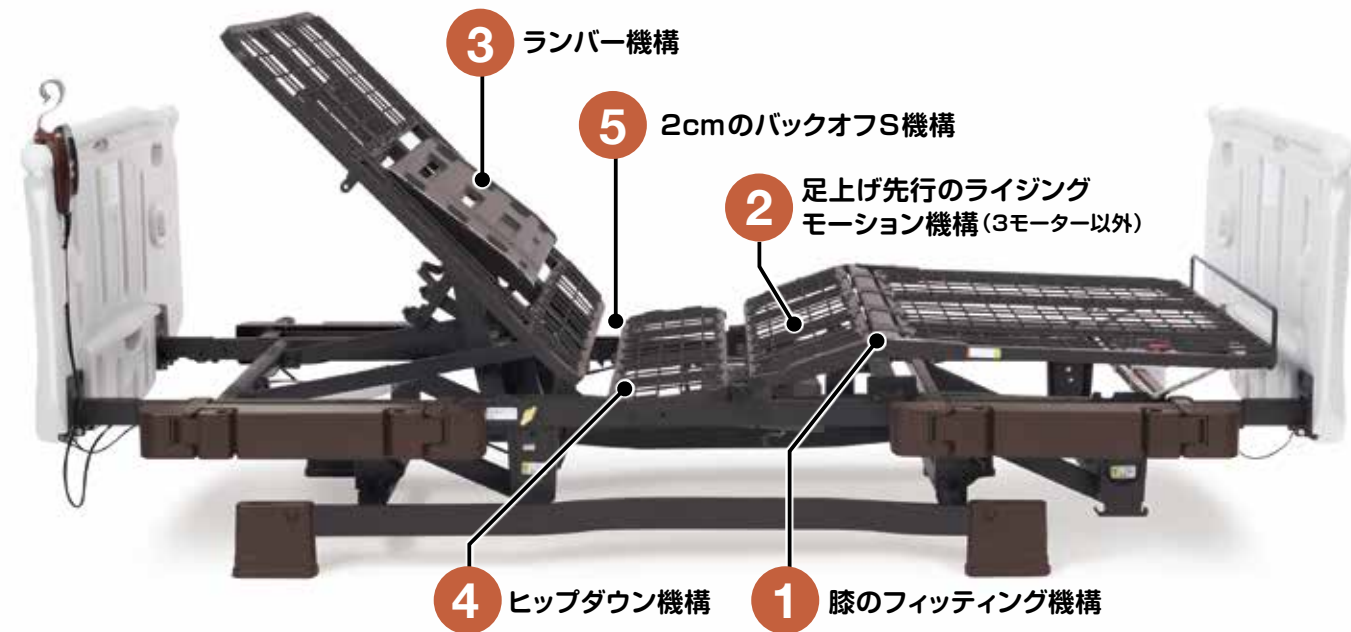

1 背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機構

対応機種 背1 背2 背3


膝の位置とベッドの曲がる位置が合っていないと背上げ時に身体が足方向へズレてしまいます。ミオレット・フォーユーは利用者的大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレが少なく姿勢を崩しにくくなります。

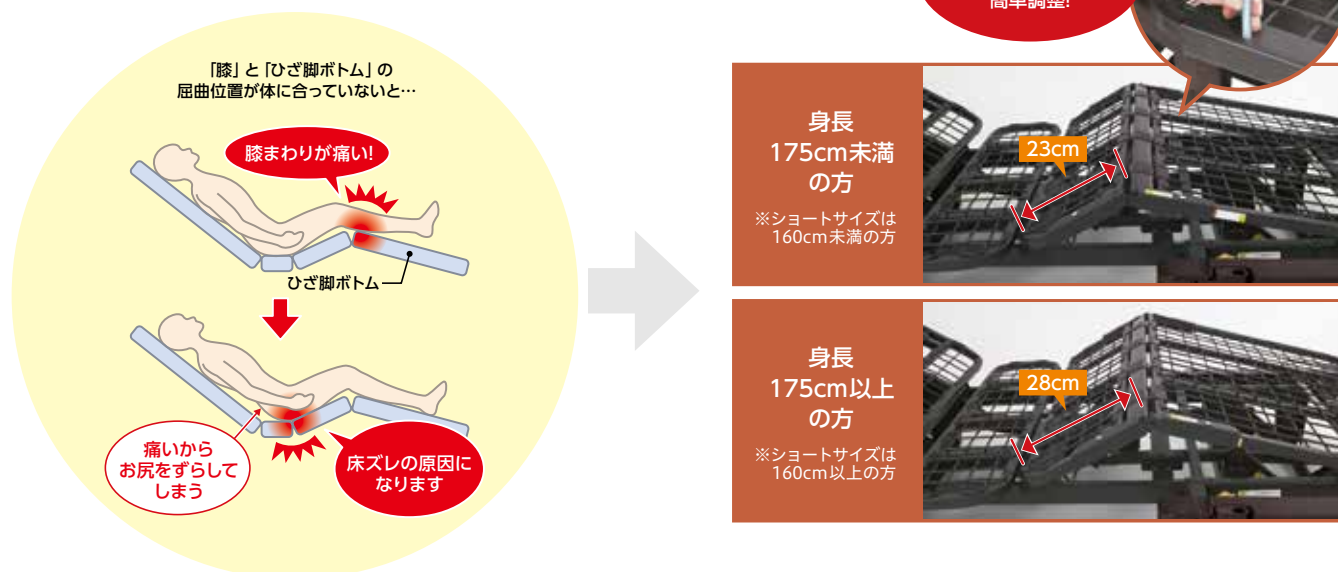

2 背上げ時のズレを抑える 1ボタン操作のライジングモーション機構

対応機種 背1 背2

背上げボタンを押すと、自動的に膝から上がり、その後、背が上がりだす「ライジングモーション」。これにより、足方向へのズレを抑制します。
※背上げ単独の切り替えもワンタッチで可能です。

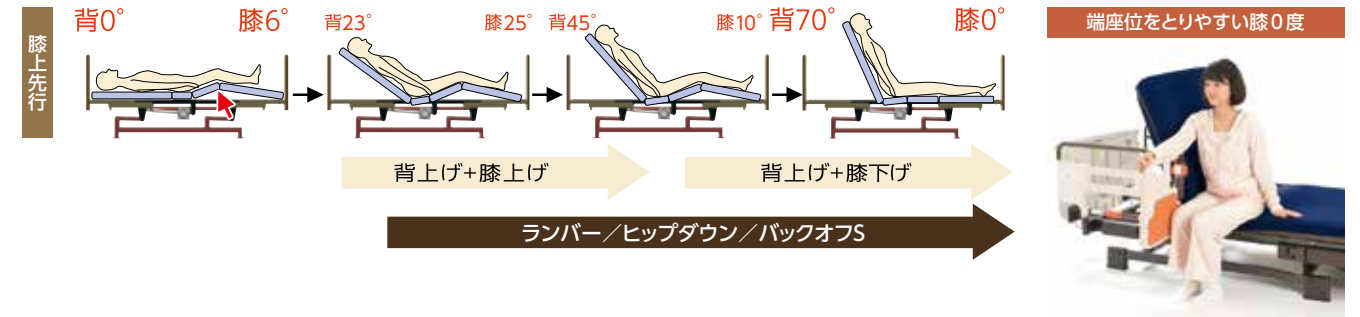


3 背上げ時の背圧を軽減し、 呼吸を楽にするランバー機構

対応機種 背1 背2 背3

背圧軽減のため、背上げ時は「背抜き機構」、背下げ時は「牽引感(背が引っ張られる感覚)軽減」をランバーの動きで実現。ランバー機構により背上げ時、背下げ時の背圧、腹圧軽減を実現しました。

※ON/OFF切替可能

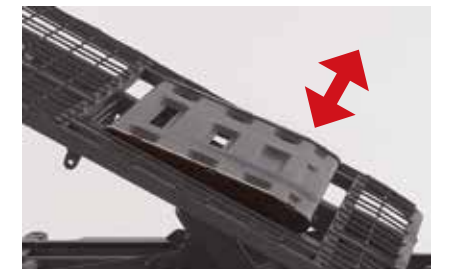

4 骨盤を起し姿勢を崩しにくく するヒップダウン機構

対応機種 背1 背2 背3

背上げと同時に、自動的に臀部のボトムが傾斜します。これにより、骨盤を起し、ズレを抑制します。




5 背圧・腹圧を軽減するバックオフS機構

対応機種 背1 背2 背3

背ボトムを後方に2cmスライドさせながら上半身を起す背上げ機能で、腹部や背中の圧迫感を軽減します。また、特殊な背上げ機能により、通常、腰付近にもかかる背圧は、肩付近にかかるように設計され、肩の後ろに手を差し込むだけでも大幅に除圧できます。

背上げ中に起きる背圧を放置すると呼吸困難になる恐れもあります。


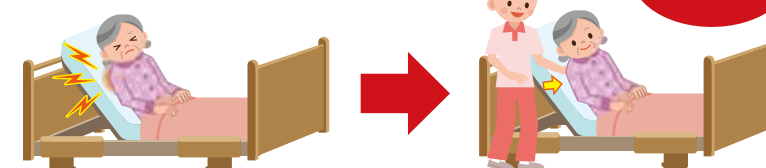


※背圧については、自分で体を動かす事ができない人は特にご注意ください。



足のむくみを軽減させる足上げ機構では、
足先上げか、足先下げを簡単に選ぶことができます。

対応機種
背1
背2
背3

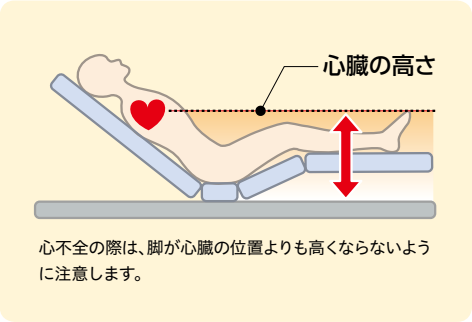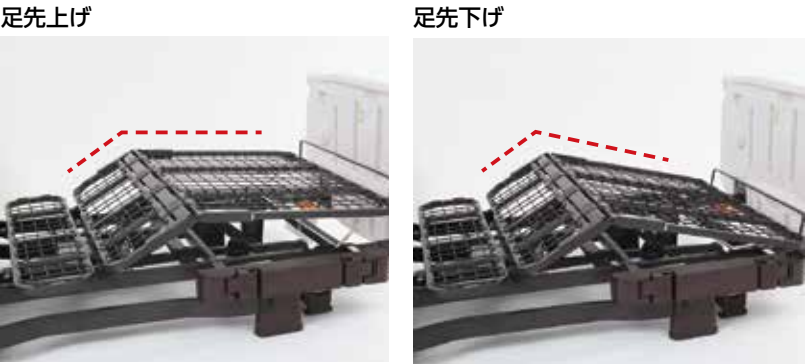

ひとくちメモ


寝た状態になると内臓が横に広がり、肺を圧迫し容積が小さくなります。結果、息苦しさを感ずることがあります。背上げ機能を使うことで、内臓が下がり肺の圧迫が無くなります。



床面高さが25～63cmまで昇降することで、
介助者の腰痛を防止できます。

対応機種
背2
背3

足方向へ8cmスイングしながら昇降しますが、25cmの最低床面高さと63cmの最高床面高さでヘッドボードは同じ位置になります。よってヘッドボード側は壁に近づけての設置が可能となります。

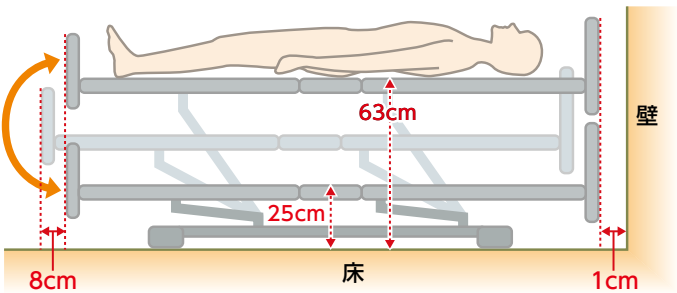

新搭載の手動昇降システム(背上げ1モーター専用)

ハンドルを回す事で、床面高さを25～40cmの間で調整可能です。




対応機種
背1

使用される方の身長やお部屋の大きさに合わせ、
レギュラーサイズとショートサイズをご用意しました。

対応機種
背1
背2
背3

背ボトム・ひざ脚ボトムのみ購入で、全長サイズをレギュラーサイズからショートサイズへ切替が可能。

ボードの違いによる本体サイズ (単位:cm)		
ボードタイプ	レギュラーサイズ	ショートサイズ
樹脂フラットタイプ	212.0	197.0
木製フラットタイプ	209.0	194.0
木製宮付タイプ	224.5	209.5

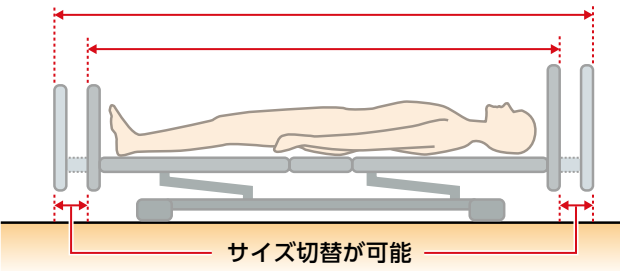

車椅子との移乗もすき間がなく
安心な収納式サイドレールホルダー

対応機種
背1
背2
背3



サイドレールホルダーが収納できると、車椅子をベッドに密着させることが可能になり、移乗を楽に行うことができます。

利用者・介助者にやさしい ユニバーサルデザインのボードを 3種類ご用意しました。

樹脂ボード

- 終端がわかりやすい球状デザイン



- 背の角度の目安となる便利なマーク表示



- ボード中央部を認識できる凸凹加工



- コードをぴったり収納



不用意に手元スイッチが落ちるのを防ぎます。

木製ボード

- フラットタイプ



- 宮付タイプ




宮付タイプはティッシュやメガネなど小物を置くのに便利

※一部種類によっては、設置できないティッシュボックスがございます。

ボード表面には…

EBコーティング

擦り傷、汚れ、日光に強いEBコーティングを施しています。

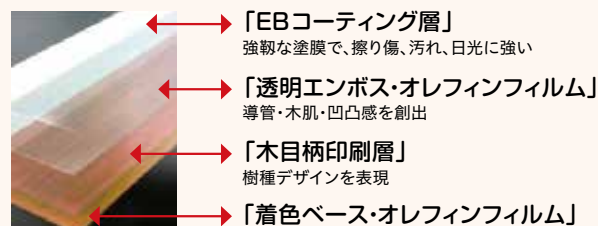

「EBコーティング層」
強靱な塗膜で、擦り傷、汚れ、日光に強い

「透明エンボス・オレフィンフィルム」
導管・木肌・凹凸感を創出

「木目柄印刷層」
樹種デザインを表現

「着色ベース・オレフィンフィルム」

伝い歩きの際に握りやすく終端がわかりやすい球状デザイン



持ちやすく使いやすいユニバーサルデザインに基づく ニューデザインの手元スイッチ



- 動作時にLEDが点灯し夜でも操作しやすい

- 両サイドが少し盛り上がっている事で、マットレス等が干渉したときの誤作動を防止します

- 暗い所でも明るいPLATZマーク（蓄光塗料入り）

- 夜間や視力の弱い方でもわかりやすい感触でわかる凹凸ボタン

水漏れによる故障を防ぐ防水加工 (IP×4)

麻痺・リウマチ・握力の弱い方でも保持しやすい ダブル・ホールドマウント

指の間ではさめるので、麻痺側の手でも落ちにくく、使いやすくなりました。



サイドレールやボードからの落下を考慮し、 掛けやすい形状を追求しました。



引っ掛かりの少ないスムーズなスライド

樹脂ボードにもちょい掛け可能!

機能


●背上げ1モーターベッド

マット幅	レギュラータイプ	ショートタイプ	背1 モーター  背上げ70° 背膝連動70°/25°  高さ調節(手動)  ※手動によるベッドの昇降が可能です。
90 cm	●樹脂タイプ P100-11BD2 ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000186 ■JANコード/4539940073691 オープン価格 (非課税)	●樹脂タイプ P100-12BD2 ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000189 ■JANコード/4539940073721 オープン価格 (非課税)	
	●木製フラットタイプ P100-11AA1 ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000184 ■JANコード/4539940073677 オープン価格 (非課税)	●木製フラットタイプ P100-12AA1 ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000187 ■JANコード/4539940073707 オープン価格 (非課税)	
	●木製宮付タイプ P100-11AB1 ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000185 ■JANコード/4539940073684 オープン価格 (非課税)	●木製宮付タイプ P100-12AB1 ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000188 ■JANコード/4539940073714 オープン価格 (非課税)	

●2モーターベッド

マット幅	レギュラータイプ	ショートタイプ	2 モーター  背上げ70° 背膝連動70°/25°  高さ調節 
90 cm	●樹脂タイプ P100-21BD2 ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000192 ■JANコード/4539940073752 オープン価格 (非課税)	●樹脂タイプ P100-22BD2 ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000195 ■JANコード/4539940073783 オープン価格 (非課税)	
	●木製フラットタイプ P100-21AA1 ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000190 ■JANコード/4539940073738 オープン価格 (非課税)	●木製フラットタイプ P100-22AA1 ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000193 ■JANコード/4539940073769 オープン価格 (非課税)	
	●木製宮付タイプ P100-21AB1 ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000191 ■JANコード/4539940073745 オープン価格 (非課税)	●木製宮付タイプ P100-22AB1 ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000194 ■JANコード/4539940073776 オープン価格 (非課税)	

●3モーターベッド

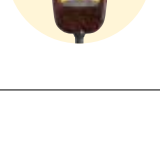マット幅	レギュラータイプ	ショートタイプ	3 モーター  背上げ70° 背膝連動70°/18°  膝上げ18°  高さ調節 
90 cm	●樹脂タイプ P100-31BD2 ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000198 ■JANコード/4539940073813 オープン価格 (非課税)	●樹脂タイプ P100-32BD2 ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000201 ■JANコード/4539940073844 オープン価格 (非課税)	
	●木製フラットタイプ P100-31AA1 ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000196 ■JANコード/4539940073790 オープン価格 (非課税)	●木製フラットタイプ P100-32AA1 ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000199 ■JANコード/4539940073820 オープン価格 (非課税)	
	●木製宮付タイプ P100-31AB1 ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000197 ■JANコード/4539940073806 オープン価格 (非課税)	●木製宮付タイプ P100-32AB1 ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000200 ■JANコード/4539940073837 オープン価格 (非課税)	







静音性・防水性にも優れた
デンマーク LINAK 社製モーターを搭載

静音性・防水性(IP×4)に優れたデンマークのLINAK社製モーターを搭載。さらにお手入れがしやすくなりました。また、深夜でも気兼ねなくベッド操作が可能です。

※IP×4とは、全方向からの水の飛沫に対応した防水規格です。



仕様

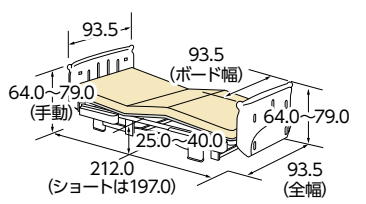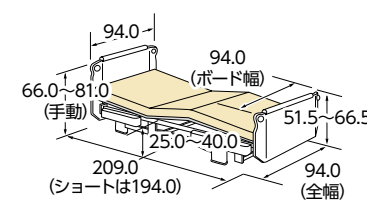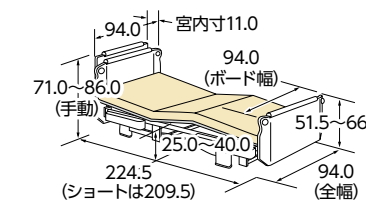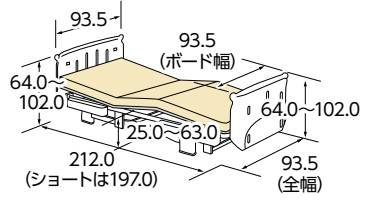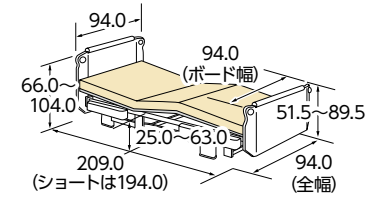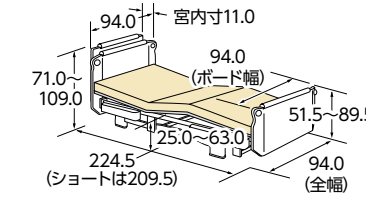背上げ1モーター (※1)			
●樹脂タイプ	●木製フラットタイプ	●木製宮付タイプ	(単位:cm)
			
2モーター／3モーター (※1、※2)			
●樹脂タイプ	●木製フラットタイプ	●木製宮付タイプ	(単位:cm)
			

※1. サイドレールホルダー使用時は全幅 101.0cm となります。 ※2. 昇降時はスイングしながら昇降する為、脚側は 8cm 以上、頭側は 1cm 以上のスペースが必要です。
※床からベースフレームの間は 6.5cm となります。

			背上げ1 モーター	2 モーター	3 モーター
材質			本体ユニット：スチール、ABS 樹脂ボード：PE 木ボード：MDF オレフィン化粧合板、天然木		
床面高			25.0～40.0cm(手動) 専用ハイトスパーサー 〈PC501-FU45〉装着時：+4.5cm	25.0～63.0cm 専用ハイトスパーサー〈PC501-FU45〉装着時：+4.5cm	
マットレス適合寸法			木製フラット/木製宮付タイプ 全長 190.0～195.0cm(ショートタイプ178.0～181.0cm)、 樹脂タイプ 全長 190.0～192.0cm(ショートタイプ178.0cm)、 幅 88.0～91.0cm(全ボードタイプ共通)、厚さ：最大厚 18.0cm以下		
定格消費電力			50W	100W	
電源			100V(50/60Hz)		
原産国			ベトナム		
モーター部			LINAK社製		
質量	樹脂タイプ	レギュラーサイズ	92.0kg	93.5kg	97.0kg
		ショートサイズ	90.5kg	92.0kg	95.5kg
	フラット木タイプ	レギュラーサイズ	97.5kg	99.0kg	102.5kg
		ショートサイズ	96.0kg	97.5kg	101.0kg
	宮付木タイプ	レギュラーサイズ	104.0kg	105.5kg	109.0kg
		ショートサイズ	102.5kg	104.0kg	107.5kg
梱包			6 梱包		
最大使用者体重			120kg／安全使用荷重：1700N		

専用オプション

※その他オプションはP40~P45、P48をご覧ください。



ミオレット・フォーユー、ミオレットII用
45mmハイトスパーサー(4個組)

PC501-FU45
■メーカー希望小売価格
7,452円(税込)

■TAISコード/00631-000205
■JANコード/4539940081726
■材質/PP
■装着時床面高/+4.5cm

※固定脚仕様でベッドテーブルを
ご使用の際は、当該商品が必要
となります。
※キャスターとの併用はできません。



ミオレット・フォーユー専用
キャスター(4個組)

PC500-FU8CK5
■メーカー希望小売価格
21,060円(税込)

■TAISコード/00631-000206
■JANコード/4539940081733
■材質/ナイロン、ポリウレタン、
スチール、ABS

※ストッパー付×2個、ストッパー
無し×2個の4個組
※キャスター仕様ではベッドテ
ーブルはご使用できません。
※床面高さは変わりません。




手元スイッチホルダー

PE501-D40
■メーカー希望小売価格
1,188円(税込)

■TAISコード/00631-000224
■JANコード/4539940081801
■材質/PP
■寸法/長さ21.7×幅7.6×高さ5.3cm
■質量/60g

※樹脂ボードにはご使用できま
せん。

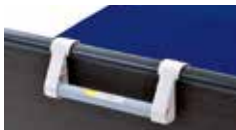

エアマット用ハンガー

PE500-A4050
■メーカー希望小売価格
1,836円(税込)

■TAISコード/00631-000223
■JANコード/4539940081795
■材質/バー部:POM、フック
部:ABS
■寸法/長さ33.5×幅10.5×高さ12.5cm
■質量/420g
■耐荷重/10kg



腰ボトムスパーサー(2個組)

PE502-A1
■メーカー希望小売価格
1,296円(税込)

■TAISコード/00631-000225
■JANコード/4539940081887
■材質/PP
■寸法/奥行2.6×幅5.0×高さ5.0cm
■質量/21g(1個当たり)
■耐荷重/120kg(2個使用時)

ミオレット MioLet II

32
種類の
組合せ



膝のフィッティングが好評の「ミオレット」に
待望の後継機登場！
対象疾患を広げ、使いやすさと安全性が
さらに向上しました
新たに83cm幅タイプも登場！

Mioletとは？

イタリア語で「私のベッド=Mio letto」
という言葉を短縮した造語です。

●特許第5089786号(手元スイッチ形状)



ウッディBR

P106-31AA

「サンキューポイントマットレス」とのセット例



ホワイトティBR

P106-31AB

「サンキューポイントマットレス」とのセット例

産学連携によって
研究開発された、
ユニバーサルを極めた
介護ベッド。

共同開発者




佐賀大学
医学部
地域医療科学教育研究センター福祉健康科学部門
松尾 清美 准教授

宮崎大学工学部卒。大学在学中に交通事故により車いす生活となる。多くの福祉機器メーカーとの研究開発をおこなうと共に、身体に障がいをお持ちの方々の住環境設計を1700件以上、福祉機器での生活行動支援を7500件以上実施。福祉住環境コーディネーター協会理事、日本障がい者スポーツ学会理事、日本リハビリテーション工学協会車いすSIG代表




キャスター装着例

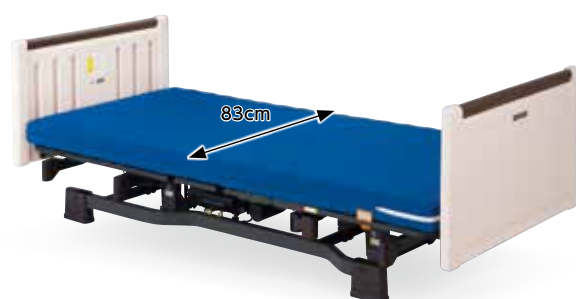

ミオレットII83cm幅と「ニューポイントマットレス」とのセット例

「身体のズレ軽減」に配慮した 4つのポイント機構

ミオレット
MioLet II

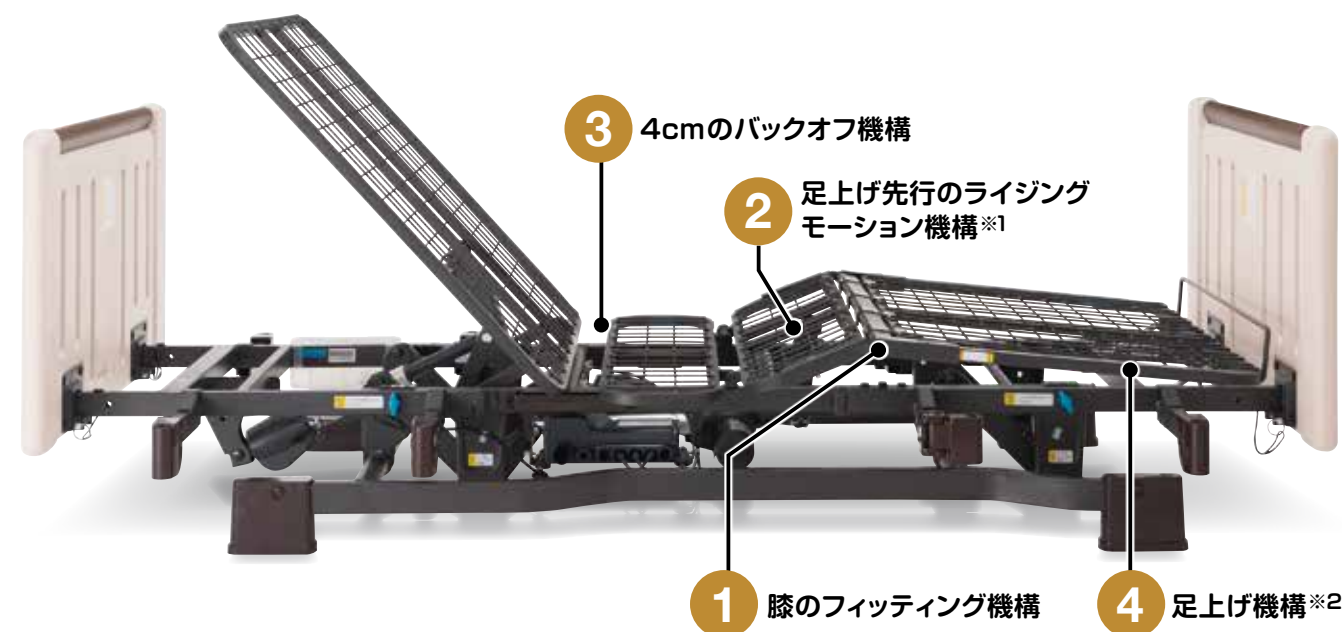


※1…背上げ1モーターおよび2モーターのみの機構となります。
※2…昇降1モーターでは、ご利用になれません。

1 背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機構

対応機種
背1
背2
背3

膝の位置とベッドの曲がる位置が合っていないと背上げ時に身体が足方向へズレてしまいます。ミオレットIIは利用者的大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトム
の屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレが少なく姿勢を崩しにくくなります。

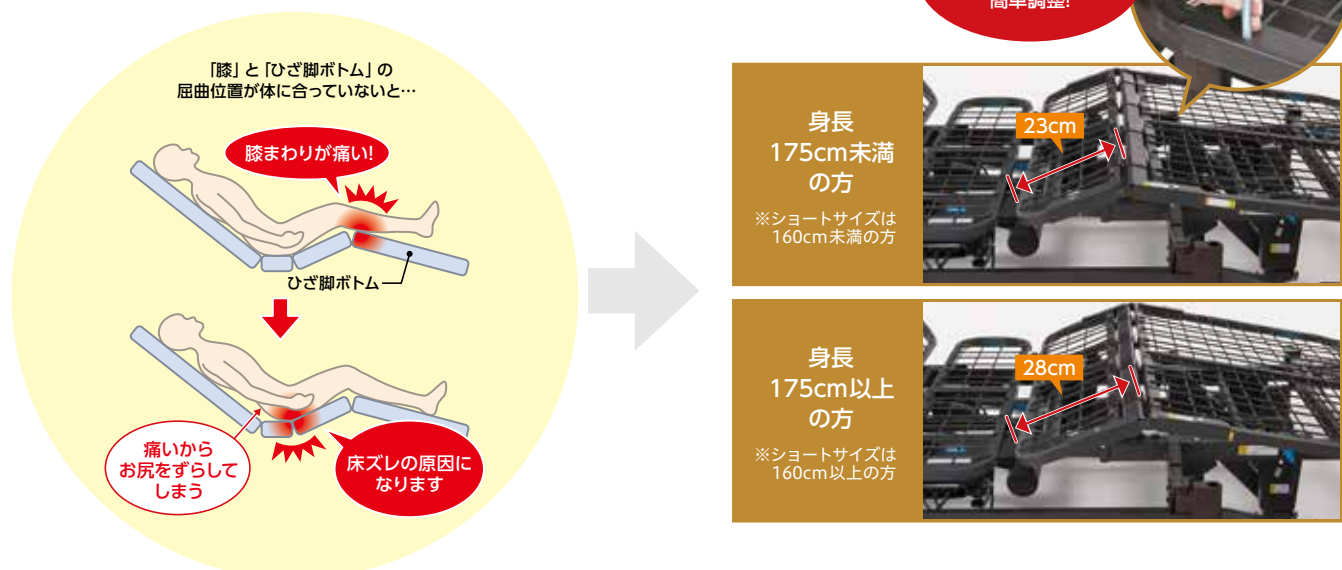


2 背上げ時のズレを抑える 1ボタン操作のライジングモーション機構

対応機種
背1
背2
背3

背上げボタンを押すと、自動的に膝から上がり、その後、背が上がりだす「ライジングモーション」。これにより、足方向へのズレを抑制します。

※背上げ単独の切り替えもワンタッチで可能です。

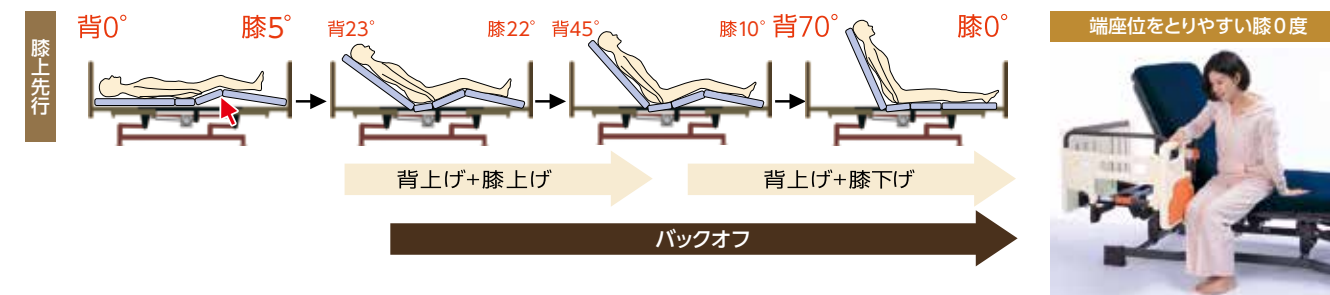


3 背圧・腹圧を軽減するバックオフ機構

対応機種
背1
背2
背3

背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、腹部や背中の圧迫感を軽減します。また、特殊な背上げ機能により、通常、腰付近にもかかる背圧は、肩付近にかかるように設計され、肩の後ろに手を差し込むだけでも大幅に除圧できます。

背上げ中に起きる背圧を放置すると呼吸困難になる恐れもあります。

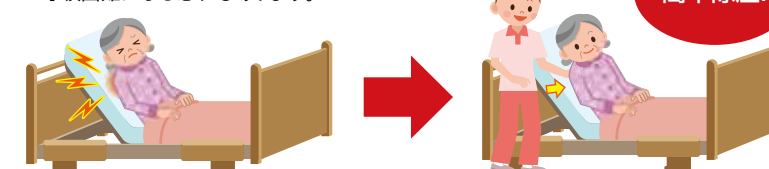

※背圧については、自分で体を動かす事ができない人は特にご注意ください。



4 足のむくみを軽減させる足上げ機構


対応機種
背1
背2
背3

足先上げか、足先下げを簡単に選ぶことができます。

足先上げ



足先下げ

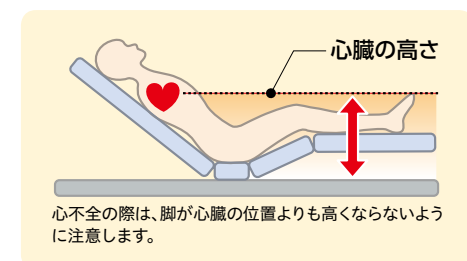

ひとくちメモ

寝た状態になると内臓が横に広がり、肺を圧迫し容積が小さくなります。結果、息苦しさを感ずることがあります。背上げ機能を使うことで、内臓が下がり肺の圧迫が無くなります。


腹部臓器による圧迫



床面高さが25～59cmまで昇降することで、
介助者の腰痛を防止できます。

足方向へ8cmスイングしながら昇降しますが、
25cmの最低床面高さと59cmの最高床面高さで
ヘッドボードは同じ位置になります。よってヘッド
ボード側は壁に近づけての設置が可能となります。

※背上げ1モーターは、ハンドルを回すことで
手動で床面高を25cm～40cmの間で調整
可能です。

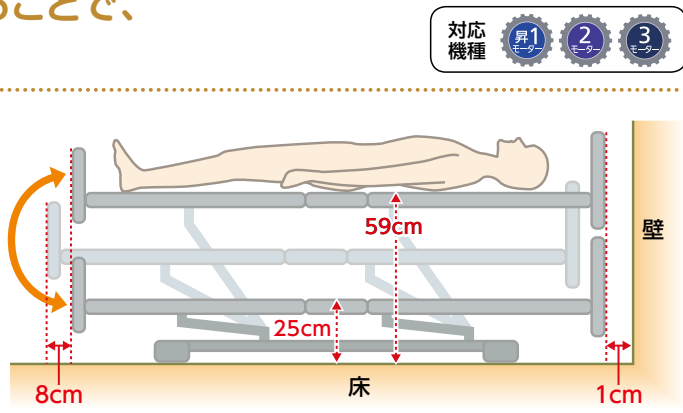


使用される方の身長やお部屋の大きさに合わせ、
レギュラーサイズとショートサイズをご用意しました。

全長サイズをレギュラーサイズからショートサイズ
へ切替が可能。

※背ボトム・ひざ脚ボトム・ヘッドフレーム・フットフ
レームの交換が必要となります。

本体サイズ (単位:cm)

ボードタイプ	レギュラーサイズ	ショートサイズ
ウッディタイプ	206.0	196.0
ホワイティタイプ		

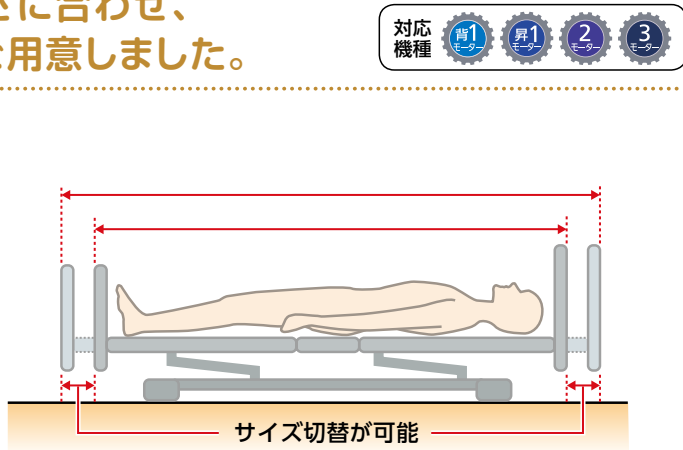

車椅子との移乗もすき間がなく
安心な収納式サイドレールホルダー



*収納式サイドレールホルダーは、左右それぞれ写真の1箇所のみとなります。他箇所は固定式となります。


利用者・介助者にやさしい
ユニバーサルデザインのボードを
2種類ご用意しました。

ユニバーサルデザインとは？
高齢であることや障がいの有無などにかかわらず、
すべての人が快適に利用できるような製品や建造物、
生活空間などのデザイン。

●ウッディBR



●伝い歩きの際に握りやすく終端がわかりやすいデザイン

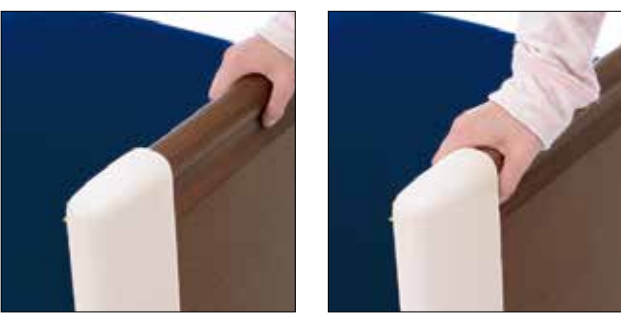

●ホワイティBR



●伝い歩きがしやすい
ボードトップ

●背の角度の目安となる
便利なマーク表示



ボード表面には…

EBコーティング
擦り傷、汚れ、日光に強いEB
コーティングを施しています。

「EBコーティング層」
強靱な塗膜で、擦り傷、汚れ、日光に強い

「透明エンボス・オレフィンフィルム」
導管・木肌・凹凸感を創出

「木目柄印刷層」
樹種デザインを表現

「着色ベース・オレフィンフィルム」



静音性・防水性にも優れた
デンマーク LINAK社製モーターを搭載

静音性・防水性 (IP×4) に優れたデンマークのLINAK社製モーターを搭載。
さらにお手入れがしやすくなりました。

※IP×4とは、全方向からの水の飛沫に対応した防水規格です。



機能

●背上げ1モーターベッド

マット幅	レギュラータイプ	ショートタイプ	 背上げ70° 背移動70°/22°  高さ調節(手動) 
90cm	●ウッディBR P106-11AA ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000238 ■JANコード/4539940075565 オープン価格 (非課税) ●ホワイティBR P106-11AB ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000239 ■JANコード/4539940075572 オープン価格 (非課税)	●ウッディBR P106-12AA ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000238 ■JANコード/4539940075640 オープン価格 (非課税) ●ホワイティBR P106-12AB ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000239 ■JANコード/4539940075657 オープン価格 (非課税)	
83cm	●ウッディBR P106-13AC ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000238 ■JANコード/4539940075909 オープン価格 (非課税) ●ホワイティBR P106-13AD ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000239 ■JANコード/4539940075916 オープン価格 (非課税)	●ウッディBR P106-14AC ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000238 ■JANコード/4539940075985 オープン価格 (非課税) ●ホワイティBR P106-14AD ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000239 ■JANコード/4539940075992 オープン価格 (非課税)	※手動によるベッドの昇降が可能です。

●昇降1モーターベッド

マット幅	レギュラータイプ	ショートタイプ	 昇1モーター  高さ調節 
90cm	●ウッディBR P106-41AA ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000244 ■JANコード/4539940075626 オープン価格 ●ホワイティBR P106-41AB ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000237 ■JANコード/4539940075633 オープン価格	●ウッディBR P106-42AA ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000244 ■JANコード/4539940075701 オープン価格 ●ホワイティBR P106-42AB ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000237 ■JANコード/4539940075718 オープン価格	
83cm	●ウッディBR P106-43AC ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000244 ■JANコード/4539940075961 オープン価格 ●ホワイティBR P106-43AD ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000237 ■JANコード/4539940075978 オープン価格	●ウッディBR P106-44AC ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000244 ■JANコード/4539940001052 オープン価格 ●ホワイティBR P106-44AD ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000237 ■JANコード/4539940001069 オープン価格	







●2モーターベッド

マット幅	レギュラータイプ	ショートタイプ	 2モーター  背上げ70° 背移動70°/22°  高さ調節 
90cm	●ウッディBR P106-21AA ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000240 ■JANコード/4539940075589 オープン価格 (非課税) ●ホワイティBR P106-21AB ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000241 ■JANコード/4539940075596 オープン価格 (非課税)	●ウッディBR P106-22AA ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000240 ■JANコード/4539940075664 オープン価格 (非課税) ●ホワイティBR P106-22AB ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000241 ■JANコード/4539940075671 オープン価格 (非課税)	
83cm	●ウッディBR P106-23AC ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000240 ■JANコード/4539940075923 オープン価格 (非課税) ●ホワイティBR P106-23AD ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000241 ■JANコード/4539940075930 オープン価格 (非課税)	●ウッディBR P106-24AC ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000240 ■JANコード/4539940001014 オープン価格 (非課税) ●ホワイティBR P106-24AD ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000241 ■JANコード/4539940001021 オープン価格 (非課税)	

●3モーターベッド

マット幅	レギュラータイプ	ショートタイプ	 3モーター  背上げ70° 背移動70°/18°  膝上げ18° 高さ調節 
90cm	●ウッディBR P106-31AA ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000242 ■JANコード/4539940075602 オープン価格 (非課税) ●ホワイティBR P106-31AB ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000243 ■JANコード/4539940075619 オープン価格 (非課税)	●ウッディBR P106-32AA ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000242 ■JANコード/4539940075688 オープン価格 (非課税) ●ホワイティBR P106-32AB ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000243 ■JANコード/4539940075695 オープン価格 (非課税)	
83cm	●ウッディBR P106-33AC ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000242 ■JANコード/4539940075947 オープン価格 (非課税) ●ホワイティBR P106-33AD ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000243 ■JANコード/4539940075954 オープン価格 (非課税)	●ウッディBR P106-34AC ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000242 ■JANコード/4539940001038 オープン価格 (非課税) ●ホワイティBR P106-34AD ■メーカー希望小売価格 ■TAISコード/00631-000243 ■JANコード/4539940001045 オープン価格 (非課税)	

仕様

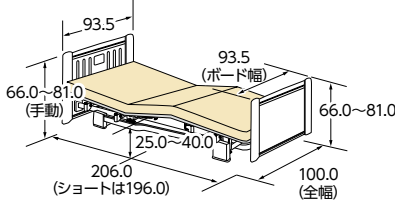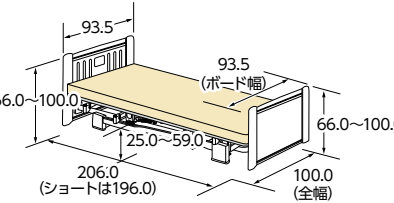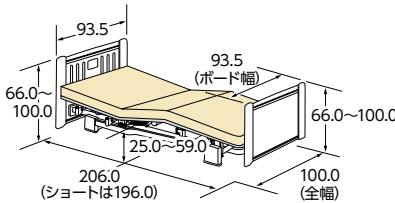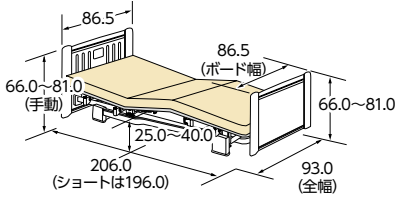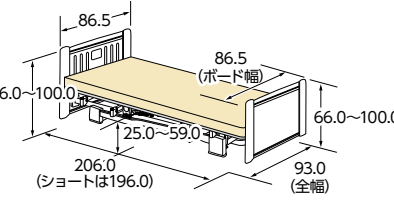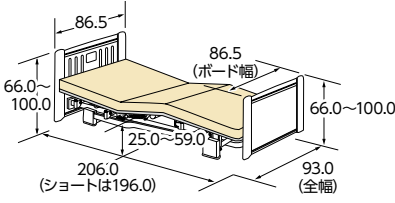90cm	背上げ1モーター (※1)	昇降1モーター (※1、※2)	2モーター／3モーター (※1、※2)
	●レギュラータイプ ●ショートタイプ (単位:cm) 	●レギュラータイプ ●ショートタイプ (単位:cm) 	●レギュラータイプ ●ショートタイプ (単位:cm) 
83cm	背上げ1モーター (※3)	昇降1モーター (※2、※3)	2モーター／3モーター (※2、※3)
	●レギュラータイプ ●ショートタイプ (単位:cm) 	●レギュラータイプ ●ショートタイプ (単位:cm) 	●レギュラータイプ ●ショートタイプ (単位:cm) 

※1. サイドレールホルダー使用時は全幅100.0cmとなります。 ※2. 昇降時はスイングしながら昇降する為、脚側は8cm以上、頭側は1cm以上のスペースが必要です。
※3. サイドレールホルダー使用時は全幅93.0cmとなります。 ※床からベースフレームの間は6.0cmとなります。

			背上げ1モーター	昇降1モーター	2モーター	3モーター
材質			本体ユニット：スチール、ABS、PP 樹脂ボード：PE			
床面高			25.0～40.0cm(手動)	25.0～59.0cm		
			専用ハイトスペーサー〈PC501-FU45〉装着時：+4.5cm 専用キャスター〈PC503-8CK1〉装着時：+3.5cm			
マットレス適合寸法		90cm 幅	長さ：190.0～192.0cm(ショートタイプ182.0cm)、 幅：88.0～91.0cm(全タイプ共通)、厚さ：最大厚18.0cm以下			
		83cm 幅	長さ：190.0～192.0cm(ショートタイプ182.0cm)、 幅：83.0cm(全タイプ共通)、厚さ：最大厚18.0cm以下			
定格消費電力			70W	100W		
電源			100V(50/60Hz)			
原産国			ベトナム			
モーター部			LINAK社製			
質量	90cm 幅	レギュラーサイズ	76.5kg	72.5kg	77.0kg	78.0kg
		ショートサイズ				
	83cm 幅	レギュラーサイズ	75.0kg	71.0kg	75.5kg	76.5kg
		ショートサイズ				
梱包			5 梱包			
最大使用者体重			120kg／安全使用荷重：1700N			

専用オプション

※その他オプションはP40~P45、P48をご覧ください。

 ミオレット・フォーユー、ミオレットII用 45mm/ハイトスペーサー(4個組) PC501-FU45 ■メーカー希望小売価格 7,452円(税込) ■TAISコード/00631-000205 ■JANコード/4539940081726 ■材質/PP ■装着時床面高/+4.5cm ※固定脚仕様でガス圧式昇降ベッドテーブルをご使用の際は、当該商品が必要となります。 ※キャスターとの併用はできません。	 ミオレットII専用キャスター(4個組) PC503-8CK1 ■メーカー希望小売価格 21,060円(税込) ■TAISコード/00631-000236 ■JANコード/4539940082143 ■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS ■キャスター使用時床面高/+3.5cm ※ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個の4個組	 使用例 手元スイッチホルダー PE501-D40 ■メーカー希望小売価格 1,188円(税込) ■TAISコード/00631-000224 ■JANコード/4539940081801 ■材質/PP ■寸法/長さ21.7×幅7.6×高さ5.3cm ■質量/60g	 使用例 エアマット用ハンガー PE500-A4050 ■メーカー希望小売価格 1,836円(税込) ■TAISコード/00631-000223 ■JANコード/4539940081795 ■材質/バー部:POM、フック部:ABS ■寸法/長さ33.5×幅10.5×高さ12.5cm ■質量/420g ■耐荷重/10kg
---	---	---	---

Primolet
プリモレット

自費レンタルベッドとしても使えるよう 2分割構造にした介護ベッド

〈ベッド用グリップを装着できるベーシックモデル〉



「ニューポイントマットレス」と
「サイドレール PA505-75」との組み合わせ例



機能

●背上げ1モーターベッド



背上げ70° 背膝連動70°/19°



自立支援介護用1モーターベッド

PZB-ES1JFA

■メーカー希望小売価格

138,000円 **非課税**

※プリモレット専用キャスター（6個組）と同時
購入の場合、課税となります。

■TAISコード／00631-000183
■JANコード／4539940073547

特徴

- 背を下げるときは、モーターの力で直接引かない安心のフリーホイール構造（P60写真参照）
- 床面高さは、24.0cmと31.0cmの2段階に調整可能（専用オプション使用で20.5～38.0cmに調整可能）
- ベッド用グリップなど介護用オプション機器を使用可能
- ワイヤーの装着で背膝連動も可能
- 本体は搬入性を考慮した2分割構造
- 通気性に優れたワイヤーメッシュの床面構造



2分割イメージ


背膝連動用ワイヤー

立ち上がりや移乗をサポートする
ベッド用グリップも取り付けできます。



ベッド用グリップ「ニーパロPII」等の装着例

仕様

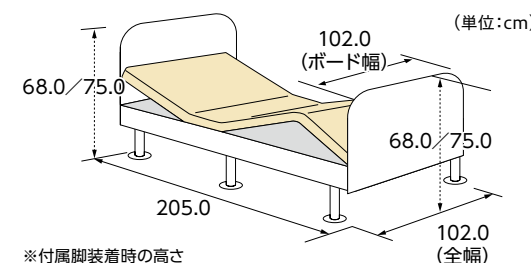

※付属脚装着時の高さ

材質	本体部：スチール ヘッド・フットボード部：プリント紙化粧繊維板、PU塗装 サイドパネル：天然木、PU塗装
マットレス適合寸法	全長 190.0～193.0cm、幅 88.0～90.0cm
定格消費電力	50W
電源	100V (50/60Hz)
原産国	ベトナム
モーター部	LIMOSS社製
質量	62.5kg
梱包	3梱包
最大使用者体重	120kg／安全使用荷重：1700N

延長脚の組み合わせ、キャスターと延長脚の組み合わせと床面高さ

（単位：cm）

	標準付属		別売延長脚追加時			キャスターと延長脚の組み合わせ					
延長脚	14.0	14.0+7.0	3.5+7.0	14.0+3.5	14.0+14.0	7.0	14.0	14.0+7.0	3.5+7.0	14.0+3.5	14.0+14.0
床面高	24.0	31.0	20.5	27.5	38.0	21.0	28.0	35.0	24.5	31.5	42.0

※安全のため、プリモレットに装着できる延長脚は2本までとなっております。

※7cm延長脚1本のみでの設置はできません。

専用オプション

※その他オプションはP40～P45、P48をご覧ください。

プリモレット専用延長脚

高さ調節用14cm延長脚（6個組）	
PDP-140G（6pcs）	■メーカー希望小売価格 5,940円（税込）
■JANコード／4539940081559	
高さ調節用7cm延長脚（6個組）	
PDP-70G（6pcs）	■メーカー希望小売価格 5,940円（税込）
■JANコード／4539940081566	
高さ調節用3.5cm延長脚（6個組）	
PDP-35G（6pcs）	■メーカー希望小売価格 5,940円（税込）
■JANコード／4539940081573	

※このベッドに装着できるオーバーテーブルはご用意しておりません。

ベッドを移動する方におすすめの 専用キャスター



ストッパー付×2個
ストッパー無し×4個

プリモレット専用キャスター（6個組）

PPL-8CK6S（6pcs）

■メーカー希望小売価格
29,808円（税込）

■TAISコード／00631-000160
■JANコード／4539940081474

※ベッドとキャスターを同時購入の場合、合計178,848円（税込）となります。


レール周りの隙間と事故事例

在宅介護用ベッドの JIS規格での隙間の基準(抜粋)

事故が多いレール周りの隙間について、JIS規格(JIS T 9254)では下記の通り規定されました。

- ①レール周りのAにおいて図1の様な直径6cmの円柱形の物を50N(約5.1kg)で押さえても図2の様にレールの下に行かないこと。もしくは23.5cm以上の隙間があること。
- ②ベッド用グリップ周りのBにおいて図3の様な円錐形の物を50N(約5.1kg)で押しても通過しないこと。
- ③レール周りのCにおいて図3の様な円錐形の物を力を加えずに差し込み通過しないこと。

JISマーク表示製品であっても、利用者の方の使用方法・身体状況の変化など、様々な要因で事故が起こる可能性があります。ご使用の際は、取扱説明書などの記載事項を守り、十分に注意を払う必要があります。

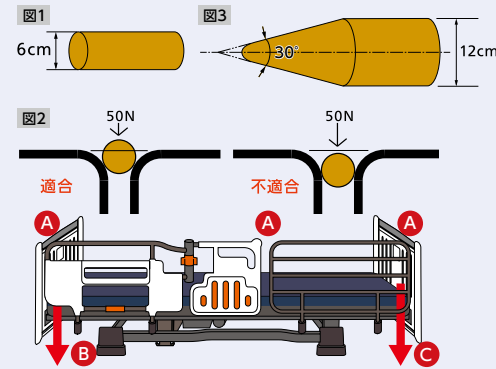

ベッド用グリップとサイドレールを組み合わせてご使用される際の隙間

	PF500-116 (頭側)	PA505-75 (脚側)
ミオレットフォーユー	3.0cm	3.5cm
ミオレットII	3.0cm	3.5cm
プリモレット	2.0cm	2.0cm

	PF500-116 (頭側)	PA505-44 (脚側)
ミオレットフォーユー	3.0cm	34.5cm
ミオレットII	3.0cm	34.5cm
プリモレット	2.0cm	2.0cm

※ミオレット・フォーユーショートタイプ、ミオレットIIショートタイプの場合、レール類とボードの長手方向隙間はございません。短手方向は約5mmとなります。(右図参照)

	PF500-116 (頭側)	PA505-44 (脚側)
ミオレットフォーユー	3.0cm	3.5cm
ミオレットII	3.0cm	3.5cm
プリモレット	2.0cm	3.5cm

ロングサイドレールと他のサイドレールを組み合わせてご使用される際の隙間

	PA505-96 (頭側)	PA505-96 (脚側)
ミオレットフォーユー	3.0cm	3.0cm
ミオレットII	3.0cm	3.0cm
プリモレット	2.0cm	2.0cm

	PA505-96 (頭側)	PA505-44 (脚側)
ミオレットフォーユー	3.0cm	55.0cm
ミオレットII	3.0cm	55.0cm
プリモレット	2.0cm	2.0cm

	PA505-96 (頭側)	PA505-75 (脚側)
ミオレットフォーユー	3.0cm	24.0cm
ミオレットII	3.0cm	24.0cm
プリモレット	2.0cm	24.0cm

	PA505-96 (頭側)	PA505-44 (脚側)
ミオレットフォーユー	3.0cm	24.0cm
ミオレットII	3.0cm	24.0cm
プリモレット	2.0cm	24.0cm

レギュラーサイドレールと他のサイドレールを組み合わせてご使用される際の隙間

	PA505-75 (頭側)	PA505-75 (脚側)
ミオレットフォーユー	3.0cm	45.0cm
ミオレットII	3.0cm	45.0cm
プリモレット	2.0cm	45.0cm

	PA505-75 (頭側)	PA505-44 (脚側)
ミオレットフォーユー	3.0cm	76.0cm
ミオレットII	3.0cm	76.0cm
プリモレット	2.0cm	76.0cm

	PA505-75 (頭側)	PA505-44 (脚側)
ミオレットフォーユー	3.0cm	45.0cm
ミオレットII	3.0cm	45.0cm
プリモレット	2.0cm	45.0cm

取扱説明書をよく読み、有効性と危険性を認識し、正しく使うことが危険を回避する一番の近道です！

事故に関することは、「医療・介護ベッド安全普及協議会」のホームページを参照下さい。「ベッド 安全」で検索！

施設用ベッド

Ultilet アルティレット・トゥーユー
To you



Ultilet アルティレット





センターロックと5モーション機構※を搭載した 施設用低床電動ベッド

※ライジングモーションは2モーターのみ



Ultiletとは？

「Ultimate(アルティメット=英語で究極)」と「Letto(レット=イタリア語でベッド)」という言葉を組み合わせた造語です。

- 特許第5089785号(ランバー機構)
- 特許第5089786号(手元スイッチ形状)



ボルドー

P101-31AA1

「サンキューポイントマットレス」とのセット例



アンバー

P101-31AA2

「ニューポイントマットレス」とのセット例

特徴

- 医学的配慮
5モーション機構により、背上げ時に発生する「背圧・腹圧・身体のズレ」の低減・緩和を目指しました。
- 安全・安心への配慮
様々な事故事例、ヒヤリハットを参考に0から設計した5モーション機構をはじめ、センターロック機構、バンパー搭載など、介護する方、介護される方、それぞれの安全・安心を追求しました。
- 操作性への配慮
片麻痺の方など障がいをお持ちの方に配慮した手元スイッチ、伝い歩きを考慮したボード形状を目指しました。




アプリコット

P101-31AA3


「ピカムポイントマットレス」とのセット例

3色から選べる高級感のある木デザイン


ボルドー・アンバー・アプリコットの3色からお選びいただけます。

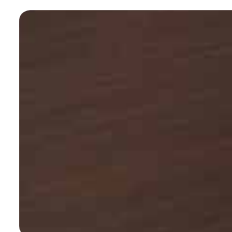

ボルドー (bordeaux)

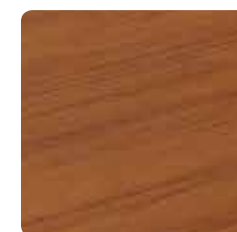


アンバー (amber)

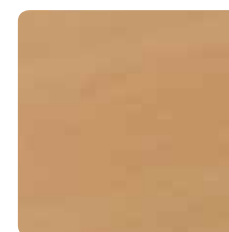


アプリコット (apricot)

EBコーティング

擦り傷、汚れ、日光に強いEBコーティングを施しています。

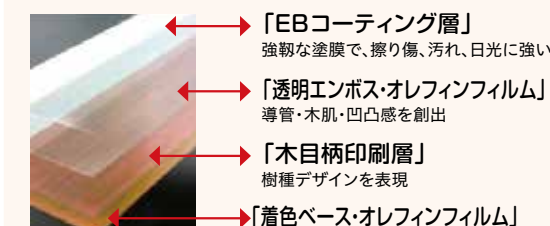


背上げ時に発生する「背圧・腹圧・身体のスレ」に配慮した 5モーション機構

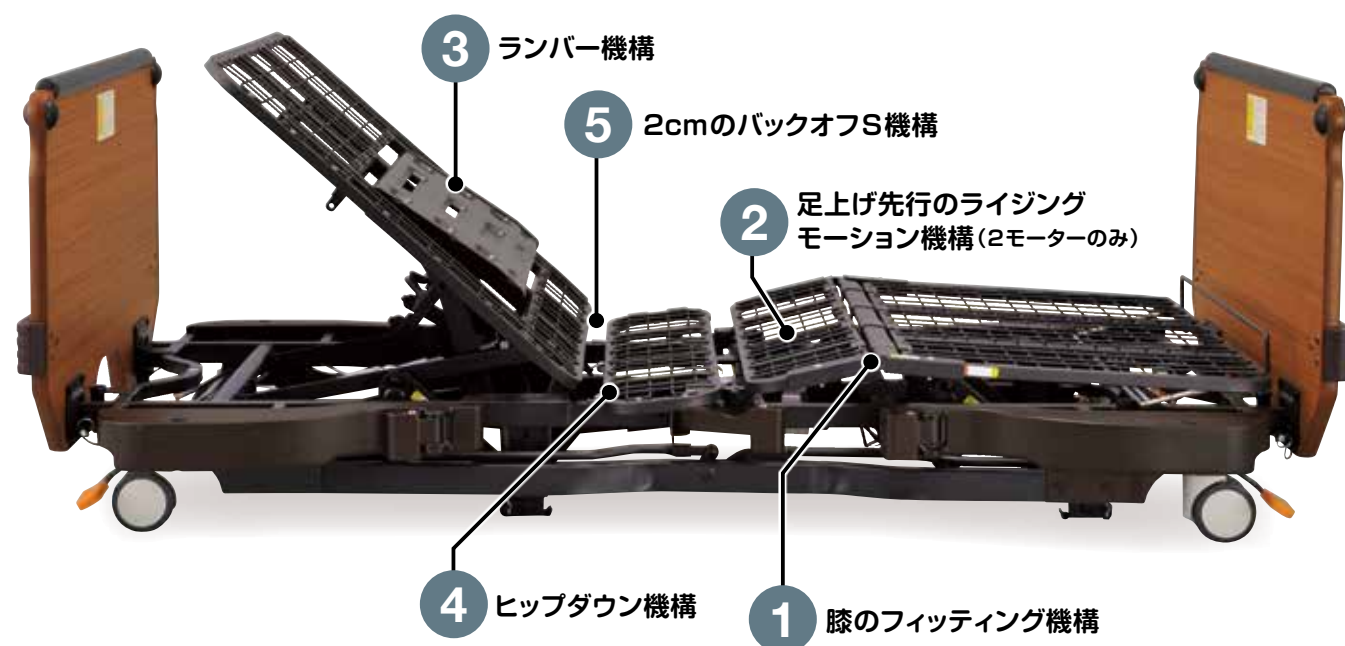

1 背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機構

対応機種 2 3


膝の位置とベッドの曲がる位置が合っていないと背上げ時に身体が足方向へズレてしまいます。アルティレット・トゥーユーは利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレが少なく姿勢を崩しにくくなります。

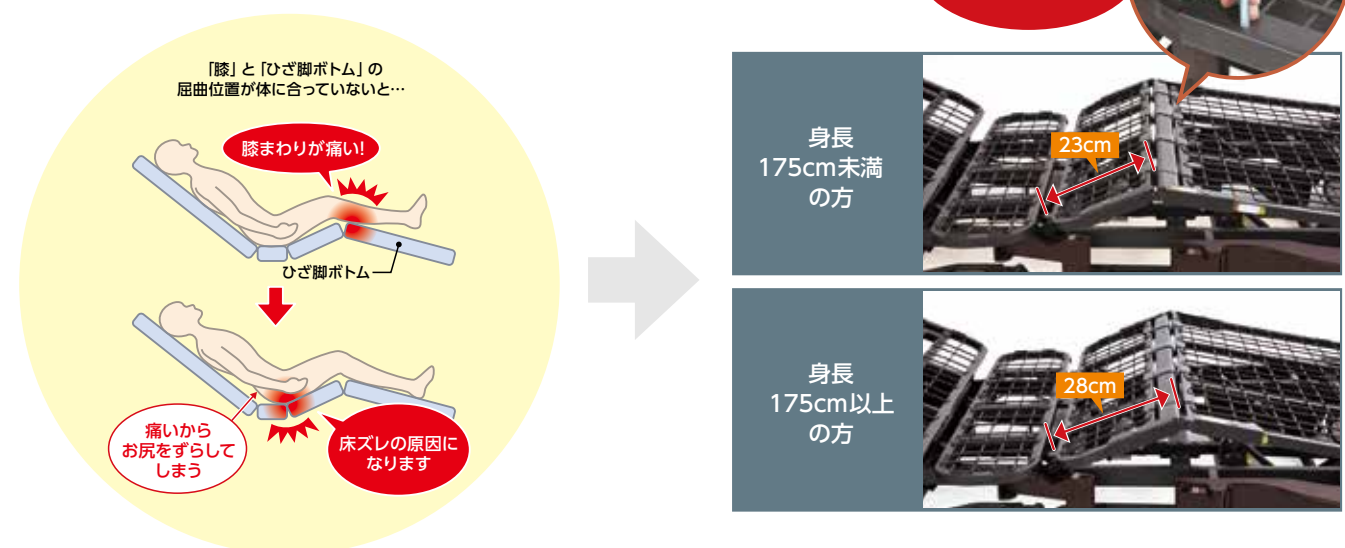

2 背上げ時のズレを抑える 1ボタン操作のライジングモーション機構

対応機種 2

背上げボタンを押すと、自動的に膝から上がり、その後、背が上がりだす「ライジングモーション」。これにより、足方向へのズレを抑制します。
※背上げ単独の切り替えもワンタッチで可能です。

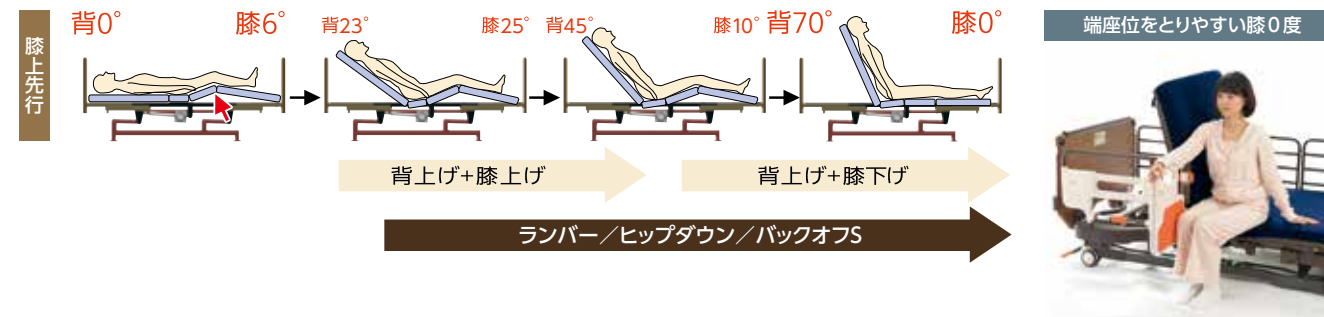

3 背上げ時の背圧を軽減し、 呼吸を楽にするランバー機構

対応機種 2 3

背圧軽減のため、背上げ時は「背抜き機構」、背下げ時は「牽引感(背が引っぱられる感覚)軽減」をランバーの動きで実現。ランバー機構により背上げ時、背下げ時の背圧、腹圧軽減を実現しました。

※ON/OFF切替可能



4 骨盤を起し姿勢を崩しにくく するヒップダウン機構

対応機種 2 3


背上げと同時に、自動的に臀部のボトムが傾斜します。これにより、骨盤を起し、ズレを抑制します。




5 背圧・腹圧を軽減するバックオフS機構

対応機種 2 3

背ボトムを後方に2cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、腹部や背中への圧迫感を軽減します。また、特殊な背上げ機能により、通常、腰付近にもかかる背圧は、肩付近にかかるように設計され、肩の後ろに手を差し込むだけでも大幅に除圧できます。

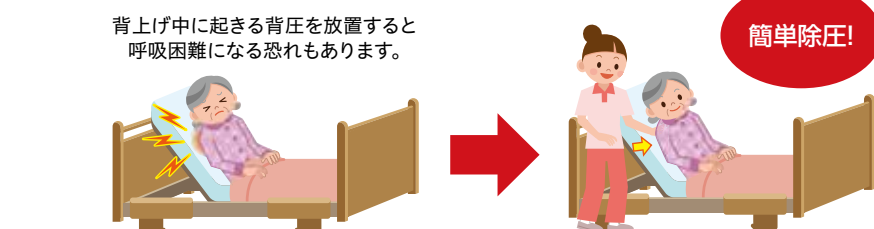

※背圧については、自分で体を動かす事ができない人は特にご注意ください。

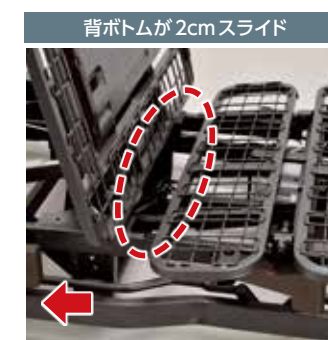


足のむくみを軽減させる足上げ機構では、
足先上げか、足先下げを簡単に選ぶことができます。

対応機種 2 3

足先上げ



足先下げ

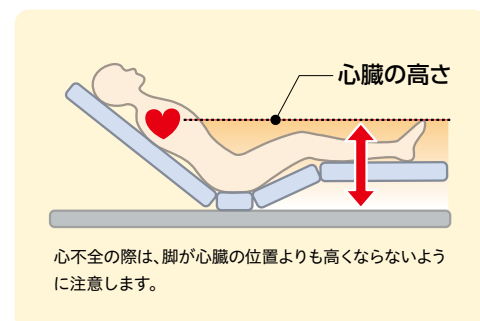

ひとくちメモ

寝た状態になると内臓が横に広がり、
肺を圧迫し容積が小さくなります。
結果、息苦しさを感ずることがあります。
背上げ機能を使うことで、内臓が下がり
肺の圧迫が無くなります。

腹部臓器による圧迫




隙間による事故に配慮した安全の隙間設計

対応機種 2 3




事故が起きにくい安心の隙間設計です。

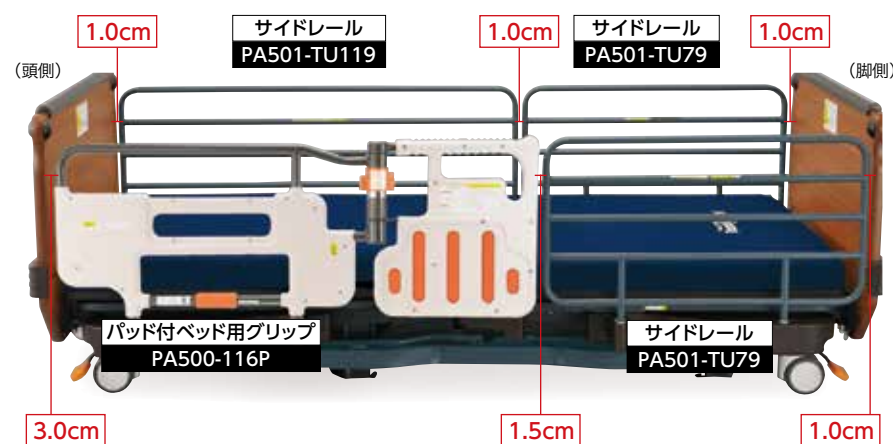

スイング式サイドレールホルダー



オプションのロングサイドレール
PA501-TU119(P46)で「真ん中
差し」でのご使用が可能です。また
中央のサイドレールホルダーを使
用しない時は、収納できるため移
乗の妨げとなりません。

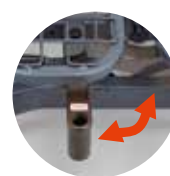

頭側、脚側、左右どこからでも ロックできるセンターペダル、 サイドペダル搭載


センターはもちろん、左右からもロックが掛けやすい構造。
設置方向を問わずロックが簡単なので、スタッフの負担軽
減に繋がります。



床面高さが25～63cmまで昇降することで、
介助者の腰痛を防止できます。

対応機種 2 3

足方向へ8cmスイングしながら昇降しますが、25cmの最低
床面高さと63cmの最高床面高さでヘッドボードは同じ位置
になります。よってヘッドボード側は壁に近づけての設置が可
能となります。

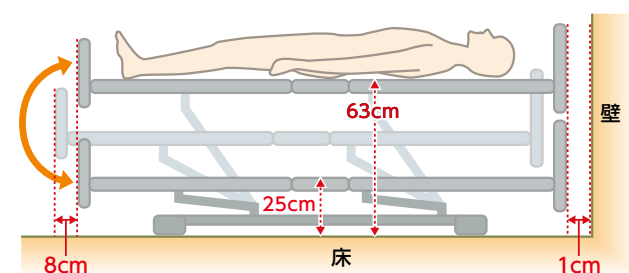

伝い歩きの際に握りやすく 終端がわかりやすい 球状デザイン



細かな部分にもこだわった機能面


対応機種 2 3



サイドレール収納ホルダー




点滴棒取り付け穴

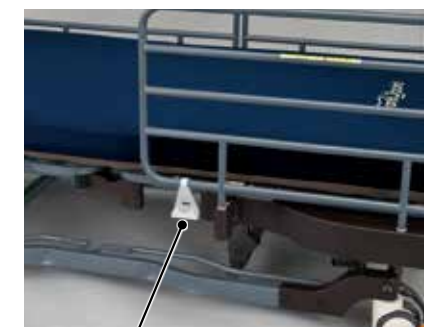

ハルンバッグ用フック

車椅子との移乗もすき間がなく安心な収納式サイドレールホルダー

対応機種 2 3

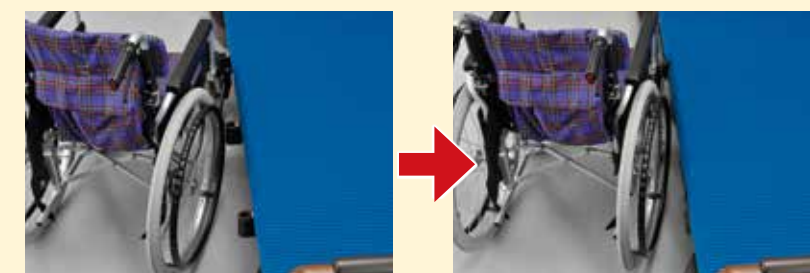

サイドレールホルダーが収納できると、車椅子をベッドに密着させることが可能になり、
移乗を楽に行うことができます。

持ちやすく使いやすいユニバーサルデザインに基づく ニューデザインの手元スイッチ



麻痺・リウマチ・握力の弱い 方でも保持しやすい ダブル・ホールドマウント

指の間ではさめるので、麻痺側の手でも落ちにくく、
使いやすくなりました。



サイドレールやボードからの落下を考慮し、 掛けやすい形状を追求



引っ掛かりの少ないスムーズなスライド

静音性・防水性にも優れた デンマーク LINAK 社製モーターを搭載

静音性・防水性 (IP×4) に優れたデンマークのLINAK社製モーターを搭載。さらにお手入れ
がしやすくなりました。また、深夜でも気兼ねなくベッド操作が可能です。


※IP×4とは、全方向からの水の飛沫に対応した防水規格です。



仕様

2モーター／3モーター

(単位:cm)

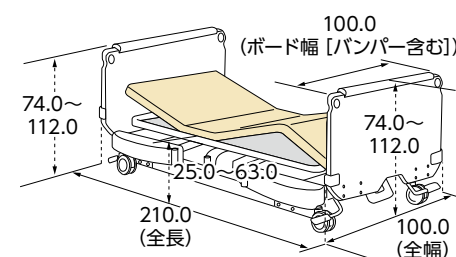

※センターサイドレールホルダー使用時は全幅 100.0cm となります。
※昇降時はスイングしながら昇降する為、脚側は 8cm 以上、頭
側は 1cm 以上のスペースが必要です。
※床からベースフレームの間は 6.0cm となります。

	2モーター	3モーター
材質	本体部: スチール、ABS ヘッド・フットボード: MDF オレフィン化粧板、天然木	
背角度	0~70度	
膝角度	0~25度	0~18度
床面高	25.0~63.0cm	
マットレス 適合寸法	全長 190.0~195.0cm、 幅 88.0~91.0cm	
定格消費電力	100W	
電源	100V	
原産国	ベトナム	
モーター部	LINAK 社製	
質量	116.5kg	120.0kg
梱包	4 梱包	
最大使用者体重	120kg / 安全使用荷重: 1700N	

●ボルドー

●2モーターベッド

P101-21AA1
■メーカー希望小売価格
496,800円(税込)
■JANコード / 4539940073738



●3モーターベッド

P101-31AA1
■メーカー希望小売価格
529,200円(税込)
■JANコード / 4539940073790



●アンバー

●2モーターベッド

P101-21AA2
■メーカー希望小売価格
496,800円(税込)
■JANコード / 4539940073875



●3モーターベッド

P101-31AA2
■メーカー希望小売価格
529,200円(税込)
■JANコード / 4539940073806



●アプリコット

●2モーターベッド

P101-21AA3
■メーカー希望小売価格
496,800円(税込)
■JANコード / 4539940073752



●3モーターベッド

P101-31AA3
■メーカー希望小売価格
529,200円(税込)
■JANコード / 4539940073813



専用オプション

※その他オプションはP40~P43、P46~P48をご覧ください。



手元スイッチホルダー

PE501-D40

■メーカー希望小売価格
1,188円(税込)
■JANコード / 4539940081801
■材質 / PP
■寸法 / 長さ21.7×幅7.6×高さ5.3cm
■質量 / 60g



エアマット用ハンガー

PE500-A4050

■メーカー希望小売価格
1,836円(税込)
■JANコード / 4539940081795
■材質 / パー部:POM
フック部:ABS
■寸法 / 長さ33.5×幅10.5×高さ12.5cm
■質量 / 420g
■耐荷重 / 10kg



腰ボトム Spacer (2個組)

PE502-A1

■メーカー希望小売価格
1,296円(税込)
■JANコード / 4539940081887
■材質 / PP
■寸法 / 奥行2.6×幅5.0×高さ5.0cm
■質量 / 21g (1個当たり)
■耐荷重 / 120kg (2個使用時)

Ultilet
アルティレット

8
種類の
組合せ

隙間
適合
Platz

●特許第5089786号(手元スイッチ形状)

膝のフィッティング機構、ライジングモーション※を搭載した 施設用低床電動ベッドのスタンダードモデル

※ライジングモーションは2モーターのみ



ダークブラウン



「ピカムポイントマットレス」
との組み合わせ例

利用者の膝の位置に合わせ 曲がる位置を調節できるフィッティング機構

対応
機種 2 3

膝の位置とベッドの曲がる位置が合っていないと背上げ時に身体が足方向へズレてしまいます。アルティレットは利用者的大腿部の長さに合わせて、パーツの変更なしでひざ脚ボトム
の屈曲位置を3段階に調節できるので、ズレが少なく姿勢を崩しにくくなります。

ピンを外して
左右にずらすだけの
簡単調整!

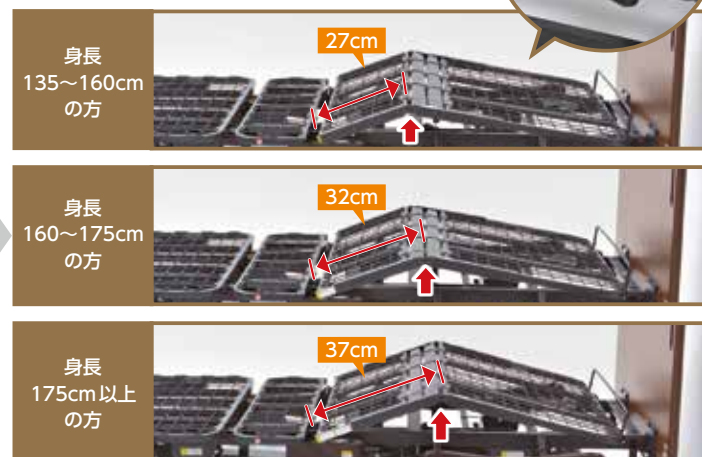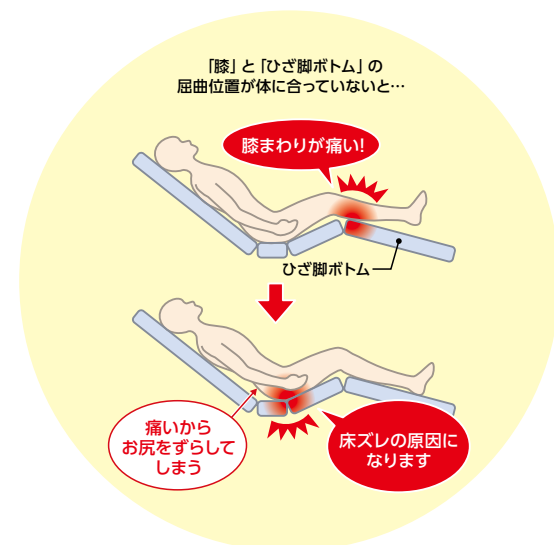

特徴



固定脚仕様




ライトブラウン

「ユービーポイントマットレス」
との組み合わせ例

1ボタン操作のライジングモーション機構

対応
機種 2

背上げボタンを押し続けるだけの簡単操作で図のように動作し、
膝角度の動きは下図のように2種類に設定できます。

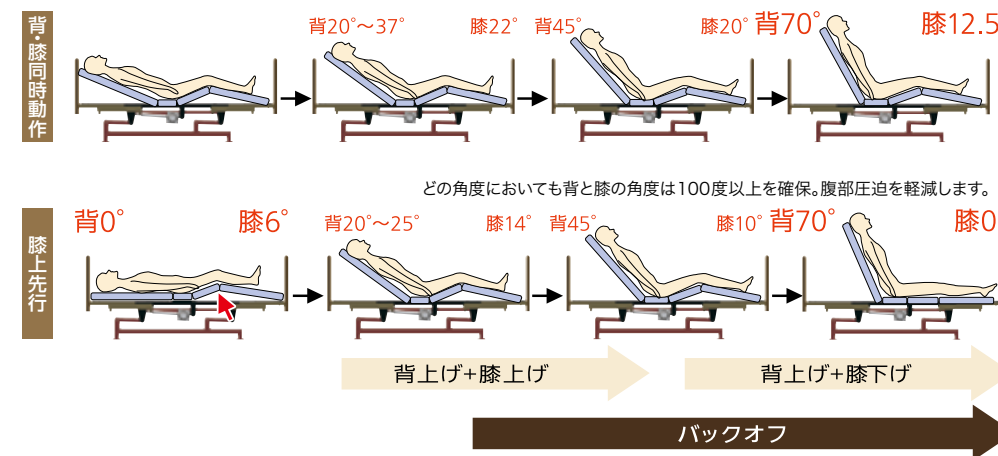

ズレにくい膝上げ保持

どちらでも設定可能

端座位をとりやすい膝0度



アルティレットは「介護を受けられる方・される方」の 質の高いご満足を目指したベッドです。

背圧・腹圧を軽減するバックオフ機構

背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、腹部や背中への圧迫感を軽減します。また、特殊な背上げ機能により、通常、腰付近にかかる背圧は、肩付近にかかるように設計され、肩の後ろに手を差し込むだけでも大幅に除圧できます。



※背圧については、自分で体を動かす事ができない人は特にご注意ください。



隙間による事故に配慮した安全の隙間設計



事故が起きにくい安心の隙間設計です。

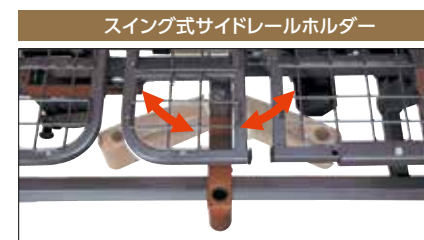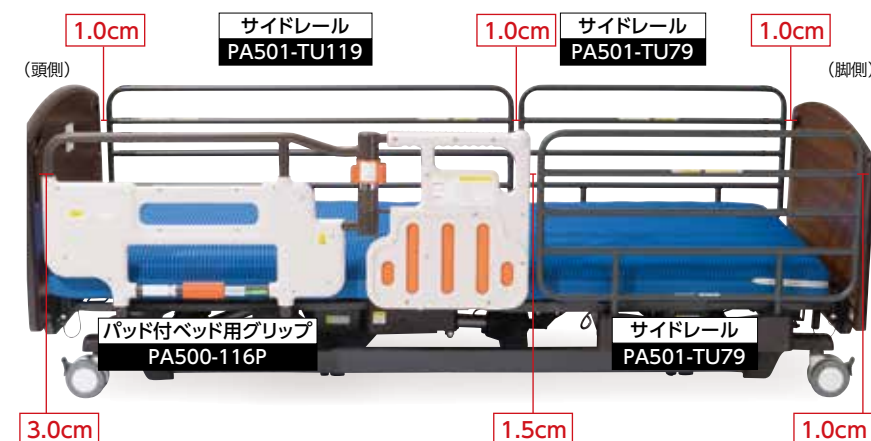


収納を忘れた場合でも左右に動くため、足をぶつけてもケガをしにくい設計です。オプションのロングサイドレールPA501-TU119(P46)で「真ん中差し」でのご使用が可能です。



ロック操作をしやすい様にボード形状をカット。足先のケガへの配慮です。

床面高さが25～63cmまで昇降することで、 介助者の腰痛を防止できます。

身長の高い方でも立ち上がりやすい高さに設定できます。また、63cmまで上げることができ、介助者の腰への負担を軽減できます。

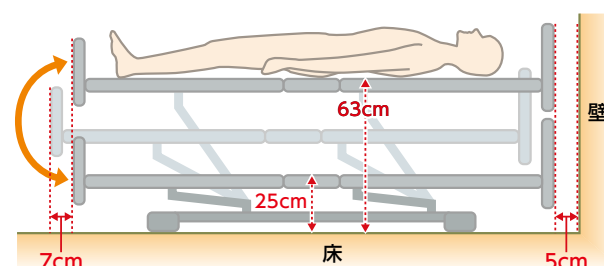

静音性・防水性にも優れた デンマーク LINAK社製モーターを搭載

静音性・防水性(IP×4)に優れたデンマークのLINAK社製モーターを搭載。さらにお手入れがしやすくなりました。


※IP×4とは、全方向からの水の飛沫に対応した防水規格です。



仕様

2モーター／3モーター(※1、※2)

(単位:cm)

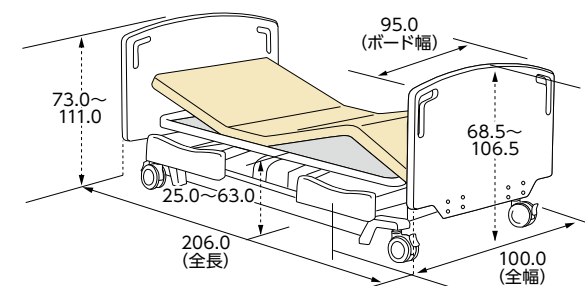

※1. センターサイドレールホルダー使用時は全幅103.5cmとなります。
※2. 昇降時はスイングしながら昇降する為、脚側は7cm以上、頭側は5cm以上のスペースが必要です。
※床からベースフレームの間は5.7cmとなります。

	2モーター	3モーター
材質	本体部: スチール、ABS ヘッド・フットボード: プリント紙化粧板、PU塗装	
背角度	0～70度	
膝角度	0～22度	0～17度
床面高	25.0～63.0cm	
マットレス適合寸法	全長190.0～193.0cm、幅88.0～91.0cm	
定格消費電力	90W	
電源	100V	
原産国	本体: ベトナム 木部: 中国、ベトナム	
モーター部	LINAK社製	
質量 (カスター仕様の場合)	97.0kg (97.5kg)	98.5kg (99.0kg)
梱包	4梱包(カスター仕様は5梱包)	
最大使用者体重	120kg/安全使用荷重: 1700N	

●ダークブラウン

●2モーターベッド

カスター仕様	固定脚仕様	
P109-22AA ■メーカー希望小売価格 388,800円(税込) ■JANコード/4539940075497	P109-21AA ■メーカー希望小売価格 340,000円(非課税) ■JANコード/4539940075480	2モーター 背上げ70° 背降運動70°/22° 高さ調節

●3モーターベッド

カスター仕様	固定脚仕様	
P109-32AA ■メーカー希望小売価格 421,200円(税込) ■JANコード/4539940075534	P109-31AA ■メーカー希望小売価格 370,000円(非課税) ■JANコード/4539940075527	3モーター 背上げ70° 背降運動70°/17° 膝上げ17° 高さ調節

●ライトブラウン

●2モーターベッド

カスター仕様	固定脚仕様	
P109-24AB ■メーカー希望小売価格 388,800円(税込) ■JANコード/4539940075510	P109-23AB ■メーカー希望小売価格 340,000円(非課税) ■JANコード/4539940075503	2モーター 背上げ70° 背降運動70°/22° 高さ調節

●3モーターベッド

カスター仕様	固定脚仕様	
P109-34AB ■メーカー希望小売価格 421,200円(税込) ■JANコード/4539940075558	P109-33AB ■メーカー希望小売価格 370,000円(非課税) ■JANコード/4539940075541	3モーター 背上げ70° 背降運動70°/17° 膝上げ17° 高さ調節

専用オプション

※その他オプションはP40～P43、P46～P48をご覧ください。



写真は7cm延長脚です

アルティレット専用 延長脚

高さ調節用14cm延長脚(4個組)

PDP-140G
■メーカー希望小売価格
3,996円(税込)
■JANコード/4539940081368

高さ調節用7cm延長脚(4個組)

PDP-70G
■メーカー希望小売価格
3,996円(税込)
■JANコード/4539940081375

高さ調節用3.5cm延長脚(4個組)

PDP-35G
■メーカー希望小売価格
3,996円(税込)
■JANコード/4539940081382

介護ベッドのJIS規格とは


2009年に改定された介護ベッドの日本工業規格「JIS T 9254:2009」

2005年12月に作成された「JIS T 9254:2005」以降、介護ベッドに絡む重症・死亡事故が数十件発生しました。それを受け、2009年3月、様々な安全対策事項を盛り込んだ「JIS T 9254:2009」として改正されました。

「適正な製品かどうか」に加え、「適正な生産体制であるか」より厳しくなったチェックをクリア

改正された「JIS T 9254:2009」では、基本的な機能・性能に加え、サイドレール周りの挟まり事故の防止対策、その他強度・耐久試験等の項目が追加され、その内容に製品が適合していることが必須となっています。


また、今回の改正では、その製品を生産する工場が「安全で正しい製品を安定して継続的に作る設備や検査体制をもっているか」「問題発生時に是正処置が速やかになされる体制であるかどうか」などの「工場認証」も必要になりました。

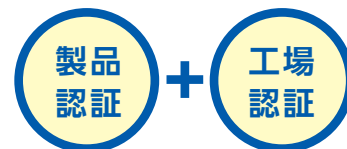

つまり、商品の規格が JIS に準じているとしても、この工場認証が得られなければ JIS 認証取得は出来ないということになります。

JISマーク表示は、製品品質を保証する第三者認証制度であり、「国による制度の信頼性の確保措置」です。

経済産業省が指定する第三者による「製品認証」「工場認証」の両方をクリアすることにより、JIS マーク表示の製品を製造販売することができます。

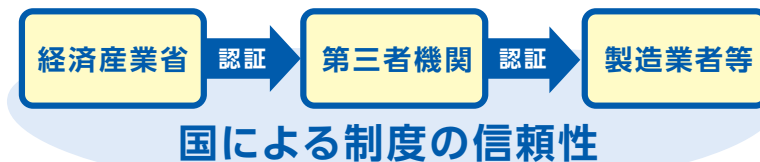

小売業者は、製造販売業者と「JIS 製品取り扱いに関する契約」を取り交わし、初めて販売することが可能となります。



このような事故が多発しています

レールとレールの間に首が挟まれた事故



レールとレールに体が挟まれた事故



ベッド用グリップのロック忘れによる転倒



背上げ時にレールとマットの間に挟まれた事故



ベッド用グリップやレールとマットの間に挟まれた事故



ベッド用グリップやレールの突起に衣服が絡みついた事故




詳しくは「医療・介護ベッド安全普及協議会」Webサイト <http://www.bed-anzen.org> を御覧ください。



ベッド周辺機器

自動ロック式 ベッド用グリップ

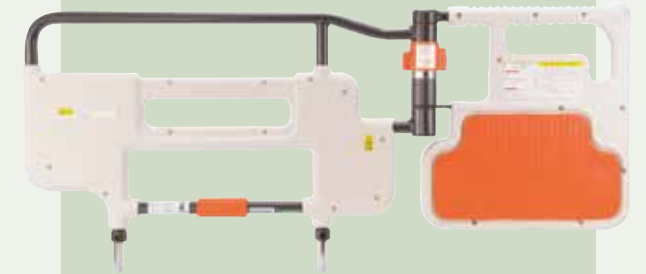

サイドレール



テーブル・ その他周辺機器



膝あて移乗と自動ロックを実現した唯一のベッド用グリップ ニーパロPⅡ



ロック忘れによる事故を予防する 自動ロック方式(業界初)

立ち上がる時にグリップ部が固定されていないと手を挟んだり、転倒事故の原因になります。この様な事故を防止するため、「ニーパロPⅡ」には45度毎に自動的にロックする機構を搭載しています。(特許第4921535号)




握力の弱った方でも簡単にロックできる ユニバーサルデザイン



指や手のひらで楽に解除できるユニバーサルデザインです。



回転レバーと下からも固定できる 安心のダブルロック方式を採用

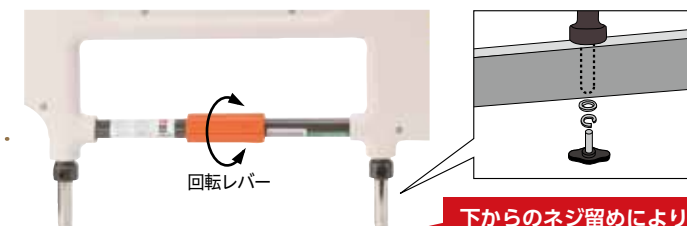

下からのネジ留めにより
抜ける心配がありません

握りやすさを追求し、 手首への負担を軽減する 「ニーパロボール」と 「波型グリップ」デザイン



従来のベッド用グリップでは、写真のように膝が前方にズレ落ちると首を打ったり、転倒するなど危険な状態になることもありました。(ひざ折れ状態)



ひざ折れ

安心ひざパッドがあると・・・

- **すり落ちを予防します!**
膝の位置にパッドがあり、「ひざ折れ」を防止できます。



- **端座位時のすり落ち予防!**
45度を利用すると膝位置が固定できマットからのすり落ちを防げます。



- **楽な立ち上がり!**
膝をパッドにあて腕を引くことで、腰が浮きやすくなり、より少ない力で立ち上がることができます。



- **立位を安定!**
腕・ひざ・足の3点で身体を支えるため、立位状態が安定しやすくなります。



- **移乗用具の安心利用!**
トランスファーボードなど滑りやすい移乗用具を使用する際も「ひざ折れ」の心配がなく、安心して使用できます。
- **後方介助を実現!**
介助者の腰への負担が大きい「前方介助」から、腰への負担が少ない「後方介助」を安心して実施することが可能です。【P42/使い方(A)参照】



ニーパロIIの使い方

後方介助移乗

●【使い方(A)】ベッドから車いすへの介助移乗(トランスファーボードを使った場合)



ベッドの背を上げ、ベッドの高さを車いすよりもやや高く設定し、グリップ部を45度にセットする。車いすのブレーキをかける。左足を前に出す。逆にすると足を痛める原因になるため注意する。

グリップ部を握らせ、後ろに倒れないように注意しながら、ボードを左臀部の下に敷き、片方の端を車いすの中心位置に置く。

車いすの手すりを握らせ、引くように促す。介助者の右足はベッドの上に乗せる。



左腰部を支え、左腕側へ寄りかかるように体を傾かせ、右臀部を軽く押し、車いすへ移乗させる。移乗中に車いすが動かないように左足で固定する。

右臀部に体重が乗るように右に体を傾け、車いすの奥まで移乗させる。

抜きやすいように身体を左に傾けてボードを上げ、前後に動かしながら引き抜く。

ノーリフトを実現しました

自立移乗

●【使い方(B)】ベッドから車いすへの自立移乗(90度の場合)



グリップ部を90度を開き、膝をパッドにあてながら立ち上がり、車いすへ移乗する。逆にする

と足を痛める原因になるため注意する。(45度の場合も同じ)

膝をパッドにあてながら立ち上がり、車いすへ移乗する。

逆にする

「トランスファーボード」や「スライディングシート」は、表面が滑りやすく加工されており、用途に合わせ様々な形状があります。詳しくは福祉用具販売会社にお尋ねください。

ポイント

移乗する時の基本動作は「ベッドの高さを調整すること」です。ベッドから車いすへ移る場合は、ベッドの高さを車いすの座面よりやや高くします。逆に、車いすからベッドに移る場合は、ベッドの高さを下げ、車いすよりもやや低く設定します。



パッド付自動ロック式ベッド用グリップ



パッド付自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロPⅡ」

PF500-116P

■メーカー希望小売価格

64,800円(税込)

■TAISコード/00631-000235
■JANコード/4539940082112



安心ひざパッド・安全カバー付ベッド用グリップ「ニーパロPSⅡ」


PF500-116PS

■メーカー希望小売価格

74,088円(税込)

■TAISコード/00631-000246
■JANコード/4539940082136

自動ロック式ベッド用グリップ

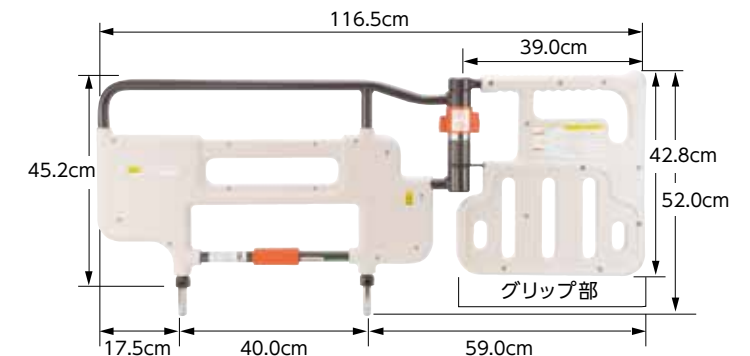

自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロⅡ」

PF500-116

■メーカー希望小売価格

60,480円(税込)

■TAISコード/00631-000234
■JANコード/4539940082082
■材質/スチール、亜鉛ダイカスト、ABS、POM
■質量/8.9kg



安全カバー付ベッド用グリップ「ニーパロSⅡ」


PF500-116S

■メーカー希望小売価格

69,768円(税込)

■TAISコード/00631-000245
■JANコード/4539940082129

ニーパロⅡ専用オプション

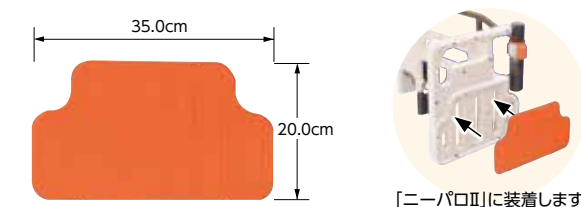

ニーパロⅡ専用安心ひざパッド「ニーパロ・パッドⅡ」
(特許第4802296号)

PF500P-116

■メーカー希望小売価格

4,320円(税込)

■JANコード/4539940082099
■材質/EVA
■寸法/35.0×20.0×3.3(厚み)cm
■質量/250g

ニーパロ

●パッド付自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロP」

PZR-AT116JHP

■メーカー希望小売価格

64,800円(税込)

■TAISコード/00631-000181
■JANコード/4539940081658

●自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロ」

PZR-AT116J

■メーカー希望小売価格

60,480円(税込)

■TAISコード/00631-000179
■JANコード/4539940081634
■材質/スチール、亜鉛ダイカスト、ABS
■質量/9.7kg

●安心ひざパッド・安全カバー付ベッド用グリップ「ニーパロPS」

PZR-AT116JHPSN

■メーカー希望小売価格

74,088円(税込)

■TAISコード/00631-000182
■JANコード/4539940081665

●安全カバー付ベッド用グリップ「ニーパロS」

PZR-AT116JSN

■メーカー希望小売価格

69,768円(税込)

■TAISコード/00631-000180
■JANコード/4539940081641

●ニーパロ専用安心ひざパッド「ニーパロ・パッド」

PZRHP-AT116J

■メーカー希望小売価格

4,320円(税込)

■JANコード/4539940081696
■材質/EVA
■寸法/35.0×13.0×3.3(厚み)cm
■質量/200g

安全カバーで事故予防

麻痺している腕は感覚も鈍くなっています。挟んでいる事に気づかず背上げると骨折することがあります。安全カバーで予防してください。


※カバーだけのお求めは、

「ニーパロⅡ用安全カバー PF500S-116 9,288円(税込)」

「ニーパロ用安全カバー PZRSN-AT116J 9,288円(税込)」

※アルティレットシリーズおよびケアレットシリーズには、これらのサイドレールはご使用できません。

サイドレール(医療介護ベッド用)

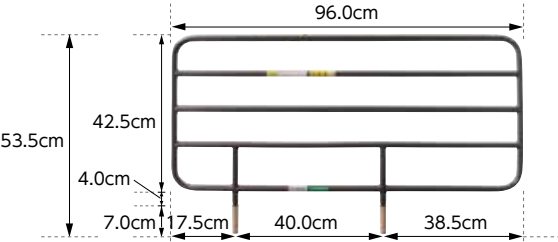

ロングサイドレール(2本組)

PA505-96 ■メーカー希望小売価格 **16,100円(税抜)、17,388円(税込)**

■TAISコード/00631-000232 ■JANコード/4539940082051
■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA ■寸法/幅96.0×高さ53.5cm
■質量/6.8kg




安全カバー付 ロングサイドレール(2本組)

PA505-96S ■メーカー希望小売価格 **31,000円(税抜)、33,480円(税込)**

■TAISコード/00631-000233 ■JANコード/4539940082075
■材質/本体スチール(粉体焼付塗装)、PA カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■寸法/幅96.5×高さ54.0cm ■質量/7.4kg

※安全カバーのみ PA505S-96(1枚入) ¥7,992(税込)

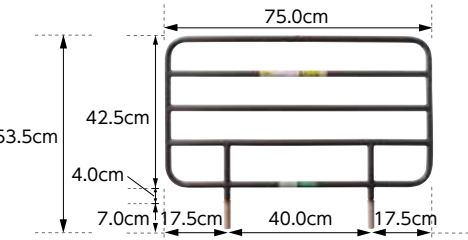

レギュラーサイドレール(2本組)

PA505-75 ■メーカー希望小売価格 **11,500円(税抜)、12,420円(税込)**

■TAISコード/00631-000230 ■JANコード/4539940082020
■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA ■寸法/幅75.0×高さ53.5cm
■質量/5.4kg




安全カバー付 レギュラーサイドレール(2本組)

PA505-75S ■メーカー希望小売価格 **26,400円(税抜)、28,512円(税込)**

■TAISコード/00631-000231 ■JANコード/4539940082044
■材質/本体スチール(粉体焼付塗装)、PA カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■寸法/幅75.5×高さ54.0cm ■質量/5.9kg

※安全カバーのみ PA505S-75(1枚入) ¥7,992(税込)

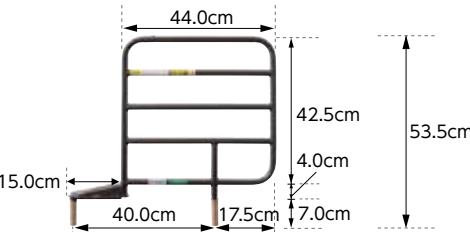

ショートサイドレール(2本組)

PA505-44 ■メーカー希望小売価格 **11,500円(税抜)、12,420円(税込)**

■TAISコード/00631-000228 ■JANコード/4539940081986
■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA、PP ■寸法/幅59.0×高さ53.5cm
■質量/4.5kg



安全カバー付 ショートサイドレール(2本組)


PA505-44S ■メーカー希望小売価格 **26,400円(税抜)、28,512円(税込)**

■TAISコード/00631-000229 ■JANコード/4539940082013
■材質/本体スチール(粉体焼付塗装)、PA、PP カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■寸法/幅59.5×高さ54.0cm ■質量/4.8kg

※安全カバーのみ PA505S-44(1枚入) ¥7,992(税込)

PF500、PA505シリーズは、乗り越え・転落防止対策として、従来品に比べレール高さを2cmアップし、より安全性を高めました。

※マット厚18cmまで対応しています。






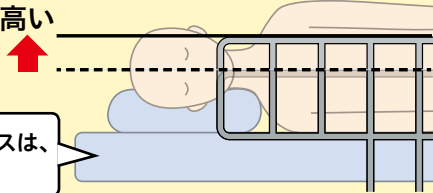


じょうそう予防マットレスは、厚みがあります。

お部屋のレイアウトや、身体の状態に合わせて、アレンジ自在のサイドレール。転落や布団のずれ落ちを防ぎます。

組み合わせ例

(ベッドはミオレットII)

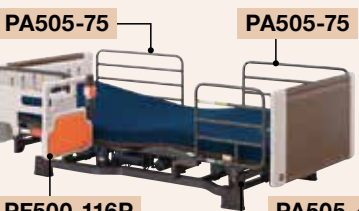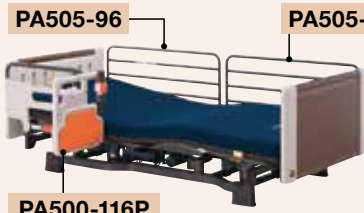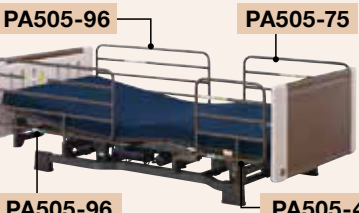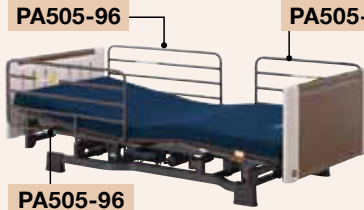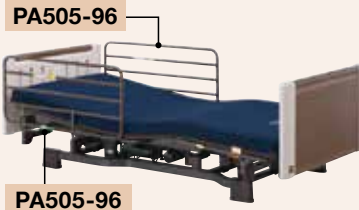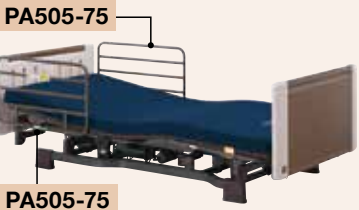

ミオレット・フォーユー、プリモットにはこちらのサイドレールもご使用できます。(※)

●ロングサイドレール(2本組)

BG-96J ■メーカー希望小売価格 **16,100円(税抜)、17,388円(税込)**

■TAISコード/00631-000150 ■JANコード/4539940081399
■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA ■寸法/幅96.0×高さ51.5cm
■質量/6.8kg

●レギュラーサイドレール(2本組)

BG-75J ■メーカー希望小売価格 **11,500円(税抜)、12,420円(税込)**

■TAISコード/00631-000151 ■JANコード/4539940081405
■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA ■寸法/幅75.0×高さ51.5cm
■質量/5.4kg

●ショートサイドレール(2本組)

PA500-FU44 ■メーカー希望小売価格 **11,500円(税抜)、12,420円(税込)**

■TAISコード/00631-000202 ■JANコード/4539940081719
■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA、PP ■寸法/幅59.0×高さ51.5cm
■質量/4.5kg

(※)ミオレットIIにはご使用できません。

(※)適合サイドレールの組み合わせについては、「ベッドオプション適合表」(P68,P69) および、各商品の取扱説明書をご覧ください。

●安全カバー付 ロングサイドレール(2本組)

BG-96JSN ■メーカー希望小売価格 **31,000円(税抜)、33,480円(税込)**

■TAISコード/00631-000168 ■JANコード/4539940081528
■材質/本体スチール(粉体焼付塗装)、PA カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■寸法/幅96.5×高さ52.0cm ■質量/7.4kg

※安全カバーのみ BGSN-96J1(1枚入) ¥7,992(税込)

●安全カバー付 レギュラーサイドレール(2本組)

BG-75JSN ■メーカー希望小売価格 **26,400円(税抜)、28,512円(税込)**

■TAISコード/00631-000167 ■JANコード/4539940081535
■材質/本体スチール(粉体焼付塗装)、PA カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■寸法/幅75.5×高さ52.0cm ■質量/5.9kg

※安全カバーのみ BGSN-75J1(1枚入) ¥7,992(税込)

●安全カバー付 ショートサイドレール(2本組)


PA500-FU44SN ■メーカー希望小売価格 **26,400円(税抜)、28,512円(税込)**

■TAISコード/00631-000207 ■JANコード/4539940081740
■材質/本体スチール(粉体焼付塗装)、PA、PP カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■寸法/幅59.5×高さ52.0cm ■質量/4.8kg

※安全カバーのみ BGSN-FU441(1枚入) ¥7,992(税込)

※ミオレット・フォーユー、ミオレットⅡ、プリモレットおよびケアレットシリーズには、これらのサイドレールはご使用できません。

サイドレール(施設ベッド用)

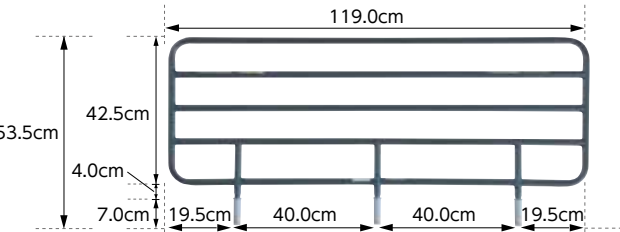

ロングサイドレール(1本入)

PA501-TU119 ■メーカー希望小売価格 **10,300円(税抜)、11,124円(税込)**

■JANコード/4539940081825
■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA ■寸法/幅119.0×高さ53.5cm
■質量/4.0kg




安全カバー付 ロングサイドレール(1本入)

PA501-TU119SN ■メーカー希望小売価格 **17,800円(税抜)、19,224円(税込)**

■JANコード/4539940081856
■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■寸法/幅119.5×高さ54.0cm ■質量/4.3kg

※安全カバーのみ PASN-TU119(1枚入) ¥7,992(税込)

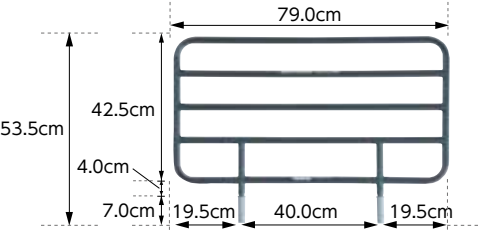

レギュラーサイドレール(2本組)

PA501-TU79 ■メーカー希望小売価格 **11,500円(税抜)、12,420円(税込)**

■JANコード/4539940081832
■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA ■寸法/幅79.0×高さ53.5cm
■質量/5.5kg




安全カバー付 レギュラーサイドレール(2本組)

PA501-TU79SN ■メーカー希望小売価格 **26,400円(税抜)、28,512円(税込)**

■JANコード/4539940081863
■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■寸法/幅79.5×高さ54.0cm ■質量/6.0kg

※安全カバーのみ PASN-TU79(1枚入) ¥7,992(税込)

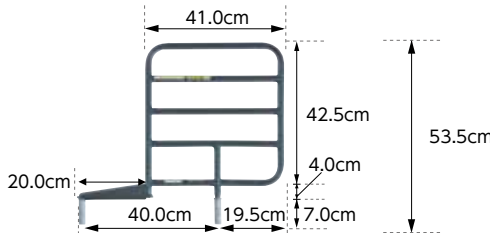

ショートサイドレール(2本組)

PA501-TU41 ■メーカー希望小売価格 **11,500円(税抜)、12,420円(税込)**

■JANコード/4539940081849
■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA、PP ■寸法/幅61.0×高さ53.5cm
■質量/4.5kg



安全カバー付 ショートサイドレール(2本組)

PA501-TU41SN ■メーカー希望小売価格 **26,400円(税抜)、28,512円(税込)**

■JANコード/4539940081870
■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA、PP カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■寸法/幅61.5×高さ54.0cm ■質量/4.8kg

※安全カバーのみ PASN-TU41(1枚入) ¥7,992(税込)

安全カバー付サイドレール
にすることで、
図の様な事故を防ぎます。

レールに腕を入れて背上げを行うと
腕を骨折する可能性があります。



メッシュ構造により
視野の妨げを軽減

※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは2セット(4本)まで非課税となります。
※ロングサイドレールPA501-TU119(1本入)は、最大2本までご使用できます。
※旧タイプのPZR-116J、PZR-K900TAH、BG-53J、BG-500VN、BG-500VS、BG-1000V用の安全カバーもご用意しています。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

組み合わせ例

(ベッドはアルティレット・トゥーユー)



PA501-TU79



PA501-TU119



PA501-TU119



PA501-TU119



PA501-TU119

PA501-TU41



PF500-116P

PA501-TU41



PF500-116P



PF500-116P



PF500-116P

PA501-TU41



PF500-116P

PA501-TU41




PF500-116P

PA501-TU41



PF500-116P

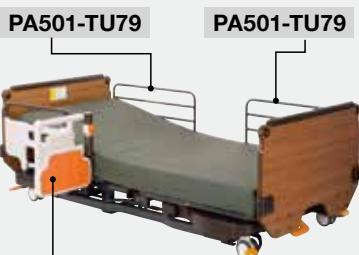


PF500-116P

PA501-TU41

医療介護ベッド専用周辺機器

サイドレールに乗せて使う
ラウンドタイプのオーバーテーブル

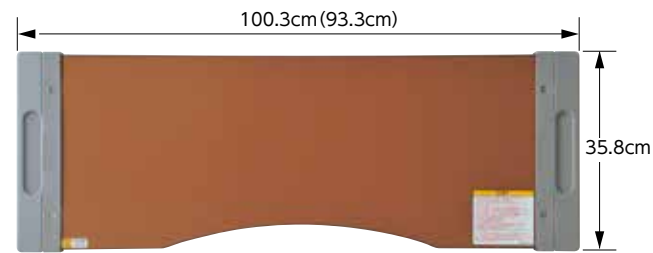

オーバーテーブル

PGT-400LM

■メーカー希望小売価格
12,420円(税込)
■TAISコード/00631-000121
■JANコード/4539940081245

オーバーテーブル83cm幅

PGT-400LM83

■メーカー希望小売価格
12,420円(税込)
■TAISコード/00631-000248
■JANコード/4539940082174

材質		甲板: プリント紙化粧繊維板 取っ手: ABS
寸法	90cm 幅	幅 100.3×奥行 35.8×高さ 4.1cm
	83cm 幅	幅 93.3×奥行 35.8×高さ 4.1cm
質量	90cm 幅	約 3.2kg
	83cm 幅	約 3.0kg
甲板の耐荷重	90cm 幅	15kg
	83cm 幅	15kg
原産国		台湾

※適合機種:ミオレット・フォーユー、ミオレットII、アルティレット・トゥーユー、アルティレット
※オーバーテーブル83cm幅は、ミオレットII83cm幅専用となります。

使い勝手にこだわった
介護ベッド用昇降ベッドテーブル

- ガススプリングによるスムーズかつ、安定したテーブルの昇降が可能です。
- 移動が楽なキャスター付
- ストッパー付キャスター(2個)


ガス圧式昇降ベッドテーブル

PZT-840

■メーカー希望小売価格
47,196円(税込)
■TAISコード/00631-000178
■JANコード/4539940081627

材質	フレーム部: スチール+ 合成樹脂(PP、POM、ABS) 木部: 合成樹脂(メラミン)化粧繊維板(MDF)
寸法	幅 84.0×奥行 47.0×高さ 60.0~84.0cm (天板) 幅 84.0×奥行 40.0×厚み 1.7cm
質量	15.5kg
甲板の耐荷重	10kg
原産国	ベトナム/ガススプリング: 日本製

※「ミオレット・フォーユー」と組み合わせる場合、固定脚装着時は、
ハイトスペーサーが必要です。(キャスター装着時は、ご使用できません)
※「ミオレットII」と組み合わせる場合、固定脚装着時は、ハイトスペーサーが
必要です。(キャスター装着時はそのままご使用できます。)
※「アルティレット・トゥーユー」にはご使用できません。
※「アルティレット」と組み合わせる場合は 3.5cm 延長脚が必要です。

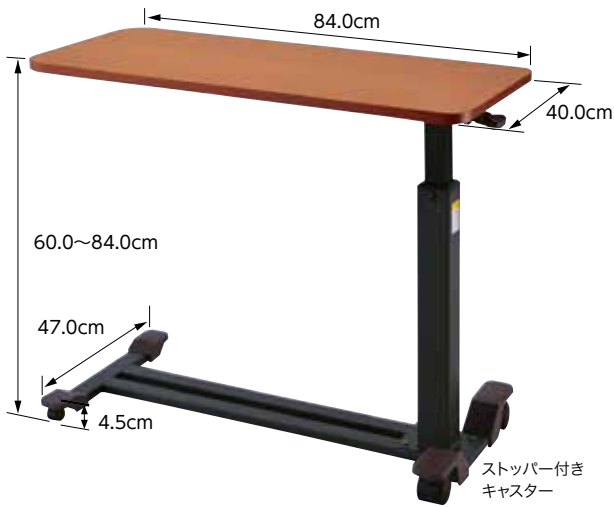

組み合わせ例




ミオレット・フォーユーとの組み合わせ



ケアレットニコIIとの組み合わせ

防災、防汚に優れ、
裏面滑り止め加工を
施したベッド用
カーペット

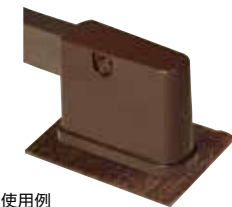

使用例

床キズ防止カーペット(4枚組)

PSC-1216SC


■メーカー希望小売価格
3,672円(税込)
■JANコード/4539940081283
■材質/ナイロン100%
■寸法/16.5×12.5cm(厚さ5mm)




胸元分をカットした使いやす
いラウンドタイプ

医療介護ベッド用
マットレス


サンキューポイント
マットレス

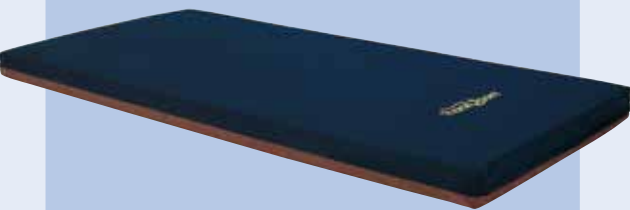


ニューポイント
マットレス

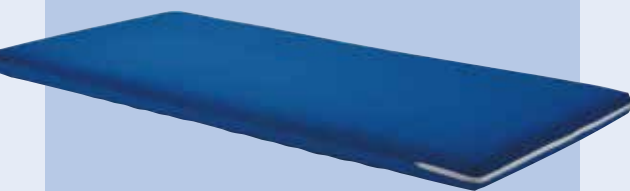


スタンダード
マットレス

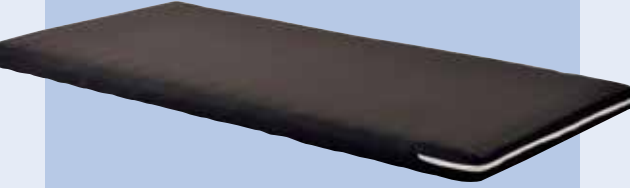

ユービーポイント
マットレス

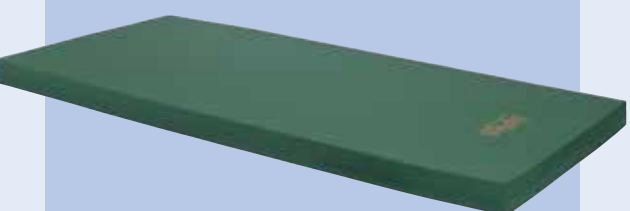


ビカムポイント
マットレス

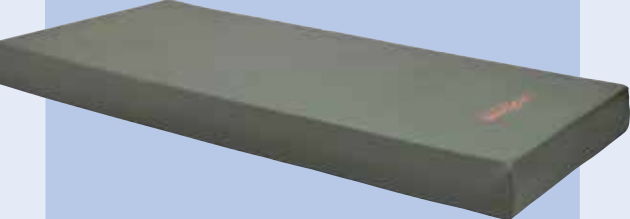

上層2層、下層1層の3層構造で、寝心地を追求したマットレス


サンキューポイントマットレス

寝心地、背圧軽減、耐久性、消毒性を追求したマットレス。
佐賀大学医学部松尾准教授との共同開発により、これらを実現しました。

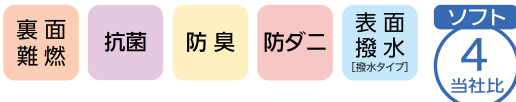


Mattress series
ThankUpoint
PLATZ

背圧を軽減するファスナー付カバー

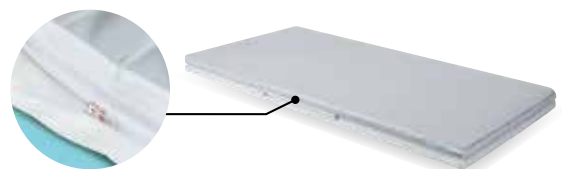

2つの内カバーが、中央部でファスナーで結合。背上げた状態でも、頭側のみが独立してズれるため、背圧・ズレの軽減に効果的です。

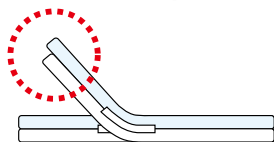

(特許第5138081号)

●ブレスエアー

通気性、クッション性能、透水性、耐久性、環境・安全、制菌性に優れ、快適な寝心地を実現しました。また、ブレスエアーは簡単に洗うことができ、病院や介護の分野でも広く採用されています。




●表面撥水（※撥水タイプのみ）


撥水タイプは、外カバー（表面のみ）を撥水加工しているため、少量の水などをこぼしても、すぐに拭き取れば内部への浸み込みを防ぐことが出来ます。



●体圧分散データ [計測機器] FSA:タカノ(株)製

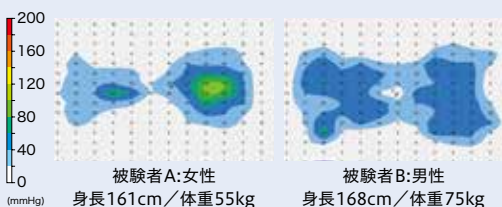

マットレス構造図

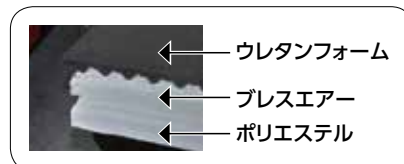

サンキューポイントマットレス（撥水タイプ）

■メーカー希望小売価格
66,000円(税抜)、71,280円(税込)

レギュラータイプ	ミオレット・フォーユー専用 ショートタイプ	ミオレットII専用 ショートタイプ
PD500-TU8909	PD500-TU8909S	PD505-A9009S
■TAISコード/00631-000203 ■JANコード/4539940060769	■TAISコード/00631-000204 ■JANコード/4539940060776	■TAISコード/00631-000227 ■JANコード/4539940060844

■材質/外カバー・内カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム、ポリエステル
■寸法/幅90.0×厚さ9.0×長さ192.0cm
(ミオレット・フォーユー ショート178.0cm、ミオレットII ショート182.0cm)
■質量/8.5kg(ショート7.8kg)
■原産国/日本

ミオレットII83cm幅専用 レギュラータイプ	ミオレットII83cm幅専用 ショートタイプ
----------------------------	---------------------------

PD505-A8309	PD505-A8309S
■TAISコード/00631-000251 ■JANコード/4539940060912	■TAISコード/00631-000252 ■JANコード/4539940060929

■材質/外カバー・内カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム、ポリエステル
■寸法/幅83.0×厚さ9.0×長さ192.0cm(ショート182.0cm)
■質量/7.9kg(ショート7.5kg) ■原産国/日本

外カバー・内カバーは取り外して洗濯可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

サンキューポイントマットレス（透湿防水タイプ）

■メーカー希望小売価格
78,000円(税抜)、84,240円(税込)

レギュラータイプ
PD501-TU8909
■TAISコード/00631-000222 ■JANコード/4539940060806

■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 内カバー:ポリエステル
中材:ウレタンフォーム、ポリエステル
■寸法/幅90.0×厚さ9.0×長さ192.0cm ■質量/8.5kg ■原産国/日本

内カバーは取り外して洗濯可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

通気性に考慮したポリエステル製の介護用マットレス

ニューポイントマットレス

難燃 抗菌 防臭 防ダニ

中材のポリエステルにも抗菌剤が練り込まれています。



●硬さが選べ背圧を軽減する2層構造

2層構造により、好みの硬さを選べます。片側4cm厚のリバーシブルタイプ!



背上げの際に発生する「背圧」は、背ボトムとマット、マットと人の間の摩擦により発生しますが、背上げ時に、2層のマットがずれる事でこれを軽減します。

ニューポイントマットレス

■メーカー希望小売価格
50,000円(税抜)、54,000円(税込)

レギュラータイプ	ミオレット・フォーユー専用 ショートタイプ	ミオレットII専用 ショートタイプ
PKM-9080	PKM-9080F	PD504-A9008S
■TAISコード/00631-000161 ■JANコード/4539940060684	■TAISコード/00631-000214 ■JANコード/4539940060783	■TAISコード/00631-000226 ■JANコード/4539940060837

■材質/外カバー・内カバー・中材:ポリエステル
PKM-9080 ■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm ■質量/7.5kg ■原産国/韓国
PKM-9080F ■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ178.0cm ■質量/7.0kg ■原産国/韓国
PD504-A9008S ■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ182.0cm ■質量/7.4kg ■原産国/韓国

ミオレットII83cm幅専用 レギュラータイプ	ミオレットII83cm幅専用 ショートタイプ
----------------------------	---------------------------

PD504-A8308	PD504-A8308S
■TAISコード/00631-000249 ■JANコード/4539940060899	■TAISコード/00631-000250 ■JANコード/4539940060905

■材質/外カバー・内カバー・中材:ポリエステル
PD504-A8308 ■寸法/幅83.0×厚さ8.0×長さ192.0cm ■質量/7.2kg ■原産国/韓国
PD504-A8308S ■寸法/幅83.0×厚さ8.0×長さ182.0cm ■質量/6.7kg ■原産国/韓国

外カバー・内カバーは取り外して洗濯可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

背圧の軽減を考えた介護用マットレス

スタンダードマットレス

難燃 抗菌 防臭 防ダニ



●背圧を軽減する2層構造



スタンダードマットレス

■メーカー希望小売価格
36,000円(税抜)、38,880円(税込)

レギュラータイプ
PKM-E80BR
■TAISコード/00631-000163 ■JANコード/4539940060721

■材質/外カバー・中材:ポリエステル
■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm ■質量/6.2kg ■原産国/韓国

外カバーは取り外して洗濯可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

リバーシブルタイプのウレタンフォームマットレス

ユービーポイントマットレス

防水




●硬さが選べるリバーシブルタイプ



●体圧分散データ

【計測機器】FSA:タカノ(株)製

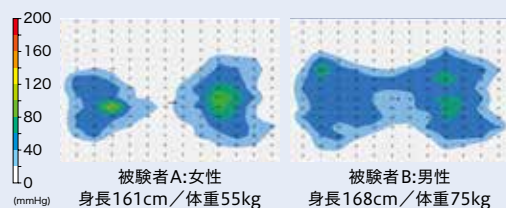

ユービーポイントマットレス

■メーカー希望小売価格

36,000円(税抜)、38,880円(税込)

レギュラータイプ

PD503-A9008

■TAISコード/00631-000247
■JANコード/4539940060851

ミオレットII専用ショートタイプ

PD503-A9008S

■TAISコード/00631-000253
■JANコード/4539940060868

■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/6.1kg(ショート5.9kg) ■原産国/ベトナム

ミオレットII83cm幅専用レギュラータイプ

PD503-A8308

■TAISコード/00631-000254
■JANコード/4539940060875

ミオレットII83cm幅専用ショートタイプ

PD503-A8308S

■TAISコード/00631-000255
■JANコード/4539940060882

■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■寸法/幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/5.7kg(ショート5.4kg) ■原産国/ベトナム

**83cm幅は
2015年7月
発売予定**

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

体圧分散ブロック構造と、ムレにくい透湿防水カバーを採用したじょくそう予防マットレス

ビカムポイントマットレス

体圧分散ブロック構造と透湿防水カバーにより、体圧分散と同時に寝心地まで追求したマットレス。

難燃

抗菌

防臭

防ダニ

ソフト
5
当社比

ビカムポイントマットレス

■メーカー希望小売価格

109,000円(税抜)、117,720円(税込)

レギュラータイプ

PD502-BP8914

■TAISコード/00631-000215 ■JANコード/4539940060790

■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 内カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム

■寸法/幅90.0×厚さ14.0×長さ192.0cm ■質量/10.5kg ■原産国/日本

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

Mattress series
BecomUpoint
PLATZ

●3次元カッティング工法

体圧を効果的に分散しながら、熱のこもりを防ぎます。

●端座位がとりやすい

側面から10cmに高密度ウレタンを採用し、端座位をとりやすくしています。

ウレタンフォーム
体圧分散ブロック
高密度ウレタンフォーム
熱湿気を外に出す溝



●透湿防水カバー


ムレにくい清拭タイプの透湿防水カバーを採用。

●独自のファスナー取り付け位置

ファスナーは裏面、さらにマットレスの端から内側に取り付けることにより、失禁や水こぼし等での浸み込みを防ぎます。

●体圧分散データ

【計測機器】FSA:タカノ(株)製

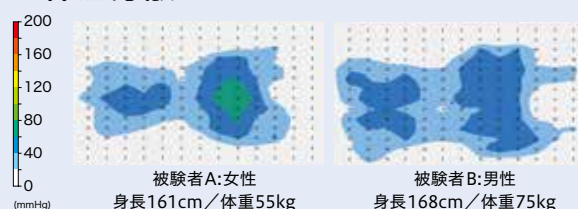

自立支援電動ベッド

元気な方から低介護度の方へ



ケアレットフォルテ
CareLet f II



ケアレットネオアルファ
CareLet neo@ II



ケアレットニコ
CareLet niko II



伝統技法「矢貼り加工」
木目を活かした美しいデザインです

ベッド+サイドレール+マットレスの3点セットです。

※組み合わせはP64を参照ください。



宮付タイプ
P200-51BB1PS
「ポケットコイルマットレス」とのセット例

■メーカー希望小売価格
オープン価格 非課税

機能

●背上げ1モーターベッド



※膝単独でのリクライニングはできません。

●1+1モーターベッド(バックオフ機構付)



※2つのモーターで背上げと膝上げを連動でも、単独でも調整できます。

●背上げ1モーターベッド(バックオフ機構付)



※膝単独でのリクライニングはできません。

それぞれの機能についてはP60、P61をご覧ください。

⚠ ご注意 ※ケアレットシリーズに「ベッド用グリップ」はご使用できません。

18
種類の
組合せ



Careletとは？
英語でお世話をする「Care」とイタリア語でベッドを意味する「Letto」を組み合わせた造語です。

デザイン

●フラットタイプ



●宮付タイプ



※宮付タイプのみ手元スイッチ用フックバー付

特徴

- 安心の「隙間適合」設計(詳細はP2をご覧ください)
- 表面は天然木の突き板「矢貼り」仕上げ
- マットレスは専用の「エクレーヴシリーズ」(P62～P63)の3タイプから選べます。
- 背を下げるときは、モーターの力で直接引かない安心のフリーホイル構造(P60写真参照)
- 床面高さは、24.0/30.5/37.0cmの3段階に調整可能(マットを含めた高さはP62～P63参照)
- 標準装備の2本のサイドレールは、片側3ヶ所に取り付け可能
※片側の「頭側と中央」、「中央と足側」には同時に取り付けはできません。




矢貼りとは？


希少な銘木の美しい木目を活かし、突き板を斜めに貼り合わせることによって、矢のように見せる伝統的な技法です。
一台一台木の表情が違い、見る角度によって色の濃淡が変わります。

仕様

宮付タイプ

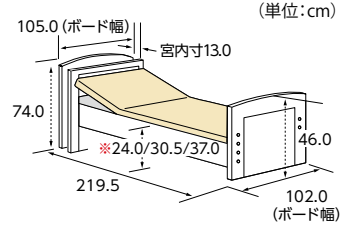

フラットタイプ

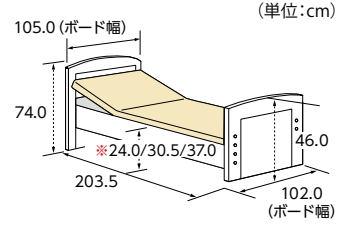

※マットレスを含まないデータです。



サイドレール取り付け例

	背上げ1モーター	背上げ1モーター (バックオフ機構付)	1+1モーター (バックオフ機構付)
材質	ベースフレーム部:スチール 木部:MDF、天然木突き板、PU塗装		
床面形状	背上げ角度(0°～70°) 膝上げ角度(0°～22°)	背上げ角度(0°～70°) 膝上げ角度(0°～20°)	背上げ角度(0°～70°) 膝上げ角度(0°～22°)
床面高	24.0/30.5/37.0cmの3段階		
定格消費電力	55W		110W
電源	100V(50/60Hz)		
原産国	本体:中国、マレーシア 木部:ベトナム		
モーター部	LIMOSS社製		
質量 (サイドレール2本含む)	〈宮付タイプ〉	83.5kg	92.5kg
	〈フラットタイプ〉	67.0kg	76.0kg
梱包	4梱包(マットレス含む)		
最大使用者体重	120kg/安全使用荷重:1700N		



多機能と低価格を両立した安心の自立サポートベッド
和室にも洋室にも調和するデザイン

ベッド+サイドレール+マットレスの3点セットです。

※組み合わせはP64を参照ください。



宮付タイプ
P200-12EB1CS
「硬質ウレタンマットレス」とのセット例

■メーカー希望小売価格
オープン価格 非課税

機能

●背上げ1モーターベッド



※膝単独でのリクライニングはできません。

●1+1モーターベッド(バックオフ機構付)



※2つのモーターで背上げと膝上げを連動でも、単独でも調整できます。

●背上げ1モーターベッド(バックオフ機構付)



※膝単独でのリクライニングはできません。

18
種類の
組合せ



デザイン

●フラットタイプ




●宮付タイプ



※宮付タイプのみ、小物入れの棚付。

特徴


- 安心の「隙間適合」設計(詳細はP2をご覧ください)
- 表面は天然木の突き板仕上げ
- マットレスは専用の「エクレイヴシリーズ」(P62～P63)の3タイプから選べます。
- 背を下げるときは、モーターの力で直接引かない安心のフリーホイール構造(P60写真参照)
- 床面高さは、24.0/30.5/37.0cmの3段階に調整可能(マットを含めた高さはP62～P63参照)
- 標準装備の2本のサイドレールは、片側3ヶ所に取り付け可能
※片側の「頭側と中央」、「中央と足側」には同時に取り付けはできません。

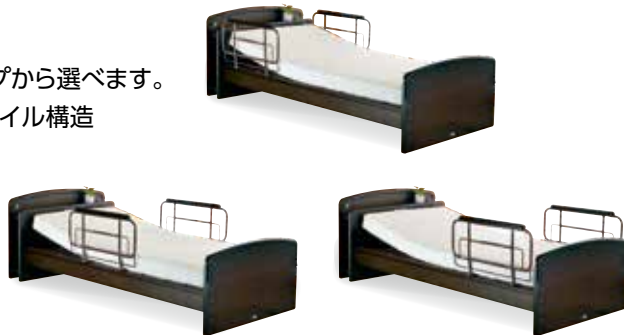


サイドレール取り付け例

仕様

宮付タイプ

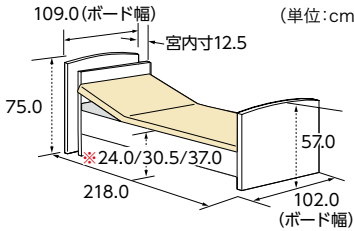

フラットタイプ

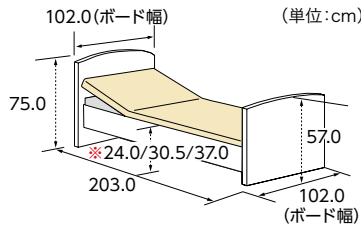

※マットレスを含まないデータです。



「ポケットコイルマットレス PSB-FT18(4/4)」と「ガス圧式昇降ベッドテーブルPZT-840(P48参照)」との組み合わせ例

	背上げ1モーター	背上げ1モーター (バックオフ機構付)	1+1モーター (バックオフ機構付)
材質	ベースフレーム部:スチール 木部:MDF、天然木突き板、PU塗装		
床面形状	背上げ角度(0°～70°) 膝上げ角度(0°～22°)	背上げ角度(0°～70°) 膝上げ角度(0°～20°)	背上げ角度(0°～70°) 膝上げ角度(0°～22°)
床面高	24.0/30.5/37.0cmの3段階		
定格消費電力	55W		110W
電源	100V(50/60Hz)		
原産国	本体:中国、マレーシア 木部:ベトナム		
モーター部	LIMOSS社製		
質量 (サイドレール2本含む)	〈宮付タイプ〉	94.5kg	103.5kg
	〈フラットタイプ〉	77.5kg	86.5kg
梱包	4梱包(マットレス含む)		
最大使用者体重	120kg/安全使用荷重:1700N		

それぞれの機能についてはP60、P61をご覧ください。

⚠ ご注意 ※ケアレットシリーズに「ベッド用
グリップ」はご使用できません。



高級感を感じさせるPULゼーを採用
スタイリッシュな見た目だけでなく
ソフトな感触であたたかさと安全性を両立しました

ベッド+サイドレール+マットレスの3点セットです。
※組み合わせはP64を参照ください。



P200-11AA1CS
「硬質ウレタンマットレス」とのセット例

■メーカー希望小売価格
オープン価格 **非課税**

機能

●背上げ1モーターベッド



※膝単独でのリクライニングはできません。

●背上げ1モーターベッド(バックオフ機構付)



※膝単独でのリクライニングはできません。

●1+1モーターベッド(バックオフ機構付)



※2つのモーターで背上げと膝上げを連動でも、単独でも調整できます。

それぞれの機能についてはP60、P61をご覧ください。

⚠ **ご注意** ※ケアレットシリーズに「ベッド用グリップ」はご使用できません。



デザイン



ポイント

肌触りがよく撥水性に優れているPULゼーは、高級感のあるダークブラウンを採用。
ボードだけでなくサイドパネルにも弾力性のあるPULゼーを使用する事で、ご利用者への安全面にも配慮しました。


特徴

- 安心の「隙間適合」設計(詳細はP2をご覧ください)
- 表面はPULゼー仕上げ
- マットレスは専用の「エクレイヴシリーズ」(P62～P63)の3タイプから選べます。
- 背を下げるときは、モーターの力で直接引かない安心のフリーホイール構造(P60写真参照)
- 床面高さは、24.0/30.5/37.0cmの3段階に調整可能(マットを含めた高さはP62～P63参照)
- 標準装備の2本のサイドレールは、片側3ヶ所に取り付け可能
※片側の「頭側と中央」、「中央と足側」には同時に取り付けはできません。



「ポケットコイルマットレス」と「ガス圧式昇降ベッドテーブル」との組み合わせ例

仕様

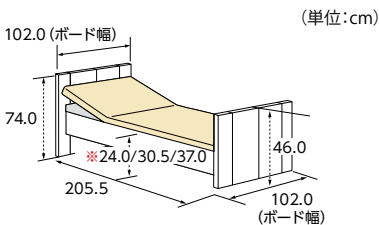

※マットレスを含まないデータです。



サイドレール取り付け例

	背上げ1モーター	背上げ1モーター (バックオフ機構付)	1+1モーター (バックオフ機構付)
材質	ベースフレーム部:スチール 木部:MDF、天然木、PULゼー		
床面形状	背上げ角度(0°～70°) 膝上げ角度(0°～22°)	背上げ角度(0°～70°) 膝上げ角度(0°～20°)	背上げ角度(0°～70°) 膝上げ角度(0°～22°)
床面高	24.0/30.5/37.0cmの3段階		
定格消費電力	55W		110W
電源	100V(50/60Hz)		
原産国	本体:中国、マレーシア 木部:ベトナム		
モーター部	LIMOSS社製		
質量 (サイドレール2本含む)	66.5kg	75.5kg	72.5kg
梱包	4梱包(マットレス含む)		
最大使用者体重	120kg/安全使用荷重:1700N		

機能説明 お好みに合わせて3種類のラインナップをご用意しました

●背上げ1モーターベッド (バックオフ機構付)

ライジングモーション、フィッティング、バックオフ機構を搭載。ピンの脱着により、背上げ単独か背膝連動リクライニングに切り替えられます。



●1+1モーターベッド (バックオフ機構付)

フィッティング、バックオフ機構を搭載。2つのモーターで背上げと膝上げを連動でも、単独でも調整できます。




背上げ時のズレを抑える1ボタン操作の ライジングモーション機構




背上げボタンを押す続けるだけの簡単操作で図のように、膝上げから始まる理想の背上げ動作を実現しました。どの角度においても背と膝の角度は100度以上を確保する設計により、腹部圧迫の心配がありません! バックオフ機構と合わせ、背上げ時の足方向へのズレが抑制され、家族の方の引き上げ介助の負担を軽減します。

■通常使用の場合

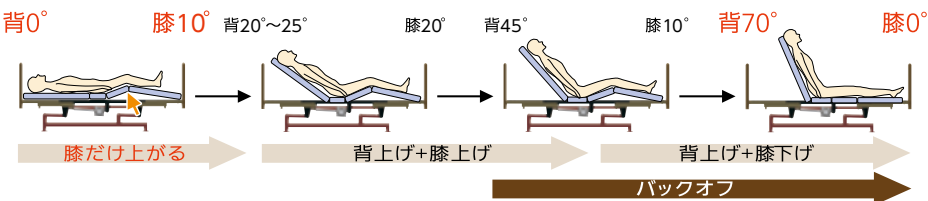

■背膝連動を解除した場合

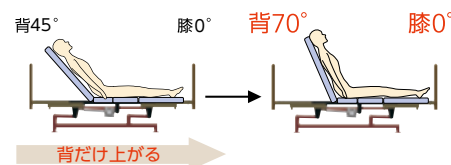

端座位をとりやすい膝0度



ご利用者の膝の位置に合わせ 曲がる位置を調節できるフィッティング機構



膝の位置とベッドの曲がる位置が合っていないと背上げ時に身体が足方向へズレてしまいます。ご利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を3段階に調節できるので、ズレが少なく姿勢を崩しにくくなります。




ピンを外して
左右に
ずらすだけの
簡単調整!

背圧を軽減するバックオフ機構



背ボトムを後方に3.5cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、腹部や背中への圧迫感を軽減します。また、特殊な背上げ機能により、通常、腰付近にもかかる背圧は、肩付近にかかるように設計され、肩の後ろに手を差し込むだけで除圧できます。

※背圧については、自分で体を動かす事ができない人は特にご注意ください。

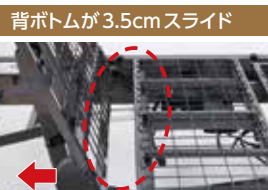


●背上げ1モーターベッド ワイヤーの脱着により、背上げ単独か背膝連動リクライニングに切り替えられます。




※膝単独でのリクライニングはできません。

■通常使用の場合

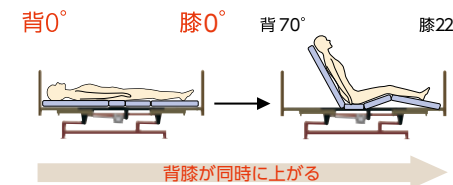

■ワイヤー金具を外した場合

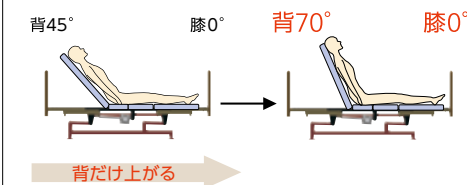

ケアレットシリーズ専用サイドレール(2本組)

※オプションで追加購入可能


※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは2セット(4本)まで非課税となります。

背上げ1モーターベッド専用



PA504-PR743Y ■メーカー希望小売価格 オープン価格

■JANコード/4539940082150
■材質/スチール、天然木、PU塗装 ■寸法/幅74.0×高さ41.0cm

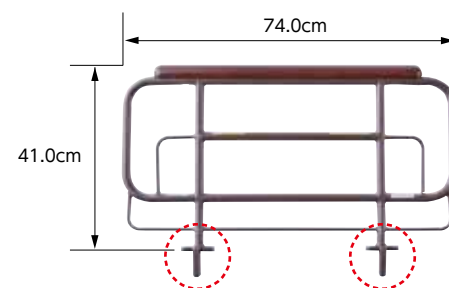


背上げ1モーターベッド(バックオフ機構付)専用 1+1モーターベッド(バックオフ機構付)専用



PA503-PR743Y ■メーカー希望小売価格 オープン価格

■JANコード/4539940082167
■材質/スチール、天然木、PU塗装 ■寸法/幅74.0×高さ41.0cm

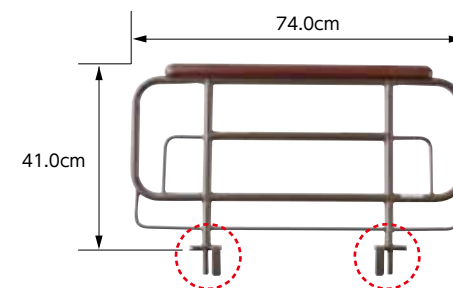

フリーホイール構造とは?

背上げアームの回転により、背ボトムを上下させます。下がる時に背ボトムに何か挟まっても、アームで直接引っ張らない構造になっています。モーターは数百キロの物を持ち上げる力があり、直結していると挟まった物を破壊する事がありますが、フリーホイール構造によりこれを回避できます。

※ケアレットシリーズは全てフリーホイール構造です。


心地良い毎日のために選ぶマットレス ケアレット専用“エクレーヴ”シリーズ

2層構造により適度な硬さと低反発ウレタンによる
ソフトな寝心地を追求しました

エルダーサポートワイドマットレス

- 普通のウレタンと低反発ウレタンによる、
やや柔らかめのマットレスです。
- 軽量タイプで取り扱いも簡単です。

※外カバーは取り外しできません。

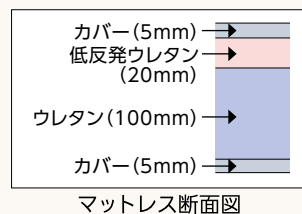

ソフト
4
当社比

PSB-FS(4/4)

■メーカー希望小売価格
オープン価格

■JANコード/4539940060646

■材質/外カバー:ポリエステル 中材:低反発ウレタン、ウレタン
■寸法/幅97.0×厚さ13.0×長さ196.0cm
■質量/7.8kg ■原産国/ベトナム


※ベッドの床面高さは、37.0/43.5/50.0cmとなります。

※「ケアレットシリーズ」のベッド本体と同時購入の際のみ、非課税となります。

硬質のチップウレタンと2種類のウレタンを使い
「硬さと寝心地」を追求したマットレスです

硬質ウレタンマットレス

- 普通のウレタンと硬質のチップウレタンの
良さを生かしたやや硬めのマットレスです。
- 外カバーは2つに分かれることで洗濯も
しやすくなりました。

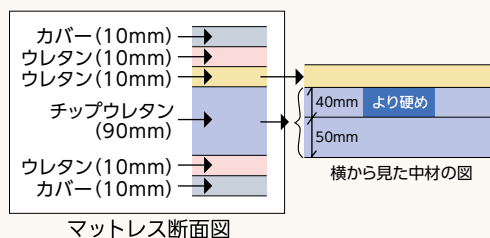

ハード
2
当社比

PSB-FW14(4/4)

■メーカー希望小売価格
オープン価格

■JANコード/4539940060677

■材質/外カバー:ポリエステル 中材:チップウレタン、ウレタン
■寸法/幅96.0×厚さ14.0×長さ196.0cm
■質量/15.3kg ■原産国/ベトナム

※ベッドの床面高さは、38.0/44.5/51.0cmとなります。

※「ケアレットシリーズ」のベッド本体と同時購入の際のみ、非課税となります。


防臭 防ダニ 抗菌

FOR COMFORTABLE LIFE
エクレーヴ
Mattress series

ポケットコイル、ウレタン、綿という違った素材の特長を生かし、
肌触りの良さと幅広い体重に適應した高級タイプのマットレスです

ポケットコイルマットレス

- ポケットコイルとウレタンの良さを生かし体重30~120kg
まで幅広い体重で体圧分散と適度な硬さを維持します。
- 外カバーは2つに分かれることで洗濯もしやすくなりました。

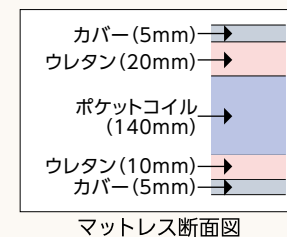

標準
3
当社比

防臭 防ダニ 抗菌

PSB-FT18(4/4)

■メーカー希望小売価格

オープン価格

■JANコード/4539940060660

■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ポケットコイル、ウレタンフォーム、フェルト

■ポケットコイル数/480個、線径:2.00mm

■寸法/幅96.0×厚さ18.0×長さ196.0cm

■質量/18.0kg ■原産国/ベトナム

※ベッドの床面高さは、42.0/48.5/55.0cmとなります。

※「ケアレットシリーズ」のベッド本体と同時購入の際のみ、非課税となります。

銀糸入りボックスカバーと通気性の良いベッドパッド

ケアレット専用 銀糸ボックスカバー

- 速乾性がありカバーに付着した水分を
素早く乾かします。
- ご自宅で洗濯できます。
- 全周ゴム入りでズレにくく、取り外しも楽です。

PCC-96

■メーカー希望小売価格

10,044円(税込)



■JANコード/4539940081313

■材質/ポリエステル、銀糸

■原産国/韓国

※銀糸には抗菌作用があり、菌の繁殖を抑え、防臭性を高めることが期待できます。

銀糸入りラッセルベッドパッド

- ラッセル構造によりマットとの間に空気層ができ、
夏はムレを防ぎ、冬も暖かい状態になります。
- 吸汗、速乾の生地を採用。
- ご自宅で洗濯できます。

PKM-BP96

■メーカー希望小売価格

17,388円(税込)



■JANコード/4539940081467

■材質/ポリエステル、銀糸

■寸法/幅96.0×長さ196.0cm

■原産国/韓国

セット型式組み合わせ表

3点セット:ベッド、サイドレール、マットレス

※価格は全セットオープン価格で、非課税商品です。 **非課税**

ベッド本体			マットレス					
品名	モーター	木部				エルダーサポート PSB-F5(4/4)	硬質ウレタン PSB-FW14(4/4)	ポケットコイル PSB-FT18(4/4)
								
			P62	P62	P63			
 P54 ケアレットフォルテII	背上げ1モーター	フラット	型式	①P200-11BA1ES	②P200-11BA1CS	③P200-11BA1PS		
			JAN	4539940001168	4539940001175	4539940001182		
		宮付	型式	④P200-11BB1ES	⑤P200-11BB1CS	⑥P200-11BB1PS		
			JAN	4539940001250	4539940001267	4539940001274		
	背上げ1モーター (バックオフ機構付)	フラット	型式	⑦P200-12BA1ES	⑧P200-12BA1CS	⑨P200-12BA1PS		
			JAN	4539940001199	4539940001205	4539940001212		
		宮付	型式	⑩P200-12BB1ES	⑪P200-12BB1CS	⑫P200-12BB1PS		
			JAN	4539940001281	4539940001298	4539940001304		
	1+1モーター (バックオフ機構付)	フラット	型式	⑬P200-51BA1ES	⑭P200-51BA1CS	⑮P200-51BA1PS		
			JAN	4539940001229	4539940001236	4539940001243		
		宮付	型式	⑯P200-51BB1ES	⑰P200-51BB1CS	⑱P200-51BB1PS		
			JAN	4539940001311	4539940001328	4539940001335		
 P56 ケアレットネオアルファII	背上げ1モーター	フラット	型式	⑲P200-11EA1ES	⑳P200-11EA1CS	㉑P200-11EA1PS		
			JAN	4539940001342	4539940001359	4539940001366		
		宮付	型式	㉒P200-11EB1ES	㉓P200-11EB1CS	㉔P200-11EB1PS		
			JAN	4539940001434	4539940001441	4539940001458		
	背上げ1モーター (バックオフ機構付)	フラット	型式	㉕P200-12EA1ES	㉖P200-12EA1CS	㉗P200-12EA1PS		
			JAN	4539940001373	4539940001380	4539940001397		
		宮付	型式	㉘P200-12EB1ES	㉙P200-12EB1CS	㉚P200-12EB1PS		
			JAN	4539940001465	4539940001472	4539940001489		
	1+1モーター (バックオフ機構付)	フラット	型式	⑶P200-51EA1ES	⑷P200-51EA1CS	⑸P200-51EA1PS		
			JAN	4539940001403	4539940001410	4539940001427		
		宮付	型式	⑶P200-51EB1ES	⑶P200-51EB1CS	⑶P200-51EB1PS		
			JAN	4539940001496	4539940001502	4539940001519		
 P58 ケアレットニコII	背上げ1モーター	フラット	型式	⑶P200-11AA1ES	⑶P200-11AA1CS	⑶P200-11AA1PS		
			JAN	4539940001076	4539940001083	4539940001090		
	背上げ1モーター (バックオフ機構付)	フラット	型式	⑷P200-12AA1ES	⑷P200-12AA1CS	⑷P200-12AA1PS		
			JAN	4539940001106	4539940001113	4539940001120		
	1+1モーター (バックオフ機構付)	フラット	型式	⑷P200-51AA1ES	⑷P200-51AA1CS	⑷P200-51AA1PS		
			JAN	4539940001137	4539940001144	4539940001151		

会社概要

(2015年3月31日現在)

- 創業

株式会社プラッツ
英文名(PLATZ co.,ltd.)
- 設立

1992年7月3日
- 社員数

79名(単独)、240名(連結)
- 資本金


5億4,576万2千円
(東証マザーズ、福証Q-Board上場
証券コード:7813)
- 営業品目

介護用ベッド、マットレス等
ベッド周辺機器の製造販売
- 主販売先

医療機器・福祉用具販売会社、
家具販売店
- 参加団体

- 日本福祉用具・生活支援用具協会(JASPA)
 - 医療・介護ベッド安全普及協議会
 - (社)関西シルバーサービス協会
 - (社)日本福祉用具供給協会

■ 営業拠点

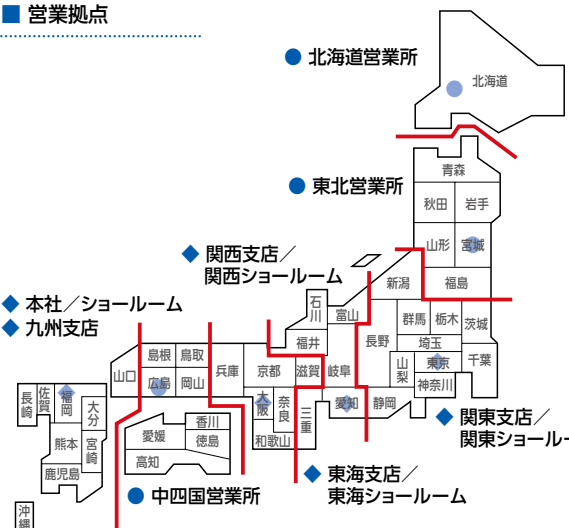

- 北海道営業所
- 東北営業所
- ◆ 関西支店/関西ショールーム
- ◆ 本社/ショールーム
- ◆ 九州支店
- 中四国営業所
- ◆ 東海支店/東海ショールーム
- ◆ 関東支店/関東ショールーム

■ 工場拠点

- ◆ 福岡工場(品質検査工場)
〒816-0921
福岡県大野城市仲畑2-3-24

■ 物流拠点

- ◆ 北海道(札幌市)
- ◆ 千葉県(野田市)
- ◆ 愛知県(海部郡)
- ◆ 大阪府(大東市)
- ◆ 福岡県(大野城市)

■ 関連会社

- ◆ PLATZ VIETNAM CO.,LTD.



プラッツの企業理念

医療介護・健康福祉・ベッド業界に対し、「高品質」「高機能」「低価格」をテーマにした製品作りに徹し、お客様に満足と喜びを感じてもらうことを最大の目標に、恒久的に社会に貢献するものである。

一. プラッツ経営の基本姿勢
常に「公正」であるか。
常に「創造」しているか。
常に「改革」しているか。

一. プラッツ社員の行動規範
プラッツ社員は常に謙虚であり、個性に秀で常に新しいものを創造する人間の集団であれ。



プラッツを支える4つの柱

プラッツはお客様・ご利用者様・工場・製品の4つの柱によって成り立っています。すべての柱を円滑につなげ、お客様に満足と喜びを届ける事を最大限の目標にしていまいます。

品質への取組

- 品質管理体制強化のため、2012年8月にプラッツベトナム工場を設立し、レベルの高い製造工程を実現しています。

■ 私たちは、製品に対する全行程に責任を持っています。

- ①設計・開発
 - ②調達部品検査指導
 - ③生産工程指導
 - ④工程／製品の検査や要員教育まで責任を持ち、品質管理を行っています。


■ ISO 9001:2008の規格に基づき、実直に品質の向上に努めています。

◎2007年5月11日取得 ◎2013年5月11日更新

■ 在宅介護用電動ベッドのJIS規格 JIS T 9254:2009 を在宅介護ベッドの下記製品で取得しています。

- ・ミオレット・フォーユー
 - ・ミオレットII
 - ・プリモレット

※JIS取得には、国に登録した認証機関による「工場の品質管理体制」と「製品試験」の審査を受け、適合・認証を受ける必要があります。

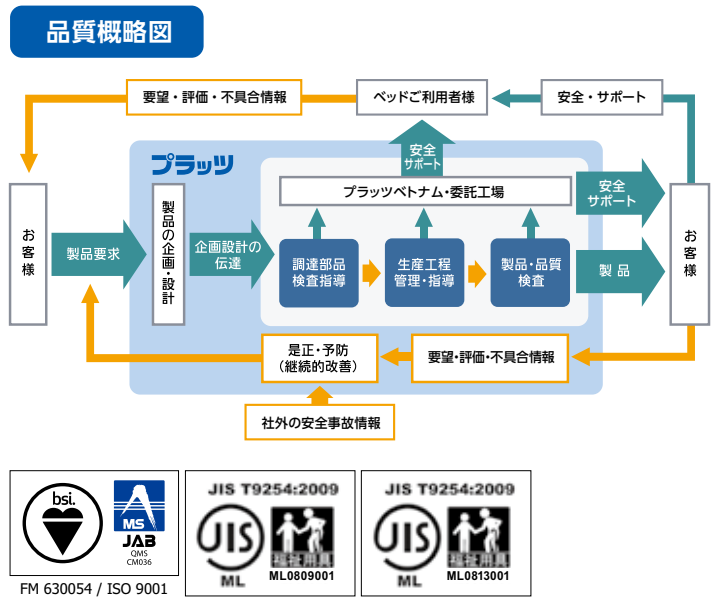

プラッツの原点

医師を父に持つ福山（現社長）が1992年に創業。1996年からベッドを主としたメーカーとして展開をはじめました。介護ベッドについては数十万円と当時は非常に高額で、「これでは子や孫がお年寄りに買ってあげられる金額ではない。せめて10万円位にできないか?」という社長の強い思いから試行錯誤をした結果、99,800円と当時としては破格値のPKB-3シリーズを世に出し大きな反響をいただきました。ここにプラッツの原点があります。「どんなに高性能でも一般の人が買えない価格では意味が無い」。プラッツは「一生懸命」に高品質と低価格を追求しています。



介護ベッド
「PKB-305S」

1992年

ある「一般の方を対象にした 展示即売会」での出来事

「介護ベッド」と書いたパネルをベッドの横に掲げ展示をしてましたが、お年寄りを見向きもされません。杖を突いた90歳位のおばあちゃんに声をかけたところ「介護ベッドに寝たら終わり!」ときつい一言。おばあちゃんにすれば介護ベッドはTVやエアコンの様に「使いたい・買いたい」商品ではなく、逆に「使いたくない商品」「仕方なく使う商品」。すぐにパネルを「電動ベッド」に書き換えたところ、少しずつ説明を聞いて頂けるようになりました。結果は、60代の方に1台だけ販売することができましたが、「安心して立ち上がれるから、夜と朝の不安がなくなりそうね」というお言葉を忘れる事ができません。「家で使うベッドだから家庭的なデザインを追求しよう。」プラッツの基本ポリシーですが、ベッドの形だけでは駄目!お年寄りの立場に立ち、その表現方法にも気を配ることが大切と痛感した事例でした。今では、元気だけ体に不安のある方にも使っていただけるベッドの名称は、「自立されている今の状態を少しでもサポートしたい」との思いを込め「自立支援電動ベッド」と名称を変更しました。



たたみベッド
「PTB-313-DB」

2000年

身長に合わせた 調整ができないの?

日本のお年寄りも140cm台の方から180cmの方まで身長も様々。当然、足の長さも様々。なのにベッドの曲がる位置は一つ。結果、背を上げた時にズレが発生しやすく、床ずれの原因にもなってます。2006年に開発に着手した「ミオレット」では膝の曲がる位置を3段階に調節でき、床ずれのリスク軽減に成功しました。




レンタル対応ベッド
「ミオレット」

2006年

自動的にロックする ベッド用グリップを作れないか?

グリップ部が回転し、寝ているときは閉じて転落を予防し、使うときは開いて立ち上がりを補助するベッド用グリップ。非常に便利であると同時に、開閉部分の固定を忘れると、転倒など事故の原因にもなります。2007年に開発に着手した「自動ロック式ベッド用グリップ ニーパロ」では、45度毎に自動的に回転部が固定される自動ロック機能を搭載。この問題に対応し、2011年1月に発売されました。また、佐賀大学医学部松尾准教授からの要望を受けニーパロ専用オプション「移乗してわかる 安心ひざパッド ニーパロ・パッド」を開発しました。膝の位置に軟らかい樹脂パッドがあるだけで、立ち上がる際、車いすやポータブルトイレへ、楽に安全に移動ができます。介助する人にとっても腰への負担を少なくできます。

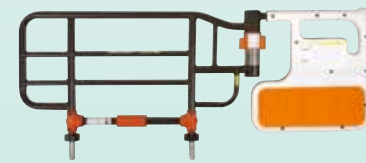

パッド付自動ロック式ベッド用グリップ
「ニーパロP」

2011年

施設のニーズに応えた センターロック搭載 低床電動ベッドが誕生!

介護度の高い方にこそ、背圧・腹圧のないベッドを使っていたきたい。そんな想いから施設用ベッドにミオレット・フォーユーで実現した背圧・腹圧を軽減させるランバー機構、ヒップダウン機構、フィッティング機構を搭載しました。また、ボードにはバンパーを取り付け、キャスターはセンターロックタイプにすることでベッドの移動、設置される方への負担を少しでも軽減できるようにしました。



施設用低床電動ベッド
「アルティレット・トゥーユー」


2012年

元気な方から低介護度の方へ 自立支援電動ベッド ケアレットシリーズを一新

ケアレットシリーズが待望のリニューアル!ラインナップ充実でさらにお好みに合わせてお選び頂けるようになりました。伝統技法「矢張り加工」を取り入れた『ケアレットフォルテ』、落ち着いた色のある色の『ケアレットネオ アルファ』の2タイプはそれぞれベッドボードが「フラットタイプ」とメガネなど小物が置ける「宮付タイプ」の2種類をご用意しています。高級感を感じさせるPUレザーを採用した『ケアレットニコ』は、スタイリッシュな見た目だけでなく、ソフトな感触であたたかさや安全性を両立しました。



「ケアレットフォルテ」

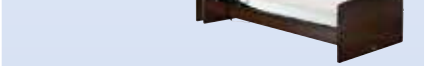

「ケアレットネオ アルファ」



「ケアレットニコ」

2014年

1998年

宮付ベッドは介護用ではない?

「介護・医療用ベッドのヘッドボードはフラットタイプであり、ティッシュやめがね、お薬などはサイドテーブルに置くもの」という事が常識とされてました。しかし、在宅では誰もがテーブルを購入でき、そのスペースがある訳でもなく、結果、「枕元にこれら小物類を置かれ、背上げた時にずり落ちてしまう。ずり落ちるから背上げ機能は使わない」ということにもなります。であれば、「小物が置ける宮付」を介護ベッドにも導入しよう!と1998年に宮付ベッドを市場に送り出し、今では多くの施設でも宮付タイプが導入されています。



介護ベッド初の宮付ベッド
「PKB-NAD」

2001年

ベッドのフレームの色は 何故白なの?

白では病院のイメージが付きまとい「家では使いたくない」という声をきっかけに、2001年弊社初のレンタルベッド「PZB-V310R」からフレーム色はメタリックグレイにしました(業界初)。今ではほとんどのメーカーが在宅用ベッドで白を使っています。



業界初の白ではない
レンタル対応ベッド
「PZB-V310R」

2008年

もっと寝心地のよい ベッドにできないか

自立支援電動ベッドに使用するマットレス。1種類のマットレスでは利用される方によっては硬いと感じられたり、また逆にやわらかいと感じられたりします。そこで、ケアレットシリーズは3種類のマットレスから選べるようにしました。3種類の中で一番ソフトなエルダーサポートワイドマットレス、標準的な硬さで幅広い体重に適応したポケットコイルマットレス、そして少し硬めの硬質ウレタンマットレス。また、ボードタイプもそれぞれ宮付タイプ、フラットタイプの2種類から選べるようにしました。使用される方に合った商品を選んでいただきたい。そんな想いからケアレットシリーズは誕生しました。



自立支援電動ベッド
「ケアレット」



▲エルダーサポートワイドマットレス
▲ポケットコイルマットレス
▲硬質ウレタンマットレス

2011年

次世代の在宅用介護ベッドの スタンダードを目指して!

4年の歳月をかけ、使う人、介護する人、販売する人、それぞれの立場の商品コンセプトを煮詰め、佐賀大学の松尾准教授、九州産業大学の青木教授のご協力を得て開発を行いました。特に力を入れたのが、ユニバーサルデザインと背上げ時に発生する「背圧・腹圧・身体へのズレ」への対応です。使う人が使い易くないと事故が起きます。握力が落ちた手でも持てる手元スイッチを始め、様々な部分にユニバーサルデザインの考えを盛り込みました。背上げに対しては、猫背になり難いように背中を押してくれるランバー機構や膝の位置に合わせて調整できるフィッティング機構など5つの機構により、従来より大幅に「背圧・腹圧・ズレ」を軽減することに成功しました。



介護保険レンタル対応在宅介護用ベッド
「ミオレット・フォーユー」

2014年

膝のフィッティングが好評の 「ミオレット」に待望の後継機登場!

「ミオレットII」は2007年に販売開始した「ミオレット」の後継機で、佐賀大学の松尾准教授の監修を頂き、背上げ時のズレを抑える膝のフィッティング位置の見直し、車いすとの密着性の改善や、「ミオレット・フォーユー」で好評の手元スイッチの採用など利用者の安全性と使いやすさを追求しました。また、全重量を77kg(2モーター)と従来比で15%減らし搬入搬出時の腰痛緩和対策も行いました。



介護保険レンタル対応在宅介護用ベッド
「ミオレットII」

膝あて移乗と自動ロックを 実現した唯一のベッド用 グリップがさらに進化!


2011年に発売した「ニーパロ」の後継機「ニーパロII」は、好評の自動ロックは継承しつつ、移乗性を高めるため膝当て面を拡大し、グリップ部の強度を上げながら、重量は1kg減らしました。また、サイドレールの高さを2cm高くし、レールの乗り越し転落事故対策を行いました。



パッド付自動ロック式ベッド用グリップ
「ニーパロII」

2015年4月

83cm幅をラインナップに加え全32種の中から
お選び頂けるようになりました

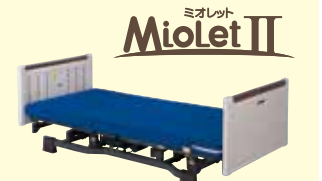

ミオレットII

ベッドオプション適合表

				ミオレット・フォーユー (レギュラー)	ミオレット・フォーユー (ショート)	ミオレットII (レギュラー)	ミオレットII (ショート)	ミオレットII 83cm幅 (レギュラー)	ミオレットII 83cm幅 (ショート)	プリモレット	アルティレット・ トゥーユー	アルティレット (キャスター仕様)	アルティレット (固定脚仕様)	ケアレットシリーズ
No	頁	製品名	型番											
マットレス、マットレスカバー、ベッドパッド														
1	P50	サンキューポイントマットレス(レギュラータイプ)(撥水タイプ)	PD500-TU8909	●		●				●	●	●	●	
2	P50	サンキューポイントマットレス (ミオレット・フォーユー専用ショートタイプ)(撥水タイプ)	PD500-TU8909S		●									
3	P50	サンキューポイントマットレス(ミオレットII専用ショートタイプ)(撥水タイプ)	PD505-A9009S				●							
4	P50	サンキューポイントマットレス (ミオレットII83cm幅専用レギュラータイプ)(撥水タイプ)	PD505-A8309					●						
5	P50	サンキューポイントマットレス (ミオレットII83cm幅専用ショートタイプ)(撥水タイプ)	PD505-A8309S						●					
6	P50	サンキューポイントマットレス(レギュラータイプ)(透湿防水タイプ)	PD501-TU8909	●		●				●	●	●	●	
7	P51	ニューポイントマットレス(レギュラータイプ)	PKM-9080	●		●				●	●	●	●	
8	P51	ニューポイントマットレス(ミオレット・フォーユー専用ショートタイプ)	PKM-9080F		●									
9	P51	ニューポイントマットレス(ミオレットII専用ショートタイプ)	PD504-A9008S				●							
10	P51	ニューポイントマットレス(ミオレットII83cm幅専用レギュラータイプ)	PD504-A8308					●						
11	P51	ニューポイントマットレス(ミオレットII83cm幅専用ショートタイプ)	PD504-A8308S						●					
12	P51	スタンダードマットレス(レギュラータイプ)	PKM-E80BR	●		●				●	●	●	●	
13	P52	ユービーポイントマットレス(レギュラータイプ)	PD503-A9008	●		●				●	●	●	●	
14	P52	ユービーポイントマットレス(ミオレットII専用ショートタイプ)	PD503-A9008S				●							
15	P52	ユービーポイントマットレス(ミオレットII83cm幅専用レギュラータイプ)	PD503-A8308					●						
16	P52	ユービーポイントマットレス(ミオレットII83cm幅専用ショートタイプ)	PD503-A8308S						●					
17	P52	ピカムポイントマットレス(レギュラータイプ)	PD502-BP8914	●		●				●	●	●	●	
18	P62	エルダーサポートワイドマットレス	PSB-FS(4/4)											●
19	P62	硬質ウレタンマットレス	PSB-FW14(4/4)											●
20	P63	ポケットコイルマットレス	PSB-FT18(4/4)											●
21	P63	ケアレット専用 銀糸ボックスカバー	PCC-96											●
22	P63	銀糸入りラッセルベッドパッド	PKM-BP96											●
ベッド用グリップ、サイドレール ※適合サイドレール・ベッド用グリップの組み合わせについては、各商品の取扱説明書をご覧ください。														
23	P43	自動ロック式ベッド用グリップ ニーパロII	PF500-116	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
24	P43	自動ロック式ベッド用グリップ ニーパロ	PZR-AT116J	●	●					●	●	●	●	
25	P44	サイドレール	PA505-96、PA505-75、PA505-44	●	●	●	●	●	●	●				
26	P45	サイドレール	BG-96J、BG-75J、PA500-FU44	●	●					●				
27	P46	施設用サイドレール	PA501-TU119、PA501-TU79、PA501-TU41								●	●	●	
28	P61	ケアレットシリーズ専用サイドレール ・ケアレットフォルテII ・ケアレットネオ アルファII ・ケアレットニコII	背上げ1モーターベッド専用	PA504-PR743Y										● ※1
29			背上げ1モーターベッド (バックオフ機構付)専用 1+1モーターベッド (バックオフ機構付)専用	PA503-PR743Y										● ※2
テーブル														
30	P48	オーバーテーブル	PGT-400LM	●	●	●	●				●	●	●	
31	P48	オーバーテーブル83cm幅	PGT-400LM83					●	●					
31	P48	ガス圧式昇降ベッドテーブル	PZT-840	● ※3	● ※3	● ※3	● ※3	● ※3	● ※3	●		● ※4	● ※4	●
高さ調整、キャスター														
32	P13、P21	ミオレット・フォーユー、ミオレットII用45mmハイトスパーサー(4個組)	PC501-FU45	●	●	●	●	●	●					
33	P13	ミオレット・フォーユー専用キャスター(4個組)	PC500-FU8CKS	●	●									
34	P21	ミオレットII専用キャスター(4個組)	PC503-8CK1			●	●	●	●					
35	P23	プリモレット専用延長脚	PDP-140G(6pcs)、PDP-70G(6pcs)、PDP-35G(6pcs)							● ※5				
36	P23	プリモレット専用キャスター(6個組)	PPL-8CK6S(6pcs)							●				
37	P37	アルティレット専用延長脚	PDP-140G、PDP-70G、PDP-35G									● ※5	● ※5	
その他														
38	P13、P21、P33	手元スイッチホルダー	PE501-D40	● ※6	● ※6	●	●	●	●		●			
39	P13、P21、P33	エアマット用ハンガー	PE500-A4050	●	●	●	●	●	●		●			
40	P13、P33	腰ボトムスパーサー(2個組)	PE502-A1	●	●						●			
41	P48	床キズ防止カーペット(4枚組)	PSC-1216SC	●	●	●	●	●	●		●	●	●	

※1 背上げ1モーターベッドへは専用サイドレール「PA504-PR743Y」(No.28)をご使用ください。
※2 背上げ1モーターベッド(バックオフ機構付)、1+1モーターベッド(バックオフ機構付)へは専用サイドレール「PA503-PR743Y」(No.29)をご使用ください。

※3 ミオレットシリーズにガス圧式昇降ベッドテーブルをご使用の際は、専用のハイトスパーサー(No.32)が必要となります。
ミオレット・フォーユーキャスター装着時はガス圧式昇降ベッドテーブルはご使用できません。
※4 アルティレットにガス圧式昇降ベッドテーブルをご使用の際は、延長脚(No.37)が必要です。

※5 安全のため装着できる延長脚は2本までとなります。
※6 ミオレット・フォーユー樹脂ボードタイプにはご使用できません。



安全についての ご注意

機器を正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。

PLATZ(プラッツ)総合カタログのご注意事項

- 製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 発売予定時期は、開発・製造の都合上、発売時期を予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- カタログの写真と実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
- カタログ本文の寸法・角度等の数値には、多少の誤差が含まれます。当カタログでは、表示を見やすくするため、「約」、「およそ」といった文言を省略しています。
- ベッドの写真内のマットレス・テーブル等は、特記事項のあるもの以外は別価格になっております。
- 製品の価格に **非課税** の表示がある製品には消費税がかかりません。
- 製品の価格には配送料・納品(組立設置料)・不要品の引き取り等の費用は含まれておりません。
- 製品の安全性・品質には、万全の注意を払っておりますが、下記の原因による事故に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
 - ①製品の目的以外のご使用や誤ったご使用を原因とした事故
 - ②当社未承認での製品の改造等を原因とする事故
 - ③「当社が指定する当社製品の組み合わせ」以外の組み合わせを原因とする事故(例:当社ベッドと他社製のサイドレールやベッド用グリップとの組み合わせ)
 - ④その他当社の責任とはいえない事故

※最新の製品情報・安全に関する情報はホームページに記載しております。

製造元

株式会社 **プラッツ**

■本社/ショールーム

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-39
TEL:092-584-3434/FAX:092-584-3436

●北海道営業所

〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条
1-2-22-102

TEL.011-807-4750 FAX.011-807-4751

●東北営業所

〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字東通29
ホワイトアーバンシティ102

TEL.022-781-7072 FAX.022-781-7062

■関東支店・関東ショールーム

〒105-0014 東京都港区芝2-16-9 芝YSビル1F
TEL.03-5427-8033 FAX.03-5427-8031

■東海支店・東海ショールーム

〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社3-108
オフィス・クロンドビル1F

TEL.052-704-2700 FAX.052-704-2701

■関西支店・関西ショールーム

〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4
メディアパードビルディング2F

TEL.06-6233-2105 FAX.06-6233-2107

●中四国営業所

〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6
TEL.084-946-6000 FAX.084-946-6040

■九州支店(本社内)

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-39
TEL.092-584-3433 FAX.092-502-3810

<http://www.platz-ltd.co.jp/>

Facebookプラッツオフィシャルページ

<http://www.facebook.com/PlatzJapan>

■ご意見・ご質問等は

iken@platz-ltd.co.jp

製品のお求め、お問い合わせは