

パッド付自動ロック式ベッド用グリップ

ニーパロII

膝あて移乗と自動ロックを実現した
唯一のベッド用グリップ



特許第 4921535 号 自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロII」

特許第 4802296 号 ニーパロII専用安心ひざパッド「ニーパロ・パッドII」



パッド付自動ロック式ベッド用グリップ



パッド付自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロPⅡ」

PF500-116P

■メーカー希望小売価格

64,800円(税込)

■TAISコード/00631-000235
■JANコード/4539940082112



安心ひざパッド・安全カバー付ベッド用グリップ「ニーパロPSⅡ」


PF500-116PS

■メーカー希望小売価格

74,088円(税込)

■TAISコード/00631-000246
■JANコード/4539940082136

自動ロック式ベッド用グリップ

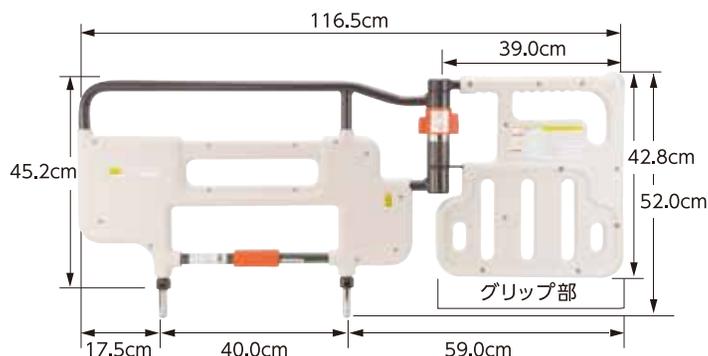

自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロⅡ」

PF500-116

■メーカー希望小売価格

60,480円(税込)

■TAISコード/00631-000234
■JANコード/4539940082082
■材質/スチール、亜鉛ダイカスト、ABS、POM
■質量/8.9kg



安全カバー付ベッド用グリップ「ニーパロSⅡ」


PF500-116S

■メーカー希望小売価格

69,768円(税込)

■TAISコード/00631-000245
■JANコード/4539940082129

ニーパロⅡ専用オプション

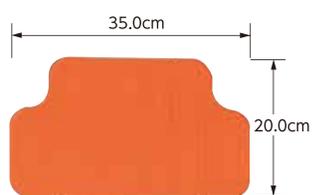

「ニーパロⅡ」に装着します

ニーパロⅡ専用安心ひざパッド「ニーパロ・パッドⅡ」 (特許第4802296号)

PF500P-116

■メーカー希望小売価格

4,320円(税込)

■JANコード/4539940082099
■材質/EVA
■寸法/35.0×20.0×3.3(厚み)cm
■質量/250g

ニーパロ

●パッド付自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロP」

PZR-AT116JHP

■メーカー希望小売価格

64,800円(税込)

■TAISコード/00631-000181
■JANコード/4539940081658

●自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロ」

PZR-AT116J

■メーカー希望小売価格

60,480円(税込)

■TAISコード/00631-000179
■JANコード/4539940081634
■材質/スチール、亜鉛ダイカスト、ABS
■質量/9.7kg

●安心ひざパッド・安全カバー付ベッド用グリップ「ニーパロPS」

PZR-AT116JHPSN

■メーカー希望小売価格

74,088円(税込)

■TAISコード/00631-000182
■JANコード/4539940081665

●安全カバー付ベッド用グリップ「ニーパロS」

PZR-AT116JSN

■メーカー希望小売価格

69,768円(税込)

■TAISコード/00631-000180
■JANコード/4539940081641

●ニーパロ専用安心ひざパッド「ニーパロ・パッド」

PZRHP-AT116J

■メーカー希望小売価格

4,320円(税込)

■JANコード/4539940081696
■材質/EVA
■寸法/35.0×13.0×3.3(厚み)cm
■質量/200g

安全カバーで事故予防

痺れている腕は感覚も鈍くなっています。挟んでいる事に気づかず背上げすると骨折することがあります。安全カバーで予防してください。

※カバーだけのお求めは、

「ニーパロⅡ用安全カバー PF500S-116 9,288円(税込)」

「ニーパロ用安全カバー PZRSN-AT116J 9,288円(税込)」

膝あて移乗と自動ロックを実現した唯一のベッド用グリップ

ニーパロPⅡ



ロック忘れによる事故を予防する 自動ロック方式(業界初)

立ち上がるときにグリップ部が固定されていないと手を挟んだり、転倒事故の原因になります。このような事故を防止するため、「ニーパロPⅡ」には45度毎に自動的にロックする機構を搭載しています。
(特許第4921535号)




握力の弱った方でも簡単にロックできる ユニバーサルデザイン




指や手のひらで楽に解除できるユニバーサルデザインです。



回転レバーと下からも固定できる 安心のダブルロック方式を採用

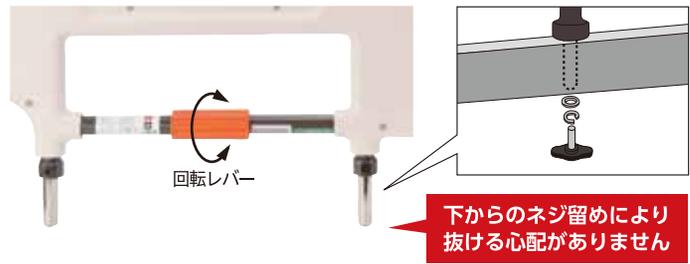

握りやすさを追求し、 手首への負担を軽減する 「ニーパロボール」と 「波型グリップ」デザイン

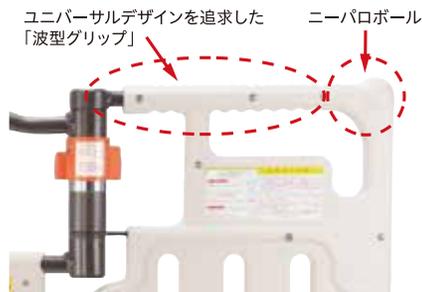

従来のベッド用グリップでは、写真のように膝が前方向にズレ落ちると首を打ったり、転倒するなど危険な状態になることもありました。(ひざ折れ状態)



安心ひざパッドがあると・・・

● すり落ちを予防します!

膝の位置にパッドがあり、「ひざ折れ」を防止できます。



● 端座位時のすり落ち予防!

45度を利用すると膝位置が固定できマットからのすり落ちを防げます。



● 楽な

立ちあがり!

膝をパッドにあて腕を引くことで、腰が浮きやすくなり、より少ない力で立ち上がることができます。



● 立位を安定!

腕・ひざ・足の3点で身体を支えるため、立位状態が安定しやすくなります。



● 移乗用具の安心利用!

トランスファーボードなど滑りやすい移乗用具を使用する際も「ひざ折れ」の心配がなく、安心して使用できます。

● 後方介助を実現!

介助者の腰への負担が大きい「前方介助」から、腰への負担が少ない「後方介助」を安心して実施することが可能です。【右頁/使い方(A)参照】



ニーパロIIの使い方

後方介助移乗

ノーリフトを実現しました

●【使い方(A)】ベッドから車いすへの介助移乗(トランスファーボードを使った場合)



1 ベッドの背を上げ、ベッドの高さを車いすよりもやや高く設定し、グリップ部を45度にセットする。車いすのブレーキをかける。左足を前に出す。逆にすると足を痛める原因になるため注意する。



2 グリップ部を握らせ、後ろに倒れないように注意しながら、ボードを左臀部の下に敷き、片方の端を車いすの中心位置に置く。



3 車いすの手すりを握らせ、引くように促す。介助者の右足はベッドの上に乗せる。



4 左腰部を支え、左腕側へ寄りかかるように体を傾かせ、右臀部を軽く押し、車いすへ移乗させる。移乗中に車いすが動かないように左足で固定する。



5 右臀部に体重が乗るように右に体を傾け、車いすの奥まで移乗させる。



6 抜きやすいように身体を左に傾けてボードを上げ前後に動かしながら引き抜く。

自立移乗

●【使い方(B)】ベッドから車いすへの自立移乗(90度の場合)



1 グリップ部を90度を開き、膝をパッドにあてる。ベッドの高さを車いすよりもやや高くする。車いすを寄せ、ブレーキをかける。



2 車いす側の足を前に出す。逆にすると足を痛める原因になるため注意する。(45度の場合も同じ)



3 膝をパッドにあてながら立ち上がり…あるいは、腰を浮かし…



4 車いすへ移る。

「トランスファーボード」や「スライディングシート」は、表面が滑りやすく加工されており、用途に合わせ様々な形状があります。詳しくは福祉用具販売会社にお尋ねください。

ポイント

移乗する時の基本動作は「ベッドの高さを調整すること」です。ベッドから車いすへ移る場合は、ベッドの高さを車いすの座面よりやや高くします。逆に、車いすからベッドに移る場合は、ベッドの高さを下げ、車いすよりもやや低く設定します。





※「サンキューポイントマットレス」
との組み合わせ例



産学連携によって研究開発された、ユニバーサルを極めた介護ベッド

機能面・医学面で、佐賀大学医学部准教授の松尾清美氏協力の下、細部に至るまで、ユニバーサルデザインを極めた介護ベッドを開発しました。

介護保険レンタル対応 在宅介護用ベッド
ミオレット・フォーユー

■メーカー希望小売価格
オープン価格 非課税

18
種類の
組合せ



●樹脂ボードタイプ



●木製フラットボードタイプ



●木製宮付ボードタイプ



製造元

株式会社 **プラッツ**

■本社／ショールーム

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-39
TEL:092-584-3434 / FAX:092-584-3436

●北海道営業所

〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条
1-2-22-102

TEL.011-807-4750 FAX.011-807-4751

●東北営業所

〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字東通29
ホワイトアーバンシティ102

TEL.022-781-7072 FAX.022-781-7062

■関東支店・関東ショールーム

〒105-0014 東京都港区芝2-16-9 芝YSビル1F
TEL.03-5427-8033 FAX.03-5427-8031

■東海支店・東海ショールーム

〒465-0093 愛知県名古屋市中東区一社3-108
オフィス・クロンドビル1F

TEL.052-704-2700 FAX.052-704-2701

■関西支店・関西ショールーム

〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4
メディアパードビルディング2F

TEL.06-6233-2105 FAX.06-6233-2107

●中四国営業所

〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6

TEL.084-946-6000 FAX.084-946-6040

■九州支店(本社内)

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-39

TEL.092-584-3433 FAX.092-502-3810

<http://www.platz-ltd.co.jp/>

Facebookプラッツオフィシャルページ

<http://www.facebook.com/PlatzJapan>

■ご意見・ご質問等は

iken@platz-ltd.co.jp

製品のお求め、お問い合わせは