

ケアレット Carelet

ケアレットシリーズ

高機能・低価格を実現した
自立支援電動ベッドのスタンダード



ケアレットフォルテ
Carelet f II

ケアレットネオアルファ
Carelet neo α II

Carelet niko II
ケアレット ニコ





▲隙間適合マーク

プラッツ独自の安全基準 「隙間適合」マークとは？

●隙間適合マークの基準

隙間適合マークは、以下の条件であることを証明するプラッツ独自の安全マークです。

- ① レール間、レールとボード間の隙間が 4～23.5cm でないこと。
(レールとは「サイドレール」、「ベッド用グリップ」の意味)
- ② プラッツが指定するプラッツ製品の組み合わせであること。

●隙間適合マークの目的

- ① 利用者の安全性を少しでも向上させる為、危険な組み合わせのベッドを無くす事が最大の目的です。
- ② このマークを表示することで安全な組み合わせのベッドの普及をはかります。

但し、隙間適合マーク表示製品であっても、ご利用者の方の使用方法・身体状況の変化など、様々な要因で事故が起こる可能性があります。ご利用の際は、取扱説明書などの記載事項を守り、十分な注意を払う必要があります。

品質への取組

- 品質管理体制強化のため、2012年8月にプラッツベトナム工場を設立し、レベルの高い製造工程を実現しています。
- 私たちは、製品に対する全行程に責任を持っています。

- ①設計・開発
- ②調達部品検査指導
- ③生産工程指導
- ④工程／製品の検査や要員教育まで責任を持ち、品質管理を行っています。



レールとレールの間に首が挟まれる事故が多発しています！

サイドレールによる死亡事故の多くは、2本並べて設置した手すりの手すりの間のすき間や、手すりとのすき間に、利用者が首を挟み死亡に至るものです。取扱説明書をよく読み、有効性と危険性を認識し、正しく使うことが危険を回避する一番の近道です。



- 事故に関することは、「医療・介護ベッド安全普及協議会」のホームページを参照下さい。

<http://www.bed-anzen.org>

- ISO 9001:2008の規格に基づき、実直に品質の向上に努めています。

◎2007年5月11日取得 ◎2013年5月11日更新



FM 630054 / ISO 9001

I N D E X

セット型式組み合わせ表
(3点セット:ベッド、サイドレール、マットレス)

非課税

※価格は全セットオープン価格で、非課税商品です。



伝統技法「矢張り加工」
木目を活かした美しいデザインです



| ベッド本体 | | | マットレス | | |
|--------------------------|------|-----|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| モーター | 木部 | | エルダーサポート PSB-FS (4/4) | 硬質ウレタン PSB-FW14 (4/4) | ポケットコイル PSB-FT18 (4/4) |
| 背上げ 1 モーター | フラット | 型式 | ① P200-11BA1ES | ② P200-11BA1CS | ③ P200-11BA1PS |
| | | JAN | 4539940001168 | 4539940001175 | 4539940001182 |
| | 宮付 | 型式 | ④ P200-11BB1ES | ⑤ P200-11BB1CS | ⑥ P200-11BB1PS |
| | | JAN | 4539940001250 | 4539940001267 | 4539940001274 |
| 背上げ 1 モーター (バックオフ機構付) | フラット | 型式 | ⑦ P200-12BA1ES | ⑧ P200-12BA1CS | ⑨ P200-12BA1PS |
| | | JAN | 4539940001199 | 4539940001205 | 4539940001212 |
| | 宮付 | 型式 | ⑩ P200-12BB1ES | ⑪ P200-12BB1CS | ⑫ P200-12BB1PS |
| | | JAN | 4539940001281 | 4539940001298 | 4539940001304 |
| 1+1 モーター (バックオフ機構付) | フラット | 型式 | ⑬ P200-51BA1ES | ⑭ P200-51BA1CS | ⑮ P200-51BA1PS |
| | | JAN | 4539940001229 | 4539940001236 | 4539940001243 |
| | 宮付 | 型式 | ⑯ P200-51BB1ES | ⑰ P200-51BB1CS | ⑱ P200-51BB1PS |
| | | JAN | 4539940001311 | 4539940001328 | 4539940001335 |

P2▶



多機能と低価格を両立した
安心の自立サポートベッド
和室にも洋室にも調和するデザイン



| ベッド本体 | | | マットレス | | |
|--------------------------|------|-----|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| モーター | 木部 | | エルダーサポート PSB-FS (4/4) | 硬質ウレタン PSB-FW14 (4/4) | ポケットコイル PSB-FT18 (4/4) |
| 背上げ 1 モーター | フラット | 型式 | ⑲ P200-11EA1ES | ⑳ P200-11EA1CS | ㉑ P200-11EA1PS |
| | | JAN | 4539940001342 | 4539940001359 | 4539940001366 |
| | 宮付 | 型式 | ㉒ P200-11EB1ES | ㉓ P200-11EB1CS | ㉔ P200-11EB1PS |
| | | JAN | 4539940001434 | 4539940001441 | 4539940001458 |
| 背上げ 1 モーター (バックオフ機構付) | フラット | 型式 | ㉕ P200-12EA1ES | ㉖ P200-12EA1CS | ㉗ P200-12EA1PS |
| | | JAN | 4539940001373 | 4539940001380 | 4539940001397 |
| | 宮付 | 型式 | ㉘ P200-12EB1ES | ㉙ P200-12EB1CS | ㉚ P200-12EB1PS |
| | | JAN | 4539940001465 | 4539940001472 | 4539940001489 |
| 1+1 モーター (バックオフ機構付) | フラット | 型式 | ㉛ P200-51EA1ES | ㉜ P200-51EA1CS | ㉝ P200-51EA1PS |
| | | JAN | 4539940001403 | 4539940001410 | 4539940001427 |
| | 宮付 | 型式 | ㉞ P200-51EB1ES | ㉟ P200-51EB1CS | ㊱ P200-51EB1PS |
| | | JAN | 4539940001496 | 4539940001502 | 4539940001519 |

P4▶




高級感を感じさせるPULゼーを採用
スタイリッシュな見た目だけでなくソフトな
感触であたたかさと安全性を両立しました



| ベッド本体 | | | マットレス | | |
|--------------------------|------|-----|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| モーター | 木部 | | エルダーサポート PSB-FS (4/4) | 硬質ウレタン PSB-FW14 (4/4) | ポケットコイル PSB-FT18 (4/4) |
| 背上げ 1 モーター | フラット | 型式 | ③⑦ P200-11AA1ES | ③⑧ P200-11AA1CS | ③⑨ P200-11AA1PS |
| | | JAN | 4539940001076 | 4539940001083 | 4539940001090 |
| 背上げ 1 モーター (バックオフ機構付) | | 型式 | ④⑩ P200-12AA1ES | ④⑪ P200-12AA1CS | ④⑫ P200-12AA1PS |
| | | JAN | 4539940001106 | 4539940001113 | 4539940001120 |
| 1+1 モーター (バックオフ機構付) | | 型式 | ④⑬ P200-51AA1ES | ④⑭ P200-51AA1CS | ④⑮ P200-51AA1PS |
| | | JAN | 4539940001137 | 4539940001144 | 4539940001151 |

P6▶

品質概略図

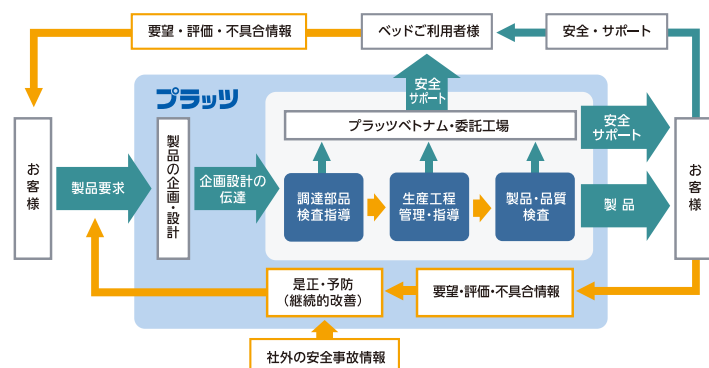



伝統技法「矢貼り加工」
木目を活かした美しいデザインです

ベッド+サイドレール+マットレスの3点セットです。

※組み合わせはP1を参照ください。



宮付タイプ
P200-51BB1PS
「ポケットコイルマットレス」とのセット例

■メーカー希望小売価格
オープン価格 非課税

機能

●背上げ1モーターベッド



※膝単独でのリクライニングはできません。

●1+1モーターベッド(バックオフ機構付)



※2つのモーターで背上げと膝上げを連動でも、単独でも調整できます。

●背上げ1モーターベッド(バックオフ機構付)



※膝単独でのリクライニングはできません。

それぞれの機能についてはP8、P9をご覧ください。

⚠ ご注意 ※ケアレットシリーズに「ベッド用グリップ」はご使用できません。



Careletとは？

英語でお世話をする「Care」とイタリア語でベッドを意味する「Letto」を組み合わせた造語です。

デザイン

●フラットタイプ



●宮付タイプ



※宮付タイプのみ手元スイッチ用フックバー付

特徴

- 安心の「隙間適合」設計(詳細は表紙の裏をご覧ください)
- 表面は天然木の突き板「矢貼り」仕上げ
- マットレスは専用の「エクレーヴシリーズ」(P10～P11)の3タイプから選べます。
- 背を下げるときは、モーターの力で直接引かない安心のフリーホイル構造(P8写真参照)
- 床面高さは、24.0/30.5/37.0cmの3段階に調整可能(マットを含めた高さはP10～P11参照)
- 標準装備の2本のサイドレールは、片側3ヶ所に取り付け可能
※片側の「頭側と中央」、「中央と足側」には同時に取り付けはできません。




矢貼りとは？


希少な銘木の美しい木目を活かし、突き板を斜めに貼り合わせることによって、矢のように見える伝統的な技法です。
一台一台木の表情が違い、見る角度によって色の濃淡が変わります。

仕様

宮付タイプ

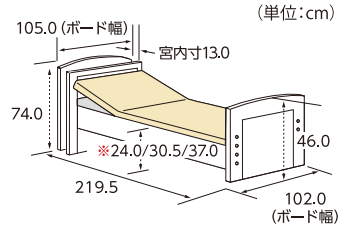

フラットタイプ

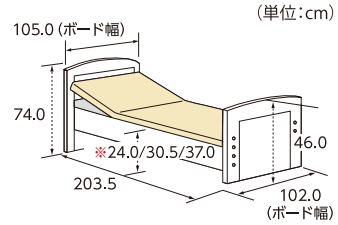

※マットレスを含まないデータです。



サイドレール取り付け例

| | 背上げ1モーター | 背上げ1モーター (バックオフ機構付) | 1+1モーター (バックオフ機構付) |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 材質 | ベースフレーム部:スチール 木部:MDF、天然木突き板、PU塗装 | | |
| 床面形状 | 背上げ角度(0°～70°) 膝上げ角度(0°～22°) | 背上げ角度(0°～70°) 膝上げ角度(0°～20°) | 背上げ角度(0°～70°) 膝上げ角度(0°～22°) |
| 床面高 | 24.0/30.5/37.0cmの3段階 | | |
| 定格消費電力 | 55W | | 110W |
| 電源 | 100V(50/60Hz) | | |
| 原産国 | 本体:中国、マレーシア 木部:ベトナム | | |
| モーター部 | LIMOSS社製 | | |
| 質量 (サイドレール2本含む) | 〈宮付タイプ〉 | 83.5kg | 92.5kg |
| | 〈フラットタイプ〉 | 67.0kg | 76.0kg |
| 梱包 | 4梱包(マットレス含む) | | |
| 最大使用者体重 | 120kg/安全使用荷重:1700N | | |



多機能と低価格を両立した安心の自立サポートベッド
和室にも洋室にも調和するデザイン

ベッド+サイドレール+マットレスの3点セットです。
※組み合わせはP1を参照ください。



宮付タイプ
P200-12EB1CS
「硬質ウレタンマットレス」とのセット例

■メーカー希望小売価格
オープン価格 非課税

機能

●背上げ1 モーターベッド



※膝単独でのリクライニングはできません。

●1+1 モーターベッド (バックオフ機構付)



※2つのモーターで背上げと膝上げを連動でも、単独でも調整できます。

●背上げ1 モーターベッド (バックオフ機構付)



※膝単独でのリクライニングはできません。

18
種類の
組合せ



デザイン

●フラットタイプ




●宮付タイプ



※宮付タイプのみ、小物入れの棚付。

特徴


- 安心の「隙間適合」設計(詳細は表紙の裏をご覧ください)
- 表面は天然木の突き板仕上げ
- マットレスは専用の「エクレーヴシリーズ」(P10～P11)の3タイプから選べます。
- 背を下げるときは、モーターの力で直接引かない安心のフリーホイール構造 (P8写真参照)
- 床面高さは、24.0/30.5/37.0cmの3段階に調整可能 (マットを含めた高さはP10～P11参照)
- 標準装備の2本のサイドレールは、片側3ヶ所に取り付け可能
※片側の「頭側と中央」、「中央と足側」には同時に取り付けはできません。

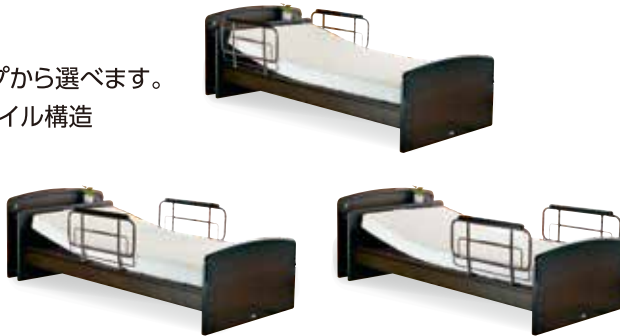


サイドレール取り付け例

仕様

宮付タイプ

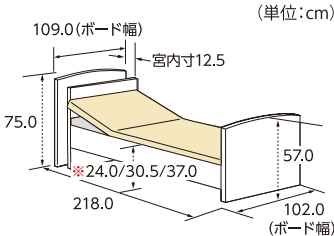

フラットタイプ

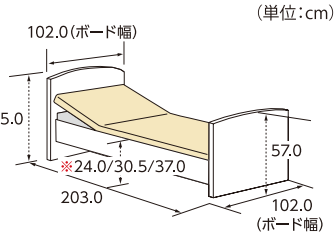

※ マットレスを含まないデータです。



「ポケットコイルマットレス PSB-FT18 (4/4)」と
「ガス圧式昇降ベッドテーブルPZT-840」との組み合わせ例

| | 背上げ1 モーター | 背上げ1 モーター (バックオフ機構付) | 1+1 モーター (バックオフ機構付) |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 材質 | ベースフレーム部:スチール 木部:MDF、天然木突き板、PU塗装 | | |
| 床面形状 | 背上げ角度(0°～70°) 膝上げ角度(0°～22°) | 背上げ角度(0°～70°) 膝上げ角度(0°～20°) | 背上げ角度(0°～70°) 膝上げ角度(0°～22°) |
| 床面高 | 24.0/30.5/37.0cmの3段階 | | |
| 定格消費電力 | 55W | | 110W |
| 電源 | 100V(50/60Hz) | | |
| 原産国 | 本体:中国、マレーシア 木部:ベトナム | | |
| モーター部 | LIMOSS社製 | | |
| 質量 (サイドレール2本含む) | 〈宮付タイプ〉 | 94.5kg | 103.5kg |
| | 〈フラットタイプ〉 | 77.5kg | 86.5kg |
| 梱包 | 4梱包(マットレス含む) | | |
| 最大使用者体重 | 120kg/安全使用荷重:1700N | | |

それぞれの機能についてはP8、P9をご覧ください。

⚠ ご注意 ※ケアレットシリーズに「ベッド用
グリップ」はご使用できません。



高級感を感じさせるPULレザーを採用
スタイリッシュな見た目だけでなく
ソフトな感触であたたかさと安全性を両立しました

ベッド+サイドレール+マットレスの3点セットです。
※組み合わせはP1を参照ください。



P200-11AA1CS
「硬質ウレタンマットレス」とのセット例

■メーカー希望小売価格
オープン価格 **非課税**

機能

●背上げ1モーターベッド



※膝単独でのリクライニングはできません。

●背上げ1モーターベッド(バックオフ機構付)



※膝単独でのリクライニングはできません。

●1+1モーターベッド(バックオフ機構付)



※2つのモーターで背上げと膝上げを連動でも、単独でも調整できます。

それぞれの機能についてはP8、P9をご覧ください。

⚠ ご注意 ※ケアレットシリーズに「ベッド用
グリップ」はご使用できません。

9
種類の
組合せ



デザイン



ポイント

肌触りがよく撥水性に優れているPULレザーは、高級感のあるダークブラウンを採用。
ボードだけでなくサイドパネルにも弾力性のあるPULレザーを使用する事で、ご利用者への安全面にも配慮しました。


特徴

- 安心の「隙間適合」設計(詳細は表紙の裏をご覧ください)
- 表面はPULレザー仕上げ
- マットレスは専用の「エクレイヴシリーズ」(P10～P11)の3タイプから選べます。
- 背を下げるときは、モーターの力で直接引かない安心のフリーホイール構造
(P8写真参照)
- 床面高さは、24.0/30.5/37.0cmの3段階に調整可能
(マットを含めた高さはP10～P11参照)
- 標準装備の2本のサイドレールは、片側3ヶ所に取り付け可能
※片側の「頭側と中央」、「中央と足側」には同時に取り付けはできません。



「ポケットコイルマットレス」と
「ガス圧式昇降ベッドテーブル」との組み合わせ例

仕様

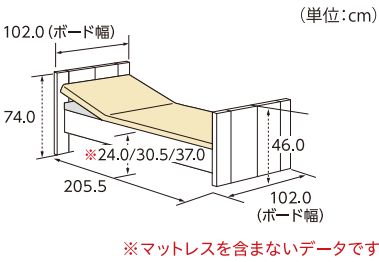

サイドレール取り付け例

| | 背上げ1モーター | 背上げ1モーター (バックオフ機構付) | 1+1モーター (バックオフ機構付) |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 材質 | ベースフレーム部:スチール 木部:MDF、天然木、PULレザー | | |
| 床面形状 | 背上げ角度(0°～70°) 膝上げ角度(0°～22°) | 背上げ角度(0°～70°) 膝上げ角度(0°～20°) | 背上げ角度(0°～70°) 膝上げ角度(0°～22°) |
| 床面高 | 24.0/30.5/37.0cmの3段階 | | |
| 定格消費電力 | 55W | | 110W |
| 電源 | 100V(50/60Hz) | | |
| 原産国 | 本体:中国、マレーシア 木部:ベトナム | | |
| モーター部 | LIMOSS社製 | | |
| 質量 (サイドレール2本含む) | 66.5kg | 75.5kg | 72.5kg |
| 梱包 | 4梱包(マットレス含む) | | |
| 最大使用者体重 | 120kg/安全使用荷重:1700N | | |

機能説明 お好みに合わせて3種類のラインナップをご用意しました

●背上げ1モーターベッド
(バックオフ機構付)

ライジングモーション、フィッティング、バックオフ機構を搭載。ピンの脱着により、背上げ単独か背膝連動リクライニングに切り替えられます。



●1+1モーターベッド
(バックオフ機構付)

フィッティング、バックオフ機構を搭載。2つのモーターで背上げと膝上げを連動でも、単独でも調整できます。




背上げ時のズレを抑える1ボタン操作の
ライジングモーション機構




背上げボタンを押し続けるだけの簡単操作で図のように、膝上げから始まる理想の背上げ動作を実現しました。どの角度においても背と膝の角度は100度以上を確保する設計により、腹部圧迫の心配がありません! バックオフ機構と合わせ、背上げ時の足方向へのズレが抑制され、家族の方の引き上げ介助の負担を軽減します。

■通常使用の場合

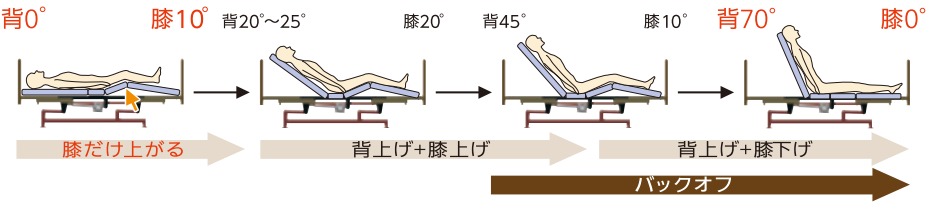

■背膝連動を解除した場合

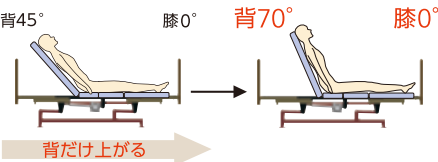

端座位をとりやすい膝0度



ご利用者の膝の位置に合わせ
曲がる位置を調節できるフィッティング機構



膝の位置とベッドの曲がる位置が合っていないと背上げ時に身体が足方向へズレてしまいます。ご利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を3段階に調節できるので、ズレが少なく姿勢を崩しにくくなります。



ピンを外して
左右に
ずらすだけの
簡単調整!

背圧を軽減するバックオフ機構



背ボトムを後方に3.5cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、腹部や背中への圧迫感を軽減します。また、特殊な背上げ機能により、通常、腰付近にもかかる背圧は、肩付近にかかるように設計され、肩の後ろに手を差し込むだけで除圧できます。


※背圧については、自分で体を動かす事ができない人は特にご注意ください。



フリーホイール構造とは?

背上げアームの回転により、背ボトムを上下させます。下がる時に背ボトムに何か挟まっても、アームで直接引っ張らない構造になっています。モーターは数百キロの物を持ち上げる力があり、直結していると挟まった物を破壊する事がありますが、フリーホイール構造によりこれを回避できます。

※ケアレットシリーズは全てフリーホイール構造です。

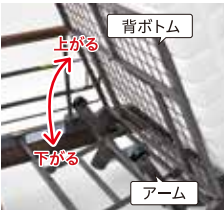


●背上げ1モーターベッド

ワイヤーの脱着により、背上げ単独か背膝連動リクライニングに切り替えられます。




※膝単独でのリクライニングはできません。

■通常使用の場合

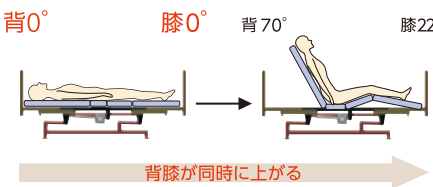

■ワイヤー金具を外した場合

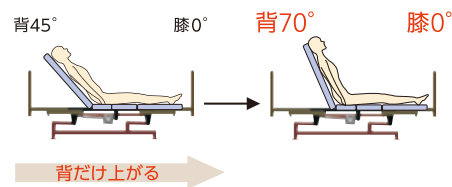

ケアレットシリーズ専用サイドレール(2本組)

※オプションで追加購入可能


※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは2セット(4本)まで非課税となります。

背上げ1モーターベッド専用



PA504-PR743Y ■メーカー希望小売価格 オープン価格

■JANコード/4539940082150
■材質/スチール、天然木、PU塗装 ■寸法/幅74.0×高さ41.0cm

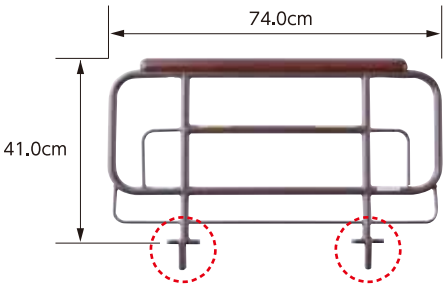


背上げ1モーターベッド(バックオフ機構付)専用
1+1モーターベッド(バックオフ機構付)専用



PA503-PR743Y ■メーカー希望小売価格 オープン価格

■JANコード/4539940082167
■材質/スチール、天然木、PU塗装 ■寸法/幅74.0×高さ41.0cm

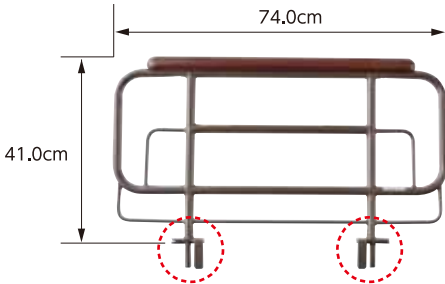


心地良い毎日のために選ぶマットレス ケアレット専用“エクレーヴ”シリーズ

2層構造により適度な硬さと低反発ウレタンによる
ソフトな寝心地を追求しました

エルダーサポートワイドマットレス

- 普通のウレタンと低反発ウレタンによる、
やや柔らかめのマットレスです。
- 軽量タイプで取り扱いも簡単です。

※外カバーは取り外しできません。

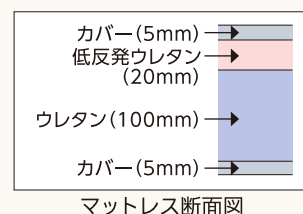

マットレス断面図



ソフト
4
当社比

PSB-FS(4/4)

■メーカー希望小売価格
オープン価格

■JANコード／4539940060646

■材質／外カバー:ポリエステル 中材:低反発ウレタン、ウレタン
■寸法／幅97.0×厚さ13.0×長さ196.0cm
■質量／7.8kg ■原産国／ベトナム


※ベッドの床面高さは、37.0／43.5／50.0cmとなります。

※「ケアレットシリーズ」のベッド本体と同時購入の際のみ、非課税となります。

硬質のチップウレタンと2種類のウレタンを使い
「硬さと寝心地」を追求したマットレスです

硬質ウレタンマットレス

- 普通のウレタンと硬質のチップウレタンの
良さを生かしたやや硬めのマットレスです。
- 外カバーは2つに分かれることで洗濯も
しやすくしました。

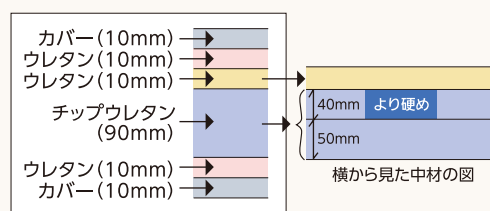

マットレス断面図



ハード
2
当社比

PSB-FW14(4/4)

■メーカー希望小売価格
オープン価格

■JANコード／4539940060677

■材質／外カバー:ポリエステル 中材:チップウレタン、ウレタン
■寸法／幅96.0×厚さ14.0×長さ196.0cm
■質量／15.3kg ■原産国／ベトナム

※ベッドの床面高さは、38.0／44.5／51.0cmとなります。


※「ケアレットシリーズ」のベッド本体と同時購入の際のみ、非課税となります。

FOR COMFORTABLE LIFE
エクレーヴ
Mattress series

ポケットコイル、ウレタン、綿という違った素材の特長を生かし、
肌触りの良さと幅広い体重に適應した高級タイプのマットレスです

ポケットコイルマットレス

- ポケットコイルとウレタンの良さを生かし体重30～120kg
まで幅広い体重で体圧分散と適度な硬さを維持します。
- 外カバーは2つに分かれることで洗濯もしやすくしました。

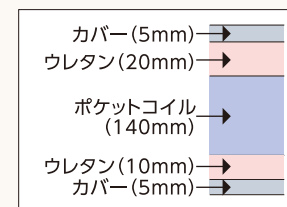

マットレス断面図



標準
3
当社比

防臭

防ダニ

抗菌

PSB-FT18(4/4)

■メーカー希望小売価格
オープン価格

■JANコード／4539940060660

■材質／外カバー:ポリエステル 中材:ポケットコイル、ウレタンフォーム、フェルト
■ポケットコイル数／480個、線径:2.00mm

■寸法／幅96.0×厚さ18.0×長さ196.0cm

■質量／18.0kg ■原産国／ベトナム

※ベッドの床面高さは、42.0／48.5／55.0cmとなります。

※「ケアレットシリーズ」のベッド本体と同時購入の際のみ、非課税となります。

銀糸入りボックスカバーと通気性の良いベッドパッド

ケアレット専用 銀糸ボックスカバー

- 速乾性がありカバーに付着した水分を
素早く乾かします。
- ご自宅で洗濯できます。
- 全周ゴム入りでズレにくく、取り外しも楽です。

PCC-96

■メーカー希望小売価格
10,044円(税込)



■JANコード／4539940081313
■材質／ポリエステル、銀糸
■原産国／韓国

銀糸入りラッセルベッドパッド

- ラッセル構造によりマットとの間に空気層ができ、
夏はムレを防ぎ、冬も暖かい状態になります。
- 吸汗、速乾の生地を採用。
- ご自宅で洗濯できます。

PKM-BP96

■メーカー希望小売価格
17,388円(税込)



■JANコード／4539940081467
■材質／ポリエステル、銀糸
■寸法／幅96.0×長さ196.0cm
■原産国／韓国

※銀糸には抗菌作用があり、菌の繁殖を抑え、防臭性を高めることが期待できます。

プラッツの原点

医師を父に持つ福山（現社長）が1992年に創業。1996年からベッドを主としたメーカーとして展開を始めた。介護ベッドについては数十万円と当時は非常に高額で、「これでは子や孫がお年寄りに買ってあげられる金額ではない。せめて10万円位にできないか?」という社長の強い思いから試行錯誤をした結果、99,800円と当時としては破格値のPKB-3シリーズを世に出し大きな反響をいただきました。ここにプラッツの原点があります。「どんなに高性能でも一般の人が買えない価格では意味が無い」。プラッツは「一生懸命」に高品質と低価格を追求しています。




介護ベッド
「PKB-3055」

1992年

ある「一般の方を対象にした 展示即売会」での出来事

「介護ベッド」と書いたパネルをベッドの横に掲げ展示をしてましたが、お年寄りは見向きもされません。杖を突いた90歳位のおばあちゃんに声をかけたところ「介護ベッドに寝たら終わり!」ときつい一言。おばあちゃんにすれば介護ベッドはTVやエアコンの様に「使いたい・買いたい」商品ではなく、逆に「使いたくない商品」「仕方なく使う商品」。すぐにパネルを「電動ベッド」に書き換えたところ、少しずつ説明を聞いて頂けるようになりました。結果は、60代の方に1台だけ販売することができましたが、「安心して立ち上がれるから、夜と朝の不安がなくなりそうね」という言葉を忘れる事ができません。「家で使うベッドだから家庭的なデザインを追求しよう。」プラッツの基本ポリシーですが、ベッドの形だけでは駄目!お年寄りの立場に立ち、その表現方法にも気を配ることが大切と痛感した事例でした。今では、元気だけど体に不安のある方にも使っていただけるベッドの名称は、「自立されている今の状態を少しでもサポートしたい」との思いを込め「自立支援電動ベッド」と名称を変更しました。

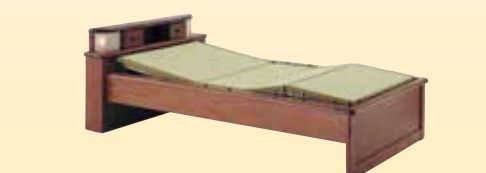

たたみベッド
「PTB-313-DB」

2000年

身長に合わせた 調整ができないの?

日本のお年寄りも140cm台の方から180cmの方まで身長も様々。当然、足の長さも様々。なのにベッドの曲がる位置は一つ。結果、背を上げた時にズレが発生しやすく、床ずれの原因にもなってます。2006年に開発に着手した「ミオレット」では膝の曲がる位置を3段階に調節でき、床ずれのリスク軽減に成功しました。




レンタル対応ベッド
「ミオレット」

2006年

自動的にロックする ベッド用グリップを作れないか?

グリップ部が回転し、寝ているときは閉じて転落を予防し、使うときは開いて立ち上がりを補助するベッド用グリップ。非常に便利であると同時に、開閉部分の固定を忘れると、転倒など事故の原因にもなります。2007年に開発に着手した「自動ロック式ベッド用グリップ ニーパロ」では、45度毎に自動的に回転部が固定される自動ロック機能を搭載。この問題に対応し、2011年1月に発売されました。また、佐賀大学医学部松尾准教授からの要望を受けニーパロ専用オプション「移乗してわかる 安心ひざパッド ニーパロ・パッド」を開発しました。膝の位置に軟らかい樹脂パッドがあるだけで、立ち上がる際、車いすやポータブルトイレへ、楽に安全に移動ができます。介助する人にとっても腰への負担を少なくできます。

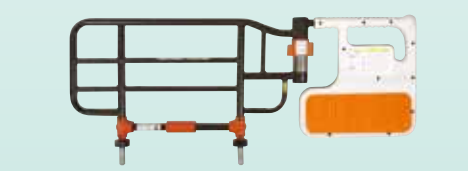

パッド付自動ロック式ベッド用グリップ
「ニーパロP」

2011年

施設のニーズに応えた センターロック搭載 低床電動ベッドが誕生!

介護度の高い方にこそ、背圧・腹圧のないベッドを使っていたきたい。そんな想いから施設用ベッドにミオレット・フォーユーで実現した背圧・腹圧を軽減させるランバー機構、ヒップダウン機構、フィッティング機構を搭載しました。また、ボードにはバンパーを取り付け、キャスターはセンターロックタイプにすることでベッドの移動、設置される方への負担を少しでも軽減できるようにしました。



施設用低床電動ベッド
「アルティレット・トゥーユー」

2012年

元気な方から低介護度の方へ 自立支援電動ベッド ケアレットシリーズを一新

ケアレットシリーズが待望のリニューアル!ラインナップ充実でさらにお好みに合わせてお選び頂けるようになりました。伝統技法「矢張り加工」を取り入れた『ケアレットフォルテ』、落ち着いた色のある色の『ケアレットネオ アルファ』の2タイプはそれぞれベッドボードが「フラットタイプ」とメガネなど小物が置ける「宮付タイプ」の2種類をご用意しています。高級感を感じさせるPUレザーを採用した『ケアレットニコ』は、スタイリッシュな見た目だけでなく、ソフトな感触であたたかさや安全性を両立しました。



「ケアレットフォルテ」



「ケアレットネオ アルファ」



「ケアレットニコ」

2014年

1998年

宮付ベッドは介護用ではない?

「介護・医療用ベッドのヘッドボードはフラットタイプであり、ティッシュやめがね、お薬などはサイドテーブルに置くもの」という事が常識とされてました。しかし、在宅では誰もがテーブルを購入でき、そのスペースがある訳でもなく、結果、“枕元にこれら小物類を置かれ、背上げた時にずり落ちてしまう。ずり落ちるから背上げ機能は使わない”。ということにもなります。であれば、「小物が置ける宮付」を介護ベッドにも導入しよう!と1998年に宮付ベッドを市場に送り出し、今では多くの施設でも宮付タイプが導入されています。



介護ベッド初の宮付ベッド
「PKB-NAD」

2001年

ベッドのフレームの色は 何故白なの?

白では病院のイメージが付きまとい「家では使いたくない」という声をきっかけに、2001年弊社初のレンタルベッド「PZB-V310R」からフレーム色はメタリックグレイにしました(業界初)。今ではほとんどのメーカーが在宅用ベッドで白を使っていません。



業界初の白ではない
レンタル対応ベッド
「PZB-V310R」

2008年

もっと寝心地のよい ベッドにできないか


自立支援電動ベッドに使用するマットレス。1種類のマットレスでは利用される方によっては硬いと感じられたり、また逆にやわらかいと感じられたりします。そこで、ケアレットシリーズは3種類のマットレスから選べるようにしました。3種類の中で一番ソフトなエルダーサポートワイドマットレス、標準的な硬さで幅広い体重に適応したポケットコイルマットレス、そして少し硬めの硬質ウレタンマットレス。また、ボードタイプもそれぞれ宮付タイプ、フラットタイプの2種類から選べるようにしました。使用される方に合った商品を選んでいただきたい。そんな想いからケアレットシリーズは誕生しました。



自立支援電動ベッド
「ケアレット」



◀エルダーサポート
ワイドマットレス

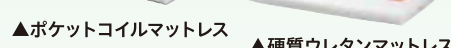

▲ポケットコイルマットレス

▲硬質ウレタンマットレス

2011年

次世代の在宅用介護ベッドの スタンダードを目指して!

4年の歳月をかけ、使う人、介護する人、販売する人、それぞれの立場の商品コンセプトを煮詰め、佐賀大学の松尾准教授、九州産業大学の青木教授のご協力を得て開発を行いました。特に力を入れたのが、ユニバーサルデザインと背上げ時に発生する「背圧・腹圧・身体」への対応です。使う人が使い易くないと事故が起きます。握力が落ちた手でも持てる手元スイッチを始め、様々な部分にユニバーサルデザインの考えを盛り込みました。背上げに対しては、猫背になり難いように背中を押してくれるランバー機構や膝の位置に合わせて調整できるフィッティング機構など5つの機構により、従来より大幅に「背圧・腹圧・ズレ」を軽減することに成功しました。



介護保険レンタル対応在宅介護用ベッド
「ミオレット・フォーユー」

2014年

膝のフィッティングが好評の 「ミオレット」に待望の後継機登場!

「ミオレットII」は2007年に販売開始した「ミオレット」の後継機で、佐賀大学の松尾准教授の監修を頂き、背上げ時のズレを抑える膝のフィッティング位置の見直し、車いすとの密着性の改善や、「ミオレット・フォーユー」で好評の手元スイッチの採用など利用者の安全性と使いやすさを追求しました。また、全重量を77kg(2モーター)と従来比で15%減らし搬入搬出時の腰痛緩和対策も行いました。



介護保険レンタル対応在宅介護用ベッド
「ミオレットII」

膝あて移乗と自動ロックを 実現した唯一のベッド用 グリップがさらに進化!


2011年に発売した「ニーパロ」の後継機「ニーパロII」は、好評の自動ロックは継承しつつ、移乗性を高めるため膝当て面を拡大し、グリップ部の強度を上げながら、重量は1kg減らしました。また、サイドレールの高さを2cm高くし、レールの乗り越し転落事故対策を行いました。



パッド付自動ロック式ベッド用グリップ
「ニーパロII」

2015年

83cm幅をラインナップに加え全32種の中から
お選び頂けるようになりました

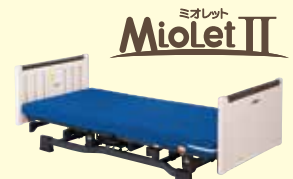



※「サンキューポイントマットレス」
との組み合わせ例



産学連携によって研究開発された、ユニバーサルを極めた介護ベッド

機能面・医学面で、佐賀大学医学部准教授の松尾清美氏協力の下、細部に至るまで、ユニバーサルデザインを極めた介護ベッドを開発しました。


介護保険レンタル対応 在宅介護用ベッド
ミオレット・フォーユー

■メーカー希望小売価格
オープン価格 非課税

18
種類の
組合せ



●樹脂ボードタイプ

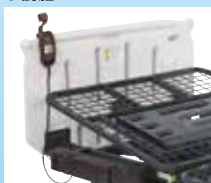

●木製フラットボードタイプ



●木製宮付ボードタイプ



製造元

株式会社プラッツ

■本社／ショールーム

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-39
TEL:092-584-3434 / FAX:092-584-3436

●北海道営業所

〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条
1-2-22-102

TEL.011-807-4750 FAX.011-807-4751

●東北営業所

〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字東通29
ホワイトアーバンシティ102

TEL.022-781-7072 FAX.022-781-7062

■関東支店・関東ショールーム

〒105-0014 東京都港区芝2-16-9 芝YSビル1F
TEL.03-5427-8033 FAX.03-5427-8031

■東海支店・東海ショールーム

〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社3-108
オフィス・クロンドビル1F

TEL.052-704-2700 FAX.052-704-2701

■関西支店・関西ショールーム

〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4
メディアパードビルディング2F

TEL.06-6233-2105 FAX.06-6233-2107

●中四国営業所

〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6
TEL.084-946-6000 FAX.084-946-6040

■九州支店（本社内）

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-39
TEL.092-584-3433 FAX.092-502-3810

<http://www.platz-ltd.co.jp/>

Facebookプラッツオフィシャルページ

<http://www.facebook.com/PlatzJapan>

■ご意見・ご質問等は

iken@platz-ltd.co.jp

製品のお求め、お問い合わせは