


仕様

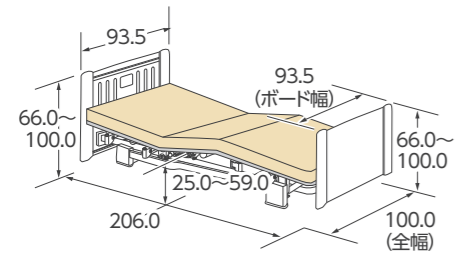

※床からベースフレームの間は6.0cmとなります。  
※スイングしながら昇降するため、脚側には8cm以上、頭側には1cm以上のスペースが必要です。

	2モーター	3モーター
マットレス適合寸法	長さ:190.0~192.0cm、幅:88.0~91.0cm	
質量	77.0kg	78.0kg
梱包	5梱包	
材質	本体部:スチール、ABS樹脂、PP樹脂 ヘッド・フットボード:PE樹脂	
電動機能	背上げ角度	0~70度
	膝上げ角度	0~22度(背上げ連動) 0~18度
床面高	25.0~59.0cm	
定格電圧	AC100V	
定格消費電力	150W	
モーター部	TiMOTION社製	
最大利用者体重	138kg/安全動作荷重:174kg (1700N)	
原産国	ベトナム	

専用オプション

4.5cm/ハイトスペーサー(4個組)



装着時の床面高は+4.5cmになります。

PC501-FU45

■メーカー希望小売価格  
**8,000円(税込8,800円)**  
■TAISコード/00631-000205  
■JANコード/4539940081726  
■材質/PP樹脂  
■原産国/ベトナム  
※キャスターとの併用はできません。

キャスター(4個組)




装着時の床面高は+3.5cmになります。

PC503-8CK1

■メーカー希望小売価格  
**22,000円(税込24,200円)**  
■TAISコード/00631-000236  
■JANコード/4539940082143  
■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂  
■原産国/台湾  
※ストッパー付×2個、ストッパー無×2個の4個組

製造元

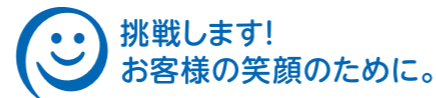

■本社/ショールーム  
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17  
TEL:092-584-3434/FAX:092-584-3436  
■北海道支店  
〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条1-2-22-102  
TEL.011-807-4750 FAX.011-807-4751  
■東北支店  
〒983-0014 宮城県仙台市宮城野区高砂1-1-15  
TEL.022-781-7072 FAX.022-781-7062  
■関東支店・関東ショールーム  
〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1  
TRCセンタービル7F  
TEL.03-5763-5425 FAX.03-5763-5426

■東海支店・東海ショールーム  
〒465-0025 愛知県名古屋市中東区上社1-402  
TEL.052-737-2230 FAX.052-737-2231  
■関西支店・関西ショールーム  
〒578-0911 大阪府東大阪市中新開1-4-12  
TEL.072-943-2723 FAX.072-943-2724  
■中四国支店  
〒721-0973 広島県福山市南蔵王町4-8-37  
TEL.084-946-6000 FAX.084-946-6040  
■九州支店(本社内)  
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17  
TEL.092-584-3433 FAX.092-502-3810

<https://www.platz-ltd.co.jp/>



■ご意見・ご質問等は  
[pinfo@platz-ltd.co.jp](mailto:pinfo@platz-ltd.co.jp)

# Miolet II

## KHAI




はじめて使う方にもわかりやすい、シンプル操作のスタンダードベッド




### 背上げ時のズレを抑えるライジングモーション (2 モーターのみ)

背上げボタンを押すと、背と膝の角度を自動的に調整しながらリクライニングをおこなうことにより、足方向へのズレを抑制します。背を上げ続けると膝は下がることで腹部の圧迫を抑え、背を上げきると膝はフラットになり端座位も取りやすくなります。

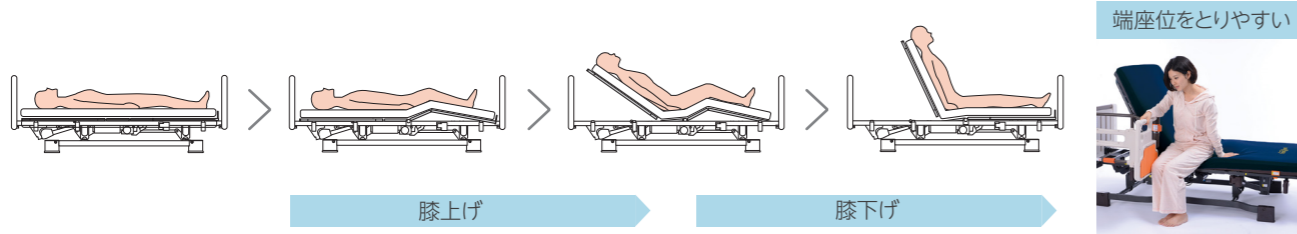

### 背上げ時の背圧・腹圧を軽減するバックオフ機構

背ボトムを後方に 4cm スライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、背中や腹部の圧迫感を軽減します。また、背圧は肩付近にかかるように設計されており、肩の後ろに手を差し込むだけでも大幅に除圧できます。

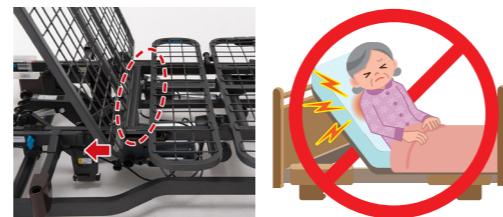

### 車いすへの移乗も安心な収納式のオプション受け

脚側 1 か所のオプション受けは収納でき、使用しない時には邪魔になりません。立ち上がりや車いすへの移乗がしやすいように配慮しています。  
※収納できるのは左右それぞれ写真の 1 か所のみです。他は固定式です。



### 手元スイッチの操作ロック機能

手元スイッチのロックボタンを付属のロックキーで回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をできなくすることができます。転落予防のためベッドの高さを低いままにしたい場合や、誤操作を防ぎたい場合にご使用ください。



### シンプル構造で、納品もスムーズ

#### ■ 簡単組み立て

煩雑な配線がなく、ピンも少なく簡単に組み立てられるので、スピーディに納品できます。

#### ■ 業界トップクラスのパーツ軽量化

すべてのパーツは 18kg 以下。搬入出やメンテナンス時の負担や作業時間を軽減します。

背上げ機能で呼吸をラクに

コラム

寝た状態になると、内臓が横に広がることで肺や横隔膜を圧迫し、息苦しさを感じる場合があります。背上げ機能を使うことで、内臓が下がり肺や横隔膜が動きやすくなるため、呼吸のしやすさに効果的です。

### モータータイプ

**2 モーター**

背上げ70°

背膝連動70°/22°

高さ調節

**3 モーター**

背上げ70°

背膝連動70°/18°

高さ調節

膝上げ18°

### 型式

※価格はオープン価格です。

2モーター <span style="color: red; font-weight: bold;">非課税</span>	3モーター <span style="color: red; font-weight: bold;">非課税</span>
<b>P106-2KAK</b> ■TAIS/00631-000241 ■JAN/4539940014663	<b>P106-3KAK</b> ■TAIS/00631-000243 ■JAN/4539940014731