

ラフィオ *Rafio*

ベッドの高さに不安がある方にも安心の超低床ベッド



木製スクエアボード(ダークブラウン)



木製スクエアボード(ミディアムブラウン)



木製スクエアボード(ライトブラウン)



樹脂ボード(木目調)



木製ラウンドボード(ダークブラウン)




木製ラウンドボード(ミディアムブラウン)



木製ラウンドボード(ライトブラウン)


新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレカの軽減に

ラフィオ ポジショニングベッドシリーズ

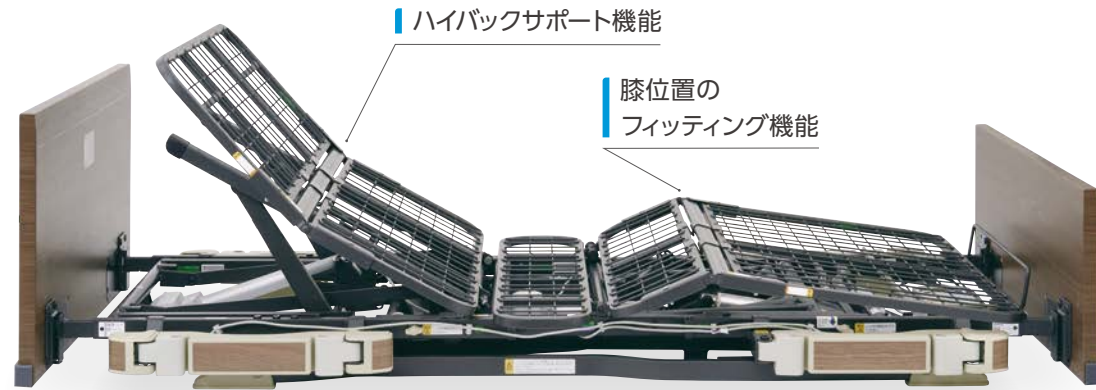

ハイバックサポート機能 ポジショニング

背ボトムを「ハイバック：頭～背部」と「ローバック：腰部」の2つに分け、それぞれの角度を調節しながら背上げをおこないます。2モーターポジショニングベッドでは、ハイバックは背上げと連動して動きます。3モーターポジショニングベッドでは、ハイバックを単独で操作することができます。

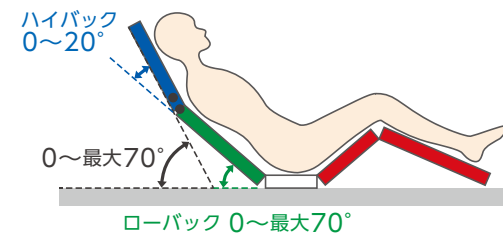


背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能 ポジショニング

大腿部の長さに合わせて、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。


ピンを外して
左右にずらすだけの
簡単調整!



「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…

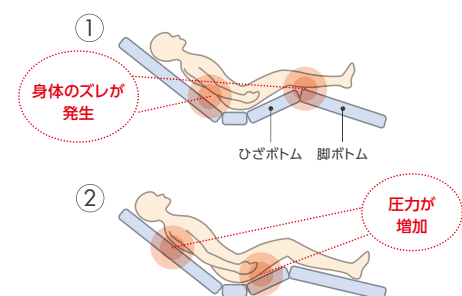

⚠ 褥瘡 (床ずれ) の原因になります

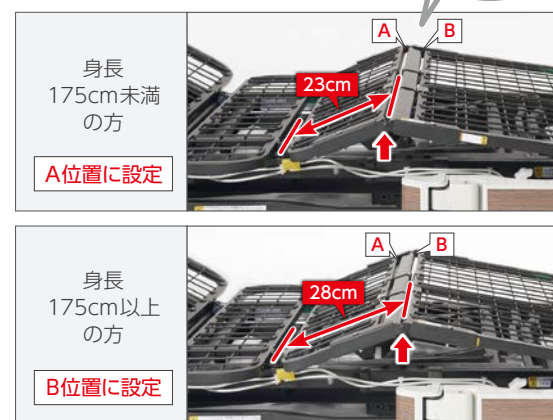

ポジショニングベッドに期待できる効果





誤嚥リスクの低減 ポジショニング

背上げ時に頸部の角度を調節、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現がしやすくなります。摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥リスクの低減が期待できます。



褥瘡(床ずれ)リスクの低減(ズレカ、圧力の軽減) ポジショニング

ハイバックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、ズレカと身体への圧力を軽減できます。背上げ後の静止状態でのズレカと圧力も軽減し、深部組織損傷(DTI)のリスクを低減。褥瘡(床ずれ)対策のポジショニングをサポートします。

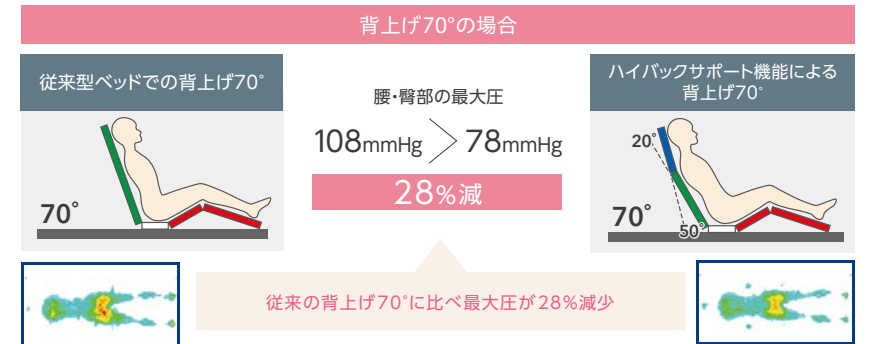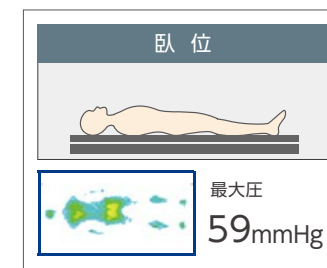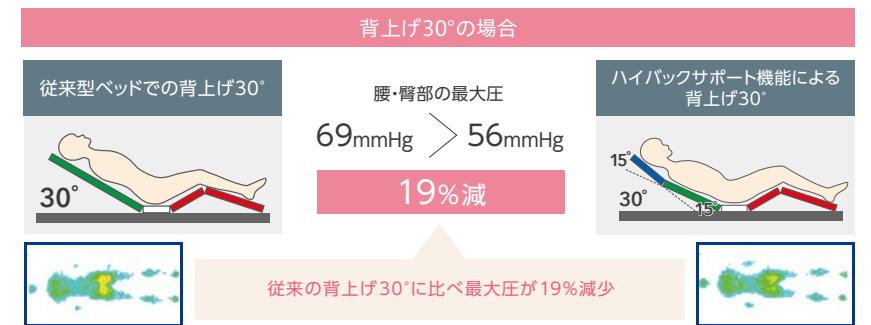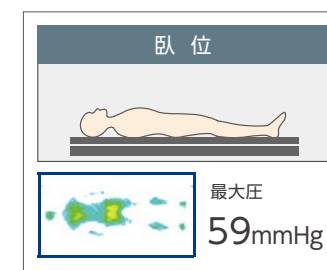

被験者:身長164cm 体重57kg 男性 計測機器:SRソフトビジョン全身版(住友理工社製) アミカルサポートマットレス使用時 ※データは一例です。測定値には個人差があります。

呼吸がしやすい姿勢に ポジショニング

背圧や腹圧を軽減し横隔膜を広げ、呼吸がしやすい快適な姿勢をつくります。また、体幹上部を屈曲することで、循環器への負荷を抑える効果が期待できます。



円背の方から妊娠中の方まで、幅広くポジショニングをサポートします ポジショニング

円背の方でも、脊柱の湾曲部にハイバックサポートの角度を合わせることができる場合、背上げ時の適切なポジショニングが可能です。股関節の可動域が狭く背上げが困難な方や、腹圧がかけられない妊娠中の方にもズレカの少ない快適な背上げをご提供します。

高さへの不安をなくす超低床15cm

最低床時は床面高15cm。普段布団でお休みされていた方にも抵抗感の少ない床面高です。また、ベッドからの転落の不安や転落した際の怪我のリスクを低減します。

ベッドを下げる際は一定の位置からブザーを鳴らし、ボードやフレームによる挟み込みを警告します。
そのままボタンを押し続けると、ブザーを繰り返し鳴らしながら最低位15cmまで下がります。



省スペースに設置可能な垂直昇降機能


昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なく済みます。

また、床面高は最低位15cmから最高位57cmまで昇降でき、ベッドからの立ちあがりや介護する方の負担を軽減します。




足先上げと足先下げの簡単切替え ポジショニング


足先の上げ／下げをワンタッチで切り替えができ、脚の浮腫（むくみ）の軽減にも対応できます。

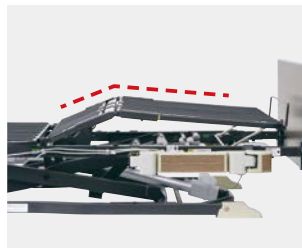

足先上げ

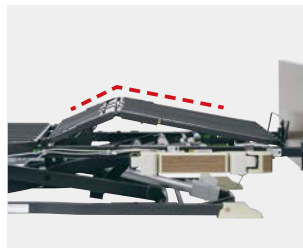

足先下げ

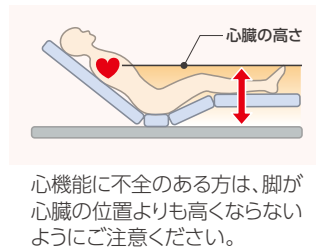

自然で快適なリクライニング動作 ポジショニング

1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながらハイバック・ローバック・膝がそれぞれ動き、快適なリクライニング姿勢を実現。身体のズレや腹部の圧迫を抑制します。




ハイバック上げ+ローバック上げ+膝上げ

ハイバック下げ+ローバック上げ+膝下げ

ワンタッチ収納のオプション受け

すべてのオプション受けは簡単にできるため、ケアや移乗の妨げになりません。

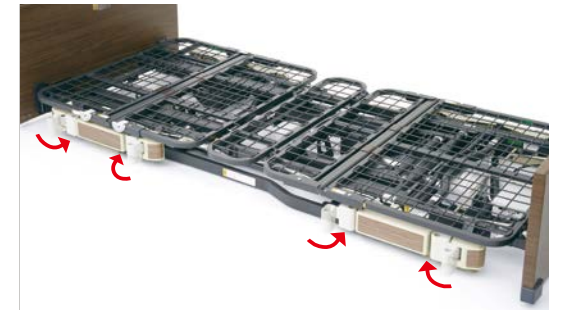

角度計 ポジショニング

ボトムへ取り付け可能な角度計です。適切な角度を確認しながら、背上げ動作を行うことができます。



モータータイプ

HB2 モーター ポジショニングベッド




HB3 モーター ポジショニングベッド



2 モーター



3 モーター

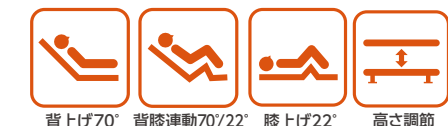

ポジショニングベッドシリーズ 型式

■ 2モーター ポジショニングベッド

キャスターロック	マットレス幅	ボードタイプ	ボードカラー	型式	メーカー希望小売価格
固定脚	90cm幅	樹脂ボード		P110-21ACR	オープン価格
		木製スクエアボード	ダークブラウン	P110-21BFR	515,000円 (非課税)
			ミディアムブラウン	P110-21DFR	
			ライトブラウン	P110-21CFR	
		木製ラウンドボード	ダークブラウン	P110-21BRR	527,000円 (非課税)
			ミディアムブラウン	P110-21DRR	
			ライトブラウン	P110-21CRR	

■ 3モーター ポジショニングベッド

キャスターロック	マットレス幅	ボードタイプ	ボードカラー	型式	メーカー希望小売価格
固定脚	90cm幅	樹脂ボード		P110-71ACR	オープン価格
		木製スクエアボード	ダークブラウン	P110-71BFR	550,000円 (非課税)
			ミディアムブラウン	P110-71DFR	
			ライトブラウン	P110-71CFR	
		木製ラウンドボード	ダークブラウン	P110-71BRR	562,000円 (非課税)
			ミディアムブラウン	P110-71DRR	
			ライトブラウン	P110-71CRR	

ベーシックベッドシリーズ 型式

■ 2モーター ベーシックベッド

キャスターロック	マットレス幅	ボードタイプ	ボードカラー	型式	メーカー希望小売価格
固定脚	90cm幅	樹脂ボード		P110-22ACR	オープン価格
		木製スクエアボード	ダークブラウン	P110-22BFR	470,000円 (非課税)
			ミディアムブラウン	P110-22DFR	
			ライトブラウン	P110-22CFR	
		木製ラウンドボード	ダークブラウン	P110-22BRR	482,000円 (非課税)
			ミディアムブラウン	P110-22DRR	
			ライトブラウン	P110-22CRR	

■ 3モーター ベーシックベッド


キャスターロック	マットレス幅	ボードタイプ	ボードカラー	型式	メーカー希望小売価格
固定脚	90cm幅	樹脂ボード		P110-32ACR	オープン価格
		木製スクエアボード	ダークブラウン	P110-32BFR	505,000円 (非課税)
			ミディアムブラウン	P110-32DFR	
			ライトブラウン	P110-32CFR	
		木製ラウンドボード	ダークブラウン	P110-32BRR	517,000円 (非課税)
			ミディアムブラウン	P110-32DRR	
			ライトブラウン	P110-32CRR	

※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

仕様

2モーター／3モーター

■ 樹脂ボード (単位:cm) ■ 木製スクエアボード (単位:cm) ■ 木製ラウンドボード (単位:cm)

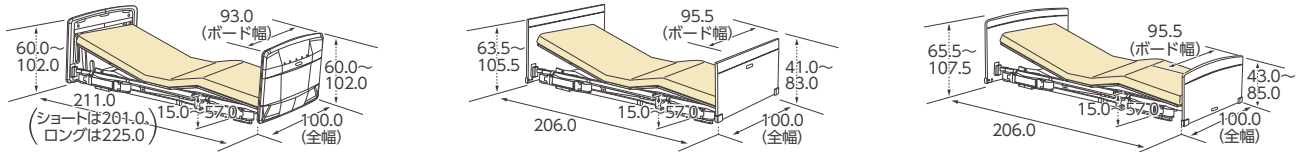

※床からベースフレームの間は0.9cmとなります。

		2モーター ポジショニングベッド	3モーター ポジショニングベッド	2モーター ベーシックベッド	3モーター ベーシックベッド
マットレス適合寸法		全長190.0cm～192.0cm、幅88.0～91.0cm			
質量	樹脂ボード	94.9kg	96.4kg	89.4kg	90.9kg
	木製スクエアボード	97.4kg	99.4kg	92.4kg	93.9kg
	木製ラウンドボード	97.9kg	99.9kg	92.9kg	94.4kg
梱包		7梱包			
材質		本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:プリント紙化粧繊維板、ウレタン樹脂塗装			
電動機能	ハイバック角度	0～20度(背上げ連動)	0～20度	-	-
	背上げ角度	0～70度			
	膝上げ角度	0～22度(背上げ連動)	0～22度	0～22度(背上げ連動)	0～22度
床面高		15.0～57.0cm			
定格電圧		AC100V			
定格消費電力		165W			
モーター部		LINAK社製			
最大利用者体重		138kg／安全動作荷重:174kg(1700N)			
原産国		ベトナム			

専用オプション

超低床用キャスター(4個組)

装着時の床面高は+0.5cm(最低床面高15.5cm)になります。

PC01-5CK
■メーカー希望小売価格
26,000円(税込28,600円)
■JANコード／4539940083157
■材質／ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂
■原産国／ベトナム
※人感センサー付フットライト、サイドテーブル、変換アダプター付電源コードはご使用できません。

低床用キャスター(4個組)

装着時の床面高は+8cm(最低床面高23cm)になります。

PC02-8CK
■メーカー希望小売価格
22,000円(税込24,200円)
■JANコード／4539940083164
■材質／ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂
■原産国／ベトナム

8cmハイトスペーサー固定脚タイプ(4個組)

装着時の床面高は+8cm(最低床面高23cm)になります。

PH04-80
■メーカー希望小売価格
8,000円(税込8,800円)
■JANコード／4539940083171
■材質／ABS樹脂
■原産国／ベトナム
※キャスターとの併用はできません。

バッテリー

ベッドにあらかじめ取付けておくことで、停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。(充電式)

PE06-BA19
■メーカー希望小売価格
23,000円(税込25,300円)
■JANコード／4539940083195
■寸法／幅13.0×長さ19.5×高さ6.5cm
■質量／1.5kg
■原産国／デンマーク



安全についてのご注意

機器を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

カタログのご注意事項

- 製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
- カタログの写真と実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
- カタログ本文の寸法・角度等の数値には、使用上の安全を考慮した多少の誤差が含まれます。
また表示を見やすくするため、「約」、「およそ」といった文言を省略しています。
- ベッドの写真内のマットレス・テーブル等は、特記事項のあるもの以外は別価格です。
- 製品の価格に **(非課税)** の表示がある製品には消費税がかかりません。
- 製品の価格には配送料・納品(組立設置料)・不要品の引き取り等の費用は含まれておりません。
- 製品の安全性・品質には万全の注意を払っておりますが、下記の原因による事故に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
 - ①製品の目的以外のご使用や誤ったご使用を原因とした事故
 - ②当社未承認での製品の改造等を原因とする事故
 - ③「当社が指定する当社製品の組み合わせ」以外の組み合わせを原因とする事故(例:当社ベッドと他社製のサイドレールやベッド用グリップとの組み合わせ)
 - ④その他当社の責任とはいえない事故

※最新の製品情報・安全に関する情報はホームページに記載しております。

製造元



医療・介護ベッドメーカー
株式会社プラッツ



挑戦します!
お客様の笑顔のために。

■本社/ショールーム

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL:092-584-3434 / FAX:092-584-3436

■北海道支店

〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条
1-2-22-102
TEL.011-807-4750 FAX.011-807-4751

■東北支店

〒983-0014 宮城県仙台市宮城野区高砂1-1-15
TEL.022-781-7072 FAX.022-781-7062

■関東支店・関東ショールーム

〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1
TRCセンタービル7F
TEL.03-5763-5425 FAX.03-5763-5426

■東海支店・東海ショールーム

〒465-0025 愛知県名古屋市中東区上社1-402
TEL.052-737-2230 FAX.052-737-2231

■関西支店・関西ショールーム

〒578-0911 大阪府東大阪市中新開1-4-12
TEL.072-943-2723 FAX.072-943-2724

■中四国支店

〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6
TEL.084-946-6000 FAX.084-946-6040

■九州支店(本社内)

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL.092-584-3433 FAX.092-502-3810

<https://www.platz-ltd.co.jp/>



■ご意見・ご質問等は

pinfo@platz-ltd.co.jp

製品のお求め、お問い合わせは