

HOME CARE BED



プラッツはいつも「一生懸命」です。



おかげさまでプラッツは2021年7月、30期を迎えることができました。これもひとえにお客様のおかげと心から厚く御礼申し上げます。これからもプラッツは「高品質」「高機能」「低価格」のものづくりで、コストパフォーマンスに優れた商品とサービスを皆様にお届けします。汎用性の高いスタンダードモデルから、ベッド上での誤嚥リスクの低減や褥瘡予防をサポートするハイスペックモデルまで、より良い介護環境の実現に貢献できる製品をこれからも生み出していきます。

index

● 在宅介護用ベッド

ヨカロ	2
ラフィオ	12
ミオレットⅢ	24
プリモレット	32

● マットレス

ゼロソア	36
ゼロソアアコーネ	38
アミカルサポートマットレス	40
ベイススサポート	42
ニューポイントマットレス	44
スタンダードマットレス	44
ユービーポイントマットレス	45
延長マットレス	46
頭部用制菌カバー	46

● 周辺機器

サイドレール	48
ハンドグリップ	49
ベッド用グリップ	50
人感センサー付フットライト	54
スイッチ接続キット	54
オーバーテーブル	54
ベッドサイドテーブル・カーペット・酸素ボンベホルダー	55

ベッドオプション適合表	56
-------------	----

在宅介護用ベッド

自立支援から
重度の方の在宅医療まで幅広くサポート

ヨカロ	2
ラフィオ	12
ミオレットⅢ	24
プリモレット	32

YOCARO

「ヨカロ」



詳しい説明や動画は
こちらから >>>



<http://www.platz-ltd.co.jp/product/yocaro/>

適合するマットレス幅：90cm幅
83cm幅

進化した背上げと業界最高クラスの床面高さで
介護でつながる皆さまに「ちょうどいい」



LINE UP 製品ラインナップ



木製フラットボード
90cm幅
83cm幅



樹脂製棚付きボード
(グレー木目調)
90cm幅
83cm幅



樹脂製棚付きボード
(ブラウンレザー調)
90cm幅
83cm幅



樹脂製棚付きボード
(無地)
90cm幅
83cm幅

より進化した「背上げ機能」と業界最高クラスの「床面高さ」で介護をサポートします




頭の角度を調節できる「ハイバックサポート機能」を改良し、可動範囲を30度まで広げました。腰に負担の少ない背上げや、食事介助や口腔ケアのための姿勢づくりもしやすくなります。



床面高さは78cm*まで上げることができます。おむつ交換や体位変換を行うときの中腰の姿勢を避け、介助する方の負担を減らします。
※固定脚切り替え時の高さ

ベッドを取り扱う事業所様もサポートします

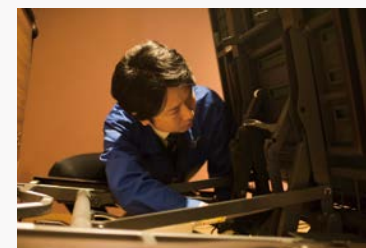


取付部品がフレームに付属している設計や自動でロックする構造などで、組み立て部品ゼロを実現。簡単に組み立てでき、部品の持ち忘れや紛失の不安もありません。パーツの共通化やモーターの後付けにより、最小限の在庫で幅広いラインナップを展開できます。

新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレカの軽減に ヨカロ ポジショニングベッドシリーズ





誤嚥リスク低減をサポートする、プラッツ独自のハイバックサポート機能 ポジショニング

背ボトムを「ハイバック:頭-背部」と「ローバック:腰部」の2つに分け、それぞれの角度を電動で調節可能です。ハイバックは0～30度の間で無段階に調節できます。

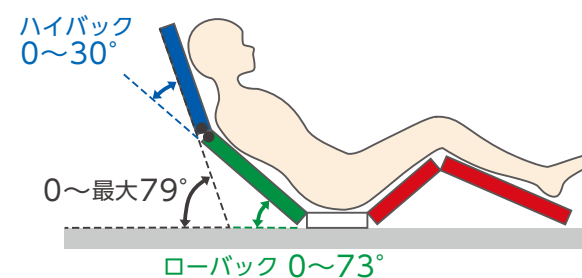

背上げ時のズレと引っ張り感を低減するスライドアップ機能

背ボトムが後ろと上に弧をえがくようにスライドすることで、腰の押し出しを少なくし、背上げ時のズレや圧迫を抑えます。

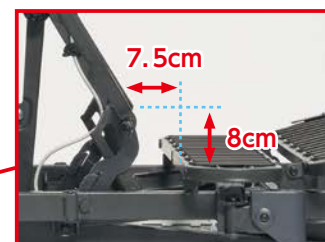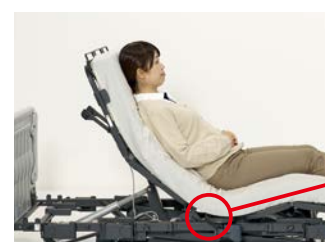


業界最高クラスの床面高さ78cm

床面高さは低床25cmから73cmまで、固定脚の切り替えで78cmまで調節できます。おむつ交換や体位変換を行うときの腰への負担を軽減します。また、昇降時はベッドが横にスイングしないので、設置面積が少なくてすみます。




むくみの改善にも対応できるひざ上げ角度

ひざ上げの角度は33°まで上げることができます。足先の上げ/下げもワンタッチで切り替えでき、脚のむくみ予防、浮腫の軽減をサポートします。

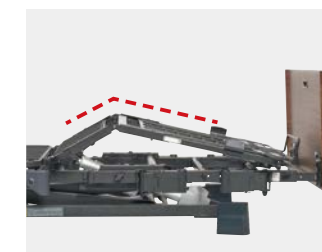

足先下げ

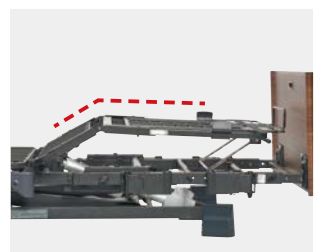


足先上げ

背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能


大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。

「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと...

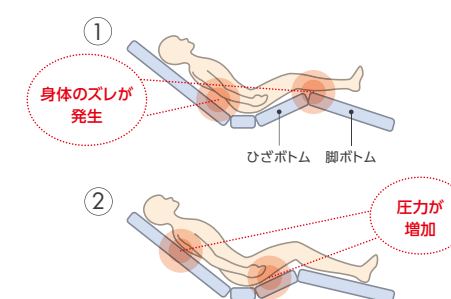

⚠️ 褥瘡 (床ずれ) の原因になります

ピンを外して
左右にずらすだけの
簡単調整!

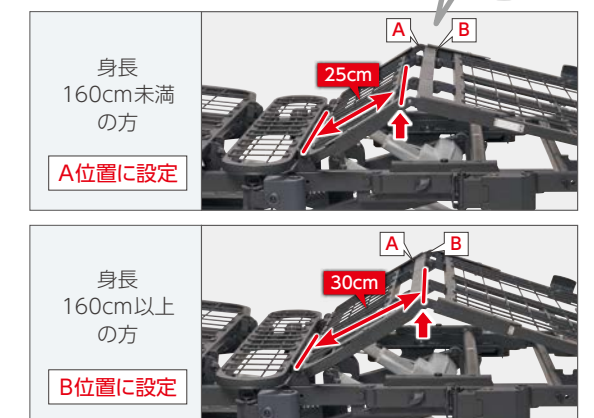

背上げのズレ・背圧を軽減するリクライニング動作

1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながらハイバック・ローバック・膝がそれぞれ動き、快適なリクライニング姿勢を実現。ハイバックとローバックの角度は合わせて最大73°を超えないように自動で調節され、腹部の角度が常に90°以上を確保するように設計されています。

枕元を整理できる、簡単収納の棚付きボード

樹脂製ボードには、ワンタッチで開閉できる収納式の棚を標準装備。生活や介護に必要な小物を置けるので、枕元の整理にも便利です。棚は樹脂製のため、清拭にも対応し衛生的に保てます。



サイドレールの中央差し・ワンタッチ収納のオプション受け

ベッドの中央にもオプション受けを標準装備。サイドレール1本で転落予防をサポートします。また、全てのオプション受けはワンタッチで収納でき、使用しない時には邪魔になりません。立ち上がりや車いすへの移乗がしやすいように配慮しています。



見やすい画面の液晶手元スイッチ


全ての角度と高さを1画面で表示するため、ベッドの今の状態がすぐにわかります。また食事介助や、お休みの時の角度に1ボタンで調節することができる「メモリー機能」や、動かしたくないボタンだけを停止できる「操作ロック機能」、操作結果が音でわかる「音声読み上げ機能」もあります。



組立部品ゼロを実現！

事業所様向け

組み立て時に自動でロックする構造や、取付部品がフレームに付属している設計などで、組み立て部品ゼロを実現。組み立て・分解がしやすく作業時の負担を減らします。また、部品の持ち忘れや紛失の不安もありません。

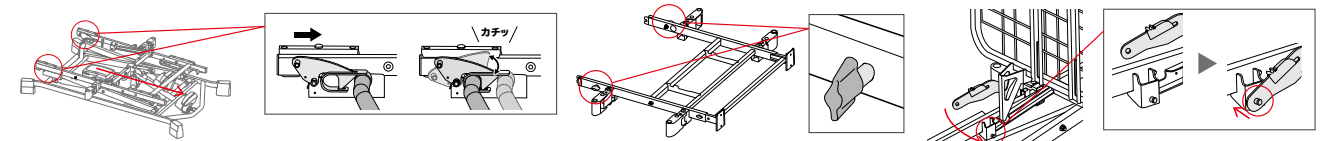

ベースフレームはセンターフレームにのせてスライドするだけで固定できます。

ノブボルトは本体に付属しています。背ボトムはワンタッチで固定できます。

異常時は手元スイッチにエラー表示

事業所様向け


ベッド使用時に異常がある場合、手元スイッチにエラーの内容が表示されます。現場ですぐに原因が特定できるので、スピーディーに対応できます。



昇降動作の速度アップ機能


事業所様向け

高さボタンとBボタンの同時押しで、通常の1.25倍速で動作します。納品時の動作チェックやメンテナンス時の効率化が図れます。

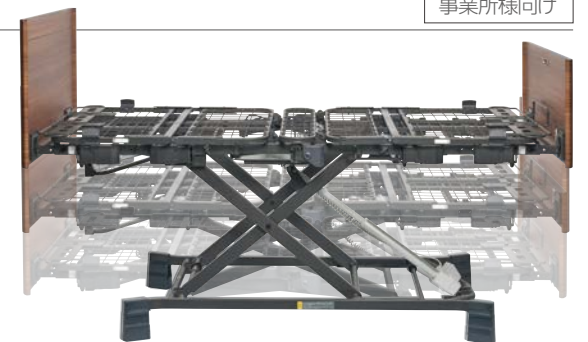

最小限の在庫で幅広いラインナップを展開

事業所様向け

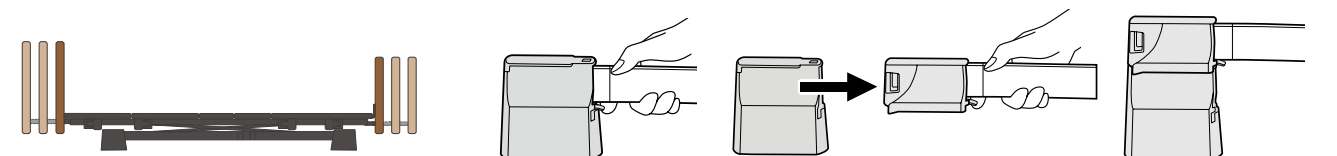


パーツの変更なしでベッドの長さを3段階に変更できます。

内蔵したかさ上げパーツで、+5cmの高さ切り替えができます。



モーターと手元スイッチの交換で、2モーターから3モーターへ変換できます。

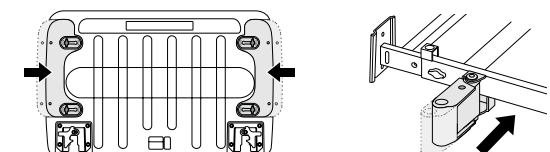

83cm幅/90cm幅への切り替えはボトムのみ（木製ボードはボトムとボード）で対応できます。

ポジショニングベッド モータータイプ

HB2
モーター

2モーター
ポジショニングベッド

ハイバック30°

背上げ73°

背膝連動73°/33°

高さ調節

HB3
モーター

3モーター
ポジショニングベッド

ハイバック30°

背上げ73°

背膝連動73°/33°

膝上げ33°

高さ調節

ポジショニングベッドシリーズ 型式

※価格はオープン価格です。**非課税**

■ 樹脂製棚付きボード(無地)	
	2モーターポジショニングベッド
90cm幅	P116-61AD ■TAIS/00631-000645 ■JAN/4539940102643
83cm幅	P116-62AD ■TAIS/00631-000645 ■JAN/4539940102841
	3モーターポジショニングベッド
90cm幅	P116-71AD ■TAIS/00631-000649 ■JAN/4539940103046
83cm幅	P116-72AD ■TAIS/00631-000649 ■JAN/4539940103244
■ 樹脂製棚付きボード(グレー木目調)	
	2モーターポジショニングベッド
90cm幅	P116-61ADGW ■TAIS/00631-000646 ■JAN/4539940102667
83cm幅	P116-62ADGW ■TAIS/00631-000646 ■JAN/4539940102865
	3モーターポジショニングベッド
90cm幅	P116-71ADGW ■TAIS/00631-000650 ■JAN/4539940103060
83cm幅	P116-72ADGW ■TAIS/00631-000650 ■JAN/4539940103268
■ 樹脂製棚付きボード(ブラウンレザー調)	
	2モーターポジショニングベッド
90cm幅	P116-61ADBL ■TAIS/00631-000647 ■JAN/4539940102681
83cm幅	P116-62ADBL ■TAIS/00631-000647 ■JAN/4539940102889
	3モーターポジショニングベッド
90cm幅	P116-71ADBL ■TAIS/00631-000651 ■JAN/4539940103084
83cm幅	P116-72ADBL ■TAIS/00631-000651 ■JAN/4539940103282
■ 木製フラットボード	
	2モーターポジショニングベッド
90cm幅	P116-61BA ■TAIS/00631-000648 ■JAN/4539940102629
83cm幅	P116-62DA ■TAIS/00631-000648 ■JAN/4539940102827
	3モーターポジショニングベッド
90cm幅	P116-71BA ■TAIS/00631-000652 ■JAN/4539940103022
83cm幅	P116-72DA ■TAIS/00631-000652 ■JAN/4539940103220

ベーシックベッド モータータイプ

昇1
モーター

昇降1モーター

高さ調節

背1
モーター

背上げ1モーター

背上げ73°

背膝連動73°/33°

2
モーター

2モーター

背上げ73°

背膝連動73°/33°

高さ調節

3
モーター

3モーター

背上げ73°

背膝連動73°/33°

膝上げ33°

高さ調節

ベーシックベッドシリーズ 型式

※価格はオープン価格です。
※昇降1モーターを除き、**非課税**

■ 樹脂製棚付きボード(無地)	
	昇降1モーターベーシックベッド
90cm幅	P116-41AD ■TAIS/00631-000653 ■JAN/4539940102247
83cm幅	P116-42AD ■TAIS/00631-000653 ■JAN/4539940102445
	背上げ1モーターベーシックベッド
90cm幅	P116-11AD ■TAIS/00631-000657 ■JAN/4539940101035
83cm幅	P116-12AD ■TAIS/00631-000657 ■JAN/4539940101233
	2モーターベーシックベッド
90cm幅	P116-21AD ■TAIS/00631-000661 ■JAN/4539940101431
83cm幅	P116-22AD ■TAIS/00631-000661 ■JAN/4539940101639
	3モーターベーシックベッド
90cm幅	P116-31AD ■TAIS/00631-000665 ■JAN/4539940101837
83cm幅	P116-32AD ■TAIS/00631-000665 ■JAN/4539940102049
■ 樹脂製棚付きボード(グレー木目調)	
	昇降1モーターベーシックベッド
90cm幅	P116-41ADGW ■TAIS/00631-000654 ■JAN/4539940102261
83cm幅	P116-42ADGW ■TAIS/00631-000654 ■JAN/4539940102469
	背上げ1モーターベーシックベッド
90cm幅	P116-11ADGW ■TAIS/00631-000658 ■JAN/4539940101059
83cm幅	P116-12ADGW ■TAIS/00631-000658 ■JAN/4539940101257
	2モーターベーシックベッド
90cm幅	P116-21ADGW ■TAIS/00631-000662 ■JAN/4539940101455
83cm幅	P116-22ADGW ■TAIS/00631-000662 ■JAN/4539940101653
	3モーターベーシックベッド
90cm幅	P116-31ADGW ■TAIS/00631-000666 ■JAN/4539940101851
83cm幅	P116-32ADGW ■TAIS/00631-000666 ■JAN/4539940102063
■ 樹脂製棚付きボード(ブラウンレザー調)	
	昇降1モーターベーシックベッド
90cm幅	P116-41ADBL ■TAIS/00631-000655 ■JAN/4539940102285
83cm幅	P116-42ADBL ■TAIS/00631-000655 ■JAN/4539940102483
	背上げ1モーターベーシックベッド
90cm幅	P116-11ADBL ■TAIS/00631-000659 ■JAN/4539940101073
83cm幅	P116-12ADBL ■TAIS/00631-000659 ■JAN/4539940101271
	2モーターベーシックベッド
90cm幅	P116-21ADBL ■TAIS/00631-000663 ■JAN/4539940101479
83cm幅	P116-22ADBL ■TAIS/00631-000663 ■JAN/4539940101677
	3モーターベーシックベッド
90cm幅	P116-31ADBL ■TAIS/00631-000667 ■JAN/4539940101875
83cm幅	P116-32ADBL ■TAIS/00631-000667 ■JAN/4539940102087
■ 木製フラットボード	
	昇降1モーターベーシックベッド
90cm幅	P116-41BA ■TAIS/00631-000660 ■JAN/4539940102223
83cm幅	P116-42DA ■TAIS/00631-000656 ■JAN/4539940102421
	背上げ1モーターベーシックベッド
90cm幅	P116-11BA ■TAIS/00631-000660 ■JAN/4539940101011
83cm幅	P116-12DA ■TAIS/00631-000660 ■JAN/4539940101219
	2モーターベーシックベッド
90cm幅	P116-21BA ■TAIS/00631-000664 ■JAN/4539940101417
83cm幅	P116-22DA ■TAIS/00631-000664 ■JAN/4539940101615
	3モーターベーシックベッド
90cm幅	P116-31BA ■TAIS/00631-000668 ■JAN/4539940101813
83cm幅	P116-32DA ■TAIS/00631-000668 ■JAN/4539940102025

在宅介護用ベッド

マットレス

周辺機器



8

9

仕様


背上げ1モーター

■樹脂製棚付ボード(90cm幅) (単位:cm)

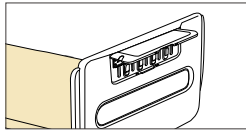
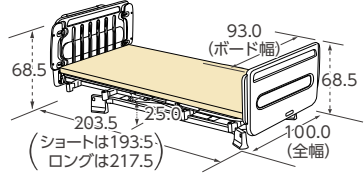


棚使用時
・ベッド全長 218.5
(ショート:208.5、ロング:232.5)cm
・棚内寸/幅 37.0cm、長さ 12.5cm

■木製フラットボード(90cm幅) (単位:cm)

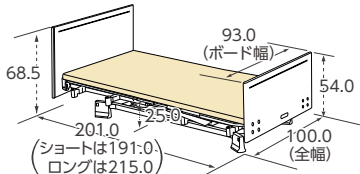


■樹脂製棚付ボード(83cm幅) (単位:cm)

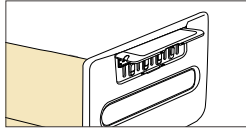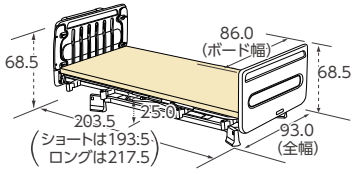

棚使用時
・ベッド全長 218.5
(ショート:208.5、ロング:232.5)cm
・棚内寸/幅 37.0cm、長さ 12.5cm



■木製フラットボード(83cm幅) (単位:cm)

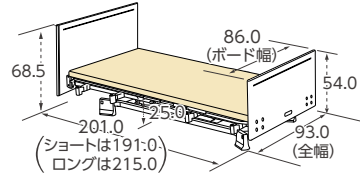

※床からベースフレームの間は5.0cmとなります。
※固定脚切替時は高さが+5.0cmになります。


昇降1モーター／2モーター／3モーター

■樹脂製棚付ボード(90cm幅) (単位:cm)

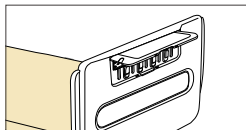
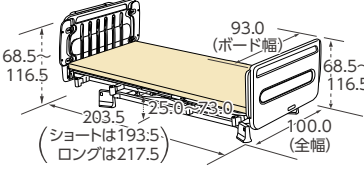


棚使用時
・ベッド全長 218.5
(ショート:208.5、ロング:232.5)cm
・棚内寸/幅 37.0cm、長さ 12.5cm

■木製フラットボード(90cm幅) (単位:cm)

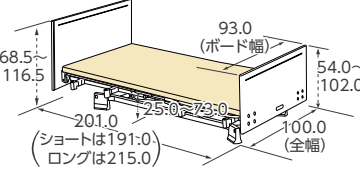


■樹脂製棚付ボード(83cm幅) (単位:cm)

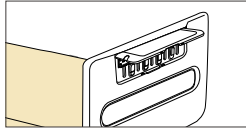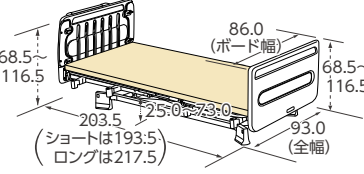

棚使用時
・ベッド全長 218.5
(ショート:208.5、ロング:232.5)cm
・棚内寸/幅 37.0cm、長さ 12.5cm

■木製フラットボード(83cm幅) (単位:cm)

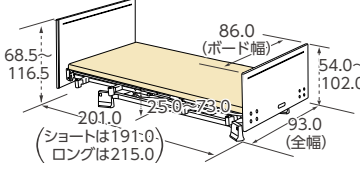

※床からベースフレームの間は5.0cmとなります。
※固定脚切替時は高さが+5.0cmになります。

			ポジショニングベッド		ベーシックベッド			
			2モーター	3モーター	昇降1モーター	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
マットレス適合寸法		90cm幅	長さ:190.0~192.0cm(ショートタイプ182.0cm、ロングタイプ206.0cm)、幅88.0~91.0cm					
		83cm幅	長さ:190.0~192.0cm(ショートタイプ182.0cm、ロングタイプ206.0cm)、幅83.0cm					
質量	90cm幅	樹脂製ボード	99.5kg	100.5kg	98.5kg	98.5kg	98.5kg	99.5kg
		木製フラットボード	100.0kg	101.0kg	99.0kg	99.0kg	99.0kg	100.0kg
	83cm幅	樹脂製ボード	97.5kg	98.5kg	96.5kg	96.5kg	96.5kg	97.5kg
		木製フラットボード	97.0kg	98.0kg	96.0kg	96.0kg	96.0kg	97.0kg
梱包			6梱包(83cm幅木製フラットボードは7梱包)					
材質			本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:(樹脂ボード)PE樹脂 (木製ボード)MDF、オレフィン系シート					
電動機能	ハイバック角度	0~30度			—			
	背上げ角度	0~73度			—	0~73度		
	膝上げ角度	0~33度 (背上げ連動)	0~33度	—	0~33度 (背上げ連動)		0~33度	
床面高			25.0~73.0cm／30.0~78.0cm			25.0cm/30.0cm	25.0~73.0cm／30.0~78.0cm	
定格電圧			AC100~240V					
定格消費電力			215W			95W	215W	
モーター部			LINAK社製					
最大利用者体重			138kg／安全動作荷重:174kg(1700N)					
原産国			ベッド本体・樹脂製ボード:ベトナム/木製ボード:中国					

専用オプション

キャスター(4個組)



装着時の床面高は+3.0cmになります。

PC03-8CK
■メーカー希望小売価格
23,000円(税込25,300円)
■TAISコード/00631-000561
■JANコード/4539940010818
■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂
■原産国/キャスター:台湾
カバー:ベトナム

非常用バッテリー



停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。(充電式)

PE06-BA19
■メーカー希望小売価格
20,000円(税込22,000円)
■TAISコード/00631-000564
■JANコード/4539940083195
■質量/1.5kg
■原産国/デンマーク

ポジショニング3モーター変換キット



ポジショニング2モーターを3モーターに変換できます。

BS116-7DZ
■メーカー希望小売価格
オープン価格
■TAISコード/00631-000669
■JANコード/4539940084666

ポジショニング2モーター変換キット



ポジショニング3モーターを2モーターに変換できます。

BS116-6DZ
■メーカー希望小売価格
オープン価格
■JANコード/4539940084659

ベーシック3モーター変換キット



ベーシック2モーターを3モーターに変換できます。

BS116-3DZ
■メーカー希望小売価格
オープン価格
■TAISコード/00631-000670
■JANコード/4539940084642

ベーシック2モーター変換キット



ベーシック3モーターを2モーターに変換できます。

BS116-2DZ
■メーカー希望小売価格
オープン価格
■JANコード/4539940084635



詳しい説明や動画は
こちらから >>>




<http://www.platz-ltd.co.jp/product/rafiio/rafiio/>

適合するマットレス幅：90cm幅

自然なリクライニング姿勢により
誤嚥・床ずれのリスクを低減。
ベッドの高さに不安がある方にも安心の超低床ベッド。



LINE UP 製品ラインナップ

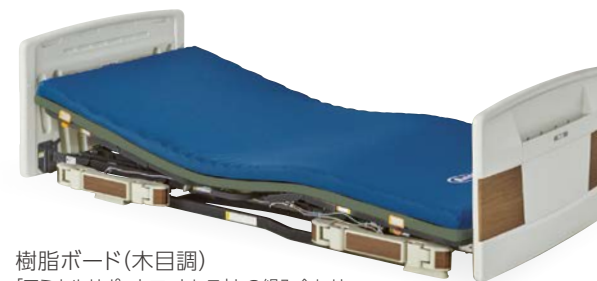

樹脂ボード(木目調)
「アミカルサポートマットレス」との組み合わせ
90cm幅



木製フラットボード
「ニューポイントマットレス」との組み合わせ
90cm幅



木製宮付ボード
「ベイスサポート」との組み合わせ
90cm幅


専門家のアドバイスのもと、
リラックスできるリクライニングを徹底的に目指しました

ポジショニングベッド

ポジショニングとは、「運動機能障害を有する者に、クッションなどを活用して身体各部の相対的な位置関係を設定し、目的に適合した姿勢(体位)を安全で快適に保持することをいう」と日本褥瘡学会で定義されています。この考えのもと、ポジショニングベッドは「ハイバックサポート機能」と背と膝の「フィッティング機能」を搭載、背上げ時のズレ力の軽減とリラックスできる快適な姿勢を実現しました。体位管理の再現性を高め、在宅医療もサポートする新しい超低床介護用ベッドです。




新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレカの軽減に ラフィオ ポジショニングベッドシリーズ

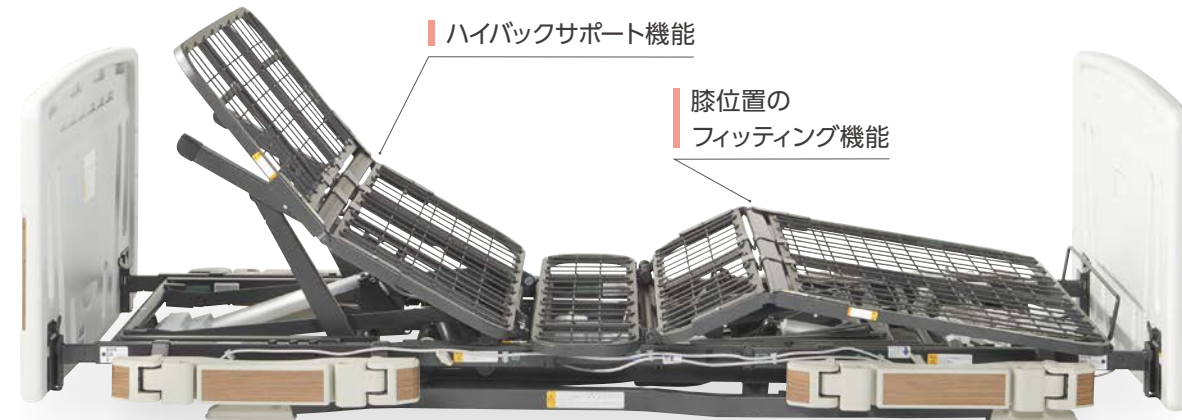

ハイバックサポート機能

背上げを「ハイバック：頭・背部」と「ローバック：腰部」の2つに分け、それぞれの角度を調節しながら背上げをおこないます。
1モーター、2モーターポジショニングベッドでは、ハイバックは背上げと連動して動きます。
3モーターポジショニングベッドでは、ハイバックを単独で操作することができます。

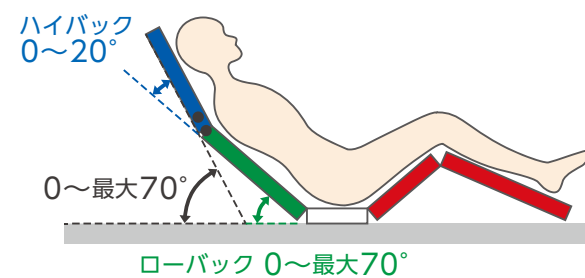


背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。


ピンを外して
左右にずらすだけの
簡単調整！



「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…

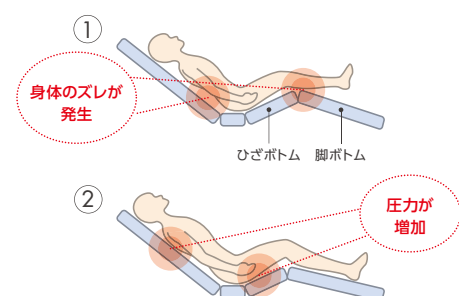

⚠ 褥瘡（床ずれ）の原因になります

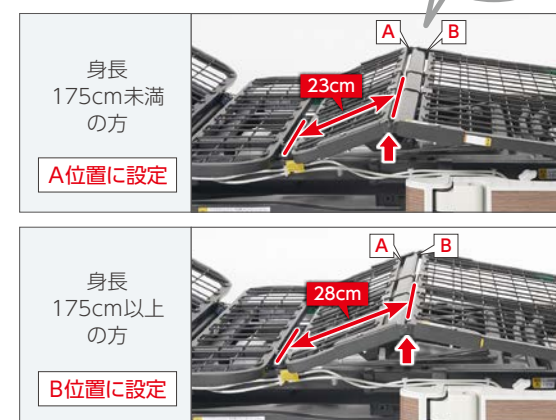

ポジショニングベッドに期待できる効果


誤嚥リスクの低減

背上げ時に頸部の角度を調節、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現が可能です。
摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥リスクの低減が期待できます。



褥瘡（床ずれ）リスクの低減（ズレカ、圧力の軽減）

ハイバックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、ズレカと身体への圧力を軽減できます。背上げ後の静止状態でのズレカと圧力も軽減し、深部組織損傷（DTI）のリスクを低減。褥瘡（床ずれ）対策のポジショニングをサポートします。

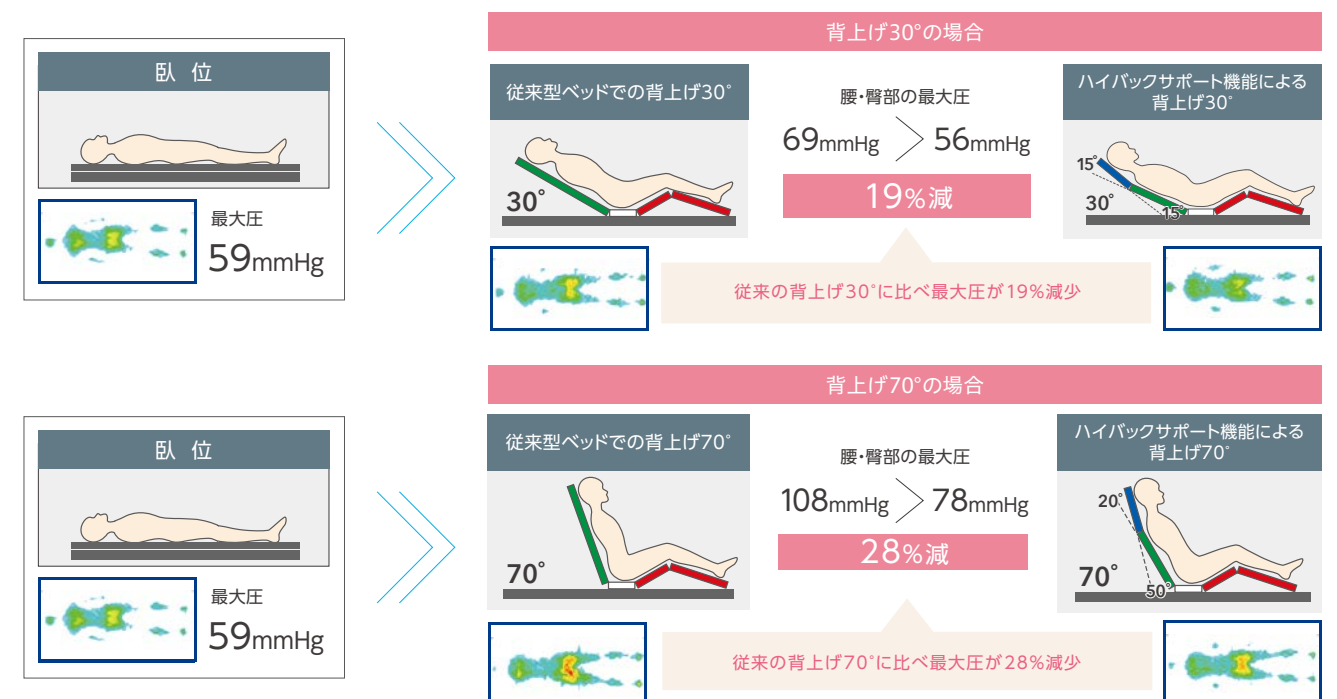

被験者：身長164cm 体重57kg 男性 計測機器：SRソフトビジョン全身版（住友理工社製） アミカルサポートマットレス使用時 ※データは一例です。測定値には個人差があります。

呼吸がしやすい姿勢に

背圧や腹圧を軽減し横隔膜を広げ、呼吸がしやすい快適な姿勢をつくります。
また、体幹上部を屈曲することで、循環器への負荷を抑える効果が期待できます。




円背の方から妊娠中の方まで、幅広くポジショニングをサポートします


円背の方でも、脊柱の湾曲部にハイバックサポートの角度を合わせることができ、背上げ時の適切なポジショニングが可能です。
股関節の可動域が狭く背上げが困難な方や、腹圧がかけられない妊娠中の方にもズレカの少ない快適な背上げを提供します。

身体のスレ・腹圧を軽減する1ボタン操作のライジングモーション機構

1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながらローバック・ハイバック・膝がそれぞれ動き、快適なリクライニング姿勢を実現。身体のスレや腹部の圧迫を抑制します。

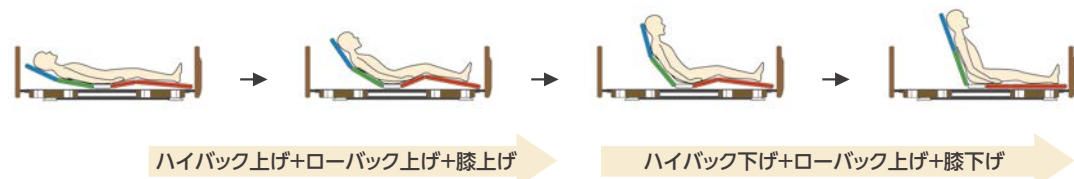

ハイバックは0°から最大20°、ローバックは0°から最大70°まで上がります。ハイバックとローバックの角度は合わせて最大70°を超えないように自動で調節され、腹部の角度が常に90°以上を確保するように設計されています。

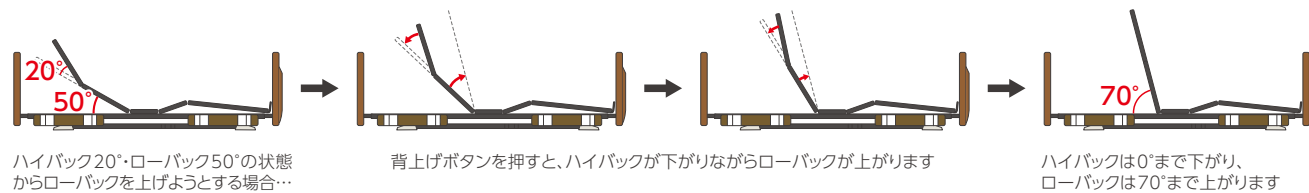


足先上げと足先下げの簡単切替え

足先の角度をワンタッチで切替えます。足のむくみ軽減にも対応できます。



収納式のオプション受け

全てのオプション受けは簡単に収納ができます。車いすをよりベッドに近づける事が可能になり、安全に移乗できます。

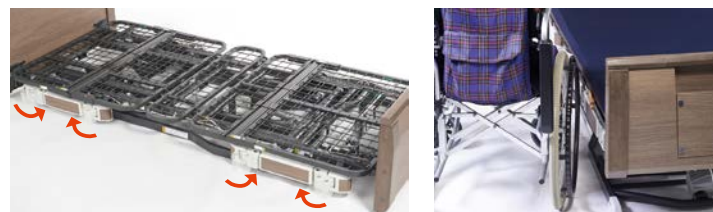

使いやすい手元スイッチ

手元スイッチ裏面にあるダブル・ホルドマウントにより指の間に引っかけて保持することができます。手が動かしにくい方でも握りやすく、使いやすいデザインです。

手元スイッチのロックボタンを硬貨等で回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をロックすることができます。



高さへの不安をなくす超低床15cm

最低床時は床面高15cm。普段布団でお休みされていた方にも抵抗感の少ない床面高です。また、ベッドからの転落の不安や転落した際の怪我のリスクを低減します。

ベッドを下げる際は一定の位置からブザーを鳴らし、ボードやフレームによる挟み込みを警告します。そのままボタンを押し続けると、ブザーを繰り返し鳴らしながら最低位15cmまで下がります。



省スペースに設置可能な垂直昇降機構

昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なく済みます。


また、床面高は最低位15cmから最高位57cmまで昇降でき、ベッドからの立ちあがりや介護する方の負担を軽減します。

※背上げ1モーターの場合、組立時に15cmと31cmの2段階の高さに設定できます。



身長に合わせて選べるベッドサイズ

ボトムのみの変更でベッドのサイズをショート・レギュラー・ロングに変更できます。

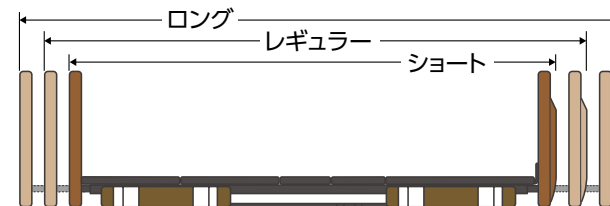

角度計

ボトムへ取り付け可能な角度計。適切な角度を確認しながら、背上げ動作を行うことができます。



モータータイプ

HB1 モーター	HB2 モーター	HB3 モーター
背上げ1モーター 連動ハイバックサポート 機能付	2モーター 連動ハイバックサポート 機能付	3モーター 電動ハイバックサポート 機能付
 背上げ連動 ハイバック20/70°	 背上げ連動 ハイバック20/70°	 電動ハイバック20°
 背上げ70°	 背上げ70°	 背上げ70°
 背膝連動70°/22°	 背膝連動70°/22°	 背膝連動70°/22°
 高さ調節(2段階)	 高さ調節	 膝上げ22°
 高さ調節	 高さ調節	 高さ調節

※組立時に2段階の高さに設定できます。

ポジショニングベッドシリーズ 型式

※価格はオープン価格です。**非課税**

■ 樹脂ボード(木目調)

	背上げ1モーター 連動ハイバックサポート機能付	2モーター 連動ハイバックサポート機能付	3モーター 電動ハイバックサポート機能付
レギュラータイプ	P110-11ACR ■TAIS/00631-000321 ■JAN/4539940004763	P110-21ACR ■TAIS/00631-000331 ■JAN/4539940005067	P110-71ACR ■TAIS/00631-000341 ■JAN/4539940005364
ショートタイプ	P110-11ACS ■TAIS/00631-000321 ■JAN/4539940004756	P110-21ACS ■TAIS/00631-000331 ■JAN/4539940005050	P110-71ACS ■TAIS/00631-000341 ■JAN/4539940005357
ロングタイプ	P110-11ACL ■TAIS/00631-000321 ■JAN/4539940004770	P110-21ACL ■TAIS/00631-000331 ■JAN/4539940005074	P110-71ACL ■TAIS/00631-000341 ■JAN/4539940005371

■ 木製フラットボード

	背上げ1モーター 連動ハイバックサポート機能付	2モーター 連動ハイバックサポート機能付	3モーター 電動ハイバックサポート機能付
レギュラータイプ	P110-11BAR ■TAIS/00631-000322 ■JAN/4539940004794	P110-21BAR ■TAIS/00631-000332 ■JAN/4539940005098	P110-71BAR ■TAIS/00631-000342 ■JAN/4539940005395
ショートタイプ	P110-11BAS ■TAIS/00631-000322 ■JAN/4539940004787	P110-21BAS ■TAIS/00631-000332 ■JAN/4539940005081	P110-71BAS ■TAIS/00631-000342 ■JAN/4539940005388
ロングタイプ	P110-11BAL ■TAIS/00631-000322 ■JAN/4539940004800	P110-21BAL ■TAIS/00631-000332 ■JAN/4539940005104	P110-71BAL ■TAIS/00631-000342 ■JAN/4539940005401

■ 木製宮付ボード


	背上げ1モーター 連動ハイバックサポート機能付	2モーター 連動ハイバックサポート機能付	3モーター 電動ハイバックサポート機能付
レギュラータイプ	P110-11BBR ■TAIS/00631-000324 ■JAN/4539940004855	P110-21BBR ■TAIS/00631-000334 ■JAN/4539940005159	P110-71BBR ■TAIS/00631-000344 ■JAN/4539940005456
ショートタイプ	P110-11BBS ■TAIS/00631-000324 ■JAN/4539940004848	P110-21BBS ■TAIS/00631-000334 ■JAN/4539940005142	P110-71BBS ■TAIS/00631-000344 ■JAN/4539940005449
ロングタイプ	P110-11BBL ■TAIS/00631-000324 ■JAN/4539940004862	P110-21BBL ■TAIS/00631-000334 ■JAN/4539940005166	P110-71BBL ■TAIS/00631-000344 ■JAN/4539940005463

ポジショニングベッドシリーズ 仕様

背上げ1モーター


■ 樹脂ボード(木目調)

(単位:cm)

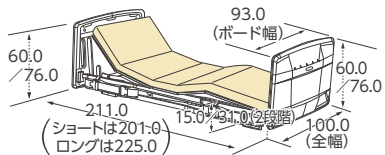


■ 木製フラットボード

(単位:cm)

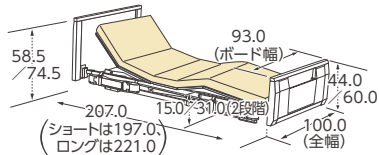

■ 木製宮付ボード


(単位:cm)

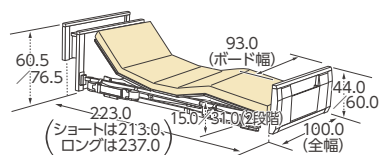

2モーター／3モーター


■ 樹脂ボード(木目調)

(単位:cm)

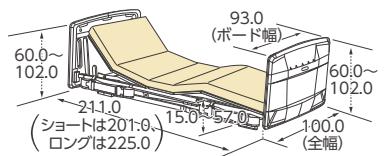


■ 木製フラットボード

(単位:cm)

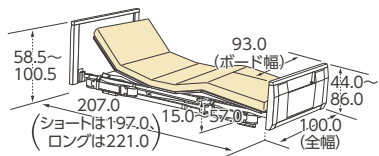

■ 木製宮付ボード

(単位:cm)

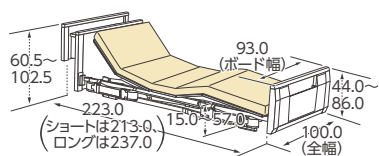

※床からベースフレームの間は0.9cmとなります。

			背上げ1モーター 連動ハイバックサポート機能付	2モーター 連動ハイバックサポート機能付	3モーター 電動ハイバックサポート機能付
マットレス適合寸法			全長190.0～192.0cm(ショートタイプ182.0cm、ロングタイプ206.0cm)、幅88.0～91.0cm		
質量	樹脂ボード(木目調)	レギュラータイプ	93.4kg	94.9kg	96.9kg
		ショートタイプ	92.9kg	94.4kg	96.4kg
		ロングタイプ	94.4kg	95.9kg	97.9kg
	木製フラットボード	レギュラータイプ	98.4kg	99.9kg	101.9kg
		ショートタイプ	97.9kg	99.4kg	101.4kg
		ロングタイプ	99.4kg	100.9kg	102.9kg
	木製宮付ボード	レギュラータイプ	104.4kg	105.9kg	107.9kg
		ショートタイプ	103.9kg	105.4kg	107.4kg
		ロングタイプ	105.4kg	106.9kg	108.9kg
梱包		7梱包			
材質		本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:(樹脂タイプ)PE樹脂 (木製タイプ)プリント紙化粧繊維板、天然木ウレタン樹脂塗装			
電動機能	ハイバック角度	0～20度(背上げ連動)		0～20度	
	背上げ角度	0～70度			
	膝上げ角度	0～22度(背上げ連動)		0～22度	
床面高		15.0／31.0cm(2段階)	15.0～57.0cm		
定格電圧		AC100V			
定格消費電力		105W	165W		
モーター部		LINAK社製			
最大利用者体重		138kg／安全動作荷重:174kg(1700N)			
原産国		ベトナム			

専用オプション

超低床用キャスター(4個組)



装着時の床面高は+0.5cm(最低床面高15.5cm)になります。

PC01-5CK
■メーカー希望小売価格
23,000円(税込25,300円)

■TAISコード/00631-000461
■JANコード/4539940083157
■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂
■原産国/ベトナム

※人感センサー付フットライト、サイドテーブル、DC電源タイプの離床センサーはご使用できません。

低床用キャスター(4個組)



装着時の床面高は+8cm(最低床面高23cm)になります。

PC02-8CK
■メーカー希望小売価格
19,500円(税込21,450円)

■TAISコード/00631-000462
■JANコード/4539940083164
■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂
■原産国/ベトナム

8cmハイトスペーサー固定脚タイプ(4個組)



装着時の床面高は+8cm(最低床面高23cm)になります。

PH04-80
■メーカー希望小売価格
6,900円(税込7,590円)

■TAISコード/00631-000463
■JANコード/4539940083171
■材質/ABS樹脂
■原産国/ベトナム

※キャスターとの併用はできません。

非常用バッテリー



停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。(充電式)

PE06-BA19
■メーカー希望小売価格
20,000円(税込22,000円)

■TAISコード/00631-000564
■JANコード/4539940083195
■質量/1.5kg
■原産国/デンマーク

ベッド高さに不安がある方にも安心の超低床ベッド ラフィオ ベーシックベッドシリーズ



高さへの不安をなくす超低床15cm

最低床時は床面高15cm。普段布団でお休みされていた方にも抵抗感の少ない床面高です。また、ベッドからの転落の不安や転落した際の怪我のリスクを低減します。
ベッドを下げる際は一定の位置からブザーを鳴らし、ボードやフレームによる挟み込みを警告します。
そのままボタンを押し続けると、ブザーを繰り返し鳴らしながら最低位15cmまで下がります。



省スペースに設置可能な垂直昇降機構


昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なく済みます。
また、床面高は最低位15cmから最高位57cmまで昇降でき、ベッドからの立ちあがりや介護する方の負担を軽減します。

※背上げ1モーターの場合、組立時に15cmと31cmの2段階の高さに設定できます。



身体のズレ・腹圧を軽減する1ボタン操作のライジングモーション機構

1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながら快適なリクライニング姿勢を実現。身体のズレや腹部の圧迫を抑制します。

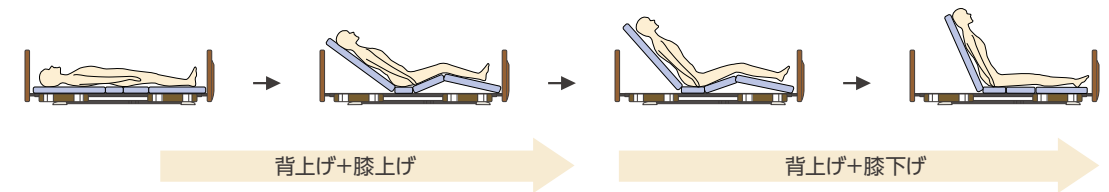

収納式のオプション受け

全てのオプション受けは簡単に収納ができます。車いすをよりベッドに近づける事が可能になり、安全に移乗できます。



使いやすい手元スイッチ

手元スイッチ裏面にあるダブル・ホールドマウントにより指の間にひっかけて保持することができます。
手が動かしにくい方でも握りやすく、使いやすいデザインです。
手元スイッチのロックボタンを硬貨等で回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をロックすることができます。



モータータイプ



※組立時に2段階の高さに設定できます。

ベーシックベッドシリーズ 型式

※価格はオープン価格です。**非課税**

■ 樹脂ボード(木目調)

	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
レギュラータイプ	P110-12ACR ■TAIS/00631-000326 ■JAN/4539940004916	P110-22ACR ■TAIS/00631-000336 ■JAN/4539940005210	P110-32ACR ■TAIS/00631-000346 ■JAN/4539940005517
ショートタイプ	P110-12ACS ■TAIS/00631-000326 ■JAN/4539940004909	P110-22ACS ■TAIS/00631-000336 ■JAN/4539940005203	P110-32ACS ■TAIS/00631-000346 ■JAN/4539940005500
ロングタイプ	P110-12ACL ■TAIS/00631-000326 ■JAN/4539940004923	P110-22ACL ■TAIS/00631-000336 ■JAN/4539940005227	P110-32ACL ■TAIS/00631-000346 ■JAN/4539940005524

■ 木製フラットボード

	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
レギュラータイプ	P110-12BAR ■TAIS/00631-000327 ■JAN/4539940004947	P110-22BAR ■TAIS/00631-000337 ■JAN/4539940005241	P110-32BAR ■TAIS/00631-000347 ■JAN/4539940005548
ショートタイプ	P110-12BAS ■TAIS/00631-000327 ■JAN/4539940004930	P110-22BAS ■TAIS/00631-000337 ■JAN/4539940005234	P110-32BAS ■TAIS/00631-000347 ■JAN/4539940005531
ロングタイプ	P110-12BAL ■TAIS/00631-000327 ■JAN/4539940004954	P110-22BAL ■TAIS/00631-000337 ■JAN/4539940005258	P110-32BAL ■TAIS/00631-000347 ■JAN/4539940005555

■ 木製宮付ボード


	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
レギュラータイプ	P110-12BBR ■TAIS/00631-000329 ■JAN/4539940005005	P110-22BBR ■TAIS/00631-000339 ■JAN/4539940005302	P110-32BBR ■TAIS/00631-000349 ■JAN/4539940005609
ショートタイプ	P110-12BBS ■TAIS/00631-000329 ■JAN/4539940004992	P110-22BBS ■TAIS/00631-000339 ■JAN/4539940005296	P110-32BBS ■TAIS/00631-000349 ■JAN/4539940005593
ロングタイプ	P110-12BBL ■TAIS/00631-000329 ■JAN/4539940005012	P110-22BBL ■TAIS/00631-000339 ■JAN/4539940005319	P110-32BBL ■TAIS/00631-000349 ■JAN/4539940005616

ベーシックベッドシリーズ 仕様

背上げ1モーター


■ 樹脂ボード(木目調)

(単位:cm)

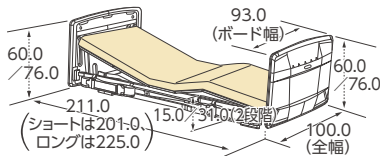


■ 木製フラットボード

(単位:cm)

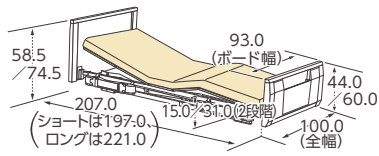

■ 木製宮付ボード


(単位:cm)

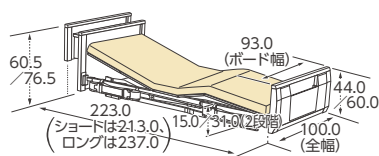

2モーター／3モーター


■ 樹脂ボード(木目調)

(単位:cm)

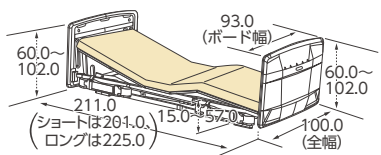


■ 木製フラットボード

(単位:cm)

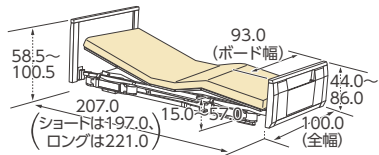

■ 木製宮付ボード

(単位:cm)

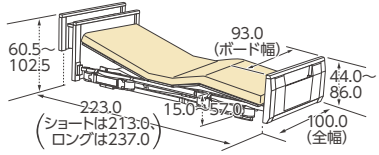

※床からベースフレームの間は0.9cmとなります。

			背上げ1モーター	2モーター	3モーター
マットレス適合寸法			全長190.0～192.0cm(ショートタイプ182.0cm、ロングタイプ206,0cm)、幅88.0～91.0cm		
質量	樹脂ボード(木目調)	レギュラータイプ	88.4kg	89.9kg	91.4kg
		ショートタイプ	87.9kg	89.4kg	90.9kg
		ロングタイプ	89.4kg	90.9kg	92.4kg
	木製フラットボード	レギュラータイプ	93.4kg	94.9kg	96.4kg
		ショートタイプ	92.9kg	94.4kg	95.9kg
		ロングタイプ	94.4kg	95.9kg	97.4kg
	木製宮付ボード	レギュラータイプ	99.4kg	100.9kg	102.4kg
		ショートタイプ	98.9kg	100.4kg	101.9kg
		ロングタイプ	100.4kg	101.9kg	103.4kg
梱包		7梱包			
材質		本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:(樹脂タイプ)PE樹脂 (木製タイプ)プリント紙化粧繊維板、天然木ウレタン樹脂塗装			
電動機能	背上げ角度	0～70度			
	膝上げ角度	0～22度(背上げ連動)		0～22度	
床面高		15.0／31.0cm(2段階)	15.0～57.0cm		
定格電圧		AC100V			
定格消費電力		105W	165W		
モーター部		LINAK社製			
最大利用者体重		138kg／安全動作荷重:174kg(1700N)			
原産国		ベトナム			

専用オプション

超低床用キャスター(4個組)



装着時の床面高は+0.5cm(最低床面高15.5cm)になります。

PC01-5CK
■メーカー希望小売価格
23,000円(税込25,300円)

■TAISコード/00631-000461
■JANコード/4539940083157
■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂
■原産国/ベトナム

※人感センサー付フットライト、サイドテーブル、DC電源タイプの離床センサーはご使用できません。

低床用キャスター(4個組)



装着時の床面高は+8cm(最低床面高23cm)になります。

PC02-8CK
■メーカー希望小売価格
19,500円(税込21,450円)

■TAISコード/00631-000462
■JANコード/4539940083164
■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂
■原産国/ベトナム

8cmハイトスペーサー固定脚タイプ(4個組)



装着時の床面高は+8cm(最低床面高23cm)になります。

PH04-80
■メーカー希望小売価格
6,900円(税込7,590円)

■TAISコード/00631-000463
■JANコード/4539940083171
■材質/ABS樹脂
■原産国/ベトナム

※キャスターとの併用はできません。

非常用バッテリー



停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。(充電式)

PE06-BA19
■メーカー希望小売価格
20,000円(税込22,000円)

■TAISコード/00631-000564
■JANコード/4539940083195
■質量/1.5kg
■原産国/デンマーク

ミオレットシリーズ MioletⅢ



詳しい説明や動画は
こちらから >>>



<http://www.platz-ltd.co.jp/product/miolet/miolet3>

適合するマットレス幅：90cm幅
83cm幅

利用者にも事業者にも優しい
新しい時代に対応するマルチなスタンダードベッド



LINE UP 製品ラインナップ



樹脂ボード
「ニューポイントマットレス」との組み合わせ
90cm幅 83cm幅



木製フラットボード
「アミカルサポートマットレス」との組み合わせ
90cm幅 83cm幅



木製宮付ボード
「ベイスサポート」との組み合わせ
90cm幅

利用者に優しいポイント


Point 1

車いすへ移乗しやすい



Point 2

背上げ時のズレ軽減

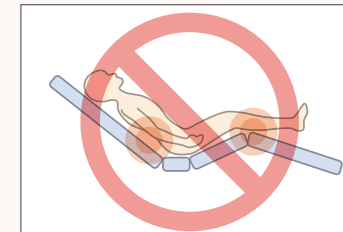

Point 3

省スペース設置



事業者にも優しいポイント

Point 1

1台6役で在庫負担を軽減

	2M	3M
ショート	サイズ切替	モーター 取付 + 手元 スイッチ 交換
レギュラー	↑	
ロング	↓	

Point 2

部品8個で簡単組み立て




Point 3

パーツの軽量化



垂直昇降で省スペース設置を実現 移乗のしやすさ、身体のスレ抑制機能も充実

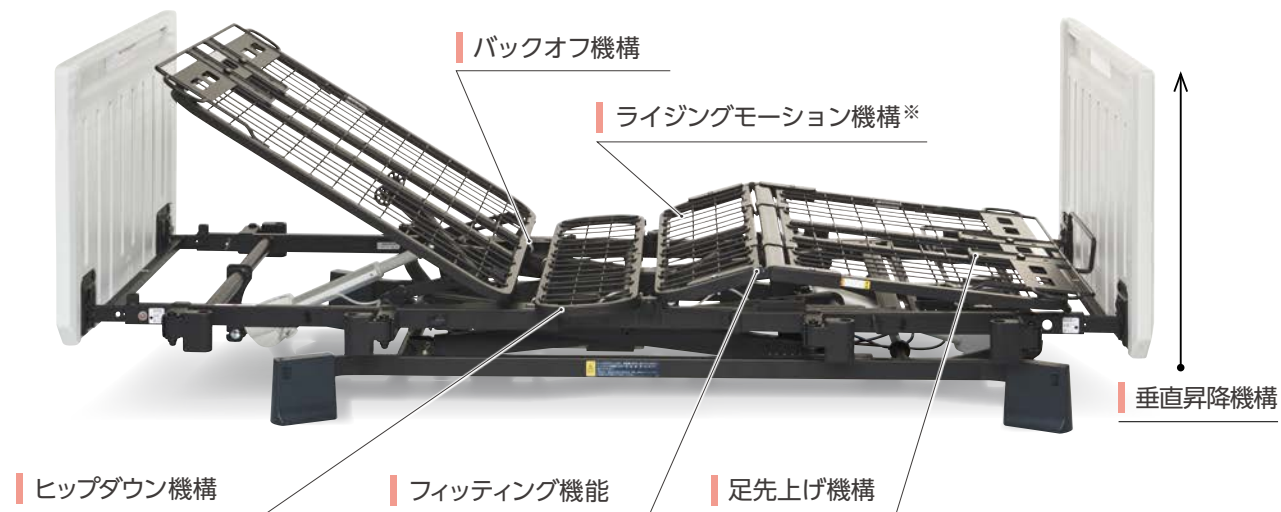

※……背上げ1モーターおよび2モーターのみの機構となります。


省スペースに設置可能な垂直昇降機構

昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なく済みます。
全長は業界トップクラスの省スペース設計を実現しました。



身長に合わせて選べるベッドサイズ

身長やお部屋のスペースに合わせてサイズをお選びいただけます。ロング・レギュラー・ショートのパーツは共通のため、サイズ変更に別部品は必要ありません。

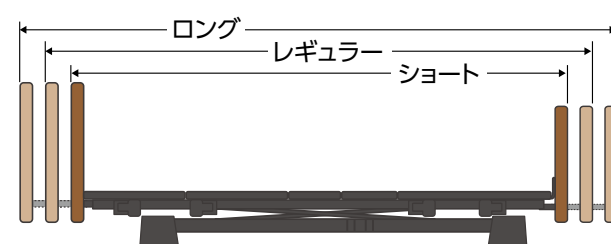



背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。

ピンを外して
左右にずらすだけの
簡単調整!




「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…

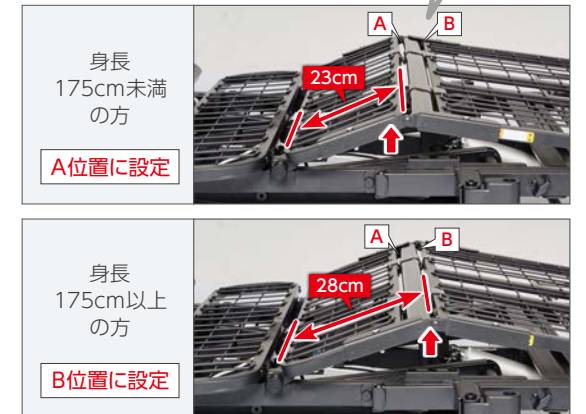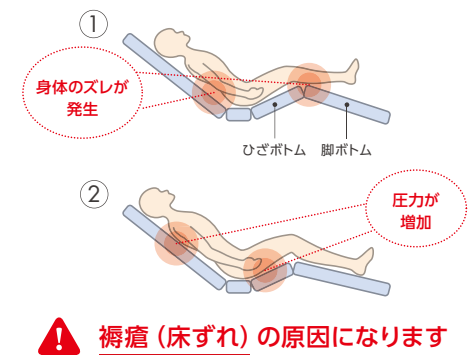

背上げ時のズレを抑える1ボタン操作のライジングモーション機構


背上げボタンを押すと、背と膝の角度を自動的に調整しながらリクライニングをおこなうことにより、足方向へのズレを抑制します。背を上げ続けると膝は下がることで腹部の圧迫を抑え、背を上げきると膝はフラットになり端座位も取りやすくなります。

※背上げ単独動作への切り替えもワンタッチで可能です。

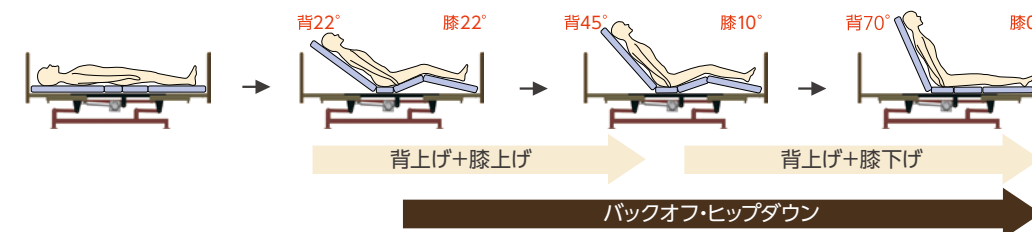

ヒップダウン機構

背上げと連動して臀部のボトムが傾斜します。これにより、骨盤を起こし、ズレを抑制します。

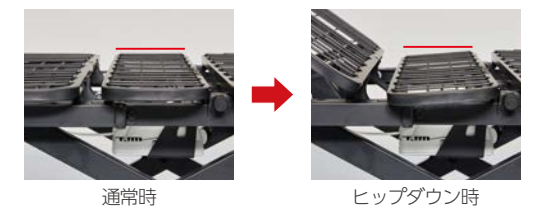


背圧・腹圧を軽減するバックオフ機構

背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、背中や腹部の圧迫感を軽減します。また、背圧は肩付近にかかるように設計されており、肩の後ろに手を差し込むだけでも大幅に除圧できます。




足先上げと足先下げの簡単切替え


足先の角度をワンタッチで切替
えできます。脚の浮腫（むくみ）軽
減にも対応できます。

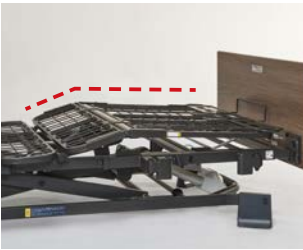

足先上げ

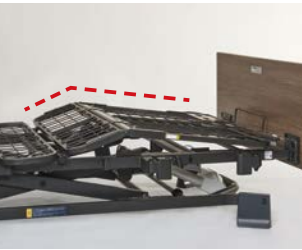


足先下げ

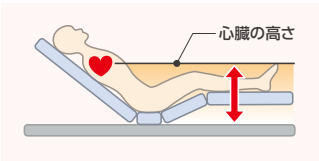

心機能に不全のある方は、脚が
心臓の位置よりも高くない
ようご注意ください。

収納式のオプション受け

全てのオプション受けは簡単に収納ができます。
車いすをよりベッドに近づける事が可能になり、
安全に移乗できます。

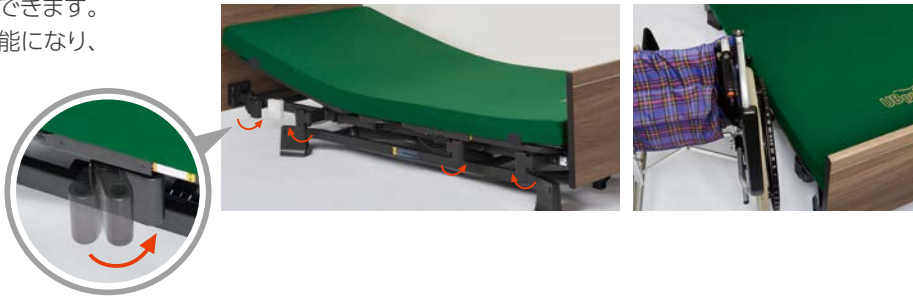

使いやすい手元スイッチ

手元スイッチ裏面にあるダブル・ホールドマウントにより指の
間にひっかけて保持することができます。手が動かしにくい
方でも握りやすく、使いやすいデザインです。



背上げと高さの位置確認

樹脂ボードには背角度の目安となるマーク、ベースには昇降高
さの目安となるローラーガイドがあり、適切な位置を確認しな
がらベッドを操作することができます。



さまざまなオプションの使用にも対応

低床ながら、床とベースとのすき間は7.5cmを確保。
サイドテーブルを使用でき、お掃除もしやすい設計です。
別売のハイトスパーサーを装着すると床からベースフレームの
間は12cmとなり、リフトの使用にも対応します。



モータータイプ

昇1
モーター 昇降1モーター



高さ調節



背1
モーター 背上げ1モーター



背上げ70° 背膝連動70°/22° 高さ調節(2段階)

※組立時に2段階の高さに設定できます。




2
モーター 2モーター



背上げ70° 背膝連動70°/22° 高さ調節



3
モーター 3モーター

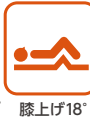

背上げ70° 背膝連動70°/18° 膝上げ18° 高さ調節



型式

※価格はオープン価格です。
※昇降1モーターを除き、**非課税**

■ 樹脂ボード

	昇降1モーター	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
90cm幅	P113-41AC ■TAIS/00631-000572 ■JAN/4539940083744	P113-11AC ■TAIS/00631-000549 ■JAN/4539940010573	P113-21AC ■TAIS/00631-000553 ■JAN/4539940010627	P113-31AC ■TAIS/00631-000557 ■JAN/4539940010672
83cm幅	P113-42CC ■TAIS/00631-000572 ■JAN/4539940083751	P113-12CC ■TAIS/00631-000549 ■JAN/4539940010726	P113-22CC ■TAIS/00631-000553 ■JAN/4539940010757	P113-32CC ■TAIS/00631-000557 ■JAN/4539940010788

■ 木製フラットボード

	昇降1モーター	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
90cm幅	P113-41BA ■TAIS/00631-000573 ■JAN/4539940083768	P113-11BA ■TAIS/00631-000550 ■JAN/4539940010580	P113-21BA ■TAIS/00631-000554 ■JAN/4539940010634	P113-31BA ■TAIS/00631-000558 ■JAN/4539940010689
83cm幅	P113-42DA ■TAIS/00631-000573 ■JAN/4539940083775	P113-12DA ■TAIS/00631-000550 ■JAN/4539940010733	P113-22DA ■TAIS/00631-000554 ■JAN/4539940010764	P113-32DA ■TAIS/00631-000558 ■JAN/4539940010795


■ 木製宮付ボード

	昇降1モーター	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
90cm幅	P113-41BB ■TAIS/00631-000574 ■JAN/4539940083782	P113-11BB ■TAIS/00631-000551 ■JAN/4539940010597	P113-21BB ■TAIS/00631-000555 ■JAN/4539940010641	P113-31BB ■TAIS/00631-000559 ■JAN/4539940010696


仕様

背上げ1モーター


■樹脂ボード(90cm幅)

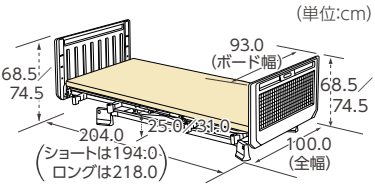


■木製フラットボード(90cm幅)

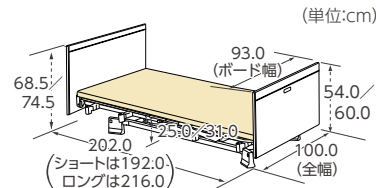


■木製宮付ボード(90cm幅)

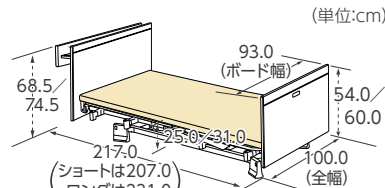

■樹脂ボード(83cm幅)

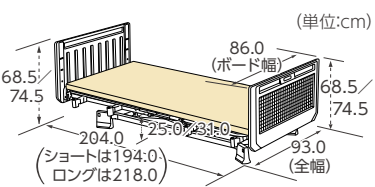


■木製フラットボード(83cm幅)

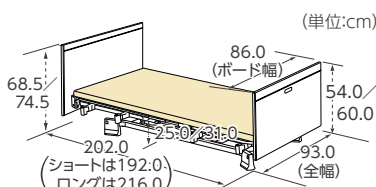


※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。

昇降1モーター／2モーター／3モーター


■樹脂ボード(90cm幅)

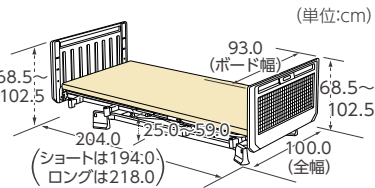


■木製フラットボード(90cm幅)

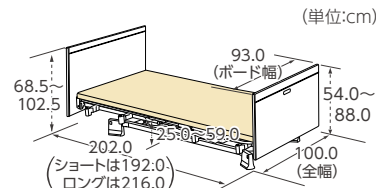


■木製宮付ボード(90cm幅)

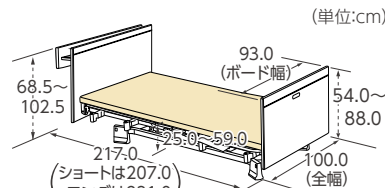

■樹脂ボード(83cm幅)

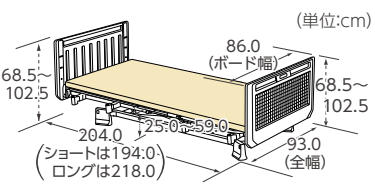

■木製フラットボード(83cm幅)

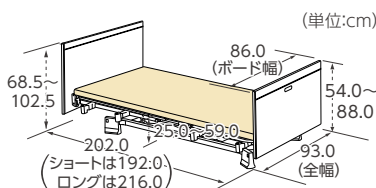

※床からベースフレームの間は7.5cmとなります。

		昇降1モーター	背上げ1モーター	2モーター	3モーター	
マットレス適合寸法		90cm幅	長さ:190.0~192.0cm(ショートタイプ182.0cm、ロングタイプ206.0cm)、幅:88.0~91.0cm			
		83cm幅	長さ:190.0~192.0cm(ショートタイプ182.0cm、ロングタイプ206.0cm)、幅:83.0cm			
質量	90cm幅	樹脂ボード	85.5kg	84.0kg	85.5kg	86.5kg
		木製フラットボード	87.5kg	86.0kg	87.5kg	88.5kg
		木製宮付ボード	91.5kg	90.0kg	91.5kg	92.5kg
	83cm幅	樹脂ボード	83.0kg	81.5kg	83.0kg	84.0kg
		木製フラットボード	84.5kg	83.0kg	84.5kg	85.5kg
梱包		5梱包(木製宮付ボードは6梱包)				
材質		本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:(樹脂ボード)PE樹脂 (木製ボード)MDF、オレフィン系シート				
電動機能	背上げ角度	—	0~70度			
	膝上げ角度	—	0~22度(背上げ連動)			0~18度
床面高		25.0~59.0cm	25.0／31.0cm(2段階)	25.0~59.0cm		
定格電圧		AC100V~240V				
定格消費電力		150W	100W	150W		
モーター部		LINAK 社製				
最大利用者体重		138kg／安全動作荷重:174kg(1700N)				
原産国		ベトナム				

専用オプション

ミオレットⅢ専用ハイトスペーサー(4個組)



装着時の床面高は+4.5cmになります。

PH05-45
■メーカー希望小売価格
6,900円(税込7,590円)
■TAISコード/00631-000562
■JANコード/4539940010825
■材質/ABS樹脂
■原産国/ベトナム
※キャスターとの併用はできません。

ミオレットⅢ専用キャスター(4個組)



装着時の床面高は+1.5cmになります。

PC03-8CK
■メーカー希望小売価格
23,000円(税込25,300円)
■TAISコード/00631-000561
■JANコード/4539940010818
■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂
■原産国/キャスター:台湾
カバー:ベトナム

3モーター変換キット(2モーター → 3モーター)



2モーターから3モーターへ変換できます。

BS-001
■メーカー希望小売価格
オープン価格
■TAISコード/00631-000563
■JANコード/4539940010832

2モーター変換キット(3モーター → 2モーター)



3モーターから2モーターへ変換できます。

BS-002
■メーカー希望小売価格
オープン価格
■JANコード/4539940010849

Primolet
プリモレット

詳しい説明は
こちらから



<https://www.platz-ltd.co.jp/product/primolet/>

適合するマットレス幅：90cm幅

2分割構造で簡単組立
ベッド用グリップも装着できるベーシックモデル



「ニューポイントマットレス」と
「サイドレール PA505-75」との組み合わせ例

機能

- 背を下げるときは、モーターの力で直接引かない安心のフリーホイール構造
- 床面高さは、24.0cmと31.0cmの2段階に調整可能
(専用オプション使用で20.5～38.0cmに調整可能)
- ベッド用グリップなどの周辺機器を使用可能
- ワイヤーの装着で背膝連動も可能
- 本体は搬入性を考慮した2分割構造
- 通気性に優れたワイヤーメッシュの床面構造



立ち上がりや移乗をサポートする
ベッド用グリップも取り付けできます。



ベッド用グリップ「ニーパロ+」の装着例

モータータイプ



背上げ1モーター



背上げ70°



背膝連動70°/19°



自立支援介護用1モーターベッド

PZB-ES1JFA


■メーカー希望小売価格

138,000円 **非課税**

■TAISコード/00631-000183

■JANコード/4539940073547

仕様

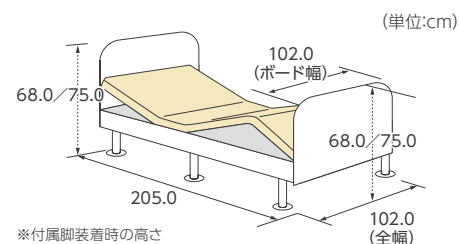

※付属脚装着時の高さ

マットレス適合寸法		全長190.0～193.0cm、幅88.0～90.0cm
質量		62.5kg
梱包		3梱包
材質		本体部:スチール ヘッド・フットボード部:プリント紙化粧繊維板、PU塗装 サイドパネル:天然木、PU塗装
電動機能	背上げ角度	0～70度
	膝上げ角度	0～19度(背上げ連動)
定格電圧		AC100V
定格消費電力		50W
モーター部		LIMOSS社製
最大利用者体重		120kg/安全動作荷重:174kg(1700N)
原産国		ベトナム

延長脚の組み合わせ、キャスターと延長脚の組み合わせと床面高さ

	標準付属		別売延長脚追加時			キャスターと延長脚の組み合わせ					
延長脚	14.0	14.0+7.0	3.5+7.0	14.0+3.5	14.0+14.0	7.0	14.0	14.0+7.0	3.5+7.0	14.0+3.5	14.0+14.0
床面高	24.0	31.0	20.5	27.5	38.0	21.0	28.0	35.0	24.5	31.5	42.0

※安全のため、プリモレットに装着できる延長脚は2本までとなっております。 ※7cm延長脚1本のみでの設置はできません。

専用オプション

延長脚



写真は7cm延長脚です

装着時の床面高は+14cmになります。

PDP-140G(6pcs) 14cm延長脚(6個組)

■メーカー希望小売価格

5,500円(税込6,050円)

■JANコード/4539940081559

■材質/スチール、ABS樹脂

■原産国/ベトナム

装着時の床面高は+7cmになります。

PDP-70G(6pcs) 7cm延長脚(6個組)

■メーカー希望小売価格

5,500円(税込6,050円)

■JANコード/4539940081566

■材質/スチール、ABS樹脂

■原産国/ベトナム

装着時の床面高は+3.5cmになります。

PDP-35G(6pcs) 3.5cm延長脚(6個組)

■メーカー希望小売価格

5,500円(税込6,050円)

■JANコード/4539940081573

■材質/スチール、ABS樹脂

■原産国/ベトナム

キャスター(6個組)



装着時の床面高は+4cmになります。

PPL-8CK6S(6pcs)

■メーカー希望小売価格

27,600円(税込30,360円)

■TAISコード/00631-000160

■JANコード/4539940081474

■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂

■原産国/ベトナム


※このベッドに装着できるオーバーテーブルはご用意しておりません。

在宅用電動介護用ベッドの
JIS規格での隙間の基準(抜粋)


事故が多いレール周りの隙間について、JIS規格(JIS T 9254)では下記の通り規定されました。

- ① レール周りのAにおいて図1の様な直径6cmの円柱形の物を50N(約5.1kgf)で押さえても図2の様にレールの下に行かないこと。もしくは31.8cm以上の隙間があること。
- ② 棒端用グリップ周りのBにおいて図3の様な円錐形の物を50N(約5.1kgf)で押しても通過しないこと。
- ③ レール周りのCにおいて図3の様な円錐形の物を力を加えずに差し込み通過しないこと。

JISマーク表示製品であっても、利用者の方の使用方法・身体状況の変化など、様々な要因で事故が起こる可能性があります。ご使用の際は、取扱説明書などの記載事項を守り、十分に注意を払う必要があります。

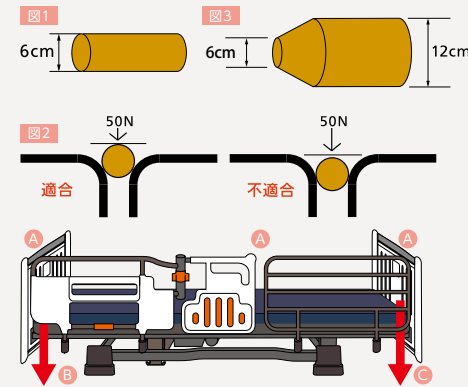

サイドレール・ベッド用グリップの組合わせ例

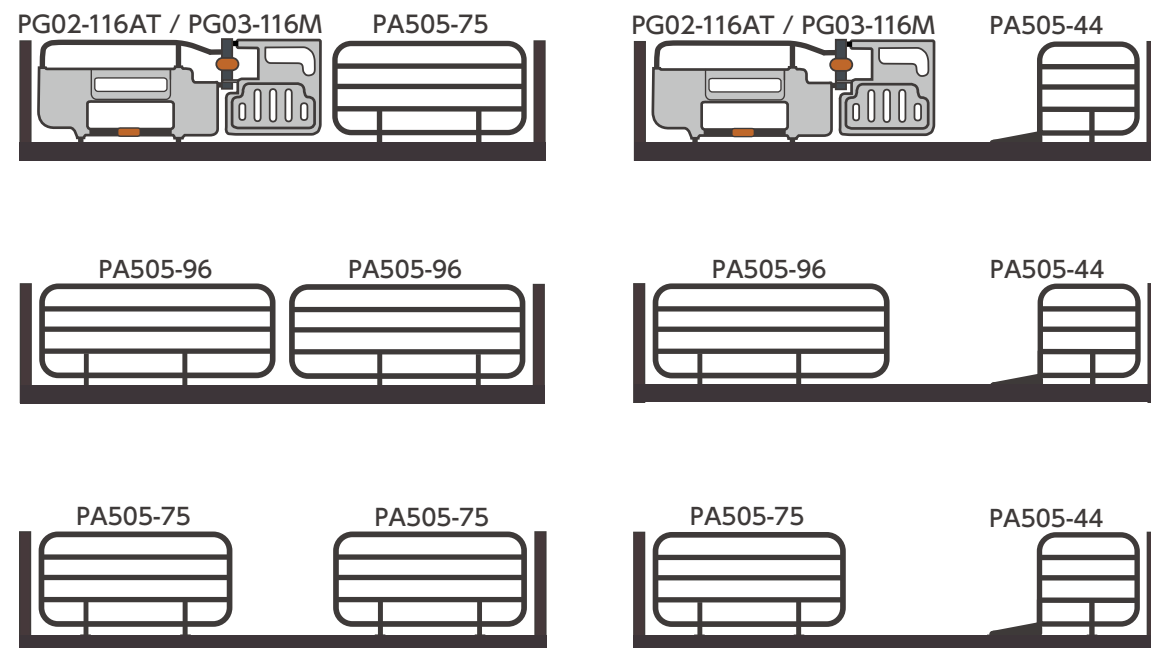

※ショートサイドレールはヨカロには使用いただけません。

ロングタイプのベッドをご使用される場合

※ボード側に必ず「ロングタイプ対応スペーサー」を取り付けてください。



ベッドの安全性に関することは、「医療・介護ベッド安全普及協議会」のホームページを参照ください。

ベッドを使う方の環境を考えて
開発されたマットレス

マットレス

ゼロソア	36
ゼロソアアコネ	38
アミカルサポートマットレス	40
ベシスサポート	42
ニューポイントマットレス	44
スタンダードマットレス	44
ユービーポイントマットレス	45
延長マットレス	46
頭部用制菌カバー	46

ゼロソア

優れた体圧分散性に、適度な反発性で動きやすさをプラス。
自立促進をサポートする床ずれ防止マットレス




優れた体圧分散性

身体の部位に合わせて施したプロファイル加工の上に薄い層を重ねることで、ゆるやかに体圧が分散され、優れた体圧分散効果を発揮します。




寝返りしやすい

適度な反発性により沈み込みすぎず、動きを阻害しません。寝返りや起き上がり時の動きやすさをサポートすることで、ご自身の身体機能をしっかりと活かし自立を促進します。一般的に、反発力が高いと硬いイメージがあり身体へのフィット感が懸念されますが、本製品では反発力を担保しながら柔らかさによる体圧分散性を実現したウレタンを採用しています。

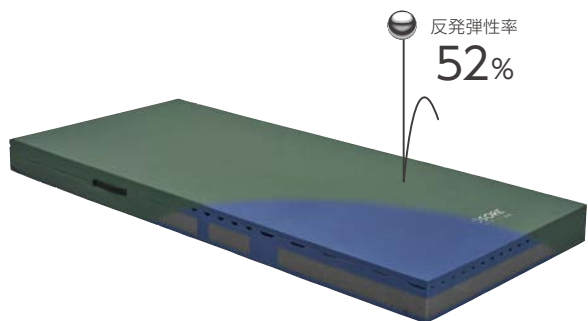

背上げ時もズレを軽減

伸び率320%の伸縮性の高いウレタンをベッドの屈曲位置と最下層に配置することで、厚さ12cmでも曲がりやすさを向上させています。ベッドの動きに追従するのでベッドの機能を活かし、身体にかかるずれ力や圧迫感を軽減します。

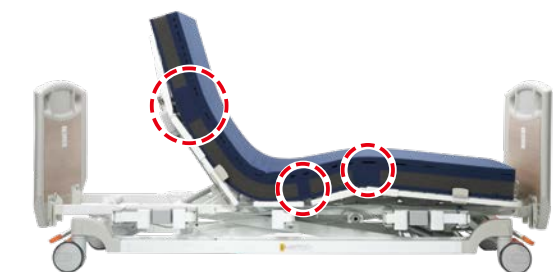

通気タイプ

■メーカー希望小売価格 **78,000円(税込85,800円)**

90cm幅 レギュラータイプ **PM18-A9012**
■TAISコード/00631-000642 ■JANコード/4539940061636

■寸法/幅90.0×厚さ12.0×長さ191.0cm
■質量/7.5kg
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/日本

83cm幅 レギュラータイプ **PM18-A8312**
■TAISコード/00631-000642 ■JANコード/4539940061643

■寸法/幅83.0×厚さ12.0×長さ191.0cm
■質量/7.0kg
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/日本

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税のベッドと同時購入の場合、非課税となります。

清拭タイプ

■メーカー希望小売価格 **88,000円(税込96,800円)**

90cm幅 レギュラータイプ **PM19-A9012**
■TAISコード/00631-000643 ■JANコード/4539940061650

■寸法/幅90.0×厚さ12.0×長さ191.0cm
■質量/8.0kg
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/日本

83cm幅 レギュラータイプ **PM19-A8312**
■TAISコード/00631-000643 ■JANコード/4539940061667


■寸法/幅83.0×厚さ12.0×長さ191.0cm
■質量/7.5kg
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/日本

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。



※非課税のベッドと同時購入の場合、非課税となります。

背上げ時の底付き感を防ぐ

身体全体をしっかりと受け止めて沈み込みを軽減し、また、背上げ時の底付きを防ぎます。姿勢の崩れを防ぎ、患者様の安定感をサポートします。

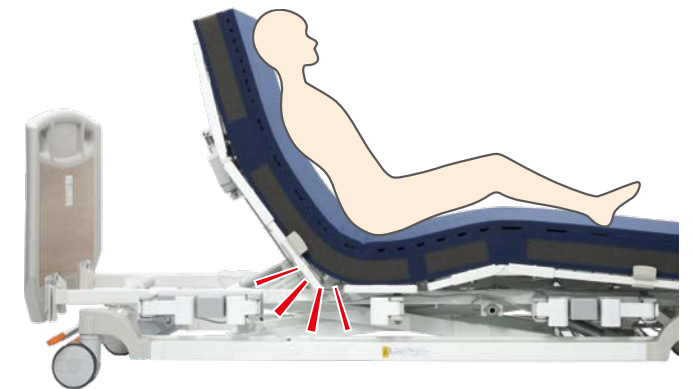

体圧分散データ

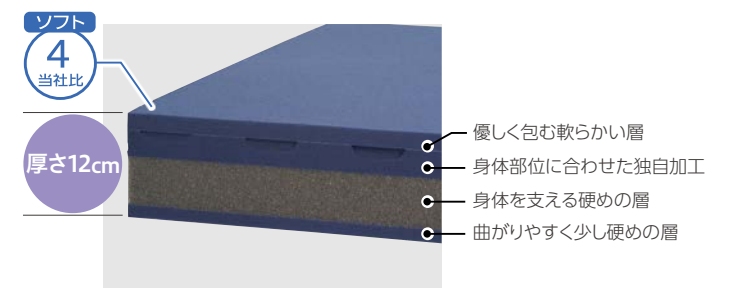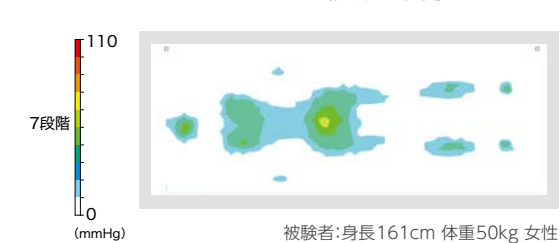

開発協力: 田中マキ子先生 (山口県立大学 副学長)


ゼロソア アコーネ

新発想のじゃばら構造が、マットレスの伸縮と屈曲をアシスト。
ベッドの快適な背上げ機能を最大限に活かします。

- 難燃
- MRSA 抗菌
- 速乾
- 防水



プラッツ独自のウレタン加工が、背上げの不快感や圧力の軽減をサポートします

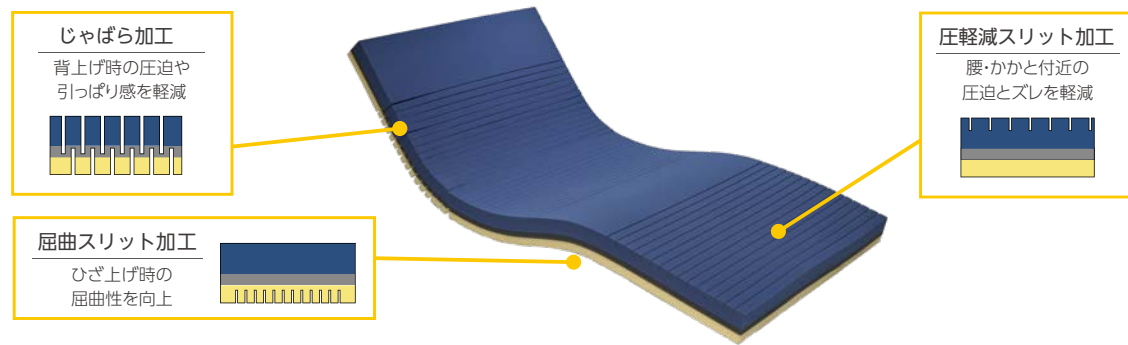

背上げ時の苦しさを改善する「じゃばらアシスト機能」

背部に配置した「じゃばら」の伸縮により、背上げ時にかかる圧迫をマットレスが低減させます。



- 背中への圧迫を低減
じゃばらの伸縮がベッドと身体のスレを吸収するので、背中の圧迫や引っ張り感を低減します。
- 背上げ時の姿勢保持をサポート
背部の動きを邪魔しないことで、腰椎の前弯(腰の反り)を防いで自然なS字カーブを実現。ベッド上での快適な座位姿勢をサポートします。
- 側臥位の寝心地も向上
スリットが身体の凹凸にあわせて沈み込むことでフィットし、側臥位の際の肩から腰にかかる圧力を和らげます。

通気タイプ

■メーカー希望小売価格 **73,000円(税込80,300円)**

90cm幅	レギュラータイプ PM21-A9010
	■TAISコード/00631-000703 ■JANコード/4539940061698
	ショートタイプ PM21-A9010S
	■TAISコード/00631-000703 ■JANコード/4539940061704

■寸法/幅90.0×厚さ10.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/6.0kg(ショート5.5kg)
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/日本

83cm幅	レギュラータイプ PM21-A8310
	■TAISコード/00631-000703 ■JANコード/4539940061711
	ショートタイプ PM21-A8310S
	■TAISコード/00631-000703 ■JANコード/4539940061728

■寸法/幅83.0×厚さ10.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/5.5kg(ショート5.0kg)
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/日本

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

清拭タイプ

■メーカー希望小売価格 **83,000円(税込91,300円)**

90cm幅	レギュラータイプ PM22-A9010
	■TAISコード/00631-000704 ■JANコード/4539940061735
	ショートタイプ PM22-A9010S
	■TAISコード/00631-000704 ■JANコード/4539940061742

■寸法/幅90.0×厚さ10.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/6.0kg(ショート5.5kg)
■材質/外カバー:ポリエステル、ポリウレタンラミネート 中材:ウレタンフォーム
■原産国/日本

83cm幅	レギュラータイプ PM22-A8310
	■TAISコード/00631-000704 ■JANコード/4539940061759
	ショートタイプ PM22-A8310S
	■TAISコード/00631-000704 ■JANコード/4539940061766


■寸法/幅83.0×厚さ10.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/5.5kg(ショート5.5kg)
■材質/外カバー:ポリエステル、ポリウレタンラミネート 中材:ウレタンフォーム
■原産国/日本

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

優れた体圧分散性

床ずれ防止マットレスにも採用している高性能ウレタンを表面に使用。背中・腰・かかと付近に施した表面のスリット加工との相乗効果で、優れた体圧分散効果を発揮します。

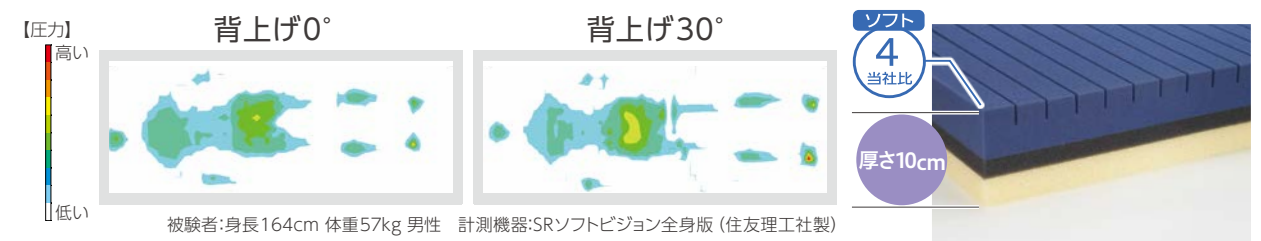

衛生面への配慮

- 通気タイプ、清拭タイプともに蒸れを防ぐ外カバー加工
通気カバーには、スポーツ用品等に使用される超吸水速乾生地を採用。
清拭カバーには、水分をはじいたままにせず、すぐに広がり乾きやすい特殊加工を施しています。
汗などの水分を素早く吸水し発散するので蒸れを防ぎ、清拭後の水分も早く乾くので細菌が繁殖しにくく衛生的です。
- 中材は洗浄できる無膜ウレタン
中材には、無膜ウレタンを採用。通水性が良く洗浄もでき、乾燥にかかる時間も短縮できます。


アミカルサポートマットレス

リクライニングへの追従性と体圧分散性を高めたハイグレードウレタンマットレス



ハイバック・背・膝のリクライニングに対応する高い追従性

中材の表面・裏面および屈曲位置に高伸縮ウレタンを採用。高い追従性により様々なベッドのリクライニングに対応でき、背上げ時のズレを抑制します。外カバーには伸縮性の高い生地を使用することで、リクライニングとの追従性をさらに高めます。

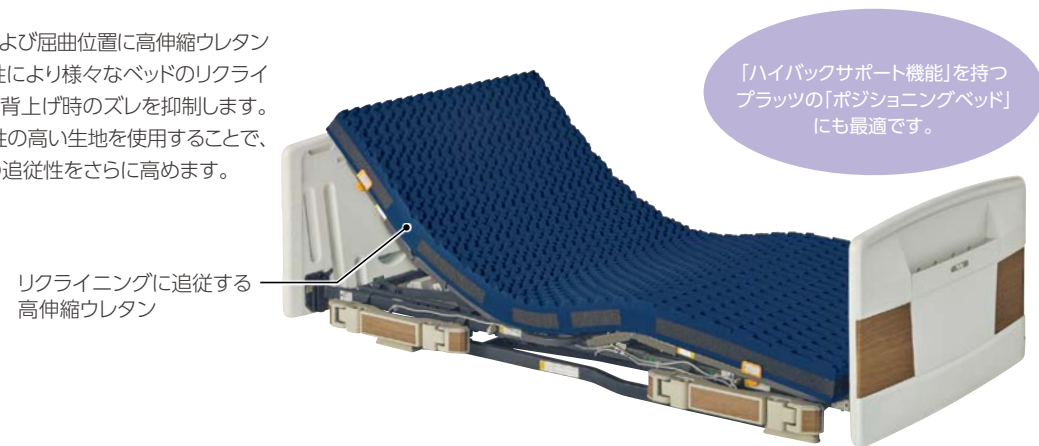


外カバー特殊加工

外カバーには難燃性の高い生地を使用。院内感染でのリスクが高いMRSAに対し、増殖を抑制する抗菌加工を施しています。吸湿性・伸縮性に優れた通気タイプとお手入れしやすい清拭タイプの2タイプをラインナップしています。

高いメンテナンス性

無膜加工によりウレタンでありながら洗浄・乾燥が可能です。通気性にも優れています。

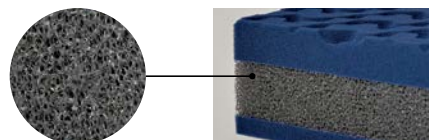

通気タイプ

■メーカー希望小売価格 オープン価格

90cm幅	レギュラータイプ	PM11-9009
	■TAISコード/00631-000506	■JANコード/4539940061094
	ショートタイプ	PM11-9009S
	■TAISコード/00631-000507	■JANコード/4539940061100

■寸法/幅90.0×厚さ9.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/5.5kg(ショート5.0kg)
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/日本

83cm幅	レギュラータイプ	PM11-8309
	■TAISコード/00631-000508	■JANコード/4539940061117
	ショートタイプ	PM11-8309S
	■TAISコード/00631-000509	■JANコード/4539940061124

■寸法/幅83.0×厚さ9.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/5.0kg(ショート4.5kg)
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/日本

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

清拭タイプ

■メーカー希望小売価格 オープン価格

90cm幅	レギュラータイプ	PM12-9009
	■TAISコード/00631-000510	■JANコード/4539940061131
	ショートタイプ	PM12-9009S
	■TAISコード/00631-000511	■JANコード/4539940061148

■寸法/幅90.0×厚さ9.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/5.5kg(ショート5.0kg)
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/日本

83cm幅	レギュラータイプ	PM12-8309
	■TAISコード/00631-000512	■JANコード/4539940061155
	ショートタイプ	PM12-8309S
	■TAISコード/00631-000513	■JANコード/4539940061162



■寸法/幅83.0×厚さ9.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/5.0kg(ショート4.5kg)
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/日本

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

身体の部位にあわせた独自加工による高い体圧分散性


表面には身体の部位にあわせ、3タイプのプロファイル加工を採用。高い体圧分散効果を発揮します。頭、胸、腰、足の身体を支える部位には硬めのウレタンを中層に配置し、沈み込みを軽減します。

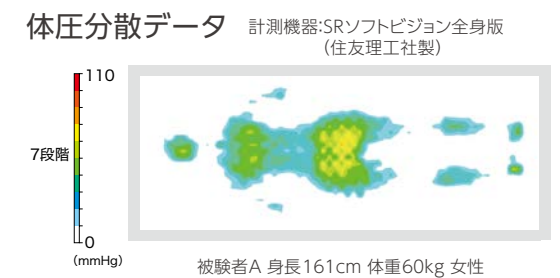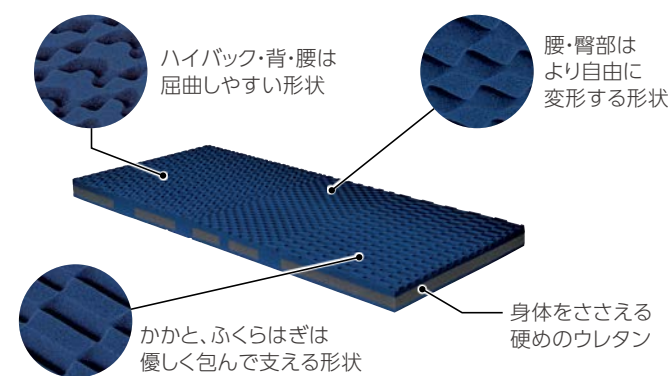

硬さが選べるリバーシブルタイプ

身体状況やお好みに応じて、ノーマル面(表)とハード面(裏)を使い分けられます。

※ハード面にはプロファイル加工はございません。

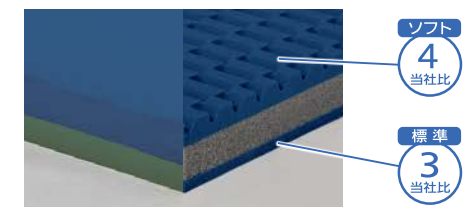

ベシスサポート

1枚でショート・レギュラー・ロングの長さに対応

防水



Bs PLATZ ベシス サポート
Basis Support

ショート・レギュラー・ロングの長さ調節が可能

	ショートタイプ	レギュラータイプ	ロングタイプ
表面			
裏面			
中材			

長さ切替方法

レギュラーから
ショートへ変更する場合



1 レギュラー位置の
ファスナーを開けます



2 レギュラーサイズウレタン
を取り出します



3 ショート位置で
ファスナーを閉じます

通気タイプ

90cm幅

レギュラー/ショート対応 **PM14-A9008**

■メーカー希望小売価格 **45,000円(税込49,500円)**

■TAISコード/00631-000594 ■JANコード/4539940061186

レギュラー/ショート/ロング対応 **PM14-A9008L**

■メーカー希望小売価格 **50,000円(税込55,000円)**

■TAISコード/00631-000596 ■JANコード/4539940061247

■寸法/ショートタイプ :幅90.0×厚さ8.0×長さ181.0cm
レギュラータイプ :幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm
ロングタイプ :幅90.0×厚さ8.0×長さ205.0cm
■質量/ショートタイプ:5.5kg、レギュラータイプ:5.8kg、ロングタイプ:6.2kg
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/ベトナム
※ロング専用オプション/90cm幅 PM16-90L 5,000円(税込5,500円)

83cm幅

レギュラー/ショート対応 **PM14-A8308**

■メーカー希望小売価格 **45,000円(税込49,500円)**

■TAISコード/00631-000595 ■JANコード/4539940061193

レギュラー/ショート/ロング対応 **PM14-A8308L**

■メーカー希望小売価格 **50,000円(税込55,000円)**

■TAISコード/00631-000597 ■JANコード/4539940061254

■寸法/ショートタイプ :幅83.0×厚さ8.0×長さ181.0cm
レギュラータイプ :幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm
ロングタイプ :幅83.0×厚さ8.0×長さ205.0cm
■質量/ショートタイプ:5.1kg、レギュラータイプ:5.4kg、ロングタイプ:5.8kg
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/ベトナム
※ロング専用オプション/83cm幅 PM16-83L 5,000円(税込5,500円)

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

清拭タイプ

90cm幅

レギュラー/ショート対応 **PM15-A9008**

■メーカー希望小売価格 **50,000円(税込55,000円)**

■TAISコード/00631-000598 ■JANコード/4539940061209

レギュラー/ショート/ロング対応 **PM15-A9008L**

■メーカー希望小売価格 **55,000円(税込60,500円)**

■TAISコード/00631-000600 ■JANコード/4539940061261

■寸法/ショートタイプ :幅90.0×厚さ8.0×長さ181.0cm
レギュラータイプ :幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm
ロングタイプ :幅90.0×厚さ8.0×長さ205.0cm
■質量/ショートタイプ:5.7kg、レギュラータイプ:6.0kg、ロングタイプ:6.4kg
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/ベトナム
※ロング専用オプション/90cm幅 PM16-90L 5,000円(税込5,500円)

83cm幅

レギュラー/ショート対応 **PM15-A8308**

■メーカー希望小売価格 **50,000円(税込55,000円)**

■TAISコード/00631-000599 ■JANコード/4539940061216

レギュラー/ショート/ロング対応 **PM15-A8308L**

■メーカー希望小売価格 **55,000円(税込60,500円)**

■TAISコード/00631-000601 ■JANコード/4539940061278


■寸法/ショートタイプ :幅83.0×厚さ8.0×長さ181.0cm
レギュラータイプ :幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm
ロングタイプ :幅83.0×厚さ8.0×長さ205.0cm
■質量/ショートタイプ:5.3kg、レギュラータイプ:5.6kg、ロングタイプ:6.0kg
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/ベトナム
※ロング専用オプション/83cm幅 PM16-83L 5,000円(税込5,500円)

外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。


メンテナンスへの配慮

中材のウレタンにはメッシュの内カバーがついています。
外カバーの付け替えがしやすく、消毒時や取り扱い時の
破損も防ぎます。
外カバーはL字にファスナーがついており、着脱がしやすく
なっています。

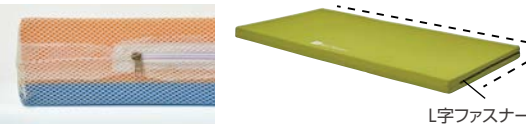

快適な寝心地


ウレタンのやわらかさによる体圧分散性の良さと、
沈み込みを防ぎ寝返りしやすい適度な硬さを両立しました。
汎用性が高く、快適な寝心地のベーシックマットレスとして
ご使用いただけます。

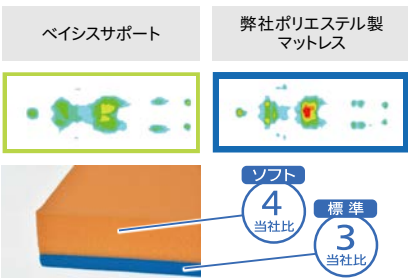

ミオレットⅢとの組み合わせで不動在庫ゼロへ

サイズ切替、モーター変換で1台6役をこなす「ミオレットⅢ」と併用いただくことで在庫管理の簡易化、回転率向上を実現します。

	2M	3M
ショート	サイズ切替	モーター 取付 + 手元 スイッチ 交換
レギュラー	サイズ切替	
ロング	サイズ切替	

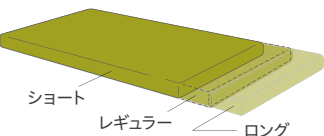


ニューポイントマットレス

難燃 抗菌 防臭 防ダニ

通気性を考慮したスタンダードタイプのポリエステルマットレス
芯地のポリエステルにも抗菌剤が練り込まれています。



硬さが選べて背圧を軽減する2層構造

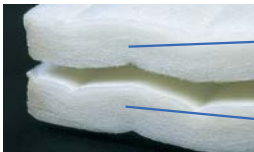

背上げの際に発生する「背圧」は、背ボトムとマット、マットと身体との摩擦により発生しますが、背上げ時に2層のマットがずれることで背圧を軽減します。

■メーカー希望小売価格 **50,000円(税込55,000円)**

90cm幅 レギュラータイプ PKM-9080
■TAISコード/00631-000161 ■JANコード/4539940060684
ショートタイプ PD504-A9008S
■TAISコード/00631-000226 ■JANコード/4539940060837

■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/7.5kg(ショート7.4kg) ■材質/ポリエステル ■原産国/韓国

83cm幅 レギュラータイプ PD504-A8308
■TAISコード/00631-000249 ■JANコード/4539940060899
ショートタイプ PD504-A8308S
■TAISコード/00631-000250 ■JANコード/4539940060905

■寸法/幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/7.2kg(ショート6.7kg) ■材質/ポリエステル ■原産国/韓国

外カバー・内カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。


スタンダードマットレス

難燃 抗菌 防臭 防ダニ

背中への圧迫の軽減を考えた介護用マットレス



背中への圧迫を軽減する2層構造

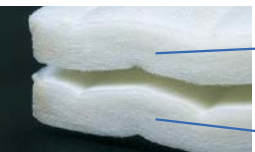

■メーカー希望小売価格 **36,000円(税込39,600円)**

90cm幅 レギュラータイプ PKM-E80BR

■TAISコード/00631-000163 ■JANコード/4539940060721
■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm ■質量/6.2kg
■材質/ポリエステル ■原産国/韓国


外カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

ユービーポイントマットレス

防水

コストパフォーマンスに優れたウレタンフォームマットレス

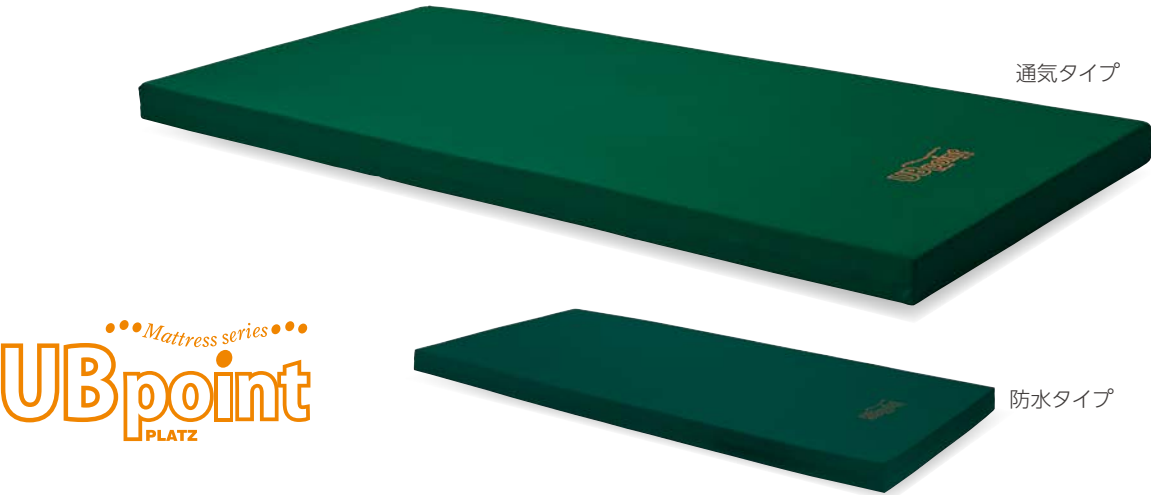

UBpoint
PLATZ

通気タイプ

■メーカー希望小売価格 **36,000円(税込39,600円)**

90cm幅 レギュラータイプ PM09-A9008
■TAISコード/00631-000464 ■JANコード/4539940061056
ショートタイプ PM09-A9008S
■TAISコード/00631-000467 ■JANコード/4539940061063

■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/6.1kg(ショート5.9kg)
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/ベトナム

83cm幅 レギュラータイプ PM09-A8308
■TAISコード/00631-000468 ■JANコード/4539940061070
ショートタイプ PM09-A8308S
■TAISコード/00631-000469 ■JANコード/4539940061087

■寸法/幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/5.7kg(ショート5.4kg)
■材質/外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/ベトナム

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

防水タイプ

■メーカー希望小売価格 **36,000円(税込39,600円)**

90cm幅 レギュラータイプ PD503-A9008
■TAISコード/00631-000247 ■JANコード/4539940060851
ショートタイプ PD503-A9008S
■TAISコード/00631-000253 ■JANコード/4539940060868

■寸法/幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/6.1kg(ショート5.9kg)
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/ベトナム


83cm幅 レギュラータイプ PD503-A8308
■TAISコード/00631-000254 ■JANコード/4539940060875
ショートタイプ PD503-A8308S
■TAISコード/00631-000255 ■JANコード/4539940060882

■寸法/幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量/5.7kg(ショート5.4kg)
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/ベトナム


外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

硬さが選べるリバーシブルタイプ

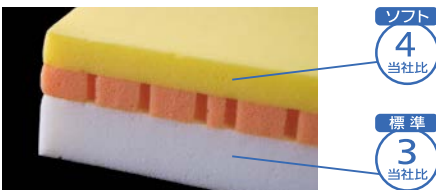

体圧分散データ

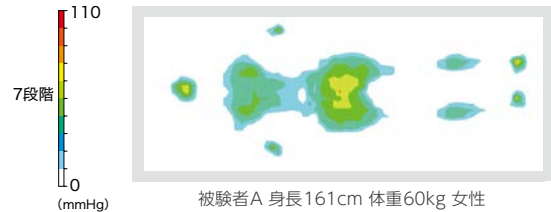

延長マットレス

ロングタイプのベッドをご使用の際に、マットレスの長さを延長します。

延長マットレス (固綿タイプ)



■メーカー希望小売価格 **10,000円(税込11,000円)**

90cm幅 **PM08-90A**

- TAISコード／00631-000465
- JANコード／4539940061032
- 寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ14.0cm
- 質量／0.6kg
- 材質／外カバー：中材：ポリエステル
- 原産国／韓国

83cm幅 **PM08-83A**

- TAISコード／00631-000567
- JANコード／4539940061018
- 寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ14.0cm
- 質量／0.5kg
- 材質／外カバー：中材：ポリエステル
- 原産国／韓国

延長マットレス (防水ウレタンタイプ)



■メーカー希望小売価格 **10,000円(税込11,000円)**

90cm幅 **PM08-90B**


- TAISコード／00631-000466
- JANコード／4539940061049
- 寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ14.0cm
- 質量／0.5kg
- 材質／外カバー：ポリウレタン/ラミネート、ポリエステル 中材：ウレタンフォーム
- 原産国／ベトナム

83cm幅 **PM08-83B**

- TAISコード／00631-000568
- JANコード／4539940061025
- 寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ14.0cm
- 質量／0.4kg
- 材質／外カバー：ポリウレタン/ラミネート、ポリエステル 中材：ウレタンフォーム
- 原産国／ベトナム

頭部用制菌カバー

制菌加工により、菌の繁殖を抑えます。

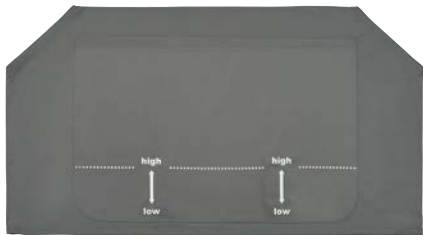

使用例

■メーカー希望小売価格 **15,000円(税込16,500円)**

90cm幅 **PM17-C90**

- JANコード／4539940061285
- 寸法／幅99.0×長さ54.5cm
- 質量／0.3kg
- 材質／ポリエステル
- 適合マットレスサイズ／幅88.0～91.0×厚さ8.0～10.0cm
- 原産国／日本

83cm幅 **PM17-C83**


- JANコード／4539940061292
- 寸法／幅92.0×長さ54.5cm
- 質量／0.3kg
- 材質／ポリエステル
- 適合マットレスサイズ／幅83.0×厚さ8.0～10.0cm
- 原産国／日本

周辺機器

より良い介護環境のための
豊富なオプション類

周辺機器	
サイドレール	48
ハンドグリップ	49
ベッド用グリップ	50
人感センサー付フットライト	54
スイッチ接続キット	54
オーバーテーブル	54
ベッドサイドテーブル・カーペット他	55

サイドレール

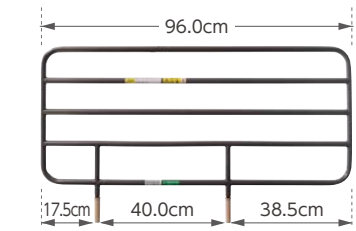

ロングサイドレール(2本組)
PA505-96
■メーカー希望小売価格
16,100円(税込17,710円)

■TAISコード/00631-000232
■JANコード/4539940082051
■質量/6.8kg(2本) ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 ■原産国/ベトナム



ロングサイドレール(2本組)
メッシュタイプ安全カバー付


PA505-96S
■メーカー希望小売価格
31,000円(税込34,100円)

■TAISコード/00631-000233
■JANコード/4539940082075
■質量/7.4kg(2本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ(1枚入)
PA505S-96 7,400円(税込8,140円)



ロングサイドレール(2本組)
クッションタイプ安全カバー付

PA505-96SW
■メーカー希望小売価格 **オープン価格**
■TAISコード/00631-000615
■JANコード/4539940084369
■質量/8.8kg(2本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:PVCレザー、ウレタンフォーム ■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ(1枚入)
PA505SW-96 オープン価格

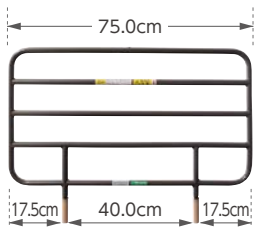

レギュラーサイドレール(2本組)
PA505-75
■メーカー希望小売価格
11,500円(税込12,650円)

■TAISコード/00631-000230
■JANコード/4539940082020
■質量/5.4kg(2本) ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 ■原産国/ベトナム



レギュラーサイドレール(2本組)
メッシュタイプ安全カバー付


PA505-75S
■メーカー希望小売価格
26,400円(税込29,040円)

■TAISコード/00631-000231
■JANコード/4539940082044
■質量/5.9kg(2本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ(1枚入)
PA505S-75 7,400円(税込8,140円)



レギュラーサイドレール(2本組)
クッションタイプ安全カバー付

PA505-75SW
■メーカー希望小売価格 **オープン価格**
■TAISコード/00631-000614
■JANコード/4539940084352
■質量/7.0kg(2本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂 カバー:PVCレザー、ウレタンフォーム ■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ(1枚入)
PA505SW-75 オープン価格

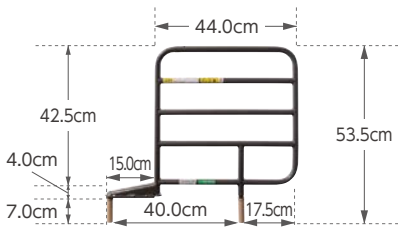

ショートサイドレール(2本組)
PA505-44
■メーカー希望小売価格
11,500円(税込12,650円)

■TAISコード/00631-000228
■JANコード/4539940081986
■質量/4.5kg(2本) ■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂、PP樹脂 ■原産国/ベトナム
※ヨカロにはご使用できません。




ショートサイドレール(2本組)
メッシュタイプ安全カバー付

PA505-44S
■メーカー希望小売価格
26,400円(税込29,040円)

■TAISコード/00631-000229
■JANコード/4539940082013
■質量/4.8kg(2本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂、PP樹脂 カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム ■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ(1枚入)
PA505S-44 7,400円(税込8,140円)
※ヨカロにはご使用できません。


ロングタイプのベッドをご使用される場合には、
下記のオプションが必要です。
スパーサーは必ずボード側に取り付けてください。
サイドレールの長さを+7cm延長するスパーサーがセットになったサイドレールです。

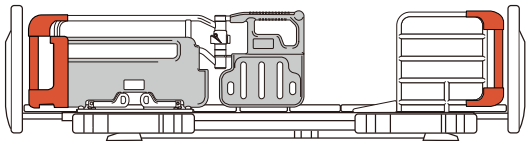

ロングサイドレール(2本組)
ロングタイプ対応スパーサー付

PA505-96L
■メーカー希望小売価格
21,100円(税込23,210円)


■TAISコード/00631-000444
■JANコード/4539940082884
■材質/サイドレール:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
スパーサー:PP樹脂、PVC樹脂 ■原産国/ベトナム
※安全カバー(1枚入)
PA505LS-96 10,000円(税込11,000円)
※スパーサーのみ(1個入)
PS02-PA505 2,500円(税込2,750円)

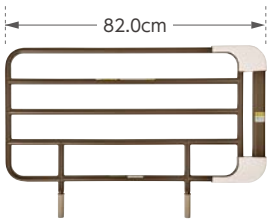

レギュラーサイドレール(2本組)
ロングタイプ対応スパーサー付

PA505-75L
■メーカー希望小売価格
16,500円(税込18,150円)

■TAISコード/00631-000445
■JANコード/4539940082891
■材質/サイドレール:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
スパーサー:PP樹脂、PVC樹脂 ■原産国/ベトナム
※安全カバー(1枚入)
PA505LS-75 10,000円(税込11,000円)

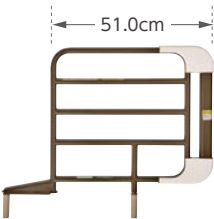


ショートサイドレール(2本組)
ロングタイプ対応スパーサー付

PA505-44L
■メーカー希望小売価格
16,500円(税込18,150円)


■TAISコード/00631-000446
■JANコード/4539940082907
■材質/サイドレール:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
スパーサー:PP樹脂、PVC樹脂 ■原産国/ベトナム
※安全カバー(1枚入)
PA505LS-96 10,000円(税込11,000円)
※ヨカロにはご使用できません。

組み合わせ例

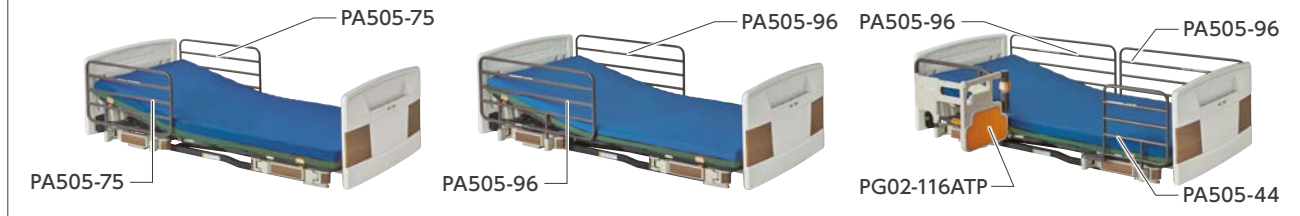

※非課税のベッドと同時に購入の場合、サイドレールは2セット(4本)まで非課税となります。

ハンドグリップ

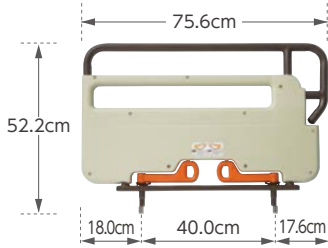

ハンドグリップ
PG04-75
■メーカー希望小売価格
29,000円(税込31,900円)

■TAISコード/00631-000545
■JANコード/4539940083492
■質量/5.1kg ■材質/スチール、ABS樹脂 ■原産国/ベトナム

※安全カバー(1枚入) PG0203S-116 11,000円(税込12,100円) ※スパーサーのみ(1個入) PS03-PG0203 2,500円(税込2,750円)




ハンドグリップ ロングタイプ対応スパーサー付
PG04-75L
■メーカー希望小売価格
31,500円(税込34,650円)


■TAISコード/00631-000547
■JANコード/4539940083515
■質量/5.5kg ■材質/スチール、ABS樹脂、PP樹脂、PVC樹脂 ■原産国/ベトナム

ニーパロ+ (プラス) ニーパロL (エル)

抱え上げない介護・看護を実現
安心・安全な移乗と
腰痛予防をサポートします

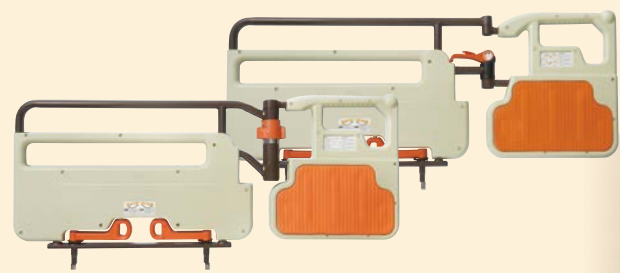

膝折れを防ぎ、
安全な立ち上がり・移乗を実現する「ニーパロひざパッド」

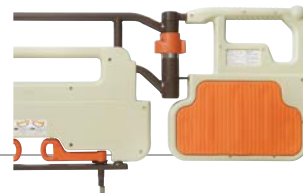

従来のベッド用グリップでは・・・

写真のように膝が前方向にズレ落ちると首を打ったり、転倒するなど危険な状態になることもありました。(ひざ折れ状態)



ニーパロひざパッドがあると・・・



端座位時のずり落ちを防止



楽な立ち上がり



立位を安定させます



車いすからのずり落ちを防止

ベッド用グリップ「ニーパロ」の使い方

後方介助移乗

●【使い方(A)】ベッドから車いすへの介助移乗(トランスファーボードを使った場合)

抱え上げない移乗を実現



1 ベッドの背を上げ、ベッドの高さを車いすよりもやや高く設定し、グリップ部を45度にセットします。車いすのブレーキをかけ、車いす側の足を前に出します。前に出す足を逆にすると足を痛める原因になるためご注意ください。



2 グリップ部を握り、後ろに倒れないように注意しながら、ボードを左臀部の下に敷き、ボードの端を車いすの中心位置に置きます。



3 車いすの手すりを握り、引くように促します。介助者の右足はベッドの上に乗せます。



4 左腰部を支え、左腕側へ寄りかかるように体を傾かせ、右臀部を軽く押し、車いすへ移乗させます。移乗中に車いすが動かないように左足で固定します。



5 右臀部に体重が乗るように右に体を傾け、車いすの奥まで移乗させます。



6 ボードを抜きやすいように身体を左に傾けてボードを上げ、前後に動かしながら引き抜きます。

自立移乗

●【使い方(B)】ベッドから車いすへの自立移乗(90度の場合)



1 グリップ部を90度を開き、膝をパッドにあてます。ベッドの高さは車いすよりもやや高くします。車いすを寄せ、ブレーキをかけます。



2 車いす側の足を前に出します。前に出す足を逆にすると足を痛める原因になるためご注意ください。(45度の場合も同じ)



3 膝をパッドにあてながら立ち上がり、あるいは腰を浮かして・・・



4 車いすへ移ります。

「トランスファーボード」や「スライディングシート」は、表面が滑りやすく加工されており、用途に合わせ様々な形状があります。詳しくは福祉用具販売会社にお尋ねください。

ポイント

移乗する時の基本動作は「ベッドの高さを調整する」ことです。ベッドから車いすへ移る場合は、ベッドの高さを車いすの座面と水平かやや高くします。逆に、車いすからベッドに移る場合は、ベッドの高さを下げ、車いすの座面と水平かやや低く設定します。







自動ロック式ベッド用グリップ
ニーパーロ+ (プラス)

ロック忘れによる事故を予防する自動ロック方式 (業界初)

立ち上がるときにグリップ部が固定されていないと手を挟んだり、転倒事故の原因になります。この様な事故を防止するため、「ニーパーロ+」には45度毎に自動的にロックする機構を搭載しています。(特許第4921535号)

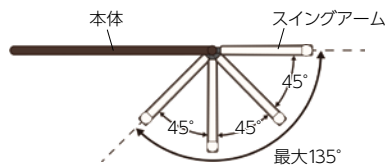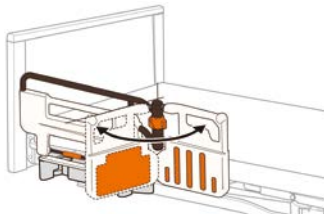

握力の弱った方でも簡単にロック操作できるユニバーサルデザインの解除ハンドル

握力が弱った方やマヒがある方でも
指や手のひらで楽に解除できる形状です。

従来品から形状を改良し、よりスムーズな
操作ができるようになりました。



指や手のひらで楽に
解除できるユニバー
サルデザインです。

仕様



ニーパーロ+ ニーパーロひざパッド付

PG02-116ATP

■メーカー希望小売価格 **60,000円(税込66,000円)**

■TAISコード/00631-000532 ■JANコード/4539940083430
■寸法/幅117.0×高さ54.4cm ■質量/9.2kg
■材質/スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂
■原産国/ベトナム

ニーパーロ+ ニーパーロひざパッド付
ロングタイプ対応スパーサー付

PG02-116ATPL

■メーカー希望小売価格 **62,500円(税込68,750円)**

■TAISコード/00631-000530 ■JANコード/4539940083454
■寸法/幅124.0×高さ54.4cm ■質量/9.6kg
■材質/スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂、PP樹脂、PVC樹脂
■原産国/ベトナム

ニーパーロ+

PG02-116AT

■メーカー希望小売価格 **56,000円(税込61,600円)**

■TAISコード/00631-000531 ■JANコード/4539940083409
■寸法/幅117.0×高さ54.4cm ■質量/8.9kg
■材質/スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂
■原産国/ベトナム

ニーパーロ+
ロングタイプ対応スパーサー付

PG02-116ATL

■メーカー希望小売価格 **58,500円(税込64,350円)**

■TAISコード/00631-000529 ■JANコード/4539940083447
■寸法/幅124.0×高さ54.4cm ■質量/9.3kg
■材質/スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、PP樹脂、PVC樹脂
■原産国/ベトナム

※ニーパーロ ひざパッドのみ PF500P-116 4,000円(税込4,400円) ※ロングタイプ対応スパーサーのみ(1個入) PS03-PG0203 2,500円(税込2,750円)
※安全カバー(1枚入) PG0203S-116 11,000円(税込12,100円) ※通常仕様とロングタイプ対応スパーサー付の両方にご使用できます。



レバーロック式ベッド用グリップ
ニーパーロL (エル)


簡単操作のレバーロック式

思わぬ事故を防止するため、ロック解除時にはセーフティロック
の操作が必要です。
スイングアームは22.5度毎に固定できます。



ベッドへの簡単取り付け

サイドレールホルダーにベッド用グリップの固定脚部をさしこみ、2つの固定レバーをまわすとベッドへ固定できます。
工具などを使わず簡単に取り付けすることができます(ニーパーロ+も同様です)。

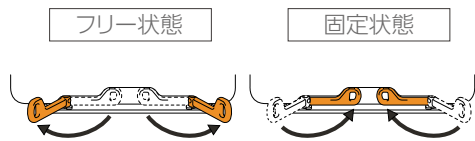

仕様



ニーパーロL ニーパーロひざパッド付

PG03-116MP

■メーカー希望小売価格 **56,000円(税込61,600円)**

■TAISコード/00631-000536 ■JANコード/4539940083461
■寸法/幅117.0×高さ54.4cm ■質量/8.0kg
■材質/スチール、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂
■原産国/ベトナム

ニーパーロL ニーパーロひざパッド付
ロングタイプ対応スパーサー付

PG03-116MPL

■メーカー希望小売価格 **58,500円(税込64,350円)**

■TAISコード/00631-000534 ■JANコード/4539940083485
■寸法/幅124.0×高さ54.4cm ■質量/8.4kg
■材質/スチール、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂、PP樹脂、PVC樹脂
■原産国/ベトナム

※ニーパーロ ひざパッドのみ PF500P-116 4,000円(税込4,400円) ※ロングタイプ対応スパーサーのみ(1個入) PS03-PG0203 2,500円(税込2,750円)
※安全カバー(1枚入) PG0203S-116 11,000円(税込12,100円) ※通常仕様とロングタイプ対応スパーサー付の両方にご使用できます。

人感センサー付フットライト



PL02-5VL ■メーカー希望小売価格 オープン価格

■寸法／幅9.0×高さ6.0×奥行5.0cm
■材質／PC樹脂
■原産国／中国
※ラフィオは超低床用キャスター装着時にはご使用できません。

ベッドにおける起居動作や、介護の際の動線の把握など、夜間の居室における事故を予防します。

- 即時点灯性が高く、寿命が長いLEDライトを採用。
- 点灯時間は1分／3分／5分／10分の4段階、明るさは3段階に切り替え可能です。
- 電源はベッドの電力を使用するため、電池や別のコンセントは必要ありません。

スイッチ接続キット



ミオレットⅢ用

PE07-S1 ■メーカー希望小売価格 オープン価格

■寸法／幅11.0×高さ7.0×奥行5.0cm
■材質／ABS樹脂
■原産国／日本
■対応する接続方法／φ3.5mmモノラルプラグによる接続

- 環境制御装置の取り付けが可能になり、手元スイッチの操作が困難な方でもベッドの昇降やリクライニングができるようになります。
- 環境制御装置を取り付ける際のベッドの改造が不要になります。改造の手間や費用、また、改造によるベッドの不具合・故障のリスクを減らします。

※意思伝達装置、環境制御装置は別売りです。当社でのお取り扱いはありませんので、販売店様へお問い合わせください。

オーバーテーブル



PT01-A1 ■メーカー希望小売価格 15,000円(税込16,500円)

■TAISコード／00631-000590 ■JANコード／4539940084017
■寸法／94.5～100.0×40.5×8.0cm ■質量／4.5kg
■材質／甲板:PE樹脂 スライド部・フック:ABS樹脂 ■最大使用荷重／15.0kg
■原産国／ベトナム
※プリモレットにはご使用できません。

- 全幅の調節が可能で、1枚で90cm幅/83cm幅のプラッツ社製ベッドに使用可能です。
- 設置する高さをサイドレールのパイプの高さに合わせて調整できます。
- 天板の面積が広く、トレーがゆったり置けます。
- ご利用者様の腕が置きやすい形状で、食事の際の姿勢保持をサポートします。
- ベッドのフットボードに掛けて収納できます。

その他

昇降式ベッドサイドテーブル



PT03-840MB

■メーカー希望小売価格
53,000円(税込58,300円)
■TAISコード／00631-000618
■JANコード／4539940084581

PT03-840LB

■メーカー希望小売価格
53,000円(税込58,300円)
■TAISコード／00631-000619
■JANコード／4539940084598

PT03-840WH

■メーカー希望小売価格
48,000円(税込52,800円)
■TAISコード／00631-000620
■JANコード／4539940084604

■寸法／幅84.0×奥行43.0×高さ60.0～84.0cm(天板)幅84.0×奥行40.0×厚さ1.7cm
■質量／14.4kg ■材質／ベースフレーム、支柱:スチール、樹脂 天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) キャスターカバー:PP樹脂
■最大使用荷重／30kg ■原産国／ベトナム

- ベッド等との挟み込みによる事故を防ぐ、安全機構を搭載しています。
- 耐荷重は従来品の10kgから30kgに増加し、堅牢性が向上しました。
- 天板のぐらつきを抑え、安定した使い心地です。

※「ラフィオ」に使用する場合は別売の「ハイトスパーサー固定脚タイプ」または「低床用キャスター」が必要です。

床キズ防止カーペット(4枚組)



PSC-1216SC

■メーカー希望小売価格 **3,400円(税込3,740円)**

■寸法／16.5×12.5cm×厚さ5mm
■材質／ナイロン
■原産国／日本

酸素ボンベホルダー



PE02-S1

■メーカー希望小売価格 オープン価格

■寸法／幅18.0×奥行20.0×高さ46.0cm
■質量／2.2kg
■材質／スチール
■原産国／日本
※木製宮付ボードおよびヨカロ・ミオレットⅢの木製フラットボードにはご使用できません。

ベッドオプション適合表					ヨカロ						ラフィオ			ミオレットⅢ						プリモレット
					90cm幅			83cm幅			90cm幅			90cm幅			83cm幅			90cm幅
					レギュラー	ショート	ロング	レギュラー	ショート	ロング	レギュラー	ショート	ロング	レギュラー	ショート	ロング	レギュラー	ショート	ロング	レギュラー
No.	頁	製品名	型式	P2						P12			P24						P32	
マットレス、マットレスカバー、ベッドパッド																				
1	P36	ゼロソア(90cm幅・レギュラータイプ)	PM18-A9012・PM19-A9012	●						●			●						●	
2	P36	ゼロソア(83cm幅・レギュラータイプ)	PM18-A8312・PM19-A8312				●								●					
3	P38	ゼロソアアコーネ(90cm幅・レギュラータイプ)	PM21-A9010・PM22-A9010	●		●※1				●		●※1	●		●※1				●	
4	P38	ゼロソアアコーネ(90cm幅・ショートタイプ)	PM21-A9010S・PM22-9010S		●						●			●						
5	P38	ゼロソアアコーネ(83cm幅・レギュラータイプ)	PM21-A8310・PM22-A8310				●		●※2						●		●※2			
6	P38	ゼロソアアコーネ(83cm幅・ショートタイプ)	PM21-A8310S・PM22-8310S					●								●				
7	P40	アミカルサポートマットレス(90cm幅・レギュラータイプ)	PM11-9009・PM12-9009	●		●※1				●		●※1	●		●※1				●	
8	P40	アミカルサポートマットレス(90cm幅・ショートタイプ)	PM11-9009S・PM12-9009S		●						●		●							
9	P40	アミカルサポートマットレス(83cm幅・レギュラータイプ)	PM11-8309・PM12-8309				●		●※2						●		●※2			
10	P40	アミカルサポートマットレス(83cm幅・ショートタイプ)	PM11-8309S・PM12-8309S					●								●				
11	P42	ペイシスサポート(90cm幅・レギュラー/ショート対応)	PM14-A9008・PM15-A9008	●	●					●	●		●	●					●	
12	P42	ペイシスサポート(90cm幅・レギュラー/ショート/ロング対応)	PM14-A9008L・PM15-A9008L	●	●	●				●	●	●	●	●	●				●	
13	P42	ペイシスサポート(83cm幅・レギュラー/ショート対応)	PM14-A8308・PM15-A8308				●	●								●	●			
14	P42	ペイシスサポート(83cm幅・レギュラー/ショート/ロング対応)	PM14-A8308L・PM15-A8308L				●	●	●						●	●	●			
15	P44	ニューポイントマットレス(90cm幅・レギュラータイプ)	PKM-9080	●		●※1				●		●※1	●		●※1				●	
16	P44	ニューポイントマットレス(90cm幅・ショートタイプ)	PD504-A9008S		●						●			●						
17	P44	ニューポイントマットレス(83cm幅・レギュラータイプ)	PD504-A8308				●		●※2						●		●※2			
18	P44	ニューポイントマットレス(83cm幅・ショートタイプ)	PD504-A8308S					●								●				
19	P44	スタンダードマットレス(90cm幅・レギュラータイプ)	PKM-E80BR	●		●※1				●		●※1	●		●※1				●	
20	P45	ユービーポイントマットレス(90cm幅・レギュラータイプ)	PM09-A9008・PD503-A9008	●		●※1				●		●※1	●		●※1				●	
21	P45	ユービーポイントマットレス(90cm幅・ショートタイプ)	PM09-A9008S・PD503-A9008S		●						●			●						
22	P45	ユービーポイントマットレス(83cm幅・レギュラータイプ)	PM09-A8308・PD503-A8308				●		●※2						●		●※2			
23	P45	ユービーポイントマットレス(83cm幅・ショートタイプ)	PM09-A8308S・PD503-A8308S					●								●				
24	P46	延長マットレス(固綿タイプ)90cm幅	PM08-90A			●※3						●※3			●※3					
25	P46	延長マットレス(防水ウレタンタイプ)90cm幅	PM08-90B			●※3						●※3			●※3					
26	P46	延長マットレス(固綿タイプ)83cm幅	PM08-83A						●※3									●※3		
27	P46	延長マットレス(防水ウレタンタイプ)83cm幅	PM08-83B						●※3									●※3		
サイドレール、ベッド用グリップ																				
28	P48	ロングサイドレール	PA505-96	●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	
29	P48	レギュラーサイドレール	PA505-75	●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	
30	P48	ショートサイドレール	PA505-44							●	●		●	●		●	●		●	
31	P49	ロングサイドレール ロングタイプ対応スパーサー付	PA505-96L			●			●			●			●			●		
32	P49	レギュラーサイドレール ロングタイプ対応スパーサー付	PA505-75L			●			●			●			●			●		
33	P49	ショートサイドレール ロングタイプ対応スパーサー付	PA505-44L									●			●			●		
34	P49	ハンドグリップ	PG04-75	●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	
35	P49	ハンドグリップ ロングタイプ対応スパーサー付	PG04-75L			●		●				●			●			●		
36	P52・53	ニーパロ＋・L	PG02-116AT(P)・PG03-116M(P)	●	●		●	●		●	●		●	●		●	●		●	
37	P52・53	ニーパロ＋・L ロングタイプ対応スパーサー付	PG02-116AT(P)L・PG03-116M(P)L			●			●			●			●			●		
ハイトスパーサー、キャスター																				
38	P11・31	ヨカロ、ミオレットⅢ専用キャスター(4個組)	PC03-8CK	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●		
39	P19・23	ラフィオ専用8cmハイトスパーサー固定脚タイプ(4個組)	PH04-80							●	●	●								
40	P19・23	ラフィオ専用超低床用キャスター(4個組)	PC01-5CK							●	●	●								
41	P19・23	ラフィオ専用低床用キャスター(4個組)	PC02-8CK							●	●	●								
42	P31	ミオレットⅢ専用4.5cmハイトスパーサー(4個組)	PH05-45										●	●	●	●	●	●		
43	P33	プリモレット専用延長脚(6個組)	PDP-140(+70-35)G(6pcs)																●※4	
44	P33	プリモレット専用キャスター(6個組)	PPL-8CK6S(6pcs)																●	
テーブル																				
45	P54	オーバーテーブル	PT01-A1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
46	P55	昇降式ベッドサイドテーブル	PT-03-840MB・LB・WH	●	●	●	●	●	●	●※5	●※5	●※5	●	●	●	●	●	●	●	
その他																				
47	P54	人感センサー付フットライト	PL02-5VL	●	●	●	●	●	●	●※6	●※6	●※6	●	●	●	●	●	●		
48	P54	スイッチ接続キット(ミオレットⅢ用)	PE07-S1										●	●	●	●	●	●		

※1 「延長マットレス PM08-90A・PM08-90B」とあわせてご使用ください。 ※2 「延長マットレス PM08-83A・PM08-83B」とあわせてご使用ください。
※3 レギュラータイプのマットレスとあわせてご使用ください。 ※4 安全のため、1ヶ所に装着できる延長脚は2本までです。

※5 ご使用の際は「ラフィオ専用8cmハイトスパーサー固定脚タイプ PH04-80」または「ラフィオ専用低床用キャスター PC02-8CK」が必要です。
超低床固定脚・超低床用キャスター装着時はご使用できません。
※6 「超低床用キャスター PC01-5CK」との併用はできません。



安全についてのご注意

機器を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

PLATZ(プラッツ)製品カタログのご注意事項

- 製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
- カタログの写真と実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
- カタログ本文の寸法・角度等の数値には、使用上の安全を考慮した多少の誤差が含まれます。
また表示を見やすくするため、「約」、「およそ」といった文言を省略しています。
- ベッドの写真内のマットレス・テーブル等は、特記事項のあるもの以外は別価格です。
- 製品の価格に「非課税」の表示がある製品には消費税がかかりません。
- 製品の価格には配送料・納品（組立設置料）・不要品の引き取り等の費用は含まれておりません。
- 製品の安全性・品質には万全の注意を払っておりますが、下記の原因による事故に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
 - ①製品の目的以外のご使用や誤ったご使用を原因とした事故
 - ②当社未承認での製品の改造等を原因とする事故
 - ③「当社が指定する当社製品の組み合わせ」以外の組み合わせを原因とする事故（例：当社ベッドと他社製のサイドレールやベッド用グリップとの組み合わせ）
 - ④その他当社の責任とはいえない事故

※最新の製品情報・安全に関する情報はホームページに記載しております。

製造元



医療・介護ベッドメーカー
株式会社プラッツ



挑戦します！
お客様の笑顔のために。

■本社／ショールーム

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL:092-584-3434 / FAX:092-584-3436

■北海道支店

〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条
1-2-22-102
TEL.011-807-4750 FAX.011-807-4751

■東北支店

〒983-0014 宮城県仙台市宮城野区高砂1-1-15
TEL.022-781-7072 FAX.022-781-7062

■関東支店・関東ショールーム

〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1
TRCセンタービル7F
TEL.03-5763-5425 FAX.03-5763-5426

■東海支店・東海ショールーム

〒465-0025 愛知県名古屋市中東区上社1-402
TEL.052-737-2230 FAX.052-737-2231

■関西支店・関西ショールーム

〒578-0911 大阪府東大阪市中新開1-4-12
TEL.072-943-2723 FAX.072-943-2724

■中四国支店

〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6
TEL.084-946-6000 FAX.084-946-6040

■九州支店(本社内)

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL.092-584-3433 FAX.092-502-3810

<https://www.platz-ltd.co.jp/>

■ご意見・ご質問等は

pinfo@platz-ltd.co.jp

製品のお求め、お問い合わせは